

- For post-curing of the parts, please select the parameter settings for your process. You can find more qualified printers on our website www.dentamid.dreve.de.

Post curing FotoDent® model2 beige-opaque	
PCU LED N ₂	
Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	8 minutes, 80 % light power (vacuum)
FotoDent® flash	
Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	8 minutes + 1 minute gas pre-flow / 12 minutes + 1 minute gas pre-flow
PCU 90	8 minutes (incl. 4 minutes gas pre-flow)
RS Cure	According to respective parameter set for FotoDent® model2
Post curing FotoDent® model2 black	
PCU LED N ₂	
Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	12 minutes, 80 % light power (vacuum)
RS Cure	According to respective parameter set for FotoDent® model2
Post curing FotoDent® model2 white	
PCU LED N ₂	
Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	6 minutes, 40 % light power (vacuum)
RS Cure	According to respective parameter set for FotoDent® model2

- Impurity due to the construction or a break of the material and impurity due to operation mistakes cannot be excluded. Thanks to the low viscosity however it is possible to filtrate FotoDent® model2. It is recommended to regularly take out the container of the production unit, to homogenize and filtrate the content. Upcoming entrained bubbles get eliminated through a holding time of approx. 1–2 hour with FotoDent® model2.

To avoid damage of material quality do not expose the liquid material to light under any circumstances. Variations from the described manufacturing process may lead to modified mechanical characteristics and/or colour variations of the FotoDent® model2 material.

Possible dangers

Please note the safety instructions for processing FotoDent® model2.

Hazard statements: **H315** Causes skin irritation. **H319** Causes serious eye irritation. **H317** May cause an allergic skin reaction. **H413** May cause long lasting harmful effects to aquatic life.

Precautionary statements: **P261** Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. **P273** Avoid release to the environment. **P280** Wear protective gloves/eye protection/face protection. **P305+P351+P338** IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **P333+P313** If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. **P501** Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Contains: 2-hydroxyethyl methacrylate, Diurethandimethacrylat, hydroxypropylmethacrylate, monoester with propane-1,2-diol, pigment paste

Lot number / Expiry date

The lot number and the expiry date are indicated on each FotoDent® model2 packaging. In case of claims please always indicate the lot number of the product. Do not use the product after the expiry date.



Lieferformen / Forms of delivery

REF D354002

FotoDent® model2, beige-opak / beige-opaque 1,0 kg Flasche / bottle

REF D354003

FotoDent® model2, schwarz / black 1,0 kg Flasche / bottle

REF D354004

FotoDent® model2, weiß / white 1,0 kg Flasche / bottle



Shake before use



Achtung Warning



Rx only

Ausstellungsdatum / Date of issue: 01/2022

FotoDent® model2 385 nm

Gebrauchsanweisung / Directions for use

Produktbeschreibung

FotoDent® model2 ist ein Material auf (Meth-)acrylatharz-Basis für DLP-Systeme mit 385 nm LED zur Herstellung von dentalen Arbeitsmodellen. Zur Nachhärtung von aus FotoDent® model2 gefertigten Bauteilen werden die Lichthärtegeräte PCU LED N₂, FotoDent® flash und RS cure empfohlen, welche optimal auf den Produktionsprozess abgestimmt sind.

Verarbeitung

- Beim Verarbeiten von FotoDent® model2 empfehlen wir das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung, z. B. von geeigneten Handschuhen, Schutzbrille, etc.
- FotoDent® model2-Behälter sollten ca. eine Stunde vor der Benutzung gut aufgeschüttelt werden.
- Siehe auch Anwendungshinweise in der beiliegenden Anleitung des Druckers.
- Gießen Sie FotoDent® model2 vorsichtig in den vorgegebenen Behälter der Produktionsanlage.
- Entfernen Sie eventuell entstandene Blasen mit einem gereinigten Gegenstand.

Verarbeitungstemperaturen	
Rapid Shape DII Drucker	23 ± 3 °C
Asiga MAX UV	35 ± 3 °C

- Wählen Sie die produktspezifischen Parametereinstellungen für FotoDent® model2 für Ihren Prozess aus.
- Nach Beendigung des Bauprozesses wird eine direkte Nachbearbeitung empfohlen.
- Nach dem Hochfahren der Plattform wird eine Abtropfzeit von ca. 10 Minuten empfohlen.
- Die mit flüssigem Kunststoff benetzten Bauteile lassen sich mit Isopropanol (97 %) bei einer Dauer von ca. 2x6 Minuten reinigen. Für eine besonders effektive Reinigung mit Isopropanol wird die Verwendung von Ex-geschützten Ultraschallanlagen empfohlen. Alternativ kann eine Reinigung mit Isopropanol in einem gesonderten Becher unter strömenden Bedingungen für ca. 2x6 Minuten erfolgen. Empfehlung: Becherglas und Magnetrührer, Laborshaker oder Ultraschallreiniger. Bei unzureichender Reinigung (z. B. glän-

zende Stellen auf dem Objekt nach dem Trocknen) den Reinigungsprozess wiederholen.

- Für die Nachhärtung der Bauteile wählen Sie bitte die Parametereinstellungen für ihren Prozess aus. Weitere qualifizierte Drucker finden Sie auf unserer Webseite www.dentamid.dreve.de.

Nachhärtung FotoDent® model2 beige-opak	
PCU LED N ₂ Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	8 Min. bei 80 % Lichtleistung (Vakuum)
FotoDent® flash Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	8 Min. + 1 Min. Gas-Vorströmzeit / 12 Min. + 1 Min. Gas-Vorströmzeit
PCU 90	8 Min. (incl. 4 Min. Gas- Vorströmzeit)
RS Cure	Entsprechend der hinterlegten Parameter für FotoDent® model2 im Gerät.
Nachhärtung FotoDent® model2 schwarz	
PCU LED N ₂ Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	12 Min. bei 80 % Lichtleistung (Vakuum)
RS Cure	Entsprechend der hinterlegten Parameter für FotoDent® model2 im Gerät.
Nachhärtung FotoDent® model2 weiß	
PCU LED N ₂ Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	6 Min. bei 40 % Lichtleistung (Vakuum)
RS Cure	Entsprechend der hinterlegten Parameter für FotoDent® model2 im Gerät.

- Baubedingte Verunreinigung oder Bruch des Materials sowie Verunreinigung durch Bedienungsfehler lassen sich mit keinem Verfahren ausschließen. Aufgrund der niedrigen Viskosität ist es jedoch möglich, FotoDent® model2 zu filtrieren. Es wird empfohlen, den Behälter der Produktionsanlage in regelmäßigen Abständen zu entnehmen, um den Inhalt zu homogenisieren und zu filtrieren. Entstandene Blaseninschlüsse lassen sich durch eine Standzeit von ca. 1–2 Stunden bei FotoDent® model2 entfernen.

Um eine Beeinträchtigung der Materialqualität zu vermeiden, das flüssige Material keinesfalls dem Licht aussetzen. Abweichungen vom aufgeführten Herstellungsprozess können zu veränderten mechanischen Eigenschaften und/oder Farbabweichungen des FotoDent® model2 Materials führen.

Mögliche Gefahren

Beachten Sie bei der Benutzung von FotoDent® model2 das Sicherheitsdatenblatt.

Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. **H319** Verursacht schwere Augenreizung. **H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. **H413** Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. **P273** Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **P280** Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P333+P313** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P501** Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Enthält: 2-Hydroxyethylmethacrylat, Diurethandimethacrylat, Hydroxypropylmethacrylat, Monoester mit 1,2 - Propandiol, Farbpigmentkonzentrat

Chargennummer / Haltbarkeitsdatum

Die Chargennummer und das Haltbarkeitsdatum befinden sich auf jeder FotoDent® model2 Verpackung. Bei Beanstandungen des Produktes bitte immer die Chargennummer des Produktes angeben. Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.

Intended use

FotoDent® model2 is a material based on (meth-)acrylate resin for DLP systems with 385 nm LED for the production of dental models. For the post curing of FotoDent® model2 built parts, the light curing units PCU LED N₂, FotoDent® flash and RS cure are recommended, which are optimal balanced to the production process.

Processing

- During the application of FotoDent® model2 we recommend wearing personal protective equipment e. g. suitable gloves, safety goggles etc.
- FotoDent® model2 should be well shaken approx. 1 hour before use.
- Carefully pour FotoDent® model2 into the pre-determined container of the production unit.
- Please see further steps within printer manual.
- Remove all bubbles with a cleaned object.

Processing temperature	
Rapid Shape DII printer	23 ± 3 °C
Asiga MAX UV	35 ± 3 °C

- Select the product specific parameter settings for FotoDent® model2 for your process.
- When the building process is finished a direct post treatment is recommended.
- After the platform is taken up a dripping off time of approx. 10 minutes is recommended.
- Resin coated parts get clean with isopropanol (97 %) within a time of about 2x6 minutes. For a particular effective cleaning with isopropanol the use of explosion-protected ultrasonic units is recommended. Alternatively, cleaning with isopropanol can be carried out in a separate beaker under pouring conditions for approx. 2x6 minutes. Recommendation: Beaker and magnetic stirrer, laboratory shaker or ultrasonic cleaner. In case of insufficient cleaning (such as shiny areas on the object after drying) repeat cleaning process.



Dreve Design Rev.100222

Modes de livraison

REF D354002

FotoDent® model2, beige-opaque

1,0 kg Bouteille

REF D354003

FotoDent® model2, noir

1,0 kg Bouteille

REF D354004

FotoDent® model2, blanc

1,0 kg Bouteille



Agiter avant
l'utilisation



Attention



Rx only

Etat d'information: 01/2022



Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31 • 59423 Unna/Germany
www.dentamid.dreve.de



FotoDent® model2 385 nm

Mode d'emploi

FR

www.dentamid.dreve.de

Description du produit

FotoDent® model2 est un matériau à base de résine(méth)acrylate pour le système DLP avec 385 nm LED pour la production des modèles dentaires. Les appareils de photopolymérisation PCU LED N₂, FotoDent® flash et RS Cure sont recommandés pour le postdurcissement de composants fabriqués de FotoDent® model2 et sont parfaitement adaptés au processus de production.

Traitement

- Pour le traitement du FotoDent® model2, nous recommandons de porter un équipement de protection individuelle, par ex. des gants, lunettes de protection, etc. adaptés.
- Les récipients du FotoDent® model2 doivent être bien agités env. une heure avant l'utilisation.
- Versez précautionneusement le FotoDent® model2 dans le récipient défini de l'installation de production.
- Voir également les consignes d'application dans les instructions de l'imprimante.
- Enlevez des bulles éventuelles avec un objet propre.

Températures de traitement	
Imprimante Rapid Shape DII	23 ± 3 °C
Asiga MAX UV	35 ± 3 °C

- Sélectionnez les réglages des paramètres spécifiques au produit pour votre processus d'impression de FotoDent® model2.
- Une fois le processus de construction terminée, un post-traitement est recommandé.
- Un temps d'égouttage de 10 minutes env. est recommandé après le démarrage de la plateforme.
- Les composants mouillés avec de la résine liquide peuvent être nettoyés avec de l'isopropanol (97 %) pendant env. 2 x 6 minutes. Pour un nettoyage particulièrement efficace avec de l'isopropanol, il est recommandé d'utiliser d'installations à ultrasons protégées contre les explosions. Le nettoyage s'effectue avec de l'alcool isopropylique dans un gobelet séparé dans des conditions dynamiques

pour environ 2x6 min. Recommandation : bécet et agitateur magnétique, shaker de laboratoire ou nettoyeur à ultrasons. Répéter le processus de nettoyage s'il a été insuffisant (endroits brillants sur l'objet après séchage).

- Pour le postdurcissement des composants, veuillez sélectionner les réglages des paramètres pour votre processus. Vous trouverez d'autres imprimantes qualifiées sur notre site Internet www.dentamid.dreve.de.

Postdurcissement FotoDent® model2 beige opaque	
PCU LED N ₂	
Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	8 min. à 80 % de puissance lumineuse (vide)
FotoDent® flash	
Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	8 min. + 1 min. pré gaz 12 min. + 1 min. pré gaz
PCU 90	8 min. (incl. 4 min. pré gaz)
RS Cure	Selon les paramètres enregistrés pour FotoDent® model2.
Postdurcissement FotoDent® model2 noir	
PCU LED N ₂	
Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	12 min. à 80 % de puissance lumineuse (vide)
Postdurcissement FotoDent® model2 blanc	
PCU LED N ₂	
Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	6 min. à 40 % puissance lumineuse (vide)

- Aucune procédure ne peut exclure des saletés dues à la construction ou une rupture du matériau ainsi que des saletés dues à des erreurs de commande. Il est toutefois possible de filtrer le FotoDent® model2 en raison de la faible viscosité. Il est recommandé de retirer à intervalles réguliers le récipient de l'installation de production afin d'homogénéiser et de filtrer le contenu. Les inclusions de bulles apparues chez le FotoDent® model2 peuvent être enlevées après une durée de service de 1 à 2 heures env.

Ne jamais exposer le matériau liquide à la lumière afin d'éviter de compromettre la qualité. Des différences du processus de fabrication effectué peuvent entraîner la modification des propriétés mécaniques et/ou des variations de couleurs du matériau du FotoDent® model2.

Dangers possibles

Veuillez observer la fiche de données de sécurité en utilisant le FotoDent® model2.

Mentions de danger : **H315** Provoque une irritation cutanée. **H319** Provoque une sévère irritation des yeux. **H317** Peut provoquer une allergie cutanée. **H413** Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

Conseils de prudence : **P261** Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. **P273** Éviter le rejet dans l'environnement. **P280** Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage. **P305+P351+P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P333+P313** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. **P501** Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Contient : méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, Diurethandiméthacrylat, acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol, pigment coloré

Numéro de lot / date de péremption

Le numéro de lot et la date de péremption se trouvent sur chaque emballage de FotoDent® model2. En cas de réclamation sur le produit, prière de toujours indiquer le numéro de lot du produit. N'utilisez pas le produit une fois la date de péremption dépassée.



Formas de entrega


REF D354002	
FotoDent® model2, beige-opaco	1,0 kg Botella
REF D354003	
FotoDent® model2, negro	1,0 kg Botella
REF D354004	
FotoDent® model2, blanco	1,0 kg Botella



Agitar antes
de usar



Atención

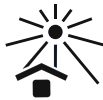

Rx only



FotoDent® model2 385 nm

Instrucciones de uso

Descripción del producto

FotoDent® model2 es una resina fotopolimerizable en base de metacrilato de metilo para la fabricación de modelos dentales mediante sistemas DLP 385 nm / 405 nm. Para el templado posterior de componentes fabricados con FotoDent® model2 se recomiendan los aparatos de fotopolimerización PCU LED N₂, FotoDent flash y RS cure, perfectamente adaptados al proceso de producción.

Procesamiento

- Para el procesamiento de FotoDent® model2 recomendamos llevar un equipo de protección personal, por ejemplo guantes adecuados, gafas protectoras, etc.
- Los recipientes de FotoDent® model2 deben agitarse bien aprox. una hora antes de usarse.
- Vierta el FotoDent® model2 con cuidado en el recipiente de la instalación de producción proporcionado.
- Véanse también las indicaciones de aplicación en las instrucciones de la impresora adjuntas.
- Elimine todas las posibles burbujas con un objeto previamente limpiado.

Temperaturas de procesamiento	
Impresora Rapid Shape DII	23 ± 3 °C
Asiga MAX UV	35 ± 3 °C

- Seleccione los ajustes de parámetros específicos del FotoDent® model2 para su proceso de impresión.
- Una vez finalizado el proceso de construcción, se recomienda un tratamiento posterior directo.
- Después de levantar la plataforma, se recomienda un tiempo de goteo de aprox. 10 minutos.
- Los componentes impregnados de la resina líquida pueden limpiarse con isopropanol (97 %) durante aprox. 2x6 minutos. Para una limpieza especialmente efectiva con isopropanol, se recomienda el uso de equipos de ultrasonidos protegidos contra explosiones. Como alternativa se puede realizar la limpieza con isopropanol en

un vaso separado bajo condiciones de caudal durante 2x6 minutos. Recomendación: Vaso de precipitación y agitador magnético, agitador de laboratorio o equipo de limpieza por ultrasonidos. En caso de que la limpieza resulte insuficiente (puntos brillantes en el objeto después del secado), repita el proceso de limpieza.

- Para el templado posterior de los componentes, seleccione los ajustes de parámetros para su proceso a partir. Encontrará más impresoras cualificadas en nuestro sitio web www.dentamid.dreve.de.

Templado posterior FotoDent® model2 beige-opaco	
PCU LED N ₂	
Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	8 min. 80 % de potencia lumínica (vacío)
FotoDent® flash	
Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	8 min. + 1 min. Tiempo de caudal previo 12 min. + 1 min. Tiempo de caudal previo
PCU 90	8 min. (incl. 4 min. Tiempo de caudal previo)
RS Cure	Según los parámetros memorizados para FotoDent® model2 en el dispositivo.
Templado posterior FotoDent® model2 negro	
PCU LED N ₂	
Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	12 min. 80 % de potencia lumínica (vacío)
Templado posterior FotoDent® model2 blanco	
PCU LED N ₂	
Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	6 min. 40 % de potencia lumínica (vacío)

- Con ningún proceso pueden descartarse impurezas debidas a la construcción, roturas del material o impurezas debidas a errores en la operación. No obstante, debido a la baja viscosidad, es posible filtrar el FotoDent® model2. Se recomienda sacar el recipiente de la instalación de producción periódicamente para homogeneizar y filtrar el contenido. Las burbujas que se formen pueden eliminarse manteniendo un tiempo de inmovilización de aprox. 1–2 horas en el FotoDent® model2.

Para evitar que se vea afectada la calidad del material, no exponga nunca el material líquido a la luz. Las variaciones con respecto al proceso de fabricación indicado pueden conllevar cambios en las propiedades mecánicas y/o variaciones en el color del material del FotoDent® model2.

Posibles riesgos

Al utilizar el FotoDent® model2, preste atención a la hoja de datos de seguridad.

Indicaciones de peligro: H315 Provoca irritación cutánea. **H319** Provoca grave irritación ocular. **H317** Puede provocar una reacción alérgica cutánea. **H413** Puede ser nocivo para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.

Consejos de prudencia: P261 Evitar respirar la polvora/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. **P273** No dispersar en el ambiente. **P280** Indossare guanti / occhiali di protezione / protezione per il viso. **P305+P351+P338** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P333+P313** In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

Contiene: metacrilato de 2-hidroxietilo, Diurethandimethacrylat, ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol, colorantes pigmentarios

Número de lote / fecha de caducidad

El número de lote y la fecha de caducidad aparecen en todos los embalajes de FotoDent® model2. En caso de reclamaciones del producto, indique siempre el número de lote del mismo. No utilice el producto una vez pasada la fecha de caducidad.



Dreve Design Rev.100222

Imballaggio

REF D354002

FotoDent® model2, beige opaco 1,0 kg Bottiglia

REF D354003

FotoDent® model2, nero 1,0 kg Bottiglia

REF D354004

FotoDent® model2, bianca 1,0 kg Bottiglia



Agitare prima
dell'uso



Attenzione



Rx only



FotoDent® model2 385 nm

Istruzioni per l'uso

Descrizione prodotto

FotoDent® model2 è un materiale a base di resina metacrilato per sistemi DLP con LED con 385 nm per la produzione di modelli dentali. Per la post-polimerizzazione delle parti costruite con FotoDent® model2 si raccomanda l'utilizzo di apparecchiature foto-polimerizzanti PCU LED N₂, FotoDent® flash e RS Cure che sono ottimamente equilibrate per il processo produttivo.

Lavorazione

- Durante la lavorazione di FotoDent® model2 si raccomanda di indossare i dispositivi di protezione personale, come ad esempio dei guanti idonei, occhiali di protezione, ecc.
- Agitare bene i contenitori di FotoDent® model2 circa un'ora prima dell'utilizzo.
- Versare con prudenza FotoDent® model2 nel contenitore del dispositivo di produzione previsto.
- Fare riferimento altresì alle istruzioni per l'uso contenute nel manuale allegato alla stampante.
- Rimuovere eventuali bolle con un oggetto pulito.

Temperature di lavorazione	
Stampante Rapid Shape DII	23 ± 3 °C
Asiga MAX UV	35 ± 3 °C

- Scegliere le impostazioni dei parametri specifici del prodotto per FotoDent® model2 per il vostro processo di stampa.
- Al termine del processo di costruzione si raccomanda di eseguire direttamente una rifinitura.
- Dopo l'avvio della piattaforma si raccomanda un tempo di sgocciolamento di circa 10 minuti.
- I componenti bagnati con il materiale sintetico liquido possono essere puliti con isopropanolo (97 %) per un periodo di circa 2x6 minuti. Per una pulizia particolarmente efficace con l'isopropanolo si raccomanda l'utilizzo di impianti a ultrasuoni con protezione antiesplorazione. In alternativa, la pulizia può essere eseguita con alcool isopropilico in un

contenitore a parte in condizioni di risciacquo per max. 2x6 minuti. Sono raccomandati: becher e agitatore magnetico, agitatore da laboratorio o macchina a ultrasuoni. In caso di pulizia insufficiente (aree lucide sull'oggetto al termine dell'asciugatura) ripetere il procedimento di pulizia.

- Per l'indurimento dei componenti scegliere le impostazioni dei parametri per il vostro processo. Per ulteriori stampanti qualificate consultare il nostro sito web www.dentamid.dreve.de.

Indurimento FotoDent® model2 beige opaco	
PCU LED N ₂	
Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	8 min. 80 % di flusso luminoso (sottovuoto)
FotoDent® flash	
Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	8 min. + 1 min. Tempo di preflusso gas 12 min. + 1 min. Tempo di preflusso gas
PCU 90	8 min. (incl. 4 min. Tempo di preflusso gas)
RS Cure	Secondo i parametri memorizzati per FotoDent® model2 nell'apparecchiatura.
Indurimento FotoDent® model2 nero	
PCU LED N ₂	
Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	12 min. 80 % di flusso luminoso (sottovuoto)
Indurimento FotoDent® model2 bianca	
PCU LED N ₂	
Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	6 min. à 40 % di flusso luminoso (sottovuoto)

- Non è possibile escludere con alcun procedimento la contaminazione o la rottura del materiale per ragioni costruttive, così come contaminazioni per errori nell'utilizzo. Per via della bassa viscosità è tuttavia possibile filtrare FotoDent® model2. Si raccomanda di rimuovere a intervalli regolari il contenitore del dispositivo di produzione per omogeneizzare e filtrare il contenuto. Le bolle incorporate possono essere rimosse in FotoDent® model2 lasciando a riposo per circa 1-2 ore.

Per evitare di pregiudicare la qualità del materiale non esporre mai il materiale liquido alla luce. Divergenze dal processo di realizzazione esposto possono causare una modifica delle proprietà meccaniche e/o dei cambiamenti del colore del materiale di FotoDent® model2.

Potenziali pericoli

Per l'utilizzo di FotoDent® model2 osservare la scheda dei dati di sicurezza.

Indicazioni di pericolo: H315 Provoca irritazione cutanea. **H319** Provoca grave irritazione oculare. **H317** Può provocare una reazione allergica cutanea. **H413** Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. **P273** Non disperdere nell'ambiente. **P280** Indossare guanti / occhiali di protezione / protezione per il viso. **P305+P351+P338** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P333+P313** In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

Contenuto: 2-idrossietile metacrilato, Diurethandimethacrylat, acido metacrilico, monoestere con propan-1,2-diolo, colore a pigmento

Numero di lotto / data di scadenza

Il numero di lotto e la data di scadenza sono indicati su ciascuna confezione di FotoDent® model2. Per reclami relativi al prodotto indicare sempre il numero di lotto del prodotto. Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza.