

cetron®



Limpeza y Cuidado

para aparatos ortodónticos,
férulas y protectores bucales

SCHEU
Dental Technology

El cuidado correcto

para aparatos ortodónticos, férulas y protectores bucales

Debido al contacto de las férulas y aparatos de ortodoncia con la comida, bebida, fármacos o la saliva, el color puede alterarse, incluso pueden llegar a oler o saber mal. Restos de sarro o comida pueden sedimentarse.



Con CETRON®

limpieza y cuidado dental profesional

Con CETRON®, usted y su paciente adquiere un producto eficaz, que limpia y cuida los aparatos a largo plazo.

Este producto permite la higiene de los aparatos de ortodoncia y férulas de manera rápida y económica. El spray **CETRON®** cuida y refresca el aparato antes de la colocación.

¡Para un sabor más a limón!



El spray – para la aplicación directa antes de ponerse el aparato ortodóntico o la férula.




Sobres prácticos con un contenido de 15 grs para el paciente.


Aplicación sencilla




Disuelva el contenido del sobre en 150 ml de agua.

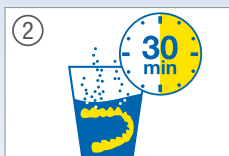

Introduzca el aparato en la solución y déjelo durante 30 minutos.

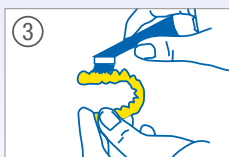

Los restos de sedimento se pueden eliminar con un cepillo de dientes y pasta dentífrica.

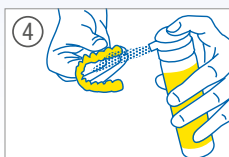

El spray refresca el aparato antes de la inserción.

Entregado por:



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban