

Cómo actualizar el software

Cuando quiera actualizar el software gratuito de su dispositivo quirúrgico **MASTERSurg LUX Wireless** o **EXPERTSurg LUX**, haga lo siguiente:

- 1** En el ordenador, descargue el archivo del firmware actual desde la página web de KaVo (haga clic [aquí](#)).
- 2** Copie el archivo de firmware (archivo con la extensión .bin) en una tarjeta SD (capacidad de almacenamiento de entre 1 y 32 GB, formato FAT).
Nota: Asegúrese de que solo haya un archivo con firmware (archivo .bin) almacenado en la tarjeta SD.
- 3** Apague el dispositivo quirúrgico.
- 4** Inserte la tarjeta SD con el nuevo archivo de firmware (archivo .bin) en el dispositivo quirúrgico.
- 5** Vuelva a encender el dispositivo quirúrgico.
El proceso de actualización comenzará automáticamente.
Nota: No debe apagarse el dispositivo quirúrgico durante el proceso de actualización. Una vez finalizada la actualización, el dispositivo quirúrgico se iniciará con el software actualizado.



Cómo cargar el protocolo de fresado Nobel Biocare N1™ en el dispositivo quirúrgico

MASTERSurg


- 1 Descargue los archivos actuales del protocolo de fresado desde la página web de KaVo (haga clic [aquí](#)).¹
- 2 Copie los archivos del protocolo de fresado (SURG_MA.SET) en una tarjeta SD (capacidad de almacenamiento de entre 1 y 32 GB, formato FAT).
Nota: Asegúrese de que solo haya un archivo con el protocolo de fresado (archivo .set) almacenado en la tarjeta SD.
- 3 Acceda a la pantalla de configuración pulsando durante 3 segundos el símbolo de la flecha ↵.
- 4 Vaya a "Importar ajustes" y cargue la configuración con "Leer datos".
- 5 Espere 3 segundos.
- 6 Apague el dispositivo.
- 7 Encienda el dispositivo. Una vez encendido, aparecerá el logotipo de Nobel Biocare y estarán disponibles los nuevos protocolos de fresado. Por ejemplo, la secuencia recién añadida "Nobel Biocare N1™" contiene los siguientes parámetros y pasos secuenciales:

EXPERTSurg


- 1 Descargue los archivos actuales del protocolo de fresado desde la página web de KaVo (haga clic [aquí](#)).¹
- 2 Copie los archivos del protocolo de fresado (SURG_EX.SET) en una tarjeta SD (capacidad de almacenamiento de entre 1 y 32 GB, formato FAT).
Nota: Asegúrese de que solo haya un archivo con el protocolo de fresado (archivo .set) almacenado en la tarjeta SD.
- 3 Acceda a la pantalla de configuración pulsando durante 3 segundos el símbolo de la flecha ↵.
- 4 Vaya a "Importar ajustes" y cargue la configuración con "Leer datos".
- 5 Espere 3 segundos.
- 6 Apague el dispositivo.
- 7 Encienda el dispositivo. Una vez encendido, aparecerá el logotipo de Nobel Biocare y estará disponible el protocolo de fresado actualizado.
Nota: El dispositivo EXPERTSurg solo tiene un protocolo de fresado. Se puede cargar un protocolo de fresado "Straight" (Recto) actualizado de Nobel Biocare cuando el archivo SURG_EX.SET se haya descargado en la tarjeta SD.



Posiciona

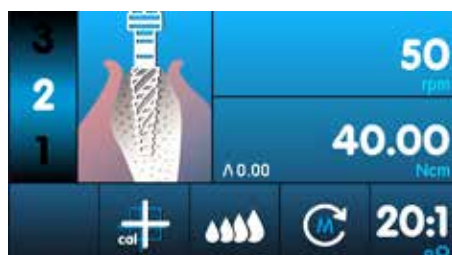

Prepara

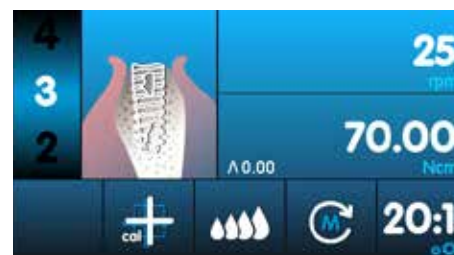

Coloca

1 Para cargar el protocolo de fresado Nobel Biocare N1™, es preciso tener instalada la versión 1.50 del software en el dispositivo quirúrgico EXPERTSurg y MASTERSurg.

© KaVo, 2021. Todos los derechos reservados. KaVo, el logotipo de KaVo y el resto de marcas comerciales son marcas comerciales de KaVo, si no se afirma lo contrario o ninguna otra posibilidad resulta evidente por el contexto en casos determinados. Nobel Biocare, el logotipo de Nobel Biocare y el resto de marcas comerciales son marcas comerciales de Nobel Biocare, si no se afirma lo contrario o ninguna otra posibilidad resulta evidente por el contexto en casos determinados. Consulte más información en nobelbiocare.com/trademarks. Consulte más información en [KaVo.com/trademarks](https://kavo.com/trademarks). Las imágenes de productos no son necesariamente a escala. Todas las imágenes de producto se emplean con fines exclusivamente ilustrativos y es posible que no sean una representación exacta del producto. Descargo de responsabilidad: Puede que algunos productos aún no cuenten con la aprobación de los organismos reguladores para su lanzamiento comercial en todos los mercados. Consulte a su oficina de ventas local de KaVo para obtener información sobre la oferta y la disponibilidad actuales de los productos. Para uso exclusivo con prescripción. Precaución: Las leyes federales de Estados Unidos restringen la venta de este dispositivo a médicos, profesionales médicos, o personal clínico con licencia, o por orden de estos. Consulte en las instrucciones de uso información completa sobre prescripción, incluidas indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban