


KaVo SONICflex® quick 2008/L · SONICflex® 2003/L

Un multitalent efficace pour votre cabinet.

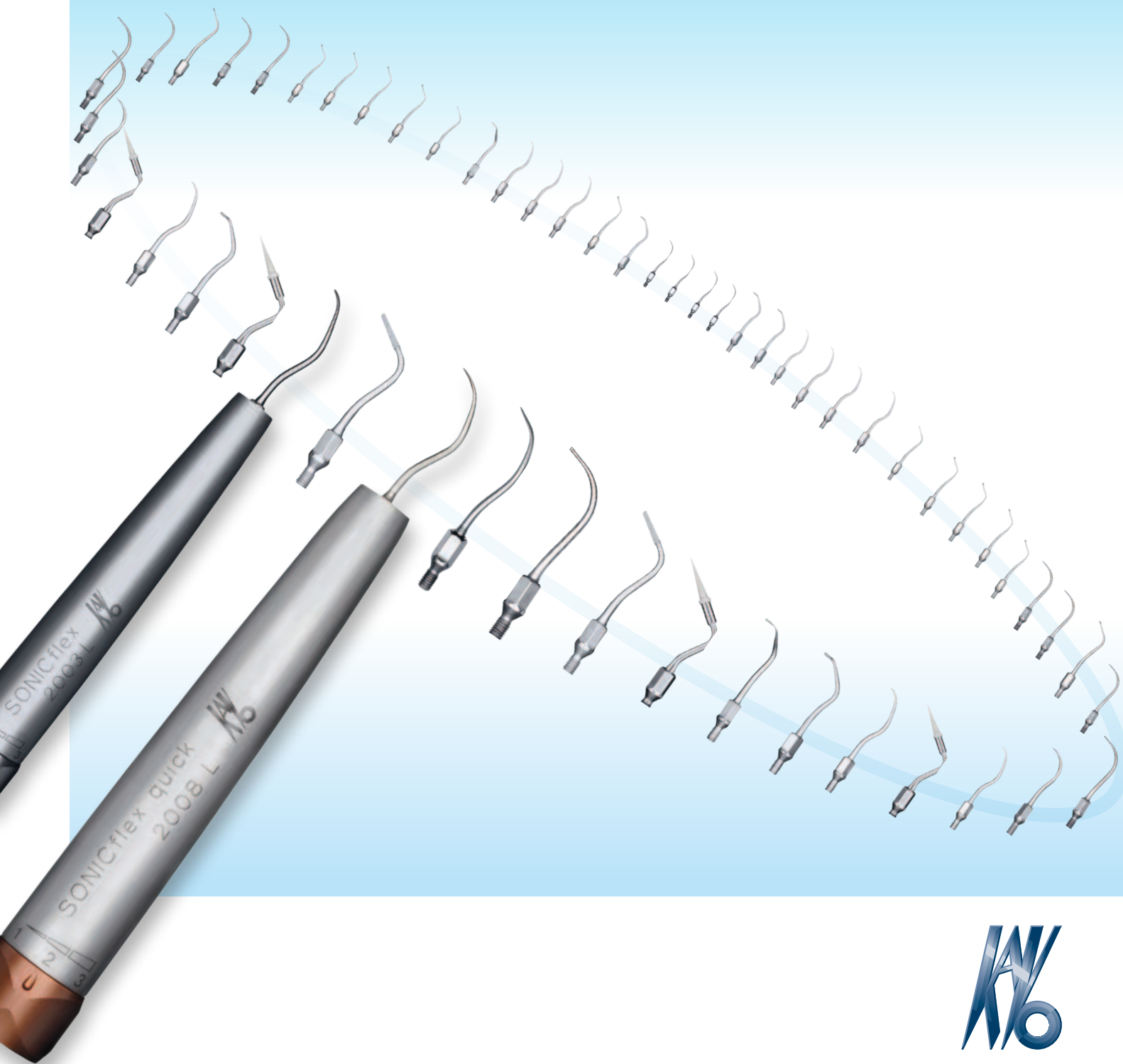

KaVo. Dental Excellence.

Efficacité et puissance maximale – des conditions de travail idéales pour vous.

De plus en plus de patients se rendent compte de la nécessité d'une prophylaxie régulière pour le maintien d'une dentition saine. Ils privilégient pour cela un traitement qui ménage les tissus. KaVo SONICflex est simple d'utilisation et confortable pour le patient, et convient ainsi parfaitement pour la prophylaxie. Cela vous permet de fidéliser vos patients et de profiter de façon optimale de la tendance de plus en plus marquée à la prévention.

Utilisation universelle et sur mesure.

Grâce aux indications variées dont vous disposez avec SONICflex, il deviendra rapidement l'un de vos instruments les plus utilisés. Ses nombreux inserts lui permettent de s'adapter exactement à vos besoins.

Polyvalence maximale – vos atouts et avantages :

- Plus de 50 inserts et ainsi davantage de possibilités d'utilisation comparé à tous les autres détarteurs
- Pour tous les domaines d'application
- Le fondement d'un traitement minimal invasif réussi

Un traitement en douceur – plus agréable pour vos patients.

Les patients confortablement traités reviennent volontiers.

Avec KaVo SONICflex, vos patients bénéficient d'un traitement particulièrement doux. Grâce aux basses fréquences et au large mouvement elliptique, le développement de chaleur reste minime. En outre, la substance dentaire est protégée car l'instrument travaille sous une pression réduite. Quel que soit le niveau de puissance, le KaVo SONICflex vous permet de pratiquer des traitements sensiblement plus agréables et plus conservateurs.

Confort du patient – vos atouts et avantages :

- Traitement agréable
- Substance dentaire préservée
- Oscillations douces particulièrement adaptées aux patients sensibles
- Faible génération de chaleur



Efficacité et puissance maximale – des conditions de travail idéales pour vous.

Changement en un tour pour plus d'efficacité.

Avec votre KaVo SONICflex, le changement d'insert est extrêmement simple : un procédé breveté par KaVo permet de changer les inserts de façon simple et rapide en un tour seulement. Ce système vous fait gagner du temps et assure un flux de travail efficace sans interruptions inutiles.

Breveté par KaVo : un changement d'insert simple et rapide en un tour seulement



KaVo SONICflex® – vos atouts et avantages :

- L'éventail d'indications et d'utilisations le plus large de tous les détarteurs Sonic comprenant également la prophylaxie avec des traitements préservant les tissus
- Un changement d'inserts simple et rapide – garantit un travail efficace, fait gagner du temps et évite les interruptions inutiles dans le déroulement de votre travail
- Puissance d'abrasion élevée, 50% supérieure par rapport à son prédécesseur, pour retirer sans effort les dépôts les plus tenaces
- Aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire ; il suffit de le brancher sur le raccord KaVo MULTIflex ou Sirona, sans ajout de câbles gênants
- Meilleure illumination : 25 000 Lux, pour une vision détendue sans fatigue des yeux – également disponible avec LED
- Sensiblement plus silencieux que ses concurrents directs (jusqu'à 15 dB), atout santé pour l'équipe du cabinet et les patients
- Qualité KaVo éprouvée – le SONICflex 2003 L / 2008 L de KaVo est déjà le représentant de la troisième génération de détarteurs chez KaVo, issue de 25 années d'expérience et de connaissances

Faites progresser chaque jour vos performances.

Avec votre KaVo SONICflex, vous disposez du détartreur le plus puissant et le plus silencieux de sa catégorie. Il est sans nul doute l'instrument ayant la plus large gamme d'indications. Il sera votre allié fiable grâce aux niveaux de puissance réglables selon les indications, pour être à la fois puissant et précis.


KaVo SONICflex® quick 2008 L et KaVo SONICflex® LUX 2003 L – puissance adaptable à chaque indication.

Niveaux de puissance	Amplitude	Fréquence	Volume sonore	Indications
Niveau 1	120 µm	6000 Hz	61 dB (A)	Finition et travail très soigné
Niveau 2	160 µm	6000 Hz	69 dB (A)	Préparation et élimination des dépôts
Niveau 3	240 µm	6000 Hz	71 dB (A)	Préparation et élimination des dépôts en puissance

Sensiblement rassurant, ergonomique et hygiénique.

Votre SONICflex est équipé d'un revêtement Plasmatec particulièrement robuste et facile à prendre en main. Avec cette surface en métal-céramique, votre KaVo SONICflex est encore plus sûr dans votre main. Vos doigts sont plus détendus pendant le traitement et vous pouvez apprécier ce toucher agréablement tiède.

La surface Plasmatec est conçue avec l'imperméabilisation hygiénique KaVo. Elle résiste également au nettoyage en appareil de désinfection thermique, est stérilisable jusqu'à 135° C et répond donc aux normes d'hygiène actuelles (p. ex. celles du RKI) : véritable atout d'hygiène pour votre cabinet.

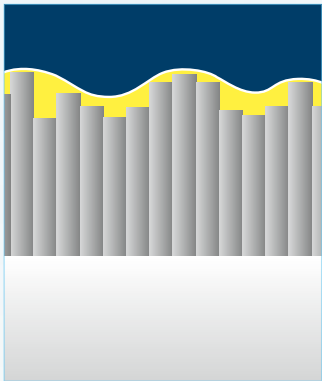

- Imperméabilisation hygiénique KaVo
- Traitement de surface Plasmatec
- Bague de réglage

Le procédé Plasmatec utilisé par KaVo est le garant d'une excellente tenue et d'une hygiène irréprochable.



Adaptateur pour les inserts SONICflex pour un procédé de nettoyage validé par ex dans un thermodésinfecteur Miele.



Notre performance de pointe – de la prophylaxie, parodontologie et endodontie, en passant par ...

Des spécialistes à votre service au quotidien.

Peu importe la spécialité de votre cabinet. Avec le vaste choix d'inserts du SONICflex de KaVo, vous aurez toujours le bon instrument en main. Composez votre assortiment personnel d'inserts et élargissez-le selon vos besoins. Vous serez ainsi en mesure d'obtenir un résultat optimal dans toutes les situations de traitement – de façon simple et agréable pour vos patients !



Une prophylaxie parfaite. Très simple pour vous et agréable pour vos patients.

Prophylaxie et parodontologie

5
6
7
8

SONICflex® scaler

- Variété d'inserts pour le détartrage à long terme
- Nettoyage des poches de faible profondeur

48

SONICflex® clean

- Large spectre de brosseuses vibrantes
- Pour le nettoyage et le polissage en douceur

60
61 li.
62 re.

SONICflex® paro

- Différents inserts pour un nettoyage minimal invasif, conservateur et efficace des poches parodontales jusqu'à 9 mm de profondeur

Accessoires SONICflex® paro

- Pièce intermédiaire pour alimentation en liquides pharmacologiques, p. ex. solution saline stérile (n° d'art. 1.000.6296)

Prophylaxie et parodontologie

48

SONICflex® implant

- Retrait efficace des dépôts et concrétions sous-gingivales
- Absence d'abrasion, absence de rugosité
- Insert à usage unique permettant d'éviter la transmission de maladies

24
25
26
27

SONICflex® root planer

- Pour le traitement sans effort des zones de furcation étroites ou complexes

Endodontie

66
67
68
69
70
96

SONICflex® endo

Assortiment spécial d'inserts pour :

- La recherche des canaux
- L'aménagement des entrées canalaies
- L'aménagement de la cavité pulpaire pour la préparation radiculaire coronaire
- Nettoyage et rinçage du canal radiculaire (insert 96 disponible dans les tailles ISO 0,15, 0,20 et 0,25)

56
16
20
55
57
17
21


SONICflex® retro

- Préparation rétrograde du canal radiculaire avec inserts diamantés en contre-angle
- Prévention des lésions radiculaires par fissures, soutien de la stabilité dentaire, préservation des os péri-apicaux
- Possibilité de préparation dans l'axe




... la thérapie minimal invasive des caries et la préparation ...

Thérapie minimale invasive des caries

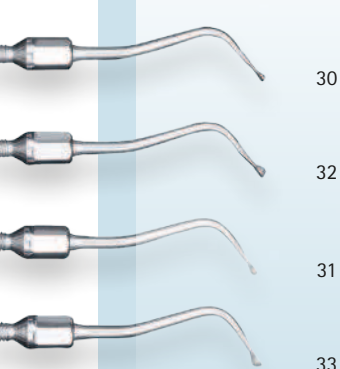


SONICflex® microinvasive

- Système d'inserts spécial pour les petites lésions difficilement accessibles dans la zone proximale
- Les inserts diamantés sur une seule face permettent d'accéder directement à la lésion primaire par voie occlusale ou buccale
- Préservation de la substance dentaire saine

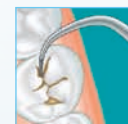


SONICflex® seal

- Traitement des fissures
- Complément parfait du KaVo DIAGNOdent

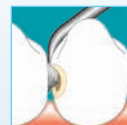

SONICflex® bevel



- Insert diamanté sur une seule face pour le biseautage précis et ciblé des lésions minimales préparées
- Optimisation du collage
- Réduction du liseré marginal

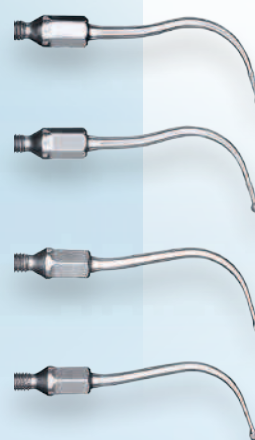

SONICflex® cariex D + TC



- Retrait minimal invasif de la dentine carieuse
- Cariex TC : élimination des grosses lésions carieuses
- Cariex D : petites lésions carieuses avec possibilité d'aménagement de la cavité

Préparation

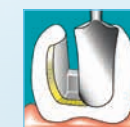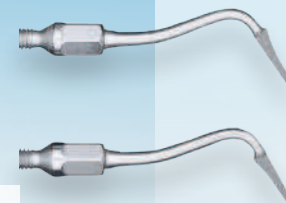


SONICflex® prep gold

- Inserts de préparation diamantés sur une face pour la finition des bordures de cavité, développés spécialement pour les inlays en or et les couronnes partielles
- La géométrie de l'embout pour les inlays en or et les couronnes partielles est précisément transmise

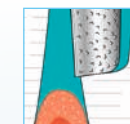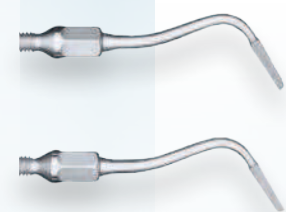

SONICflex® prep ceram

- Pour inlays/onlays
- Pour la préparation de finition des bordures de cavité ; transmet la géométrie des pointes des inserts directement à la substance dentaire
- Aucune contre-dépouille pour les inlays et onlays préparés en laboratoire

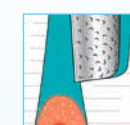

SONICflex® prep CAD/CAM

- Formation idéale des bordures de cavité pour les systèmes CAD/CAM, p. ex. EVEREST, CEREC




SONICflex® cem

- Mise en place en douceur et précise des inlays
- Réduction du liseré marginal



SONICflex® prep crown

- pour une préparation de couronne, fini avec précision

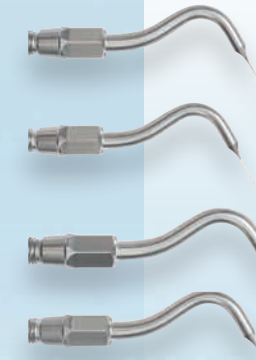


SONICflex® stripping / shaping

- Séparation avant le début de la préparation coronaire
- Arrondissement des zones de transition sur la limite de préparation proximale dans le cadre d'une préparation cavitaire
- Modification anatomique des surfaces proximales des obturations en composite
- Réduction proximale de l'émail dans le cadre de l'orthopédie dentofaciale

... aux applications chirurgicales.

Chirurgie

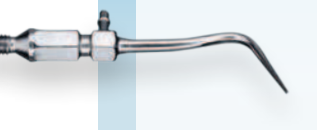

80




SONICflex® bone


- Applicable à plusieurs zones dans le cadre du traitement osseux (ostéotomie, augmentation, extractions et sinus lift).




81

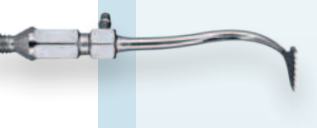

83

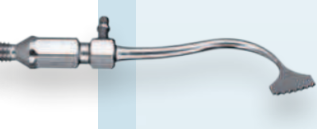

84

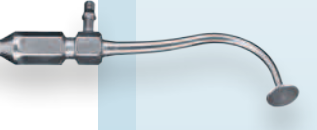

85

SONICflex® bone insert n°85 (insert plateau) :


- Idéal pour décoller en toute sécurité la membrane de Schneider lors d'un sinus lift grâce à sa forme de disque



86

SONICflex® bone insert n°86 (scalpel) :


- Idéal pour un prélèvement rapide et facile de quantités d'os importantes, en particulier pour le sinus lift

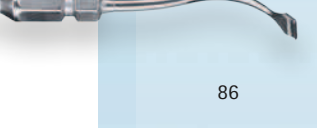

87

SONICflex® bone insert n°87 (scie) :

- Idéal pour des incisions fines et précises pour détacher les ligaments

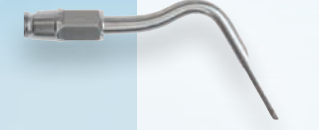

90




SONICflex® crown extension

Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :



91

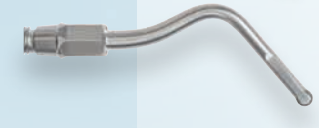

92

- Tracé d'arcade asymétrique
- Sourire gingival
- Atteinte de l'espace biologique



93



94



95

KaVo propose la solution optimale pour chaque étape de la prophylaxie.

Si simple pour vous.

1. Intégration dans les processus de travail (par exemple avec KaVo Primus® 1058 TM)



- Système de prophylaxie professionnel et unité de soins fiable en seul et même équipement
- Une fiabilité maximale pour des résultats de prophylaxie et de traitement de première qualité
- Version sur cordons pendants, fouets ou cart à roulettes avec un large choix d'options pour tous vos besoins

Si agréable pour vos patients.

- Installation confortable du patient grâce au rembourrage souple
- Ambiance de bien-être pour vos patients grâce à des designs attrayants
- Marketing patient efficace avec solution multimédia en option



2. Élimination de plaque dentaire (par exemple avec KaVo SONICflex quick 2008 L)



- Changement d'insert simple et rapide en un tour de main
- Un seul instrument pour une multitude de domaines d'application
- Convient également aux raccords Sirona

- Oscillations douces particulièrement appropriées pour les patients sensibles
- Grande confiance des patients grâce à un traitement effectué dans les conditions les plus agréables possibles
- Détartreur silencieux avec lumière



3. Nettoyage des dents (par exemple avec KaVo PROPHYflex 3 – 2018)



- Buse orientable à 360° pour un travail confortable dans les meilleures conditions
- Entièrement stérilisable et donc facilement intégrable dans les procédures d'hygiène
- Convient également aux raccords Sirona

Détartrage parfait des dents pour des résultats visiblement meilleurs

- Traitement doux et agréable avec les perles PROPHYpearls
- 4 nouveaux parfums de poudre (fruits des bois, cerise, menthe et orange)



4. Polissage des dents (par exemple avec KaVo DURAtec 2933)



- Adaptable pour systèmes à clip ou à vis
- Fiabilité durable grâce au procédé spécial d'étanchéité de la tête évitant la pénétration de pâte de polissage
- Excellent nettoyage grâce à une répartition optimale de la pâte assurée par un mouvement alternatif de 90°

- Polissage indolore avec des vibrations douces
- Sensation agréable
- Des dents sensiblement plus propres



5. Détection (par exemple avec KaVo DIAGNOdent)



- Des résultats fiables dans tous les domaines d'application
- Un diagnostic sûr en cas de fissures et de caries proximales et une détection fiable de concrétions dans les poches
- Diagnostiquer des caries cachées au plus tôt avec le laser haute technologie

- Sans fil et maniable
- Conservation et ménagement de la substance dentaire saine
- Détection indolore
- Une plus grande confiance des patients grâce à un diagnostic plus sûr



Sélection complète pour votre spectre d'utilisation.

pour SONICflex
2000N, 2000L, 2003 / L

pour SONICflex
2008 / L, 2008 S / LS

Domaine d'application	Désignation Insert KaVo	n°	Référence n°	n°	Référence n°
Élimination de la plaque dentaire	SONICflex scaler insert universel	n° 5	0.571.5171	n° 5A	1.005.8949
	SONICflex scaler insert faucille	6	0.571.5181	6A	1.005.8950
	SONICflex scaler insert Perio	7	0.571.5179	7A	1.005.8951
	SONICflex scaler insert Perio extra-long	8	0.571.5371	8A	1.006.1953
	SONICflex scaler jeu d'inserts	Set	1.000.4983	Set A	1.005.9328
	SONICflex insert pour brosses	48	0.571.0401	48 A	1.006.1982
Nettoyage de la surface des racines	SONICflex paro insert long droit	60	0.571.7402	60A	1.006.1934
	SONICflex paro insert long, gauche	61	0.571.7412	61A	1.006.1935
	SONICflex paro insert long, droite	62	0.571.7422	62A	1.006.1936
	SONICflex paro jeu d'inserts	Set	0.571.0371	Set A	1.006.2020
	SONICflex rootplaner insert bourgeon, petit, gauche	24	0.571.5621	24A	1.006.1957
	SONICflex rootplaner insert bourgeon, petit, droite	25	0.571.5631	25A	1.006.1959
	SONICflex rootplaner insert rootplaner, bourgeon, petit, universel	26	0.571.5641	26A	1.006.1961
	SONICflex rootplaner insert, bourgeon, grand, perio	27	0.571.5651	27A	1.006.1963
	SONICflex insert implant	48	1.003.8167	48A	1.006.2027
	SONICflex retro insert isthme, gauche	56	0.571.7322	56A	1.006.2040
Traitement rétrograde du canal radiculaire	SONICflex retro insert isthme, droite	57	0.571.7332	57A	1.006.2041
	SONICflex retro insert cylindrique, petit, gauche	16	0.571.5541	16A	1.006.2036
	SONICflex retro insert cylindrique, petit, droite	17	0.571.5581	17A	1.006.2035
	SONICflex retro insert forme en T, petit, gauche	20	0.571.5521	20A	1.006.2037
	SONICflex retro insert forme en T, petit, droite	21	0.571.5561	21A	1.006.2038
	SONICflex retro insert frontales	55	0.571.7342	55A	1.006.2039
	SONICflex retro jeu d'inserts	Set	0.571.0381	Set A	1.006.2034
	SONICflex endo insert bourgeon grand, diamanté	66	1.000.5825	66A	1.006.1992
	SONICflex endo insert conique 125°, diamanté	67	1.000.5822	67A	1.006.1994
	SONICflex endo insert conique 112°, diamanté	68	1.000.5823	68A	1.006.1996
Préparation et formation des canaux radiculaires	SONICflex endo insert bourgeon petit, diamanté	69	1.000.5827	69A	1.006.1998
	SONICflex endo insert conique 117°, insert non diamanté	70	1.000.5821	70A	1.006.2000
	Insert SONICflex endo clean 96	96	1.008.5163	96A	1.008.5164
	Set SONICflex endo clean	Set	1.006.2045	Set A	1.007.1142
	Aiguilles SONICflexendo clean 015	-	1.006.2042	-	1.006.2042
	Aiguilles SONICflex endo clean 020	-	1.006.2043	-	1.006.2043
	Aiguilles SONICflex endo clean 025	-	1.006.2044	-	1.006.2044
	SONICflex seal insert	45	1.000.8323	45A	1.007.1506
	SONICflex micro Torpedo insert mésial, diamanté	28	0.571.6741	28A	1.006.1965
	SONICflex micro Torpedo insert mésial, diamanté	29	0.571.6731	29A	1.006.1967
Thérapie minimale invasive des caries	SONICflex micro insert, petite demi-sphère, mésial, diamanté	30	0.571.6811	30A	1.006.1969
	SONICflex micro insert, petite demi-sphère, distal, diamanté	31	0.571.6801	31A	1.006.1971
	SONICflex micro insert, grande demi-sphère, mésial, diamanté	32	0.571.6831	32A	1.006.1973
	SONICflex micro insert, grande demi-sphère, distal, diamanté	33	0.571.6821	33A	1.006.1975
	SONICflex bevel, mésial, diamanté	58	0.571.7392	58A	1.006.1988
	SONICflex bevel insert distal, diamanté	59	0.571.7382	59A	1.006.1990
	SONICflex caries D insert, forme sphérique, petit, diamanté	42	0.571.7105	42A	1.006.1980
	SONICflex caries D insert, forme sphérique, grand, diamanté	43	0.571.7167	43A	1.006.1981
	SONICflex caries TC insert, forme sphérique, petit, métal dur	71	1.000.7362	71A	1.006.2002
	SONICflex caries TC insert, forme sphérique, grand, métal dur	72	1.000.7363	72A	1.006.2004
Préparation	SONICflex prep gold insert mésial, diamanté	49	0.571.7212	49A	1.006.1983
	SONICflex prep gold insert distal, diamanté	50	0.571.7222	50A	1.006.1984
	SONICflex prep ceram insert mésial, diamanté	51	0.571.7262	51A	1.006.1985
	SONICflex prep ceram insert distal, diamanté	52	0.571.7272	52A	1.006.1986
	SONICflex prep CAD/CAM insert mésial, diamanté	34	1.002.1984	34A	1.006.1977
	SONICflex prep CAD/CAM insert distal, diamanté	35	1.002.1986	35A	1.006.1979
	SONICflex cem insert	12	0.571.5431	12A	1.006.2021
	Insert SONICflex crown prep 97, rayon	97	1.008.6383	97A	1.008.6384
	Insert SONICflex crown prep 98, étage	98	1.008.6385	98A	1.008.6386
	SONICflex stripping mesial	73	1.011.2993	73A	1.011.2994
Chirurgie	SONICflex stripping distal	74	1.011.2995	74A	1.011.2996
	SONICflex shaping mesial	75	1.011.2997	75A	1.011.2998
	SONICflex shaping distal	76	1.011.2999	76A	1.011.3000
	SONICflex bone insert, grande boule diamantée, évaluation du volet sinusien	81	1.004.3876	81A	1.006.2008
	Insert SONICflex bone, sphérique, grand, non diamanté, élévation du volet sinusien	82	1.004.3877	82A	1.006.2010
	SONICflex bone insert, scie, sagittale	83	1.004.3878	83A	1.006.2012
	SONICflex bone insert, scie, axiale	84	1.004.3879	84A	1.006.2014
	SONICflex bone insert plateau	85	1.006.0645	85A	1.007.1624
	SONICflex bone insert scratcher (scalpel)	86	1.006.0741	86A	1.007.1625
	SONICflex bone insert, scie	87	1.006.1275	87A	1.007.1627
Minimale invasive Élongation coronaire	SONICflex bone insert carré, pour bone splitting	80	1.004.3875	80A	1.007.2006
	SONICflex bone jeu d'inserts	jeu	1.004.3874	jeu A	1.006.2033
	SONICflex crown extension 020	90	1.011.3001	90A	1.011.3002
	SONICflex crown extension 020	91	1.011.3003	91A	1.011.3004
	SONICflex crown extension 020	92	1.011.3005	92A	1.011.3006
	SONICflex crown extension 030	93	1.011.3007	93A	1.011.3008
	SONICflex crown extension 030	94	1.011.3009	94A	1.011.3010
	SONICflex crown extension 030	95	1.011.3011	95A	1.011.3012



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban