



# Bite Fix® Bissregistrierungen


Mit den Bite Fix® Bissregistrierungen lassen sich einfach und präzise Konstruktionsbisse in der Schnarchtherapie erstellen. Der dezentrale Griff gewährleistet eine leichte Überprüfung der Mittellinie und ist mit einer leichtgängigen Verstellechraube und für eine einfache Bedienung mit einer mm-Skala zur Kontrolle der Protrusionseinstellung versehen.

## Drei Ausführungen sind erhältlich:


Bite Fix® – zur Mehrfachverwendung

Bite Fix® Scan – für Modellscanner

Bite Fix® One – zur Einmalverwendung

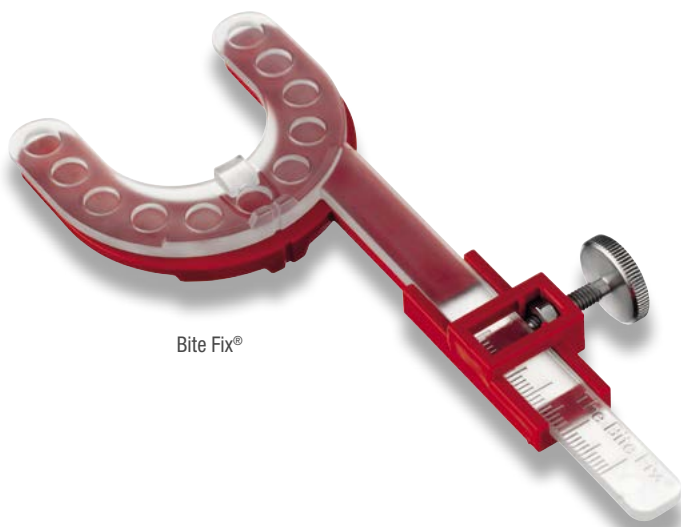

Bite Fix®

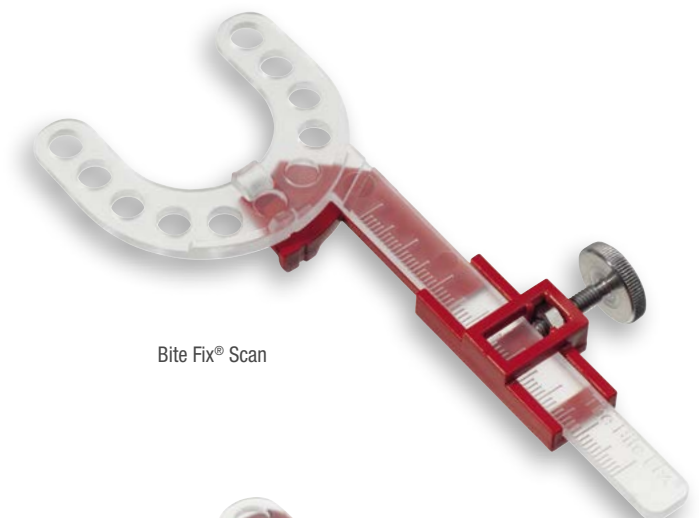

Bite Fix® Scan



Bite Fix® One

Diese Eigenschaften haben unsere Bite Fix® Bissregistrierungen gemeinsam:

- // Der dezentrale Griff gewährleistet eine leichte Überprüfung der Mittellinie.
- // Die leichtgängige Verstellechraube sorgt für eine einfache Bedienung.
- // Mit der mm-Skala gelingt eine leichte Protrusionseinstellung.
- // Das Material ist verwindungssteif, leicht und dennoch robust.
- // Die zierliche Bauweise ermöglicht eine handliche Bedienung.
- // Die festgelegte Bissperrung sorgt für eine mühelose Herstellung von z. B. TAP® und IST-Geräten.

# Bite Fix® Bissregistrierungen

## Bite Fix® – Schnell. Sicher. Präzise.

Vereint alle Vorteile:

- // mm-Skala zur Kontrolle der Protrusionseinstellung
- // Verstelle schraube zur einfachen Bedienung
- // Dezentraler Griff zur leichten Überprüfung der Mittellinie
- // Verwindungssteif

Zudem ist die Bite Fix® Bissregistrierung aus sterilisierbarem Kunststoff, der Grundkörper (rot) ist mehrfach verwendbar.



Bite Fix® Kit



Bite Fix® Bissgabel

### Lieferprogramm

// Bite Fix® Bissregistrierung	1 Kit	5474
// Bite Fix® Bissgabel	10 Stück	5475

## Bite Fix® Scan – Modelle in Protrusion scannen.

Hat alles und noch viel mehr:

- // mm-Skala zur Kontrolle der Protrusionseinstellung
- // Verstelle schraube zur einfachen Bedienung
- // Dezentraler Griff zur leichten Überprüfung der Mittellinie
- // Grundkörper (rot) aus sterilisierbarem Kunststoff
- // Verwindungssteif

Und: Durch die integrierte Sollbruchstelle an der Bissgabel ist Bite Fix® Scan passend für jeden Scanner.



Bite Fix® Scan Kit



Bite Fix® Scan Bissgabel

### Lieferprogramm

// Bite Fix® Scan Bissregistrierung	1 Kit	5492
// Bite Fix® Scan Bissgabel	10 Stück	5493

## Bite Fix® One – Zur Einmalverwendung.

Konzentration auf das Wesentliche:

- // mm-Skala zur Kontrolle der Protrusionseinstellung
- // Verstelle schraube zur einfachen Bedienung
- // Dezentraler Griff zur leichten Überprüfung der Mittellinie
- // Verwindungssteif

Bite Fix® One ist preisgünstig und anwenderfreundlich.



Bite Fix® One Kit

### Lieferprogramm

// Bite Fix® One Bissregistrierung	1 Kit	5503
------------------------------------	-------	------

CE



**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban