



Grandio® SO Inlay System

SET ZUR CHAIRSIDE-HERSTELLUNG INDIREKTER
COMPOSITE-INLAYS

Grandio®SO Inlay System

EINFACH AUS COMPOSITE: DAS INDIREKTE SOFORT-INLAY VON VOCO

Sie würden Ihren Patienten gern eine Versorgung mit erschwinglichen und gleichzeitig hochwertigen Inlays innerhalb einer Sitzung anbieten? Zusätzlich möchten Sie die teure Anschaffung eines CAD/CAM-Gerätes vermeiden und trotzdem die volle Wertschöpfung in Ihrer Praxis generieren? VOCO bietet Ihnen die Lösung in Form eines einmaligen Komplett-Sets: GrandioSO Inlay System – das praktische Set für die Chairside-Herstellung indirekter Composite-Inlays!

Schnell und ökonomisch

Inlays bieten in vielerlei Hinsicht große Vorteile bei der Versorgung von Seitenzahnläsionen. Bisher bringen sie allerdings fast immer einen hohen Zeit- und Kostenaufwand mit sich. Das bedeutet: Kostenintensive Geräte kommen zum Einsatz oder ein externes Labor ist eingebunden, der präparierte Zahn wird mit einem temporären Verschluss versorgt und der Patient muss zwangsläufig zu einem zweiten Termin in der Praxis erscheinen.


Mit GrandioSO Inlay System geben wir Ihnen jetzt die Möglichkeit, einfach und innerhalb von nur einer Sitzung erstklassige Composite-Inlays chairside herzustellen. Sie behalten damit die volle Wertschöpfung in der eigenen Praxis und gestalten gleichzeitig die Behandlung für sich und den Patienten angenehm und effizient: Kein temporärer Verschluss, keine zweite Sitzung, keine zweite Anästhesie!

Inlays einfach selbst gemacht

Sie präparieren die Kavität und nehmen einen Abdruck mit einem Alginate Ihrer Wahl. Jetzt kommen die GrandioSO Inlay System-Komponenten zum Einsatz. Der Ablauf ist wie folgt:


1. Modellherstellung mit dem speziell für diese Indikation entwickelten Modellsilikon
2. Anfertigung des GrandioSO-Inlays und Ausarbeitung
3. Befestigung mit Futurabond DC und Bifix QM
4. Finieren und Polieren mit Dimanto, dem einstufigen Diamantpolierer

Durch die extraorale Herstellung des Inlays im Modell haben Sie den zusätzlichen Vorteil, Approximalkontakte ohne aufwendige Matrizentechnik gestalten zu können. Dieses ermöglicht Ihnen gerade auch bei Patienten mit geringer oder Non-Compliance die stressfreie Versorgung mit zahnfarbenen und langlebigen Restaurationen.

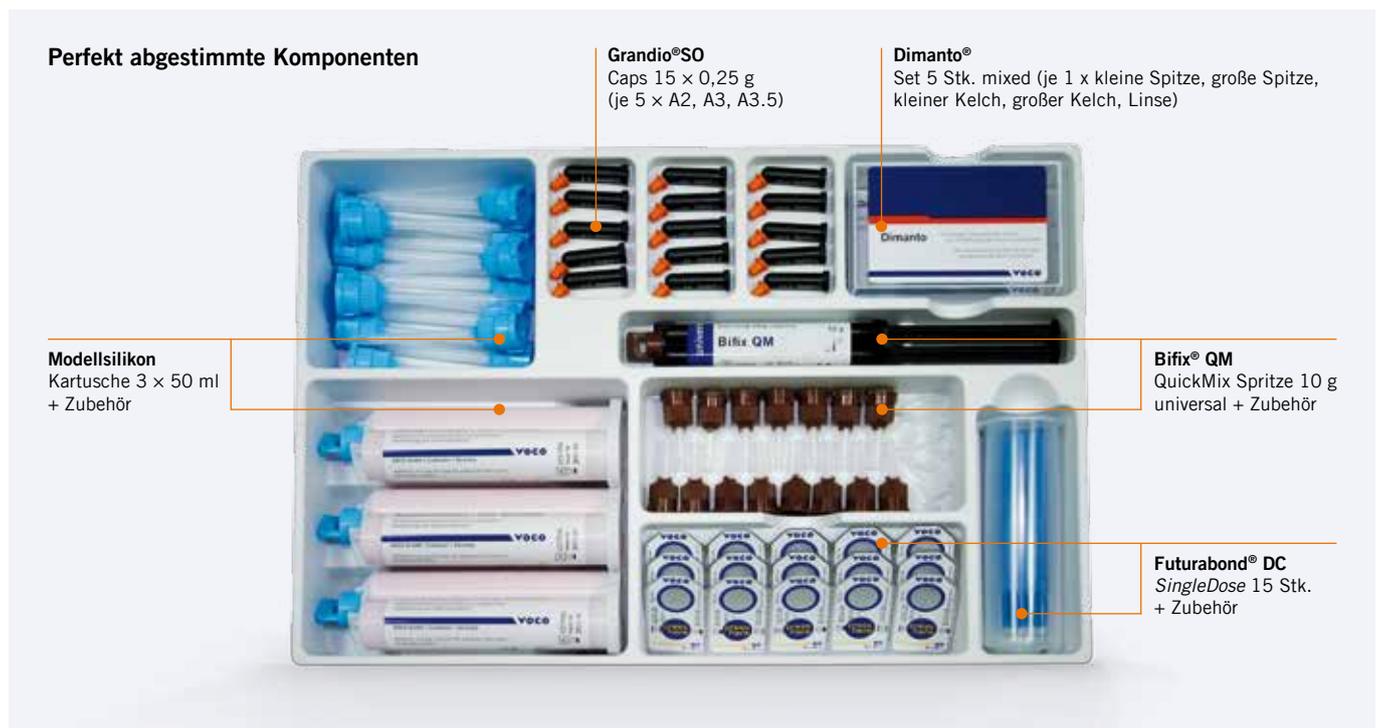

Grandio®SO Inlay System

IN WENIGEN SCHRITTEN ZUM HOCHWERTIGEN COMPOSITE-INLAY
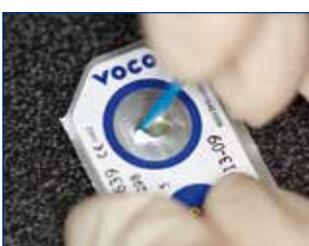
<p>Präparation / Abdrucknahme</p> <p>▶▶▶</p>			
<p>Modellsilikon</p> <p>▶▶▶</p>			
<p>GrandioSO</p> <p>▶▶▶</p>			
			
<p>Futrabond DC / Bifix QM / Dimanto</p> <p>▶▶▶</p>			
			
			

Grandio®SO Inlay System

EINFACH AUS COMPOSITE: DAS INDIREKTE SOFORT-INLAY VON VOCO

Vorteile

- Komplet-Set für die Chairside-Herstellung von 15 Composite-Inlays
 - Materialkosten von unter 20 Euro pro Inlay
 - volle Wertschöpfung in der Praxis, keine Laborbeteiligung
 - günstiger als CAD/CAM gefertigte Inlays
- Hochwertigste Komponenten, perfekt aufeinander abgestimmt
 - schnelle und einfache Modellanfertigung
 - das Premium-Composite GrandioSO als Garant für Langlebigkeit und Ästhetik
 - Futurabond DC und Bifix QM für sichere Befestigung
- Einfache und effiziente Methode
 - bequeme Herstellung auch großer, mehrflächiger Restaurationen
 - Herstellung sog. Inlay-Straßen bei benachbarten Zähnen
 - Gestaltung der Approximalkontakte ohne aufwendige und teure Matrizentechnik
 - perfekte okklusale Anatomie – modelliert außerhalb des Mundes
 - stressfreie Herstellung zahnfarbener und langlebiger Restaurationen auch bei Patienten mit geringer oder Non-Compliance



Handelsformen

- REF 2642 GrandioSO Inlay System – Set
 REF 1186 Modellsilikon – Kartusche 2 × 50 ml
 REF 2202 Mischkanülen – 50 Stk. Typ 20

VOCO GmbH
 Anton-Flettner-Straße 1-3
 27472 Cuxhaven
 Deutschland
 Tel.: +49 (0) 4721-719-0
 Fax: +49 (0) 4721-719-109
 info@voco.de
 www.voco.de

Zu beziehen durch: