

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf **wh.com**



Effizient. Flexibel. Sanft.

Piezo Scaler
Handstücke PB-3
und PB-5 L Q
Ultraschallscaler
der Spitzenklasse



Piezo Scaler mit Spitzenleistung

Der W&H Ultraschallscaler glänzt durch seine hohe Abtragsleistung und der sanften, patientenschonenden Anwendung. Er bietet höchsten Komfort und ist dank effektivem W&H Spitzensystem flexibel im Einsatz. Modernste Piezotechnologie verbessert Effizienz und taktiles Empfinden bei allen klinischen Indikationen.



W&H Spitzensystem

Das mit Endanwendern entwickelte Spitzensystem ist perfekt auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendungsgebiete und die einzelnen Behandlungsschritte abgestimmt.



Maximale Effizienz

Leistungsstark und sanft zugleich für eine schonende Anwendung und eine schmerzfreie Behandlung.

Leicht zu reinigen

Beide Piezo Scaler Handstücke lassen sich zum leichteren und besseren Reinigen einfach zerlegen, sind thermodesinfizierbar und sterilisierbar.




Handlich und komfortabel

Die Form des Handstücks und das geringe Gewicht sorgen für höchsten Komfort.



5-fach Ring LED

Taghelle Ausleuchtung der Behandlungsstelle durch 5 LEDs mit dem PB-3 LED Handstück.

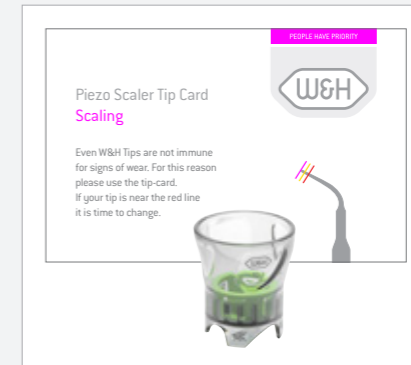

Nützliches Zubehör

Spitzen einfach und sicher mit dem Spitzenwechsler wechseln und mit der Spitzenkarte überprüfen.




Behandlungsstelle stets gekühlt

Der integrierte Spray sorgt für eine konstante und effektive Kühlung der Behandlungsstelle.

Vielfältige Anwendung

Dank stufenloser Leistungsregulierung lassen sich die W&H Piezo Scaler mühelos auf die jeweilige Anwendung und Spitze einstellen. Von Prophylaxe und Parodontologie über die Implantaterhaltung oder Endodontie bis zur Mikropräparation von Restaurationen, die Anwendungsmöglichkeiten sind besonders vielfältig.

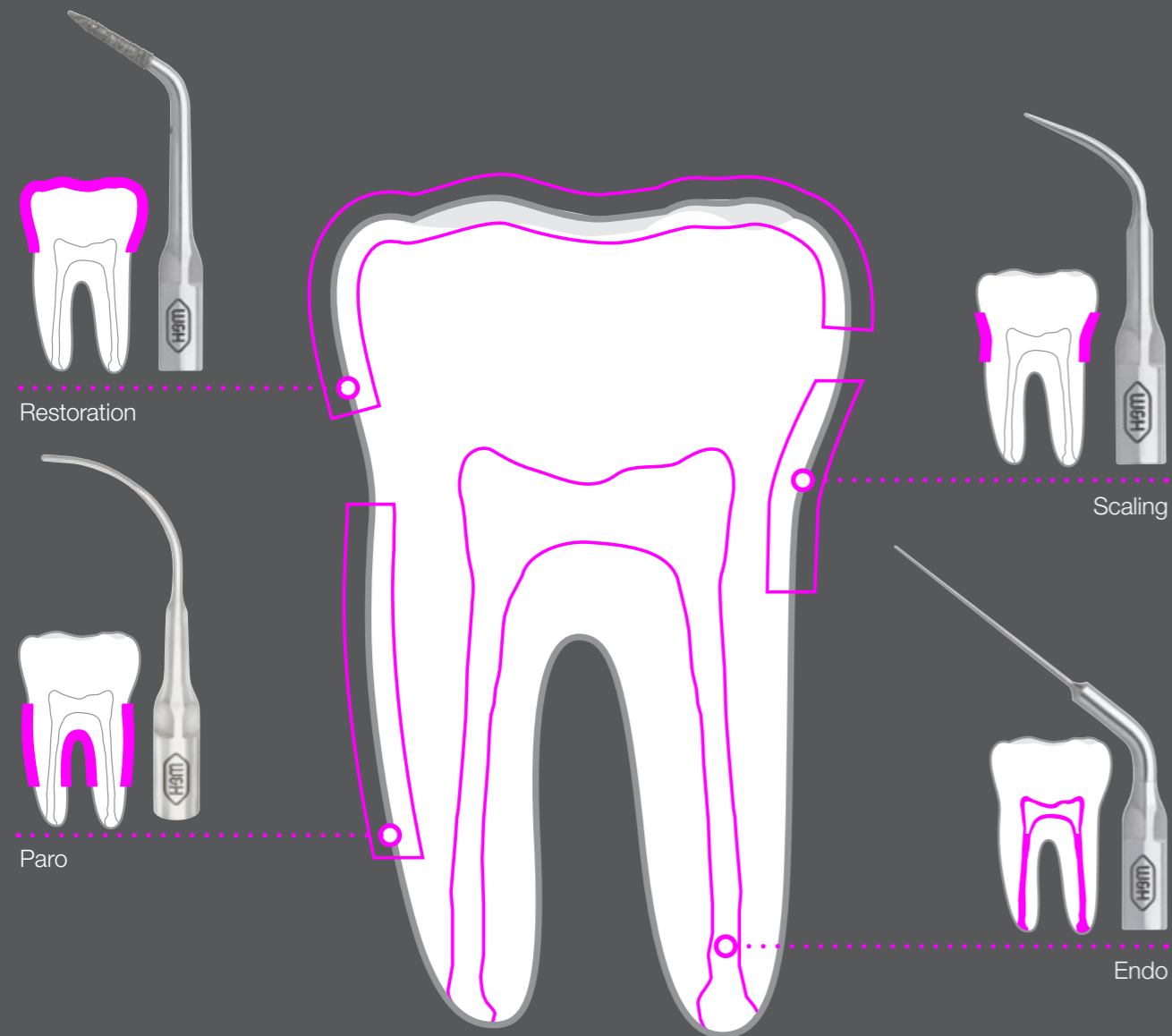

W&H Piezo Scaler

Die W&H Piezo Scaler lassen sich optimal in Ihren individuellen Workflow integrieren. Entscheiden Sie sich für die exklusive Stand-alone-Lösung Tigon+, einen Proxeo Ultra Piezo Scaler oder nutzen Sie die Vorteile einer Built-in Solution – der komfortablen Integration in Ihre Dentaleinheit.



Tigon+

Exklusive Stand-alone-Lösung mit temperierter Flüssigkeit für ein Maximum an Patientenkomfort.



PB-530

Der W&H Piezo Scaler mit kabelloser Fußsteuerung für mehr Bewegungsfreiheit und höchsten Anwenderkomfort.



PB-520/PB-510

Die kompakten Modelle der Proxeo Ultra Piezo Scaler überzeugen mit oder ohne Tank.



Built-in Solution

Ausgewählte Einheitenhersteller bieten W&H Piezo Scaler als integrierte Antriebslösung im Rahmen des Gesamtsystems an. Die Bedienung erfolgt einfach und bequem über die Steuerzentrale Ihrer Dentaleinheit. Fragen Sie bei W&H oder Ihrem Einheitenhersteller nach den Piezo Scälern von W&H als Built-in Solution.

Integrierte Piezotechnologie

Ob das PB-5 L Q, PB-5 L oder das PB-3 Built-in Set, beide integrierbaren Piezo Scaler von W&H können bequem mit der Fußsteuerung der Einheit betrieben, per Köcherschalter aktiviert und per Drehregler gesteuert werden.



Piezo Scaler Built-in Set

Einfache Einbaulösung für die Integration in Ihre bestehende Dentaleinheit.

Leistung anpassen

Mit dem Drehregler können Sie die Leistung optimal auf die Anwendung abstimmen.

LED Handstück

Das LED-Ring ermöglicht eine taghelle Ausleuchtung der Behandlungsstelle.



Built-in Set analog

Machen Sie Ihre Behandlungseinheit zukunftsfit. Mit den W&H Built-in Solutions, wie etwa dem PB-3 Built-in Set analog. Die Piezo Scaler Einbaulösung der neuen Generation – kompatibel und kombinierbar.



PB-2 E LED Built-in Set analog

Das Built-in Set PB-2 E LED wird mit dem PB-3 LED Handstück geliefert.

Technische Daten

Piezo Scaler Handstück	PB-3	PB-5 L Q	PB-5 L	PB-5 L S
Licht:	ohne Licht	LED-Ring		
Gewicht:	52,5 g	55 g		
Länge ohne Spitze:	104,3 mm	135 mm (mit Kupplung)		
Durchmesser:	20,2 mm	18,5 mm		

Built-in Set analog	PB-3	PB-5 L Q/PB-5 L
Piezo Controller:	PC-1.0	
Anschlussset elektrisch:	✓	
Drehregler:	✓	
Versorgungsschlauch:	VP-3 (1,8 m)	VP-5 (1,8 m)
Handstück:	PB-3	PB-5 L Q/PB-5 L
Spitzenwechsler mit eingesetzter Spitze:	TW-1: 1U, 1P	TQ-1: 1UQ, 2UQ, 1PQ/TW-1: 1U, 2U, 1P

Tania Eberle

Dentalhygienikerin, Deutschland

»Was manuell oft nicht zu erreichen ist, schafft der W&H Piezo Scaler mit Leichtigkeit. Ein sehr überzeugendes Produkt!«



Stand-alone-Lösungen

Alle Informationen zu den W&H Piezo Scaler Stand-alone-Lösungen, wie dem Tigon+, Proxeo Ultra und Pylon 2 finden Sie auf wh.com

Kompatibilität von Spitzen mit W&H Handstücken


	Q-Link*	W&H/EMS/Mectron			W&H/NSK/Satelec**		
	PB-5 L Q	PB-5 L	PA-1 LED	PB-3	PB-5 L S	PB-3 LED S	PB-3 S
Tigon+			X			X	
Proxeo Ultra	X	X			X		
Pyon 2				X			
Built-In	X	X		X	X		X

* Q-Link Spitzen (z. B. 1UQ, 2UQ) sind mit dem PB-5 L Q kompatibel.

** W&H Spitzen mit Satelec Gewinde (z. B. 1US, 2US) sind mit den W&H Handstücken PB-5 L S, PB-3 LED S und dem PB-3 S kompatibel.

Hinweis: EMS®, Mectron®, NSK® und Satelec® sind Marken von Drittparteien, die mit W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH nicht in Verbindung stehen. Bei Verwendung von Spitzen von Drittanbietern hat der Anwender für die korrekte Einstellung der Leistungsparameter des W&H Piezogerätes zu sorgen.

Farbcodesystem

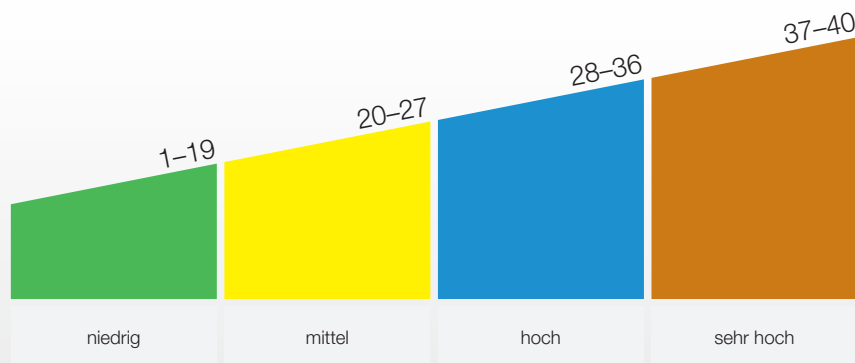

Angabe der Leistungsstufen für W&H Spitzen mit Satelec Gewinde

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
 5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
 office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
 Raiffeisenstraße 3b
 83410 Laufen, **Deutschland**
t +49 8682 8967-0
f +49 8682 8967-11
 office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53
 5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
 office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
 Industriepark 9
 8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
 info.ch@wh.com
wh.com

Abb. Symbolfotos, Zusatzausstattung und Inhalt der gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

20456 ADT Rev. 001 / 31.01.2019
 Änderungen vorbehalten

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban