

Serie KaVo MASTERmatic

La nuova serie KaVo MASTERmatic.

**VIVETE**  
I VOSTRI DESIDERI



KaVo. Dental Excellence.

# La serie KaVo MASTERmatic. Vivete i vostri desideri.

## Risultati migliori. A lungo.

Godetevi la superiore accessibilità ai quadranti posteriori e la massima precisione in ogni possibile trattamento. Con la nuova serie di manipoli KaVo MASTERmatic.

Dopo oltre 10 anni di successi, la serie di strumenti GENTLEpower trova la propria naturale evoluzione. L'ultima generazione della tecnologia tedesca diventa il nuovo punto di riferimento per il settore e combina in un'unica serie di manipoli lo spirito di innovazione e le migliori soluzioni tecnologiche. Realizzata con una qualità senza compromessi, la serie KaVo MASTERmatic è stata sviluppata in modo da poter sfruttare appieno il suo potenziale. Volete solo il meglio? E' arrivata la soluzione che fa per voi.

**KaVo master**  
series

Il nuovo design della serie KaVo MASTERmatic presenta delle peculiarità decisamente uniche. La dimensione della testina del leggendario moltiplicatore di giri è stata ridotta del 20%, senza alcuna perdita di potenza. Provate l'ebbrezza di accedere alle zone più difficili del cavo orale con tutta la potenza necessaria. Tutti i migliori accorgimenti tecnologici sono stati utilizzati, quali ad esempio il microfiltro dello spray sostituibile.

A proposito del concetto di sostituzione: è stato mantenuto il noto principio KaVo delle testine intercambiabili. Se necessario, la testina si può sostituire in modo rapido per poter proseguire subito il lavoro. Oppure si possono combinare i gambi degli strumenti e le testine in modo da soddisfare le proprie esigenze specifiche.

Tra l'altro le note testine INTRA LUX ed i gambi della serie di strumenti precedenti GENTLEpower sono compatibili con i nuovi componenti.



## ACCESSO OTTIMALE E VISIBILITÀ SENZA COMPROMESSI

- Testine di dimensioni ridotte
- Combinazione brevettata degli angoli testa/gomito
- Posizionamento del fascio luminoso

## MASSIMA PRECISIONE

- Tecnologia Triple-Gear
- Boccia portafresa in metallo indeformabile
- Design ergonomico

## STRAORDINARIA AFFIDABILITÀ

- Longevità tipica dei manipoli KaVo
- Made in Germany
- Accurati test di usura
- Testine intercambiabili

# MASTERmatic M25 L/M05 L Mini. Piccola testina, grande strumento.

## KaVo MASTERmatic M25 L.

La combinazione di tutte queste caratteristiche, quali la dimensione della testina, le angolazioni brevettate testa/gomito, la boccola portafresa in metallo indeformabile, la tecnologia Triple Gear ed il microfiltro dello spray sostituibile, aiuta a creare il migliore manipolo moltiplicatore sul mercato.

- Migliore visibilità del campo operatorio grazie alle ridotte dimensioni della testina e all'ottimizzazione dell'angolo di visuale (H = 13,5 mm; Ø = 10,3 mm)
- Silenziosità senza precedenti grazie al sistema Triple-Gear, per un lavoro rilassato e senza fastidiose vibrazioni
- Estremo comfort per paziente ed operatore grazie all'emissione sonora molto ridotta durante il trattamento (55 dB(A))
- Più spazio a disposizione grazie alla combinazione di angoli brevettata KaVo 100°/19°
- Più sicurezza: il microfiltro spray intercambiabile garantisce un raffreddamento ottimale e previene il danneggiamento termico del dente
- **Ampliamento della gamma MASTERmatic:**  
Moltiplicatore di giri M05 L con testina miniatura specifica per frese mini (16,5 mm). Rappresenta la soluzione ideale nei casi di aree estremamente difficili da raggiungere, quali ad esempio in pedodonzia e con pazienti anziani.

M25 L Mat. nr. 1.009.3630  
M05 L Mini Mat. nr. 1.009.3640

Volumi della testina a confronto



\* Dimensione della testina rispetto al moltiplicatore di giri KaVo GENTLEpower 25 LP

## Sono i valori interni che contano.

Dimensioni della testina molto ridotte per ottima visibilità anche in preparazioni complesse nei quadranti posteriori

Spray a 3 ugelli con nebulizzazione finissima per un raffreddamento ottimale della fresa

Fotoconduttore ottico monocorpo fino a 25.000 LUX per identificare con sicurezza i margini della preparazione

Bassa emissione sonora, funzionamento a vibrazioni ridotte durante il trattamento (55 dB(A))

Tecnologia Triple-Gear per massima silenziosità senza fastidiose vibrazioni

Rivestimento KaVo Plasmatec per presa perfetta ed igiene garantita

Micro-filtro intercambiabile per un raffreddamento dello spray sempre efficace

Forza di tenuta del mandrino high-tech per massima durata ed affidabilità

Sistema di tenuta KaVo a pulsante fino a 30N di potenza per un blocco della fresa sicuro e resistente con estrema semplicità di utilizzo

Cuscinetti a sfera in ceramica originali KaVo per una durata superiore alla media ed un eccellente funzionamento a vibrazioni ridotte

Combinazione di angoli brevettata KaVo 100°/19° per massima visibilità del campo operatorio ed estrema libertà di movimento

Termodisinfettabile e sterilizzabile fino a 135 °C

Inseribile su tutti i motori KaVo INTRAmatic LUX e sui motori con attacco a norma ISO 3964 / DIN 13940

## Angoli KaVo MASTERmatic: versatilità illimitata.

Create il vostro strumento secondo le vostre esigenze. I gambi del contrangolo rappresentano la base ideale per tutte le velocità di trasmissione standard. Combinatele con le testine INTRA desiderate. Così facendo disporrete della vostra soluzione personalizzata.



### KaVo MASTERmatic LUX M20 L

- Trasmissione 1:1
- Fotoconduttore ottico monocrorpo fino a 25.000 Lux
- **Lo strumento di riferimento** per la rimozione della carie
- Microfiltro dello spray sostituibile
- **Massima flessibilità** e numerose possibilità di trattamento grazie a 14 testine intercambiabili

Codice mat. nr. 1.009.3620



### KaVo MASTERmatic LUX M29 L

- Riduzione 7,4:1
- Fotoconduttore ottico monocrorpo fino a 25.000 Lux
- Specifico per l'endodonzia
- Microfiltro dello spray sostituibile
- **Massima flessibilità** e numerose possibilità di trattamento grazie a 14 testine intercambiabili
- **Compatibile** con tutte le testine INTRA LUX

Codice mat. nr. 1.009.3580



### KaVo MASTERmatic LUX M07 L

- Riduzione 2,7:1
- Fotoconduttore ottico monocrorpo fino a 25.000 Lux
- Per la rimozione della carie e la profilassi
- Microfiltro dello spray sostituibile
- **Massima flessibilità** e numerose possibilità di trattamento grazie a 14 testine intercambiabili
- **Compatibile** con tutte le testine INTRA LUX

Codice mat. nr. 1.009.3610



### KaVo MASTERmatic LUX M10 L

- Adatto sia per frese da manipolo che per frese da contrangolo
- Fotoconduttore ottico monocrorpo fino a 25.000 Lux
- Anche per semplici rifiniture **extra-oral**, quali ad esempio la correzioni di protesi

Codice mat. nr. 1.009.3570

## Testine KaVo INTRA. In acciaio, semplicemente geniali.

Il 65% più dure della serie precedente e resistenti due volte tanto alle deformazioni rispetto al titanio. Stiamo parlando delle nuove testine KaVo INTRA, le migliori e le più durature mai esistite:

- Durature grazie all'impiego di un modernissimo acciaio speciale
- Igieniche grazie alla riduzione di fessure e spigoli
- Affidabili grazie alla qualità KaVo garantita 2 anni
- Versatili grazie a 14 testine intercambiabili per tutti i tipi di trattamento



Nel caso di alcune applicazioni si può investire in una sola testina specifica, senza cambiare contrangolo!

# RISPARMIO!

# 14 testine intercambiabili per la massima flessibilità.

Qualsiasi trattamento dobbiate svolgere, con la nostra ampia gamma di testine INTRA avrete sempre la soluzione migliore a portata di mano. E' sufficiente selezionare la testina desiderata e combinarla con il giusto gambo. Per tutte le applicazioni, per risultati eccellenti.

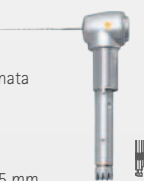
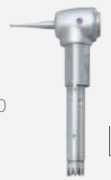
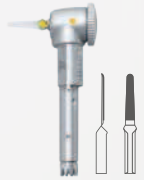
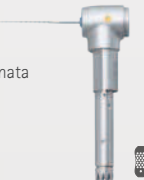
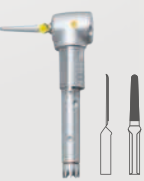
M07 L

- Angolo riduttore 2,7:1 fibrato
- Condotti spray aria e acqua interni separati
- Rivestimento in Plasmatec





Cambiarle è semplice: le testine KaVo INTRA sono compatibili con tutti i gambi KaVo

| PREPARAZIONE STANDARD                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               | PROFILASSI                                                                                                                                                                                                                                        | CHIRURGIA                                                                                                                                                                                                                                                  | ENDODONZIA                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ideale per la preparazione delle cavità e della corona, per la finitura e l'escavazione                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               | Perfetta in combinazione con tutti gli spazzolini e le coppette standard                                                                                                                                                                          | Dimensioni estremamente ridotte per interventi di microchirurgia                                                                                                                                                                                           | Per l'uso in endodonzia in combinazione con KaVo ESTETICA® E80, E70 o E50                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
| M20 L (1:1)                                                                                                                                                                                                                                | M07 L (2,7:1)                                                                                                                                                                                                                                 | M07 L (2,7:1)                                                                                                                                                                                                                                     | M20 L (1:1)                                                                                                                                                                                                                                                | M29 L (7,4:1)                                                                                                                                                                                                                                | M20 L (1:1)                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>L68</div> <div>TRASMISSIONE 1 : 1</div> <div>NR. DI GIRI MASSIMO 40.000</div> <div>TIPO DI FRESA Fresa da contrangolo 2,35 mm</div> <div></div>     | <div>L66 B</div> <div>TRASMISSIONE 3 : 1</div> <div>NR. DI GIRI MASSIMO 13.300</div> <div>TIPO DI FRESA Fresa da contrangolo 2,35 mm</div> <div></div>     | <div>L31</div> <div>TRASMISSIONE 2 : 1</div> <div>NR. DI GIRI MASSIMO ca. 3.000</div> <div>TIPO DI FRESA Coppette da lucidatura e spazzolini</div> <div></div> | <div>L22</div> <div>TRASMISSIONE 1 : 1</div> <div>NR. DI GIRI MASSIMO 20.000</div> <div>TIPO DI FRESA Fresa arrotondata e fresa a tazza a U Gr. 0 e 2</div> <div></div> | <div>L53</div> <div>MOVIMENTO rotazione alternata di ca. 60°</div> <div>TIPO DI FRESA Per strumenti canalari da 2,35 mm</div> <div></div>                 | <div>L68 B</div> <div>TRASMISSIONE 1 : 1</div> <div>NR. DI GIRI MASSIMO 40.000</div> <div>TIPO DI FRESA Fresa da contrangolo 2,35 mm</div> <div></div>  |
| <div>L80</div> <div>TRASMISSIONE 1 : 1</div> <div>NR. DI GIRI MASSIMO 40.000</div> <div>TIPO DI FRESA Fresa FG 1,6 mm</div> <div></div>                 | <div>L52 Mini</div> <div>TRASMISSIONE 1 : 1</div> <div>NR. DI GIRI MASSIMO 40.000</div> <div>TIPO DI FRESA Fresa da contrangolo 2,35 mm</div> <div></div> | <div>L61 R</div> <div>MOVIMENTO corsa smorzata 0,8 mm 36 impostazioni</div> <div>TIPO DI FRESA Lime interdentali, ad es. intensive</div> <div></div>          |                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>L3</div> <div>MOVIMENTO rotazione alternata di ca. 90°</div> <div>TIPO DI FRESA Per strumenti canalari</div> <div></div>                            | <div>L66 B</div> <div>TRASMISSIONE 3 : 1</div> <div>NR. DI GIRI MASSIMO 13.300</div> <div>TIPO DI FRESA Fresa da contrangolo 2,35 mm</div> <div></div> |
| <div>L68 B</div> <div>TRASMISSIONE 1 : 1</div> <div>NR. DI GIRI MASSIMO 40.000</div> <div>TIPO DI FRESA Fresa da contrangolo 2,35 mm</div> <div></div> | <div>L67</div> <div>TRASMISSIONE 2 : 1</div> <div>NR. DI GIRI MASSIMO 20.000</div> <div>TIPO DI FRESA Fresa da contrangolo 2,35 mm</div> <div></div>     | <div>L53</div> <div>MOVIMENTO rotazione alternata di ca. 60°</div> <div>TIPO DI FRESA Fresa da contrangolo 2,35 mm</div> <div></div>                         |                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>L3 Y</div> <div>MOVIMENTO corsa di 0,4 mm</div> <div>TIPO DI FRESA Per strumenti canalari</div> <div></div>                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               | <div>L61 G</div> <div>MOVIMENTO corsa smorzata 0,8 mm rotazione libera</div> <div>TIPO DI FRESA Lime interdentali, ad es. intensive</div> <div></div>        |                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>L62</div> <div>TRASMISSIONE 10 : 1</div> <div>NR. DI GIRI MASSIMO 540</div> <div>TIPO DI FRESA per strumenti canalari da 2,35 mm</div> <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                            |

# Igiene KaVo. La cura dei vostri strumenti ad un prezzo sorprendente.

## KaVo QUATTROcare PLUS 2124 A

- Massima lubrificazione e pulizia dei condotti con lo spray QUATTROcare PLUS
- Semplicità di impiego e rapida esecuzione dei programmi
- Economica nel prezzo e nell'utilizzo

Codice mat. nr. 1.008.3805



## KaVo Spray

- Lubrificazione manuale degli strumenti e delle turbine
- E' efficace e consente di conservare il valore nel tempo

Codice mat. nr. 0.411.9640



## KaVo CLEANSpray / DRYspray

- Pulizia intensiva manuale per la rimozione dei residui, anche quelli ematici, all'interno degli strumenti

Codice mat. nr. 1.007.0573



# Il supporto KaVo per i vostri prodotti.

Gli standard più elevati richiedono il servizio migliore: un reparto di assistenza dedicato gestito da esperti riservato agli utilizzatori di strumenti KaVo garantisce un' interazione rapida e professionale per tutte le vostre necessità. Potete sempre contare sul Servizio di assistenza KaVo. Che si tratti di parti di ricambio, di consigli tecnici, di seminari o di un semplice parere. Saremo felici di potervi aiutare.



Helpdesk



Corsi di perfezionamento/seminari



Parti di ricambio



Ricambi completi



Servizio di riparazione

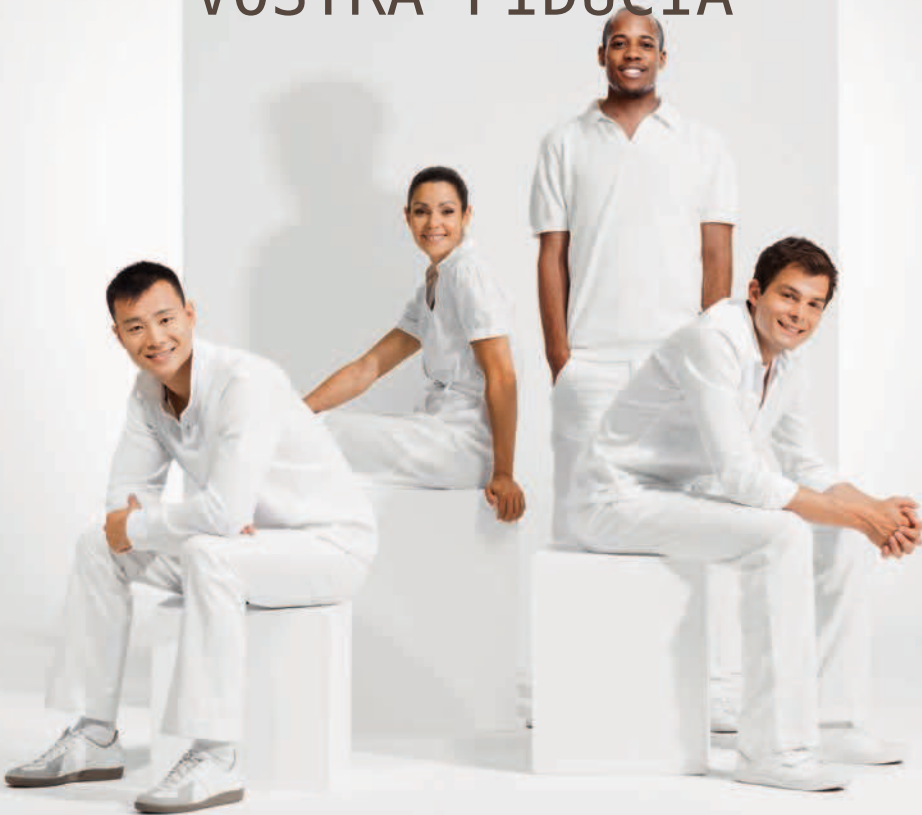


Studi scientifici



Report degli utilizzatori

## DALLA VOSTRA PARTE PER MERITARCI LA VOSTRA FIDUCIA



Per maggiori informazioni  
Fax al numero:  
**010 8332 210**

☐ Sono interessato alla serie di strumenti KaVo MASTERmatic.  
Vi prego di volermi contattare.

Ragione Sociale/Cognome e Nome

Indirizzo

CAP/Località

Telefono

Fax

E-mail

Codice Cliente KaVo

Data, firma



Maggiori informazioni sul sito  
[www.kavo.com/mastermatic](http://www.kavo.com/mastermatic)

| Serie MASTERmatic          | Descrizione      | Codice mat. |
|----------------------------|------------------|-------------|
| MASTERmatic LUX M25 L      | Contrangolo 1: 5 | 1.009.3630  |
| MASTERmatic LUX M05 L Mini | Contrangolo 1: 5 | 1.009.3640  |
| MASTERmatic LUX M07 L      | Gambo 2,7:1      | 1.009.3610  |
| MASTERmatic LUX M20 L      | Gambo 1:1        | 1.009.3620  |
| MASTERmatic LUX M29 L      | Gambo 7,4:1      | 1.009.3580  |
| MASTERmatic LUX M10 L      | Manipolo 1:1     | 1.009.3570  |

| Testine INTRA LUX         | Descrizione                                                                                                                                     | Codice mat. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Testina INTRA L68         | Trasmissione 1:1                                                                                                                                | 1.008.1833  |
| Testina INTRA L68 B       | Trasmissione 1:1                                                                                                                                | 1.008.1834  |
| Testina INTRA L67         | Riduzione 2:1                                                                                                                                   | 1.008.1832  |
| Testina INTRA L66 B       | Riduzione 3:1                                                                                                                                   | 1.008.1831  |
| Testina INTRA L80         | Trasmissione 1:1, fresa FG                                                                                                                      | 1.004.4456  |
| Testina Mini INTRA L52    | Trasmissione 1:1                                                                                                                                | 1.008.1825  |
| Testina INTRA Prophyl L31 | Riduzione 2:1 per snap on e screw on                                                                                                            | 1.008.1824  |
| Testina INTRA EVA L61 R   | Corsa smorzata di 0,8 mm, 36 impostazioni                                                                                                       | 1.008.1829  |
| Testina INTRA EVA L61 G   | Corsa smorzata di 0,8 mm, rotazione libera                                                                                                      | 1.008.1828  |
| Testina INTRA Endo L3     | Rotazione alternata di 60°                                                                                                                      | 1.008.1822  |
| Testina INTRA Endo L3 Y   | Corsa di 0,4 mm                                                                                                                                 | 1.008.1823  |
| Testina INTRA Endo L53    | Rotazione alternata di 60°                                                                                                                      | 1.008.1826  |
| Testina INTRA L62         | Riduzione 10:1                                                                                                                                  | 1.008.1830  |
| Testina Micro INTRA L22   | Con dimensioni estremamente ridotte per interventi di microchirurgia, ad es. resezione dell'apice della radice dentale (tramite finestra ossea) | 1.008.1835  |



**KaVo. Dental Excellence.**

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban