

Uusi KaVo MASTERmatic -sarja.

ELÄ

VAATIMUKSIESI
MUKAISESTI



KaVo. Dental Excellence.

KaVo MASTERmatic -sarja. Koe vaatimuksiesi täyttyvän.

Parhaat lopputulokset. Eliniän verran.

Nauti optimaalisista käyttömahdollisuuksista ja huipputarkkuudesta kaikissa hoitotilanteissa. Uusi instrumenttisarja KaVo MASTERmatic.

GENTLEpower -sarja on löytänyt arvokkaan seuraajansa 10 vuoden huipulla olon jälkeen. Saksalaisen insinööritaidon taidonnäyte yhdistää uudet innovaatiot entisiin parhaiksi todettuihin ominaisuuksiin.

Korkeaa laatua ilman kompromisseja – KaVo MASTERmatic sarja tarjoaa sinulle mahdollisuuden toteuttaa kaikki toiveesi. Haluat vain parasta? Nyt vaatimuksistasi tulee totta.

KaVo MASTERmatic -sarjan uusi muotoilukieli saa jatkoa optimoituista ominaisuuksista. Esimerkiksi punaisen instrumentin kulmapää pienennettiin 20 % ilman, että voima väheni. Koe helppo käsittely ja voima. Luotettavaksi osoittautunutta tekniikka järkevästi jalostettuna, esim. vaihdettava spraysuodatin.

KaVon tunnettu periaate vaihdettavista kulmapäistä säilytettiin. Vaihda pää tarvittaessa nopeasti ja jatka heti työskentelyä. Tai yhdistä runkoja ja päitä tarpeidesi mukaisesti.

Luonollisesti aiempia INTRA LUX -päitä ja GENTLEpower -runkoja voidaan yhdistellä uusien komponenttien kanssa.

KaVo master
series



PARAS KÄSITTELY JA NÄKYVYYS

- Pienemmät kulmapäät
- Pieni pää ja 100° kulma antaa työskentelytilaa
- Optimaalinen valon suuntaus

MAKSIMI TARKKUUS

- Triple-Gear-teknologia
- Huippuvarma porakiinnitys
- Erittäin ergonominen

AINA LUOTETTAVA

- KaVon pitkäikäisyyttä
- Made in Germany
- Monipuolinen jatkuva testaus
- Vaihdettavat kulmapäät

Punainen M25 L /M05 L Mini – pieni pää, suuri ero.

KaVo MASTERmatic M25 L.

Yhdistelmä päänkoko, kulmayhdistelmä, kovametalliohjaus, Triple Gear ja vaihdettava spraysuodatin takaavat, että käsissäsi on markkinoiden paras punainen kulmakappale.

- Paras näkyvyys pään pienempien mittojen ja parannetun näkökulman ansiosta (H = 13,5 mm; Ø = 10,3 mm)
- Äärimmäisen tasainen käynti Triple-Gear-teknologian ansiosta rentoon työskentelyyn ilman häiritseviä värinöitä
- Mukavuutta hoitajalle ja potilaalle takaa lähes äänetön toiminta hoidon aikana (55 dB(A))
- Enemmän tilaa KaVon patentoidun 100/19 asteen pää-/kulmayhdistelmän ansiosta
- Enemmän turvallisuutta: vaihdettava spray-mikrosuodatin takaa optimaalisen jäähdytyksen ja estää lämmön vioittamasta hammasta
- **Nyt uutta MASTERmatic –valikoimassa:**
nopeuttava M05 L minipäällä erityisesti lyhytvartisiin poriin (16,5 mm). Paljon etua, varsinkin jos kysymyksessä on vaikeasti käsiteltävät alueet, kuten esim. lapsien ja vanhusten kohdalla.

M25 L Mat.-nro. 1.009.3630
M05 L Mini Mat.-nro. 1.009.3640

Kulmapään kokovertailu



* Päänkoot verrattuna suosittuun punaiseen kulmakappaleeseen
KaVo GENTLEpower 25 LP

Sisäiset arvot ratkaisevat.

Paras näkyvyys pään erittäin pienen koon ansiosta

3-aukkoinen jäähdytys, hienojakoinen suihke
optimaaliseen jäähdytykseen

Lasikuituoptiikan tuottama jopa 25 000 LUXin
valoteho preparaation rajojen varmaan tunnistukseen

Pienempi äänenvoimakkuus, miltei värinätön käynti
hoidon aikana (55 dB(A))

Äärimmäisen tasainen käynti Triple-Gear-teknolo-
gian ansiosta ilman häiritseviä värinöitä

KaVo Plasmatec-pinnoitus täydelliseen pitoon ja
erinomaiseen hygieniaan

Vaihdettava spray-mikrosuodatin
aina tehokkaaseen ja häiriöttömään
jäähdytykseen

Huipputekniikkaa edustava FG-kiinnitys takaa pitkän
käyttöiän ja parhaan luotettavuuden

KaVo-painonappikiinnitys, jossa on jopa 30 N pitovoima
poranterän varmaan ja voimakkaaseen pitoon

KaVo:n alkuperäinen keraaminen kuulalaakerointi takaa
keskitasoa huomattavasti pidemmän käyttöiän
sekä miltei tärinättömän käytön

KaVon patentoitu 100/19 asteen pää-/kulma-
kulmayhdistelmä takaa täysin vapaan näkyvyyden
ja liikkumavapauden.

Lämpödesinfioitava ja
steriloitavissa korkeintaan 135 °C:ssa

Asennettavissa kaikkiin KaVo INTRAmatic LUX –moottoreihin ja
moottoreihin, normin ISO 3964 /
DIN 13940 mukaisesti.

KaVo MASTERmatic runko-osat – rajattoman monipuoliset.

Kokoa instrumenttisi täysin toiveittesi mukaisesti. Kulmakappaleidemme erilliset rungot kaikissa saatavilla olevissa välityssuhteissa tarjoavat tähän parhaan mahdollisen perustan. Yhdistä nämä toivottuun INTRA-kulmapäähän. Ja näin sinulla on henkilökohtainen, optimaalinen ratkaisusi.



KaVo MASTERmatic LUX M20 L

- Välityssuhde 1:1
- Lasisauva-valonjohdin maks. 25 000 luksia
- **Vastaanoton vakiotuote** kariuksen preparointiin
- Vaihdeettava spraysuodatin
- **Maksimaalisen joustavaa hoitoa** – 14 erilaista vaihtopäätä

Tuotenumro 1.009.3620



KaVo MASTERmatic LUX M07 L

- Välityssuhde 2,7:1
- Lasisauva-valonjohdin maks. 25 000 luksia
- Kariuksen ekskavointiin ja profylaksi käyttöön
- Vaihdeettava spraysuodatin
- **Maksimaalisen joustavaa hoitoa** – 14 erilaista vaihtopäätä
- **Sopii** kaikkiin INTRA LUX –kulmapäihin.

Tuotenumro 1.009.3610



KaVo MASTERmatic LUX M29 L

- Välityssuhde 7,4:1
- Lasisauva-valonjohdin maks. 25 000 luksia
- Erityisesti Endo-sovelluksiin
- Vaihdeettava spraysuodatin
- **Maksimaalisen joustavaa hoitoa** – 14 erilaista vaihtopäätä
- **Sopii** kaikkiin INTRA LUX –kulmapäihin.

Tuotenumro 1.009.3580



KaVo MASTERmatic LUX M10 L

- Sekä käsi- että kulmakappaleporiin
- Lasisauva-valonjohdin maks. 25 000 luksia
- Myös kevyihin suun ulkopuolisiin teknisiin töihin, kuten proteesien korjauksiin

Tuotenumro 1.009.3570

KaVo INTRA –kulmapäät – teräksistä nerokkuutta.

65 % kovempi kuin aiemmin ja kaksinkertaisesti enemmän muodonkestävämpää kuin titaani. Tässä KaVon uudet INTRA-kulmapäät – parhaimmat ja pitkäikäisemmät, mitä on koskaan ollut:

- Pitkäikäiset – kiitos uusimman erikoisjaloteräksen
- Hygieeniset – saumoja ja särmiä on vähennetty
- Luotettavat – parasta KaVo-laatua ja 2 vuoden takuu
- Kaikki mahdollisuudet – 14 vaihtopäätä kaikkiin indikaatioihin



Käytössä investoit ainoastaan yhteen instrumenttipäähän (toista runkoa ei tarvita) ja säästät näin joka kerta jopa

500,- €!

14 vaihtopäätä joustavaan käyttöön.

Mitä ikinä haluat, laajan INTRA -kulmapää-
valikoimamme ansiosta sinulla on aina ihanteellinen
pää käytettävissäsi. Valitse toivomasi pää ja yhdistä
se kulmakappaleen alaosaan. Kaikkiin sovelluksiin,
parhaaseen lopputulokseen.

M07 L

- GENTLEpower LUX , runko 2,7:1 valolla
- Sisäinen jäähdytys
- Plasmatec-pinnoitus



Helppo vaihtaa: KaVo INTRA -kulmapäät sopivat kaikkiin KaVon runkoihin.

STANDARDIPREPARATIO

Ihanteellinen kavitaatio- ja kruunupreparaatioon,
loppukäsittelyyn ja ekskavointiin.

M20 L (1:1)


M07 L (2,7:1)



PROFYLAKSIA

Täydellistä yhteistyötä kaikkien mahdollisten kiillotuspäiden ja -elementtien välillä

M07 L (2,7:1)

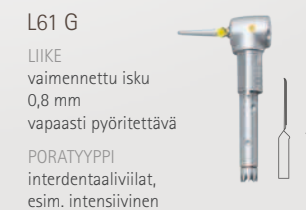

KIRURGINEN HOITO

Erittäin pieni koko mikrokirurgisia
toimenpiteitä varten

M20 L (1:1)




ENDODONTIA

Endodontia-sovellukseen yhdessä tuotteiden
KaVo ESTETICA® E80, E70 tai E50 kanssa

M29 L (7,4:1)

M20 L (1:1)

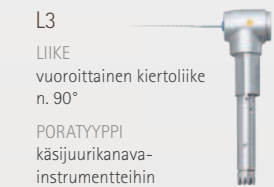

KaVo -hygiena. Instrumenttiesi edullinen kunnossapito.

KaVo QUATTROcare PLUS 2124 A

- Optimaalista laatua tarjoaa QUATTROcare PLUS ja Spray
- Helppoa ja mukavaa työskentelyä ohjelman nopeampi prosessointi
- Vähäiset hankinta- ja käyttökustannukset

Tuotenro 1.008.3805



KaVo Spray

- Instrumenttien ja turbiinien manuaalinen kunnossapito
- Tehokas ja arvon säilyttävä

Tuotenro 0.411.9640



KaVo CLEANspray / DRYspray

- Manuaalinen intensiivinen puhdistus jäännösproteiinin poistoon

Tuotenro 1.007.0573



KaVo palvelut tuotteillesi.

Korkeimmat vaatimukset tarvitsevat parhaan palvelun – KaVon instrumenttien asiantuntijoiden ylläpitämä Hotline-palvelu takaa nopean ja ammattimaisen tuen kaikkien kysymysten kohdalla. Nauti lisäksi laajasta KaVo-huollostamme. Olipa kyseessä nopeasti käytettävissä olevat varaosat, ajankohtaiset tutkimukset, käyttäjäystävälliset seminaarit tai edulliset vaihto-osat. Iloitsemme aina, kun voimme auttaa sinua.



Tekninen asiakaspalvelu



Jatkokoulutus/seminaarit



Varaosat



Vaihto-osat



Korjauspalvelu



Tutkimukset



Käyttäjäkokeemukset

YHTEISTYÖN JA LUOTTAMUKSEN MERKEISSÄ



Lisätietoa saat faksilla numerosta: +49 7351 56 1674

- ☐ Olen kiinnostunut KaVo MASTERmatic -instrumenttisarjasta.
Olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä minuun.

Nimi _____

Osoite _____

Paikka/aika _____

Puhelin _____

Faksi _____

Sähköposti _____

KaVo asiakasnumero _____

Päiväys, allekirjoitus _____



Lisätietoa, ks.
www.kavo.com/mastermatic

MASTERmatic Series	Tuotteen kuvaus	Mat.-nro.
MASTERmatic LUX M25 L	1: 5 kulmakappale	1.009.3630
MASTERmatic LUX M05 L Mini	1: 5 kulmakappale	1.009.3640
MASTERmatic LUX M07 L	2,7:1 alaosa	1.009.3610
MASTERmatic LUX M20 L	1:1 alaosa	1.009.3620
MASTERmatic LUX M29 L	7,4:1 alaosa	1.009.3580
MASTERmatic LUX M10 L	1:1 Käsikappale	1.009.3570

INTRA LUX -kulmapäät	Tuotteen kuvaus	Mat.-nro.
INTRA-kulmapää L68	1:1 välityssuhde	1.008.1833
INTRA kulmapää L68 B	1:1 välityssuhde	1.008.1834
INTRA-kulmapää L67	2:1 redusointi	1.008.1832
INTRA kulmapää L66 B	3:1 redusointi	1.008.1831
INTRA-kulmapää L80	1:1 välityssuhde, FG-jännite	1.004.4456
INTRA Mini kulmapää L52	1:1 välityssuhde	1.008.1825
INTRA Prophy -kulmapää L31	2:1 redusointi: snap on screw on	1.008.1824
INTRA EVA kulmapää L61 R	Vaimennettu isku 0,8 mm, 36 lukitusasetusta	1.008.1829
INTRA EVA kulmapää L61 G	Liikevaimennettu isku 0,8 mm, vapaasti pyörivä	1.008.1828
INTRA Endo kulmapää L3	Vuoroittainen kiertoliike 60°	1.008.1822
INTRA Endo kulmapää L3 Y	Iskuliike 0,4 mm	1.008.1823
INTRA Endo kulmapää L53	Vuoroittainen kiertoliike 60°	1.008.1826
INTRA-kulmapää L62	10:1 redusointi	1.008.1830
INTRA Mikro kulmapää L22	Erittäin pieni mitoitus mikrokirurgisiin toimenpiteisiin, kuten esim. hampaan juurenkärjen poistoleikkauksiin (luikkunan kautta)	1.008.1835



KaVo. Dental Excellence.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban