

KaVo MASTERmatic-serien

Den nye KaVo MASTERmatic-serie.

**GØR DIT BEDSTE  
DINE MÅLSÆTNINGER**



KaVo. Dental Excellence.

# KaVo MASTERmatic-serien. Lev op til dine målsætninger.

## Optimale resultater. Hele livet.

Nyd godt af optimal tilgang og maksimal præcision i alle tænkelige behandlingssituationer, med den nye instrumentserie KaVo MASTERmatic.

Efter mere end 10 år som markedsførende produkt finder GENTLEpower-programmet nu sin banebrydende efterfølger. Dette nye benchmark i tysk ingeniørkunst forener innovationsånd med de bedste egenskaber, der utallige gange har bevist deres værd, i én serie. KaVo MASTERmatic-serien er fremstillet i kompromisløs kvalitet, så du kan udnytte hele dit potentiale. Er kun det bedste godt nok? Så indfri dine høje forventninger nu.

Det nye designsprog i KaVo MASTERmatic-serien videreføres med betydeligt optimerede egenskaber. Således er hovedstørrelsen på den legendære hurtigløber blevet reduceret med 20 % uden at gå på kompromis med kraften. Dermed opnår du den nødvendige tilgang kombineret med den ønskede kraft. Afprøvede milepæle inden for teknikken er anvendt og forfinet hensigtsmæssigt, f.eks. det udskiftelige sprayfilter.

Apropos udskiftning: Det kendte KaVo-princip med de udskiftelige hoveder er bevaret. Udskift ved behov hovedet på ingen tid, så du kan arbejde videre med det samme. Eller kombinér underdele og hoveder efter dine individuelle krav.

Ældre INTRA LUX-hoveder og GENTLEpower-underdele er naturligvis kompatible med de nye komponenter.

**KaVo master**  
series



## OPTIMAL TILGANG OG OVERBLIK

- Mindre hoveder
- Optimal vinkelkombination
- Lyspositionering

## MAKSIMAL PRÆCISION

- Triple-gear-teknologi
- Hårdmetalføring
- Ultra ergonomisk

## ENESTÅENDE PÅLIDELIGHED

- KaVo levedygtighed
- Made in Germany
- Omfattende kontinuerlige test
- Udskiftelige hoveder

# M25 L /M05 L Mini – Lille hoved, stor forskel.



## KaVo MASTERmatic M25 L.

Kombinationen af hovedstørrelse, vinkelkombination, hårdmetal-føring, triple gear og udskifteligt sprayfilter fører til det bedste opgearingsvinkelstykke på markedet.

- Optimalt overblik takket være reducerede hovedmål og forbedret synvinkel (H = 13,5 mm; Ø = 10,3 mm)
- Meget rolig gang på grund af triple-gear-teknologi til komfortabelt arbejde uden forstyrrende vibrationer
- Komfortabel for behandler og patient på grund af meget lav lydstyrke under behandling (55 dB(A))
- Større bevægelsesfrihed takket være den patenterede KaVo 100°/19° hoved-/knævinkelkombination
- Større sikkerhed: Udskifteligt spray-mikrofilter garanterer optimal køling og forhindrer termisk beskadigelse af tanden
- **Nyhed i MASTERmatic-sortimentet:**  
M05 L med minihoved særligt til bør med kort skaft (16,5 mm). Stor fordel ved særligt vanskeligt tilgængelige områder, f.eks. ved behandling af børn og ældre.

M25 L mat.-nr. 1.009.3630  
M05 L Mini mat.-nr. 1.009.3640

### Hovedvolumen i sammenligning



\* Hovedstørrelser sammenlignet med verdens mest populære opgearingsvinkelstykke KaVo GENTLEpower 25 LP

# Det kommer an på de indre værdier.

- Meget små hovedmål til optimalt overblik, også ved komplekse præparationer i kindtandsområdet
- 3-dyse-spray med meget fin spraybefugtning til optimal køling
- Glasstavs-lysleder med op til 25.000 lux til sikker identifikation af præparationsgrænserne
- Lav lydstyrke, vibrationssvag gang under behandling (55 dB(A))
- Triple-gear-teknologi til meget rolig gang uden forstyrrende vibrationer
- KaVo Plasmatec-belægning til perfekt greb og fremragende hygiejne
- Udskifteligt spray-mikrofilter til en konstant effektiv og forstyrrelsesfri spraykøling
- Hightech-FG-spændetang til meget lang levetid og pålidelighed
- KaVo trykknop-spændesystem med op til 30 N holdekraft til et sikkert og kraftfuldt greb ved boret med betjeningskomfort
- KaVo original-keramik-kugleleje til usædvanlig lang levetid samt fremragende vibrationssvag gang
- Patenteret KaVo 100°/19° hoved-/knævinkelkombination til optimalt overblik og bevægelsesfrihed
- Kan termodesinficeres og steriliseres ved op til 135 °C
- Kan sættes på alle KaVo INTRAmatic LUX-motorer og motorer med tilslutning iht. ISO 3964 / DIN 13940

## KaVo MASTERmatic underdele – alsidig uden begrænsninger.

Sammensæt dit instrument helt efter eget ønske. Vores vinkelstykke-underdele med alle almindelige overførsels-hastigheder er den bedste forudsætning for dette. Kombiner disse med det ønskede INTRA-hoved. Nu har du din personlige - optimale løsning.



### KaVo MASTERmatic LUX M20 L

- Overførsel 1:1
- Glasstavs-lyseleder op til 25.000 lux
- **Praksis-standard** for karies-ekskavering
- Udskifteligt sprayfilter
- **Maksimal behandlingsfleksibilitet** og -muligheder med 14 skiftehoveder

Mat.-nr. 1.009.3620



### KaVo MASTERmatic LUX M07 L

- Reduktion 2,7:1
- Glasstavs-lyseleder op til 25.000 lux
- Til kariesekskavering og profylakse-anvendelser
- Udskifteligt sprayfilter
- **Maksimal behandlingsfleksibilitet** og -muligheder med 14 skiftehoveder
- **Kompatibel** med alle INTRA LUX-hoveder

Mat.-nr. 1.009.3610



### KaVo MASTERmatic LUX M29 L

- Reduktion 7,4:1
- Glasstavs-lyseleder op til 25.000 lux
- Særligt til Endo-anvendelser
- Udskifteligt sprayfilter
- **Maksimal behandlingsfleksibilitet** og -muligheder med 14 skiftehoveder
- **Kompatibel** med alle INTRA LUX-hoveder

Mat.-nr. 1.009.3580



### KaVo MASTERmatic LUX M10 L

- Både til håndstykke- og til vinkelstykkebor
- Glasstavs-lyseleder op til 25.000 lux
- Også til lette **ekstraorale teknikker** såsom protesekorrektioner

Mat.-nr. 1.009.3570

## KaVo INTRA-hoveder – suveræn ståludførelse.

65 % hårdere end hidtil og dobbelt så deformationsbestandig som titan. Det er de nye KaVo INTRA-hoveder – de bedste og mest robuste nogensinde:

- Lang levetid – takket være anvendelse af topmoderne specialædelstål
- Hygiejnisk – på grund af reduktion af spalter og kanter
- Pålidelig – bedste KaVo-kvalitet og 2 års garanti
- Ubegrænsede muligheder – 14 skiftehoveder til alle indikationer



Ved specialanvendelser investerer du kun i ét instrumenthoved (et yderligere vinkelstykke behøves ikke!) og sparer derved hver gang op til

**4.600,- Kr**

# 14 skiftehoveder for bedste fleksibilitet.

I vores brede INTRA-hovedsortiment finder du altid det optimale hoved til dit behov. Vælg det ønskede hoved og kombinér dette med en vinkelstykke-underdel. Til alle anvendelser, for optimale resultater.

## M07 L

- Reduktionsunderdel 2,7:1 med lys
- Indvendige adskilte kølemedier
- Plasmatec-belægning



Enkel udskiftning: KaVo INTRA-hoveder passer til alle KaVo-underdele

## STANDARDPRÆPARATION

Ideel til kavitets- og kronepræparation, til finish og ekskavering

M20 L (1:1)

M07 L (2,7:1)

L68  
OVERFØRSEL  
1 : 1  
MAKS. OMDREJNINGSTAL  
40.000  
BORTYPE  
vinkelstykkebor  
2,35 mm




L66 B  
OVERFØRSEL  
3 : 1  
MAKS. OMDREJNINGSTAL  
13.300  
BORTYPE  
vinkelstykkebor  
2,35 mm



L80  
OVERFØRSEL  
1 : 1  
MAKS. OMDREJNINGSTAL  
40.000  
BORTYPE  
FG-bor  
1,6 mm



L52 Mini  
OVERFØRSEL  
1 : 1  
MAKS. OMDREJNINGSTAL  
40.000  
BORTYPE  
vinkelstykkebor  
2,35 mm

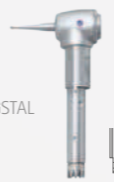

L68 B  
OVERFØRSEL  
1 : 1  
MAKS. OMDREJNINGSTAL  
40.000  
BORTYPE  
vinkelstykkebor  
2,35 mm



L67  
OVERFØRSEL  
2 : 1  
MAKS. OMDREJNINGSTAL  
20.000  
BORTYPE  
vinkelstykkebor  
2,35 mm



## PROFYLAKSE

Samvirker optimalt med alle gængse børster og poleringskopper

M07 L (2,7:1)

L31  
OVERFØRSEL  
2 : 1  
MAKS. OMDREJNINGSTAL  
ca. 3.000  
BORTYPE  
Poleringskopper og børster



L61 R  
BEVÆGELSE  
dæmpet slag  
0,8 mm  
36 indgrebspositioner  
BORTYPE  
Interdentalfile,  
f.eks. intensiv



L53  
BEVÆGELSE  
skiftevis drejbe-  
vægelse  
på ca. 60°  
BORTYPE  
vinkelstykkebor  
2,35 mm



L61 G  
BEVÆGELSE  
dæmpet slag  
0,8 mm  
frit drejelig  
BORTYPE  
Interdentalfile,  
f.eks. intensiv




## KIRURGI

Ekstremt små dimensioner til mikro-kirurgiske indgreb

M20 L (1:1)

L22  
OVERFØRSEL  
1 : 1  
MAKS. OMDREJNINGSTAL  
20.000  
BORTYPE  
Rosenbor  
hhv. U-kegle-bor  
str. 0 og 2

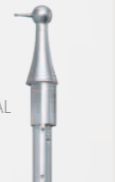

## ENDODONTI

Til endodonti-anvendelse i forbindelse med KaVo ESTETICA® E80, E70 eller E50

M29 L (7,4:1)


L53  
BEVÆGELSE  
skiftevis drejbe-  
vægelse  
på ca. 60°  
BORTYPE  
Til rodkanal-  
instrumenter 2,35 mm



L3  
BEVÆGELSE  
skiftevis drejbe-  
vægelse  
på ca. 90°  
BORTYPE  
Til håndrodkanal-  
instrumenter



L3 Y  
BEVÆGELSE  
0,4 mm slagbevægelse  
BORTYPE  
Til håndrodkanal-  
instrumenter

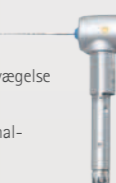

L62  
OVERFØRSEL  
10 : 1  
MAKS. OMDREJNINGSTAL  
540  
BORTYPE  
Til rodkanal-  
instrumenter  
2,35 mm



M20 L (1:1)

L68 B  
OVERFØRSEL  
1 : 1  
MAKS. OMDREJNINGSTAL  
40.000  
BORTYPE  
vinkelstykkebor  
2,35 mm



L66 B  
OVERFØRSEL  
3 : 1  
MAKS. OMDREJNINGSTAL  
13.300  
BORTYPE  
vinkelstykkebor  
2,35 mm



# KaVo-hygiejne. Pleje til dine instrumenter til en fornuftig pris.

## KaVo QUATTROcare PLUS 2124 A

- Optimal plejekvalitet med QUATTROcare PLUS og spray
- Nem, komfortabel håndtering og hurtigt programgennemløb
- Lave omkostninger til anskaffelse og forbrugsmateriale

Mat.-nr. 1.008.3805



## KaVo Spray

- Manuel pleje af instrumenter og turbiner
- Effektiv og værdibevarende

Mat.-nr. 0.411.9640



## KaVo CLEANspray / DRYspray

- Manuel intensivrengøring til fjernelse af restprotein

Mat.-nr. 1.007.0573



# KaVo-serviceydelser til dine produkter.

Høje krav behøver topservice – en særlig ekspert-hotline til KaVo-instrumenter garanterer sagkyndig og hurtig assistance ved alle dine henvendelser. Nyd derudover godt af vores omfattende KaVo-service. Uanset om det drejer sig om reservedele, der kan leveres hurtigt, aktuelle studier, brugervenlige seminarer eller prisfordelagtige udskiftningsdele. Vi glæder os til at høre fra dig.



Teknisk hotline



Videreuddannelse/seminarer



Reservedele



Udskiftningsdele



Reparationservice



Studier



Anvendelsesrapporter

## DIN PÅLIDELIGE PARTNER



Send en fax for at modtage yderligere information til:

**+49 7351 56-1674**

Jeg er interesseret i at høre mere om KaVo MASTERmatic-instrumentserien. Vær venlig at kontakte mig.

Navn \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Postnummer/by \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

KaVo-kundenummer \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Dato, underskrift



Læs mere på:  
[www.kavo.com/mastermatic](http://www.kavo.com/mastermatic)

MASTERmatic Series	Beskrivelse	Mat.-nr.
MASTERmatic LUX M25 L	1: 5 vinkelstykke	1.009.3630
MASTERmatic LUX M05 L Mini	1: 5 vinkelstykke	1.009.3640
MASTERmatic LUX M07 L	2,7:1 underdel	1.009.3610
MASTERmatic LUX M20 L	1:1 underdel	1.009.3620
MASTERmatic LUX M29 L	7,4:1 underdel	1.009.3580
MASTERmatic LUX M10 L	1:1 håndstykke	1.009.3570

INTRA LUX-hoveder	Beskrivelse	Mat.-nr.
INTRA-hoved L68	1:1 overførsel	1.008.1833
INTRA-hoved L68 B	1:1 overførsel	1.008.1834
INTRA-hoved L67	2:1 reduktion	1.008.1832
INTRA hoved L66 B	3:1 reduktion	1.008.1831
INTRA-hoved L80	1:1 overførsel FG-spænding	1.004.4456
INTRA Mini hoved L52	1:1 overførsel	1.008.1825
INTRA Prophyl-hoved L31	2:1 reduktion til "snap on screw on"	1.008.1824
INTRA EVA hoved L61 R	Dæmpet slag på 0,8 mm, 36 indgrebspositioner	1.008.1829
INTRA EVA hoved L61 G	Dæmpet slag på 0,8 mm, frit drejelig	1.008.1828
INTRA Endo hoved L3	Skiftevis drejbevægelse på 60°	1.008.1822
INTRA Endo hoved L3 Y	Slagbevægelse på 0,4 mm	1.008.1823
INTRA Endo hoved L53	Skiftevis drejbevægelse på 60°	1.008.1826
INTRA-hoved L62	10:1 reduktion	1.008.1830
INTRA Mikro hoved L22	Med ekstremt små dimensioner til mikrokirurgiske indgreb som f.eks. rodspidsresektion (gennem knoglevindue)	1.008.1835



**KaVo. Dental Excellence.**

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban