


**3M** Science.  
Applied to Life.™

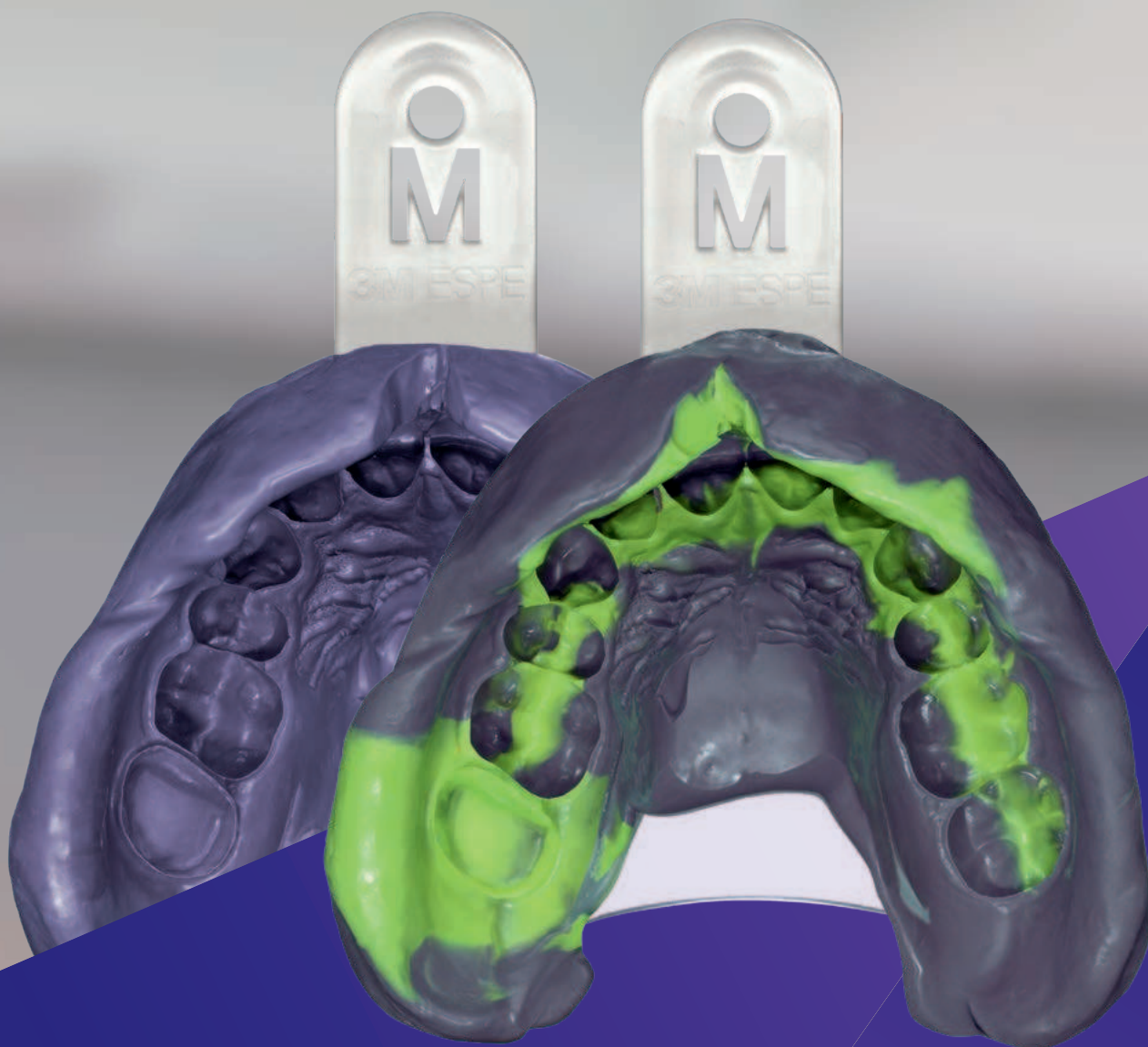

**3M™ Impregum™ Super Quick**  
Polyether Abformmaterial


**Alle Details in 2 Minuten?  
Ja, das geht!**

# 3M™ Impregum™ Super

## Ihr schnellster Weg zu höchster Präzision bei kleineren Res

Impregum Polyether Abformmaterial hat sich als zuverlässige Lösung für komplexe Fälle und Implantatabformungen bewährt. Wäre es nicht großartig, wenn Sie von derselben erstklassigen Präzision und Detailwiedergabe auch bei der Herstellung von Einzelzahnversorgungen profitieren könnten?

Um Ihnen exakte Detailwiedergabe und gleichzeitig eine kurze Mundverweildauer zu bieten, wurde das neue Impregum Super Quick Polyether Abformmaterial entwickelt.

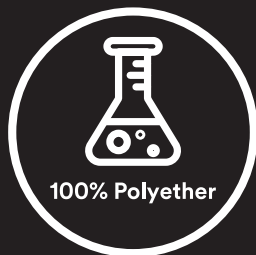

### **Bewährte Präzision. Schnelleres Abbinden.**

So schnell, so gut: Mit einer Abbindezeit von nur 2 Minuten ermöglicht Ihnen das neue „Super Quick“ schnellere Abformungen auch bei kleineren Arbeiten wie Einzelkronen, Einzelimplantaten, Inlays/Onlays und kleineren Brücken bis zu 3 Einheiten.

### **Entwickelt für Ihren Erfolg.**

Die neue Polyether-Rezeptur „made in Seefeld“ vereint erstklassige Präzision mit der Geschwindigkeit von A-Silikon.

### **Erhöht den Patientenkomfort.**

Durch den verbesserten, frischen Minzgeschmack und die verkürzte Mundverweildauer wird die Abformung für den Patienten angenehmer.

### **Integriert sich mühelos in Ihren CAD/CAM-Workflow.**

Impregum Super Quick Abformmaterial lässt sich mit den gängigen aktuellen Scannern erfassen – für eine effizientere Zusammenarbeit mit Ihrem Labor.

# Quick. hster Polyether- taurationen.


„  
Schnelles Abbinden bei guter  
Detailwiedergabe auch bei nicht  
100% trockenen Verhältnissen  
und einem angenehmen Geschmack  
für den Patienten. “  
Dr. Peter Baur, Schweiz



Umspritzen des präparierten Stumpfes mit  
3M Impregum Super Quick Light-Body  
Abformmaterial in der 3M Intra-oral Syringe  
lila Einwegspritze.




Die Abformung gibt die Details exakt  
wieder – inklusive scharfer Darstellung  
der umlaufenden Präparationsgrenze.

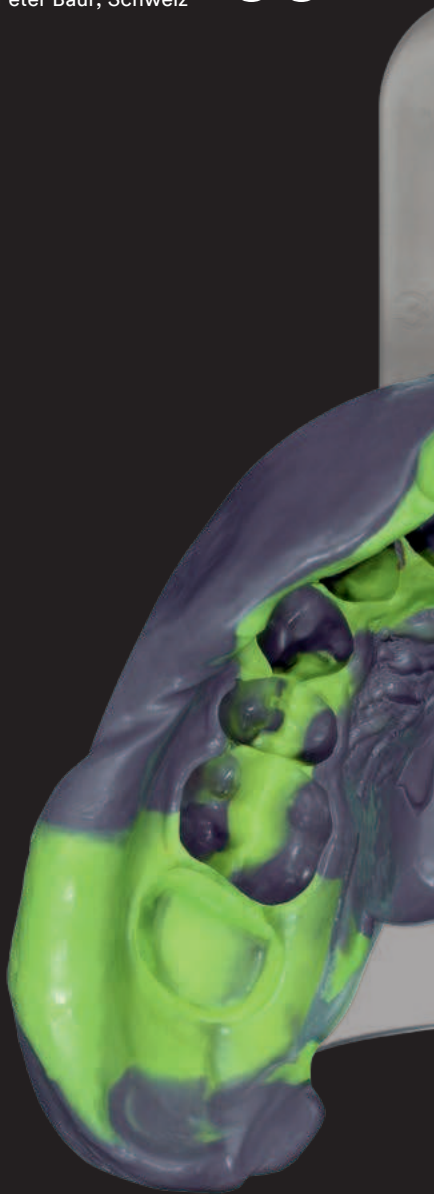

JETZT AUCH  
SUPERSCHNELLE  
**Polyether  
Präzision**  
als HEAVY BODY


## 3M™ Impregum™ Super Quick

- Der erste superschnelle Polyether mit 45 Sekunden Verarbeitungszeit und 2 Minuten Mundverweildauer
- Erhältlich als HEAVY-, MEDIUM- und LIGHT BODY-Konsistenz
- Geeignet für Monophase und Doppelmischtechnik
- Besonders geeignet für Einzelkronen, Einzelimplantate, Inlays/Onlays und kleinere Brücken (bis zu 3 Einheiten)

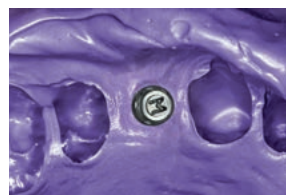


# 3M™ Impregum™ Polyether

## Bewährte Vorteile für verläss

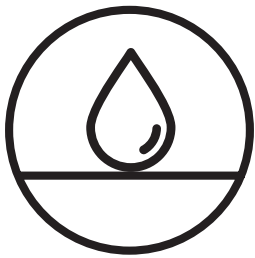


### Von Natur aus hydrophil.

Das sorgt für eine exakte Detailwiedergabe und blasenfreie Abformungen – ein entscheidender Vorteil besonders bei subgingivalen Präparationsrändern. Die intrinsische Hydrophilie von Polyethern erlaubt trotz Feuchtigkeit den direkten Kontakt mit dem Gewebe.

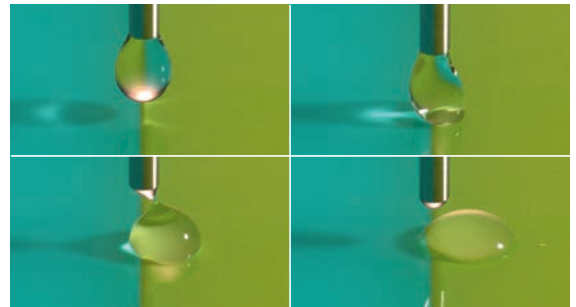

Die Oberfläche von 3M™ Impregum™ Polyether ist initial hydrophil, sodass im feuchten Milieu ein sofortiger Kontakt mit Zähnen und Gewebe entsteht. Der Vergleichstest mit einem A-Silikon beweist: Der Wassertropfen wird von Impregum™ Super Quick Abformmaterial – dem Material mit der höheren Hydrophilie (rechte Seite) – angezogen und bewegt sich sofort in Richtung des Materials.

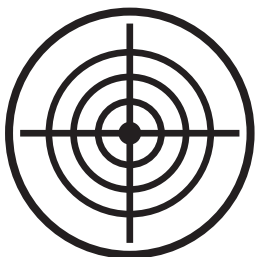

### Unübertroffene Präzision.

Dank der hervorragenden Fließeigenschaften von Impregum Polyether Abformmaterial erfassen Sie sogar kleinste Details: Es fließt verlässlich selbst an schwierige Stellen und liefert blasenfreie Abformungen von unübertroffener Präzision.




3M™ Impregum™ Polyether Abformmaterial fließt selbst in feinste Strukturen von Hart- und Weichgewebe um jedes wichtige Detail zu erfassen.



### Nehmen Sie sich ruhig Zeit.

Im Gegensatz zu A-Silikon zeigt Impregum Polyether Abformmaterial eine konstante Fließfähigkeit während der kompletten Verarbeitungszeit. Impregum beginnt erst dann abzubinden, wenn die Verarbeitungszeit endet. Das garantiert Ihnen eine exakte Detailwiedergabe und Abformungen ohne Verzüge.

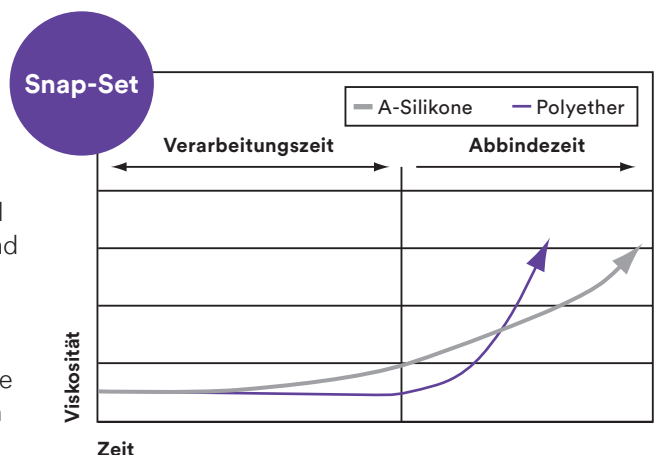

Im Gegensatz zu A-Silikon zeigt Polyether konstante Fließeigenschaften über die komplette Verarbeitungszeit – gefolgt von sofortigem Abbinden (schematische Darstellung).

# Abformmaterial. liche Präzision.



## Vertrauen

Eine zuverlässige Marke – mit Vorteilen für alle Beteiligten.

- Spart Ihnen **Zeit und Geld**, da Sie auf Anhieb präzise Ergebnisse erzielen.
- **Sorgt** durch exakte Detailwiedergabe für eine **effiziente Zusammenarbeit** zwischen Ihnen und Ihrem Labor.
- Bietet einen **erhöhten Patientenkomfort**.

## HIGHLY SATISFIED

Eine Studie mit 3M Impregum Super Quick Abformmaterial belegt:

**95%** der Teilnehmer sind **hochzufrieden** mit der **Präzision** der Abformungen und der **Passgenauigkeit** der finalen Restaurationen.



Quelle: 3M Field Evaluation mit 447 Teilnehmern aus Europa und den USA, 2017.

# Für zuverlässige, präzise und komfortable

Immer die richtige Wahl für Ihre Indikation  
und Technik.

Indikations- empfehlung		Abformtechnik	Einzelkrone	Implantat (≤ 2 Einheiten)	Inlay/onlay (≤ 2 Einheiten)	Brücke (≤ 3 Einheiten)	Veneer	Brücke (> 3 Einheiten)	Implantat (> 2 Einheiten)	Fixationsabformung	Funktionsabformung
<b>Super schnell abbindende Materialien</b>											
NEU	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (MB)	Monophase									
	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (MB or HB) 3M™ Impregum™ Super Quick (LB)	Doppelmisch	✓	✓	✓	✓					
<b>Schnell abbindende Materialien</b>											
	3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick (MB)	Monophase									
	3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick (HB) 3M™ Impregum™ L DuoSoft™ Quick (LB)	Doppelmisch	✓	✓	✓	✓	✓				
<b>Normal abbindende Materialien</b>											
	3M™ Impregum™ Penta™ Soft (MB)	Monophase									
	3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ (HB) 3M™ Impregum™ Penta™ L DuoSoft™ (LB) 3M™ Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ (LB)	Doppelmisch					✓	✓	✓	✓	✓
	3M™ Impregum™ Penta™ (MB)	Monophase					✓	✓	✓	✓	✓

# Abformungen.

Alles, was Sie brauchen, um das Abformen zu vereinfachen.



## Retrahieren

### 3M™ Adstringierende Retraktionspaste

Die schnelle und angenehme Art der gingivalen Retraction mit geringem Blutungsrisiko nach der Entfernung.



## Umspritzen & Mischen

### 3M™ Intra-oral Syringe lila Einwegspritze

Einfache und präzise Applikation von Umspritzmaterialien für eine exakte Dosierung.

### 3M™ Pentamix™ 3 Automatisches Mischgerät

Blasenfreies Mischen von Abformmaterialien in Höchstgeschwindigkeit.



## Abformen

### 3M™ Impregum™ Polyether Abformmaterial

Unerreichte Präzision für perfekt sitzende Restaurationen und weniger Korrekturen.
























### Das neue Impregum™ Super Quick Abformmaterial

Superschnelle 2-Minuten-Abbindezeit für beeindruckende Präzision bei kleineren Arbeiten.



### 3M™ Impression Tray Einweg-Abformlöffel

Gebrauchsfertiger Abformlöffel mit Retentionsvlies, der ohne zusätzliches Löffeladhäsiv auskommt.

	Mischverfahren	Viskosität niedrig  hoch	Technik	Verarbeitungszeit (Min:Sek)	Mundverweildauer (Min:Sek)
<b>Super schnell abbindende Materialien</b>					
3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (MB)			Monophase oder Doppelmisch	0:45	2:00
3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (HB)			Doppelmisch	0:45	2:00
3M™ Impregum™ Super Quick (LB)			Doppelmisch	0:45	2:00
<b>Schnell abbindende Materialien</b>					
3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick (HB)			Doppelmisch	1:00	3:00
3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick (MB)			Monophase	1:00	3:00
3M™ Impregum™ L DuoSoft™ Quick (LB)			Doppelmisch	1:00	3:00
<b>Normal abbindende Materialien*</b>					
3M™ Impregum™ Penta™ Soft (MB)			Monophase	1:45	4:15
3M™ Impregum™ Penta™ (MB)			Monophase	1:45	4:15
3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ (HB)			Doppelmisch	1:45	4:15
3M™ Impregum™ Penta™ L DuoSoft™ (LB)			Doppelmisch	1:45	4:15
3M™ Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ (LB)			Doppelmisch	1:45	4:15



## Bestellinformationen

Art.-Nr.	Produktinformation
<b>Super schnell abbindende Materialien</b>	
69383	<b>3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Intro Kit</b> 1 Basispaste à 300 ml, 1 Katalysator à 60 ml, 1 Impregum™ Penta™ Super Quick – Medium Body Kartusche für Pentamix™ 3, 10 Penta™ Mischkanülen rot, 1 3M™ Penta™ Elastomerspritze, 1 3M Polyether Adhesive rot – 17 ml, 3 Kapseln à 0,3g Adstringierende Retraktionspaste
69381	<b>3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body/Light Body Intro Kit</b> 1 Basispaste à 300 ml, 1 Katalysator à 60 ml, 2 Kartuschen Impregum Super Quick – Light Body à 50 ml, 1 Impregum™ Penta™ Super Quick – Medium Body Kartusche für Pentamix 3, 10 Penta Mischkanülen rot, 5 Intra-oral Einweg-spritzen lila, 5 Garant™ Mischkanülen lila, 5 Garant™ Applikationsdüsen weiß, 1 3M Polyether Adhesive rot – 17 ml, 3 Kapseln à 0,3 g Adstringierende Retraktionspaste, 6 Impression Trays (1 Einweg-Abformlöffel je Größe)
69413	<b>3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body/Light Body Intro Kit</b> 1 Basispaste à 300 ml, 1 Katalysator à 60 ml, 2 Kartuschen Impregum Super Quick – Light Body à 50 ml, 1 Impregum™ Penta™ Super Quick – Heavy Body Kartusche für Pentamix 3, 10 Penta Mischkanülen rot, 5 Intra-oral Einweg-spritzen lila, 5 Garant™ Mischkanülen lila, 5 Garant™ Applikationsdüsen weiß, 1 3M Polyether Adhesive rot – 17 ml, 3 Kapseln à 0,3 g Adstringierende Retraktionspaste, 6 Impression Trays (1 Einweg-Abformlöffel je Größe)
69404	<b>3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Upgrade Kit</b> 1 Basispaste à 300 ml, 1 Katalysator à 60 ml, 10 3M™ Penta™ Mischkanülen rot
69411	<b>3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body/Light Body Upgrade Kit</b> 1 Basispaste à 300 ml, 1 Katalysator à 60 ml, 1 Kartusche Impregum Super Quick – Light Body à 50 ml, 10 Penta Mischkanülen rot, 5 Intra-oral Einweg-spritzen lila, 5 Garant™ Mischkanülen lila, 5 Garant™ Applikationsdüsen weiß
69385	<b>3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Refill</b> 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
69406	<b>3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body Refill</b> 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
69379	<b>3M™ Impregum™ Super Quick Light Body Refill</b> 4 3M™ Kartuschen à 50 ml, 5 3M™ Intra-oral Einwegspritzen lila, 5 3M™ Garant™ Mischkanülen lila
69405	<b>3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Value Pack</b> 6 Basispaste à 300 ml, 6 Katalysator à 60 ml
69412	<b>3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body Value Pack</b> 6 Basispaste à 300 ml, 6 Katalysator à 60 ml
69387	<b>3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Kartusche</b>
69401	<b>3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body Kartusche</b>
71454	<b>3M™ Garant™ Mischkanülen lila</b> 50 Garant Mischkanülen lila
<b>Schnell abbindende Materialien</b>	
P31772	<b>3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick Intro Kit</b> 1 Basispaste à 300 ml, 1 Katalysator à 60 ml, 1 3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick Kartusche für Pentamix™ 3, 10 Penta Mischkanülen rot, 2 Garant™ Kartuschen à 50 ml, 1 Garant™ Dispenser, 5 Garant™ Mischkanülen weiß, 5 Garant™ Applikationsdüsen weiß, 5 Impregum™ Einwegspritzen, 1 3M Polyether Adhesive rot – 17 ml
P31770	<b>3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick Intro Kit</b> 1 Basispaste 300 ml, 1 Katalysator 60 ml, 1 Impregum™ Penta™ Soft Kartusche für Pentamix™ 3, 10 Penta™ Mischkanülen rot, 1 Penta™ Elastomerspritze, 1 3M Polyether Adhesive rot – 17 ml
31766	<b>3M™ Impregum™ L DuoSoft™ Quick Refill</b> 4 3M™ Garant™ Kartuschen à 50 ml, 10 3M™ Garant™ Mischkanülen weiß, 5 3M™ Intra-oral Einwegspritzen lila

Art.-Nr.	Produktinformation
<b>Schnell abbindende Materialien</b>	
31764	<b>3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick Refill</b> 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
31768	<b>3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick Refill</b> 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
P3775	<b>3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick Kartusche für Pentamix™ 3</b>
P3773	<b>3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick Kartusche für Pentamix™ 3</b>
<b>Normal abbindende Materialien</b>	
P31684	<b>3M™ Impregum™ Penta™ Intro Kit</b> 1 Basispaste – 300 ml, 1 Katalysator – 60 ml, 1 Impregum™ Penta™ Kartusche für Pentamix™ 3, 10 Penta™ Mischkanülen rot, 1 Penta™ Elastomerspritze, 1 3M Polyether Adhesive rot – 17 ml
P31734	<b>3M™ Impregum™ Penta™ Soft Intro Kit</b> 1 Basispaste à 300 ml, 1 Katalysator à 60 ml, 1 3M™ Impregum™ Penta™ Soft Kartusche für Pentamix™ 3, 10 3M™ Penta™ Mischkanülen rot, 1 3M™ Penta™ Elastomerspritze, 1 3M Polyether Adhesive rot – 17 ml
P31738	<b>3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Intro Kit</b> 1 Basispaste à 300 ml, 1 Katalysator à 60 ml, 1 3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Kartusche für Pentamix™ 3, 10 3M™ Penta™ Mischkanülen rot, 2 3M™ Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ Kartuschen à 50 ml, 1 Garant™ Dispenser 1:1/2:1, 5 3M™ Garant™ Mischkanülen weiß, 5 3M™ Garant™ Applikationsdüsen weiß, 5 Intra-oral Einwegspritzen lila, 1 3M Polyether Adhesive rot – 17 ml
31644	<b>3M™ Impregum™ Penta™ Refill</b> 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
31730	<b>3M™ Impregum™ Penta™ Soft Refill</b> 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
31740	<b>3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Refill</b> 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
31745	<b>3M™ Impregum™ Penta™ L DuoSoft™ Refill</b> 2 Basispasten à 300 ml, 2 Katalysatoren à 60 ml
31751	<b>3M™ Impregum™ Garant™ L DuoSoft™</b> 4 Garant™ Kartuschen à 50 ml, 10 Garant™ Mischkanülen weiß, 5 Einwegspritzen
P3792	<b>3M™ Impregum™ Penta™ Kartusche für Pentamix™ 3</b>
P3787	<b>3M™ Impregum™ Penta™ Soft Kartusche für Pentamix™ 3</b>
P3793	<b>3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Kartusche für Pentamix™ 3</b>
P3795	<b>3M™ Impregum™ Penta™ L DuoSoft™ Kartusche für Pentamix™ 3</b>
<b>3M™ Pentamix™ 3 Automatische Mischgeräte</b>	
77871	<b>3M™ Pentamix™ 3 Automatisches Mischgerät – 230 V INT</b>
77872	<b>3M™ Pentamix™ 3 Automatisches Mischgerät CH – 230 V CH</b>
<b>Zubehör</b>	
71507	<b>20 3M™ Intra-oral Einwegspritzen lila</b>
77580	<b>1 Dispenser 1:1/2:1</b>
77601	<b>3M™ Pentamix™ 3 Wandhalterung</b>
30600	<b>3M™ Polyether Adhesive 17 ml – rot</b>
69408	<b>3M™ Polyether Contact Tray Adhesive 17 ml – blau</b>
77949	<b>50 3M™ Penta™ Mischkanülen rot</b>
71451	<b>50 3M™ Garant™ Mischkanülen weiß für Impregum DuoSoft L/L Quick</b>
71461N	<b>50 3M™ Garant™ Applikationsdüsen weiß</b>

\* Abbindezeit (ab Mischbeginn) 6:00 Min.



3M Deutschland GmbH · ESPE Platz · 82229 Seefeld · Freecall: 0800-2753773 · Freefax: 0800-3293773 · info3mespe@mmm.com · 3m.de/dental  
 3M Österreich GmbH · Kranichberggasse 4 · A-1120 Wien · Telefon: (01) 86686434 · Fax: (01) 86686330 · dental-at@mmm.com · 3maustria.at/dental  
 3M Schweiz GmbH · Eggstr. 93 · CH-8803 Rüschlikon · Fax: (044) 7249480 · 3mespech@mmm.com · 3mschweiz.ch/dental

3M, 3M Science, Applied to Life., DuoSoft, Garant, Impregum, Penta und Pentamix sind Marken der 3M Company. © 3M 2018. Alle Rechte vorbehalten.

EF04-0292/03 (02.2020)

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban