



**ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.

Ultradent Products

# Jiffy™ Finishing System

Oktober 2022





***Jiffy***<sup>TM</sup>

# Jiffy™ Finishing and Polishing System

## Überblick

Die speziell formulierte Ultradent Diamantkörnung sorgt für optimale Glätte sowie hervorragende Polierergebnisse und schont gleichzeitig alle verarbeiteten Materialien: Komposit, Keramik und Zirkonoxid



# Jiffy™ Finishing System

Komposit

Intraoral



# Jiffy™ Finishing System

## Komposit – Intraoral

### Jiffy™ One /Single-Use

Praktische Einweg-Polierer mit einer speziell formulierten Diamantenkörnung für ein schönes Finish und einen schönen Glanz auf allen Restaurationen

- Formen: Polierkelche, Polierspitzen, Polierscheiben
- Maximal zweistufiges Politursystem: mittlere Körnung (gelb) und feine Körnung (weiß) für zusätzlichen Glanz



# Jiffy™ Finishing System

## Komposit – Intraoral

### Jiffy™ Natural

- Geschmeidigen, spiralförmigen Scheiben und wirbelförmigen Polierer in zwei Körnungen
- Beide Formen garantieren eine optimale Druckverteilung bei der Politur
- Politurscheiben passen sich leicht an alle Zahnoberflächen an, die wirbelförmigen Polierer eignen sich für okklusale Oberflächen

# Jiffy™ Finishing System

## Komposit – Intraoral

### Jiffy™ Natural

- Ermöglicht es, den Glanz natürlichen Zahnschmelzes einfach nachzubilden
- Ideal für die abschließende Bearbeitung des Ultradent Mosaic™ Universalkomposits
- Mit oder ohne autoklavierbare Aluminiumblöcke erhältlich



# Jiffy™ Finishing System

Keramik

Intraoral



# Jiffy™ Finishing System

## Keramik – Intraoral

Jiffy™ Natural/Universal

- Anpassung an alle Zahnoberflächen, einschließlich der okklusalen Anatomie
- Kann zur Auffrischung älterer prothetischer Versorgungen verwendet werden
- Mit oder ohne autoklavierbare Aluminiumblöcke erhältlich

# Jiffy™ Finishing System

## Keramik – Intraoral

### Jiffy™ Natural/Universal

- Weiche, spiralförmige Scheiben, die sich leicht an die Zahnanatomie anpassen
- Dank Erweiterungen lassen sich Bereiche bearbeiten, die für Kelche und Spitzen unerreichbar sind
- Extrem hochglänzende Flächen erhalten einen weichen, natürlichen Look



# Jiffy™ Finishing System

## Keramik – Intraoral

### Jiffy™ Universal

- Verwendung bei allen Keramikmaterialien macht den Einsatz mehrerer Finierer und Polierer überflüssig
- Die speziell formulierte Ultradent Diamantkörnung sorgt für optimale Glätte und hervorragende Polierergebnisse
- Schont alle verarbeiteten Keramikmaterialien inkl. Zirkonoxid

# Jiffy™ Finishing System

## Keramik – Intraoral

### Jiffy™ Universal

- Die Diamantpartikel unterschiedlicher Körnung ermöglichen die effektive Bearbeitung von Keramik für eine wirklich glatte und hochglänzende Oberfläche
- Autoklavierbarer Aluminiumblock verlängert die Lebensdauer des Systems
- Dunkel orangefarbene Spitzen, Kelche und Natural Scheiben mit mittlerer Krönung für die Vorpolitur, hellere orangefarbene Polierer für die finale Politur



# Jiffy™ Finishing System

Keramik

Extraoral



# Jiffy™ Finishing System

## Keramik – Extraoral

### Jiffy™ Natural/Universal


- Zweistufige Poliersequenz: Vorpolieren (Medium) sowie abschließendes Polieren (Fein)
- Größere Spiral Polierscheiben für die extraorale Anwendung (26 mm vs. 14 mm für intraoral)
- Mit Erweiterungen lassen sich Bereiche bearbeiten, die für Kelche und Spitzen unerreichbar sind

# Jiffy™ Finishing System

## Keramik – Extraoral

### Jiffy™ Natural/Universal

- Jiffy™ Universal Wheels (orange) eignen sich für die Anwendung an axialen Wänden, proximalen Kontakten und Höckern
- Jiffy™ Natural Universal Wheels können in allen Bereichen eingesetzt werden

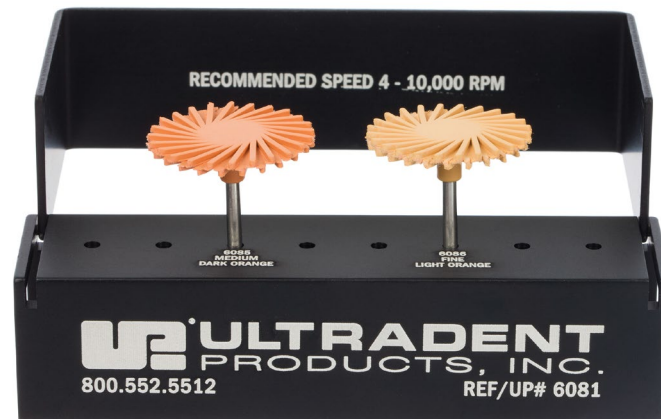

# Jiffy™ Finishing System

## Keramik – Extraoral

### Jiffy™ Universal


- Verwendung bei allen Keramikmaterialien macht den Einsatz mehrerer Finierer und Polierer überflüssig
- Die speziell formulierte Ultradent Diamantkörnung sorgt für optimale Glätte und hervorragende Polierergebnisse und schont gleichzeitig alle verarbeiteten Keramikmaterialien, einschließlich Zirkonoxid

# Jiffy™ Finishing System

## Keramik – Extraoral

### Jiffy™ Universal

- Jiffy™ Universal Coarse Schleifer (grün) werden zum Abschleifen von Presskanälen (sprues) sowie zur groben Anpassung empfohlen
- Jiffy™ Universal Medium Schleifer (gelb) dienen zur Anpassung von Lithiumdisilikat, Zirkonoxid und Feldspatkeramik
- Scheiben werden zum Vorpolieren sowie zur abschließenden Politur eingesetzt

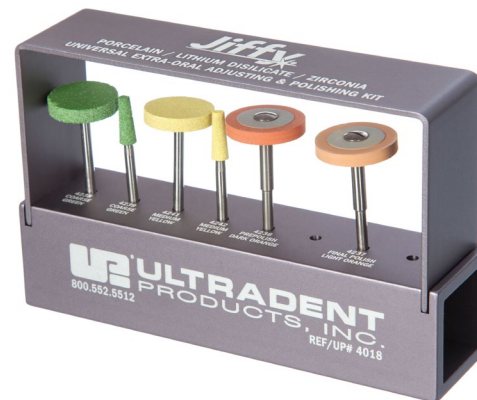

# Jiffy™ Finishing System

Jiffy™ Diamond Strips


Jiffy™ Proximal Saw



# Jiffy™ Finishing System

## Jiffy™ Diamond Strips und Jiffy™ Proximal Saw

- Flexibel, dünn und härter als Aluminiumoxidstreifen
- Gelochtes Design sorgt für bessere Sichtbarkeit und ermöglicht eine präzisere Konturierung
- Erhältlich in zwei Ausführungen: breit und schmal sowie in drei Körnungen
- Jiffy™ Approximalsäge: sehr dünne Edelstahlstreifen, die an einer Kante mit Zacken versehen sind

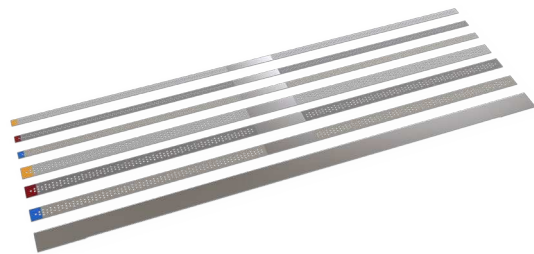

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban