

KKD® KRONEN- & BRÜCKENENTFERNUNG

Crown- & Bridge Removal

Von der kleinsten Krone bis zur größten Brücke

From the smallest crown up to the biggest bridge



Gemeinsam für gesunde Zähne
Together for healthy teeth

KENTZLER
KASCHNER
DENTAL



Kronen- & Brückenentfernungsgeräte | Crown- & Bridge removers

KKD® bietet zur Entfernung provisorischer und festsitzender Kronen und Brücken drei unterschiedliche, sehr effiziente, mechanische Entfernungsgeräte mit jeweils drei verschiedenen, auswechselbaren Ansätzen an. Ansätze sind untereinander ebenfalls austauschbar.

ProfiKits: Komplett-Sortimente zum professionellen Entfernen von Kronen und Brücken, bestehend aus einem Kronen- und Brückenentferner + drei Ansätzen, sowie einem Single- und Double Loop-Tip (inklusive Ersatzseilen) im praktischen Klarsichtetui zum Vorteilspreis.

KKD® offers for the removal of temporary and fixed crowns and bridges three different types of efficient, mechanical removal instruments with each three interchangeable tips. Tips are also interchangeable among themselves.

ProfiKits: Complete assortments for the professional removal of crowns and bridges, consisting of one remover + three tips, as well as one Single- and one Double Loop-Tip (incl. spare wires) in a practical transparent case at a preferable price.

KKD® Typ „A“



① REF 06801

② REF 06802

③ REF 06803

Durch das Zusammenschieben des Handgriffs können drei unterschiedliche Intensitäten des Schlagimpulses eingestellt und ausgelöst werden. Ansätze sterilisierbar.

By pushing the handle 3 different intensities of shock impulse are achieved. Tips are sterilisable.

SET mit drei Ansätzen/ with three Tips

REF 06815

ProfiKit
SET A

REF 068145



KKD® Typ „B“



① REF 06804

② REF 06805

③ REF 06806

Dieser Kronenentferner zeichnet sich besonders durch die Möglichkeit rasch aufeinanderfolgender Auslösung der Schlagimpulse aus. Über den Handgriff werden die Impulse ohne umständliches Nachspannen allein durch Drücken ausgelöst. Ansätze sterilisierbar.

This instrument permits to release quickly shock impulses successively. By pressing the handle the impulses are released without difficult re-tension. Tips are sterilisable.

SET mit drei Ansätzen/ with three tips

REF 06809

ProfiKit
SET B

REF 068085



KKD® Typ „C“



① REF 06824

② REF 06825

③ REF 06826

Mittels Federmechanismus können die Schlagimpulse von schwach bis stark festgelegt werden. Je geringer die Distanz des Gewichtes zum Griffteil, desto stärker die Schlagkraft. Ansätze sterilisierbar.

The spring mechanism of the instrument permits a setting of the shock impulse intensity from slight up to strong. The shorter the distance of the weight-piece to the handle the stronger the shock impulse. Tips are sterilisable.

SET mit drei Ansätzen/ with three tips

REF 06822

ProfiKit
SET C

REF 068235





KKD® Loop-Tips

Zur problemlosen Entfernung von Brücken ohne Beschädigung der feinen Kronenränder oder Verblendung. Die feinen, laserverschweißten Seilenden ermöglichen ein leichtes Einfädeln des Seils zwischen den Brückengliedern. Keine störende Verdickung am Seilende. Optimale, gleichmäßige Kraftübertragung auch bei größeren Brückenkonstruktionen.

KKD® Loop-Tips sind mit allen gängigen Kronen- und Brückenentfernern kompatibel (M4 Gewinde).

For easy removal of bridges without deformation of the delicate crown margins or veneers. The fine, laser-fused wire ends permit an easy passing through of the wire under the bridge elements. No disturbing thick loop-end. Optimum, equal load transmission even with multi-span bridges.

KKD® Loop-Tips are compatible with all current crown- and bridge removers (M4 screw thread)

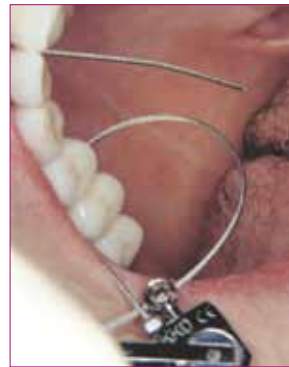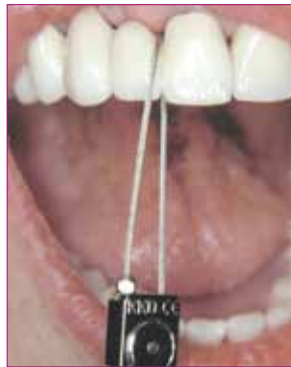

Single Loop-Tip
für kleinere Brückenkonstruktionen
for small bridges

REF 06817

Set: Single Loop-Tip, Adapter, Schlüssel und Ersatzseil
set: Single Loop-Tip, adapter, key and spare wire

Ersatzseile/ spare wires
90 mm 2 St./ pcs.

REF 06818

Schlüssel/ key 1 St./ pc.
Adapter/ adapter 1 St./ pc.

REF 06821
REF 06820

Double Loop-Tip
für große Brückenkonstruktionen, bei welchen eine gleichmäßige Kraftübertragung bei der Abnahme erforderlich ist. Die patentierte Konstruktion gewährleistet eine selbstständige Ausbalancierung des Loop-Tips während der Anwendung.


Tip for multi-span bridges where an equal load transmission is required for the removal. The patented construction guarantees a self-reliant balancing of the LoopTip during treatment. REF 06816

Set: Double Loop-Tip, Adapter, Schlüssel und Ersatzseil
set: Double Loop-Tip, adapter, key and spare wire

Ersatzseile/ spare wires
190 mm 2 St./ pcs.

REF 06819

Adapter ATD
zur Verwendung der KKD® Loop-Tips mit dem ATD Kronenentfernersystem
for using the KKD® Loop-Tips with the ATD crown removing system
REF 06829

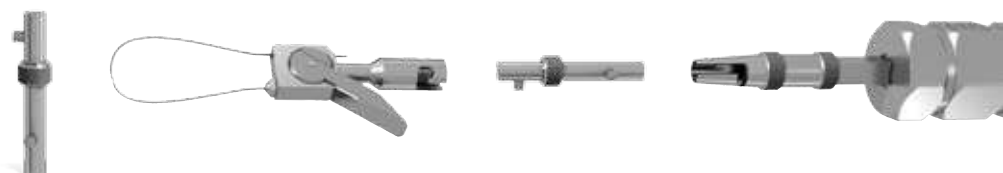


Kronen- & Brückenentfernung | Crown- & Bridge removal

Kronenspreizzange | Crown Spreader

Zum Entfernen von aufgetrennten Kronen mittels Spreizfunktion bei deutlicher Reduzierung der Traumatisierung des Zahnhalteapparates.
For the removal of ripped crowns by its spreading function.
Considerable reduction of the traumatization of the periodontium.

- mit spezieller Oberflächenbeschichtung und erhöhtem Härtegrad (75-80 HRC)
- keine Rotation an der Wurzel
- sichere und anatomisch korrekte Anwendung
- durch Zusammendrücken der Zange wird die Krone gespreizt
- special surface coating with increased hardness degree (75-80 HRC)
- no disturbing rotation on the root
- safe and anatomically correct usage
- by compressing the pliers the crown is getting spreaded

REF 06838

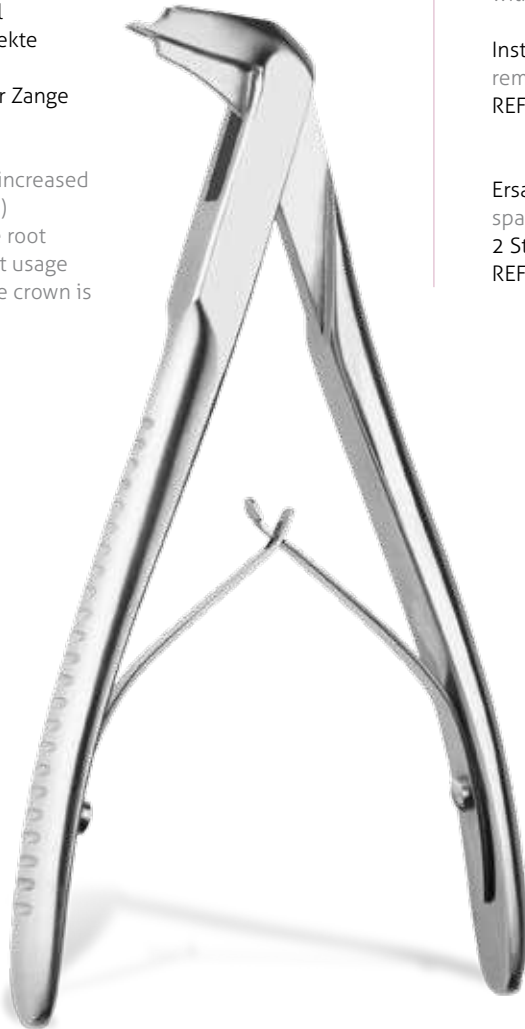

Kronenabnehmerzangen | Crown Removers

„Mini“ – gebogen
„Mini“ – curved

Universell für festsitzende und provisorische Kronen – mit auswechselbaren Backen.
Universal for crowns and temporary crowns with exchangeable rubber tips

Instrument + 2 Ersatzbacken
remover + 2 spare tips
REF 06837

Ersatzbacken
spare tips
2 St./ pcs.
REF 06834



Kronenaufbieger | Crown Instrument



Universeller, robuster Kronenaufbieger zum schnellen Entfernen von Einzelkronen mittels vorab gefertigter Nut.
Universal robust instrument for a quick removal of individual crowns by inserting the working end in a prefabricated section.

Universal für Front- und Seitenzahnbereich
Universal for anterior and posterior region
REF 06832

Diatrac Adhäsivpulver | Adhesive powder



Auch für OK und UK Kronenabnehmerzange geeignet.
Also suitable for Upper and Lower crown removers.

10 gr.

REF 06839

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Mühlgraben 36
73479 Ellwangen / Jagst

Telefon: +49 (7961) 9073-0
Fax: +49 (7961) 52031
e-Mail: info@kkd-topdent.de
www.kkd-topdent.de



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban