

KKD® SteWaFix 2.0 triColor A+



<http://kkd-online.de/KKD-SteWaFix.mp4>

Large

Medium

Small



Multifunktionstray für Instrumente

- schützt fragile Instrumente vor Beschädigungen
- für optimale Reinigungsergebnisse
- aus Ultem (PEI) Spezialkunststoff
- für Autoklav und Thermodesinfektor
- auch für starkalkalische Lösungen geeignet
- minimalster Spülschatten durch Verzicht auf Silikonleisten im Tray
- Klammern statt herkömmlicher Gelenkscharniere für eine einfachere Reinigung des Trays

Multifunctional tray for instruments

- protects the delicate working tips of the instruments against damaging
- for optimal cleaning
- made of Ultem (PEI)
- for autoklav and thermodesinfektor
- also suited for strong alkaline solutions
- without silicone rails therefore almost no area left unwashed
- clamps instead of hinges for easy cleaning



Silikonstopper halten Kleinteile bis zu einer Höhe von ca. 29 mm sicher in situ. Silicone stoppers hold small parts up to a total height of approx. 29 mm in situ.



Soft-touch
Powergrip-Funktion
Soft-touch
Powergrip-function

Langzeitscharf!
Long lasting cutting edges!



KKD® mf Soft COLOR PA Instrumente first class quality „made in USA“

Für den gehobenen Anspruch!

- Soft-touch Powergrip-Funktion: angenehm weiche Silikoneinsätze in den Handgriffen sorgen für einen sicheren Halt
- ergonomisch geformt mit einer ausgezeichneten Balance – für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- langzeitscharf dank rostfreiem Instrumentenstahl 440A (Werkstoff 1.4110) mit einer Härte von 56 Rockwell für die grazilen Arbeitsspitzen. Auch manuell oder maschinell nachschleifbar
- farbcodiert nach Einsatzgebiet

For people who wants the best!

- safe grip during treatment due to soft silicone inserts, handles with soft-touch Powergrip-function
- ergonomic with excellent balance – for fatigue-free working
- long lasting cutting edges made of surgical stainless steel 440A (material 1.4110) with a Rockwell hardness of 56 for the delicate working tips. They can be resharpended manually or mechanically
- colour-coded according to scope

KKD® SteWaFix 2.0 triColor A+ LARGE

Tray für bis zu 12 PA Instrumente und z.B. Bohrerständen inkl. 10 Silikonstopper
Tray for up to 12 PA instruments or e.g. bur racks incl. 10 silicone stoppers
Außenmaße/ outer dimensions
L x B/W x H: 278 x 180 x 34 mm
Innenmaße/ inner dimensions
L x B/W x H: 270 x 172 x 29 mm

blau/ blue REF 11937
gelb/ yellow REF 11927
rot/ red REF 11917

KKD® SteWaFix 2.0 triColor A+ MEDIUM

1/2 Tray für bis zu 9 PA Instrumente inkl. 5 Silikonstopper
1/2 Tray for up to 9 PA instruments incl. 5 silicone stoppers
Außenmaße/ outer dimensions
L x B/W x H: 180 x 136 x 34 mm
Innenmaße/ inner dimensions
L x B/W x H: 172 x 128 x 29 mm

blau/ blue REF 11938
gelb/ yellow REF 11928
rot/ red REF 11918

KKD® SteWaFix 2.0 triColor A+ SMALL

1/3 Tray für bis zu 5 PA Instrumenten
1/3 Tray for up to 5 PA instruments
Außenmaße/ outer dimensions
L x B/W x H: 180 x 92 x 34 mm
Innenmaße/ inner dimensions
L x B/W x H: 172 x 85 x 29 mm

blau/ blue REF 11939
gelb/ yellow REF 11929
rot/ red REF 11919



KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Mühlgraben 36
D-73479 Ellwangen/Jagst

Telefon: +49 (7961) 90 73-0
Fax: +49 (7961) 5 20 31
info@kkd-topdent.de
www.kkd-topdent.de

Aktuelle Preise siehe www.kkd-topdent.de/Informationen/Downloads. Es gelten die auf unserer Seite www.kkd-topdent-shop.de veröffentlichten AGBs./ Prices: kkd-topdent.de -> Informationen/Catalogues Instructions. All supplies and services are subject to our terms of payment and delivery published -> www.kkd-topdent-shop.de.



Gemeinsam für gesunde Zähne
Together for healthy teeth



M080991 / 30.11.2021


PA Instrumente mit neuem ergonomischem, farbcodiertem Griff und soft-touch POWERGRIP-Funktion

PA Instruments with new ergonomic, colour-coded handle and soft-touch POWERGRIP function



Eine manuelle bzw. maschinelle Aufbereitung nach der RKI-Richtlinie ist nachweislich problemlos möglich. A manual or mechanical reprocessing acc. to RKI guideline of the instruments has been proven possible without any problems.


www.kkd-topdent-shop.de

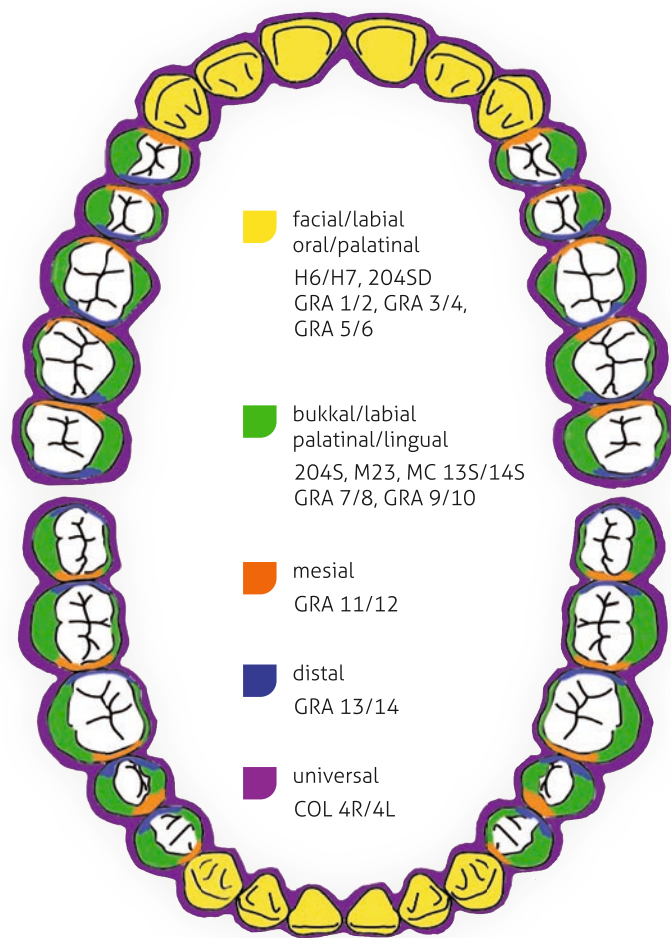

- facial/labial oral/palatinal
H6/H7, 204SD
GRA 1/2, GRA 3/4,
GRA 5/6
- bukkal/labial palatinal/lingual
204S, M23, MC 13S/14S
GRA 7/8, GRA 9/10
- mesial
GRA 11/12
- distal
GRA 13/14
- universal
COL 4R/4L

Scaler

Die Arbeitsenden sind beidseitig schneidend und spitz auslaufend. Zur effizienten Entfernung von Belägen im supragingivalen Bereich. Tips with two cutting edges which come together to a point. For the efficient removal of concrements and deposits in supragingival regions.

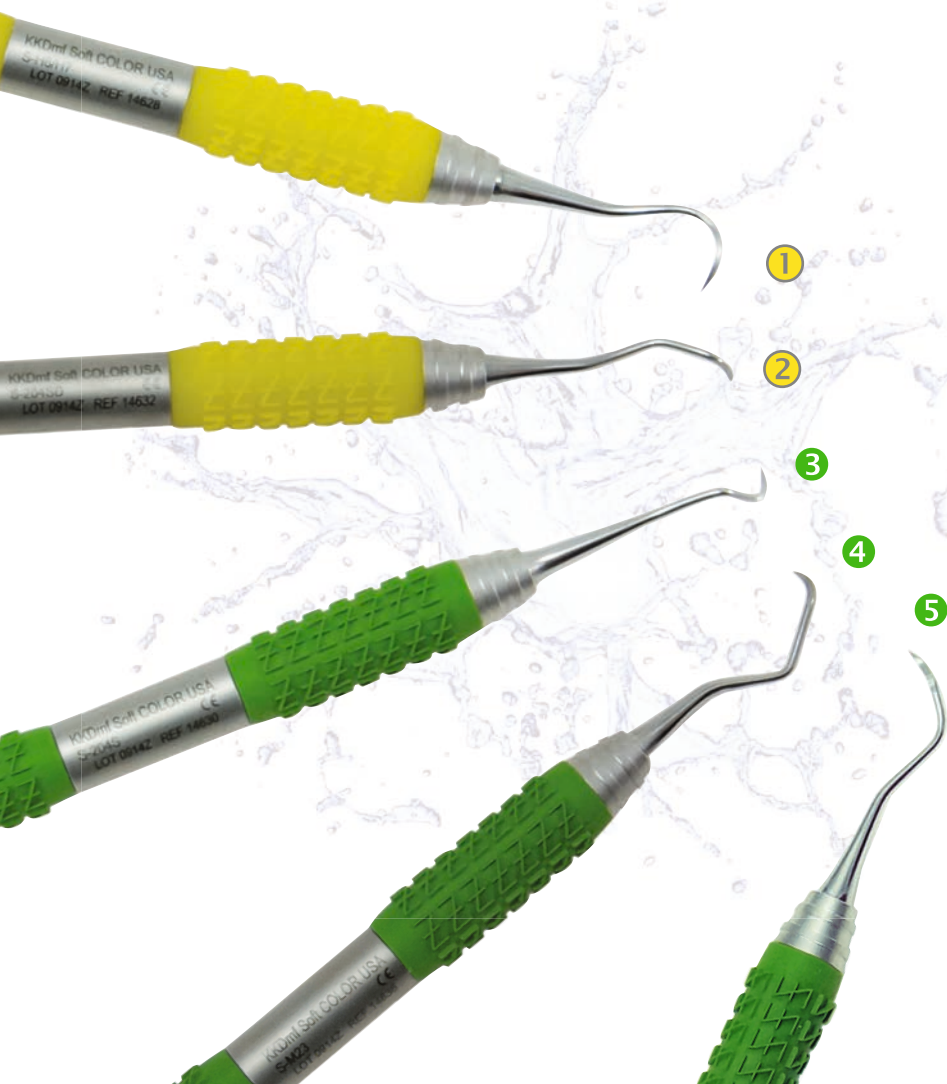

- 1 S-H6/H7* Universalscaler REF 14628
Für Front- und Seitenzahnbereich (Prämolaren). Leicht abgewinkelte, dünne, sichelförmige Arbeitsenden./ Universal scaler for anterior- and posterior (premolars) area. Slightly angled, thin, sickle-shaped working tips.
- 2 S-204SD* Spezialscaler REF 14632
Für Interdentalräume im Front- und Seitenzahnbereich./ Special scaler for interdental use in the anterior- and posterior area.
- 3 S-204S* Spezialscaler REF 14630
Für Interdentalräume im Seitenzahnbereich (Molaren)./ Special scaler for interdental use in the posterior area (molars).
- 4 S-M23* Universalscaler REF 14636
Für alle Quadranten der Front- und Seitenzähne einsetzbar./ Of universal use in all quadrants of the anterior and posterior teeth.
- 5 S-MC 13S/14S Feinscaler McCall REF 14626
Für alle Quadranten der Front- und Seitenzähne einsetzbar./ Of universal use in all quadrants of the anterior and posterior teeth.

*Unsere Empfehlung für die PZR.
Our Set recommendation for PTC

Gracey Küretten | Gracey Curettes

Spezialküretten zum „deep scaling“ und zur Wurzelglättung mit konkaver und konvexer Kante. Einseitig schneidende Arbeitsenden – rund auslaufend – zur Entfernung von Belägen im supra- und subgingivalen Bereich./ Special curettes for „deep scaling“ and root planing with concave and convex edge. Tips one side cutting – rounded – for the removal of concrements and deposits in supra- and subgingival regions.


- 1 C-GRA 1/2 REF 14600
Für alle Wurzeloberflächen im OK und UK Frontzahnbereich. Leichte Abwinkelung./ For all root surfaces in the upper and lower jaw – anterior region. Slight contra-angle.
- 2 C-GRA 3/4 REF 14602
Für alle Wurzeloberflächen im OK und UK Frontzahnbereich. Mittlere Abwinkelung./ For all root surfaces in the upper and lower jaw – anterior region. Medium contra-angle.
- 3 C-GRA 5/6* REF 14604
Für alle Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Frontzahnbereich. Leichte Abwinkelung./ For all root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and anterior region. Slight contra-angle.
- 4 C-GRA 7/8* REF 14606
Für alle bukkalen, lingualen und palatinalen Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Starke Abwinkelung./ For all buccal, lingual and palatinal root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Strong contra-angle.
- 5 C-GRA 9/10 REF 14608
Für alle bukkalen, lingualen und palatinalen Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Extra starke Abwinkelung. Bestens geeignet bei Patienten mit geringer Mundöffnung./ For all buccal, lingual and palatinal root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Extremely strong contra-angle.
- 6 C-GRA 11/12* REF 14610
Für mesiale Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abgewinkelt./ For mesial root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Two contra-angles.
- 7 C-GRA 13/14* REF 14612
Für distale Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abgewinkelt./ For distal root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Two contra-angles.

Universal Kürette | Universal Curette

Die Arbeitsenden sind beidseitig schneidend – rund auslaufend – zur Entfernung von Belägen im supra- und subgingivalen Bereich./ Tips with two cutting edges – rounded – for the removal of concrements and deposits in supra- and subgingival regions.

- 8 C-COL 4R/4L Columbia REF 14622
Für OK und UK Seitenzahnbereich./ For all surfaces of mandibular and maxillary posterior regions.

*Unsere Set-Empfehlung für die Kürettage.
Our Set recommendation for curettage

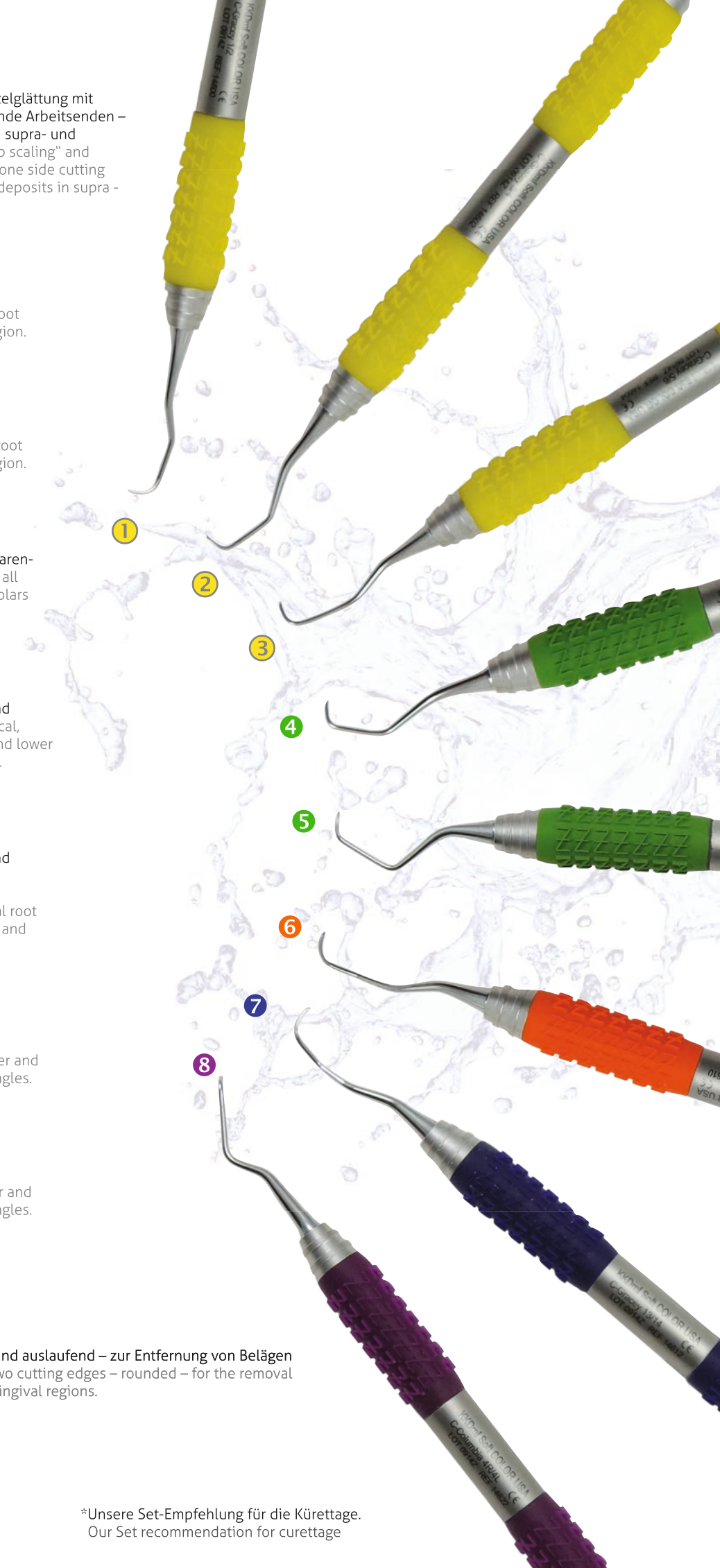

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban