

GALAXIE
cassettes

GALAXIE INSTRUMENTENKASSETTEN


Die kosteneffiziente Lösung für die Instrumentenaufbereitung in Ihrer Praxis

NEU!


Innovatives Zahndesign
Zusätzliche Kassettengröße
Neues Zubehör



GALAXIE cassettes

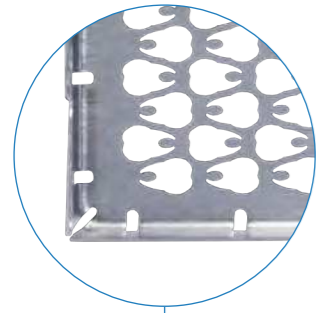

innovatives
Zahndesign

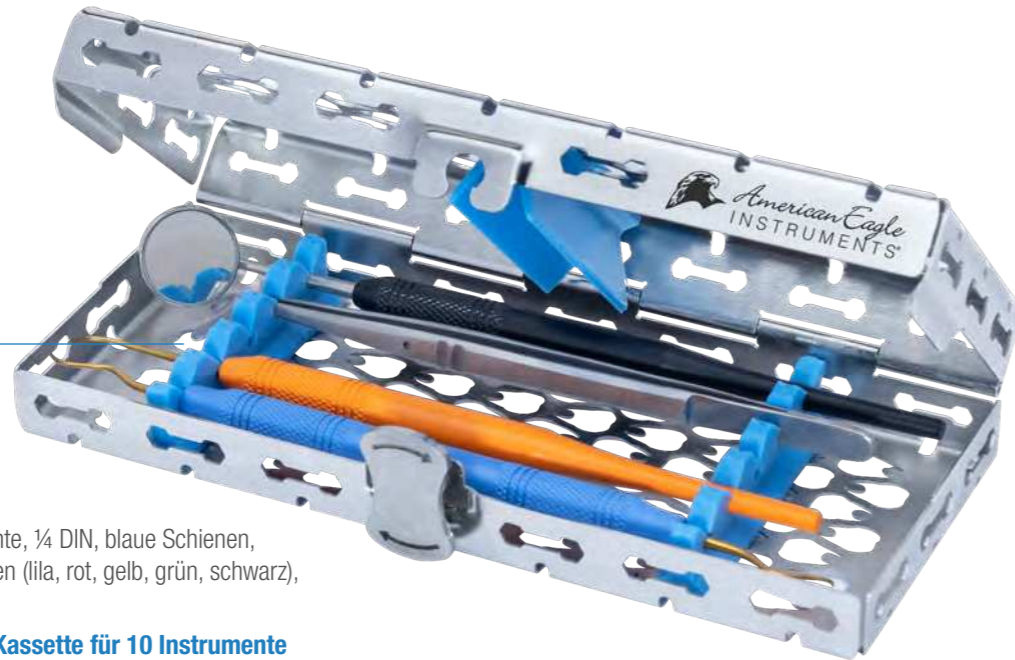

AEC1/4DIN

Kassette für 5 Instrumente, ¼ DIN, blaue Schienen, inkl. 5 Farbkodieroptionen (lila, rot, gelb, grün, schwarz), 185 x 80 x 37 mm

Erweiterbar zu einer Kassette für 10 Instrumente mit zusätzlicher Retention Rail Halteschiene, (1x AECAGRAIL)

Der Gold Standard für die Instrumentenaufbereitung

Die neuen Instrumentenkassetten mit innovativem Zahndesign garantieren maximale Effizienz beim Reinigungs- und Sterilisationsprozess. Zusätzliche Kassettenmodelle, wie Container- und 1/1 DIN Chirurgie Kassette sowie neue Clips zum Befestigen von Scharnierinstrumenten erhöhen die Auswahlmöglichkeiten für eine optimale Aufbereitungsorganisation in Ihrer Praxis.

Hochwertige Materialien:

- » Elektropolierter Edelstahl mit glatten Kanten für schnelle Trocknung und Schutz vor Korrosion
- » Verwendung von lebensmittelechtem Silikon

Innovativer und ergonomischer Verschluss:

- » Sicheres und einfach anwendbares Verschlusssystem erlaubt die Öffnung mit einer Hand


Neues Design für einen verbesserten Reinigungsprozess:

- » Das neue und innovative lasergeschnittene Muster garantiert maximale Effizienz während des Reinigungs- und Sterilisationsprozesses und gewährleistet gleichzeitig Stabilität und Festigkeit der Kassette
- » Offenes Gitterdesign speziell für den Gebrauch im RDG, ermöglicht maximalen Wasserdurchfluss
- » Glatte runde Kanten und geschlitzte Ecken erhöhen den Abfluß und reduzieren die Trocknungszeit

GALAXIE cassettes

AEC1/2DIN

Kassette für 10 Instrumente, ½ DIN, blaue Schienen, inkl. 5 Farbkodieroptionen (lila, rot, gelb, grün, schwarz), 185 x 148 x 37 mm

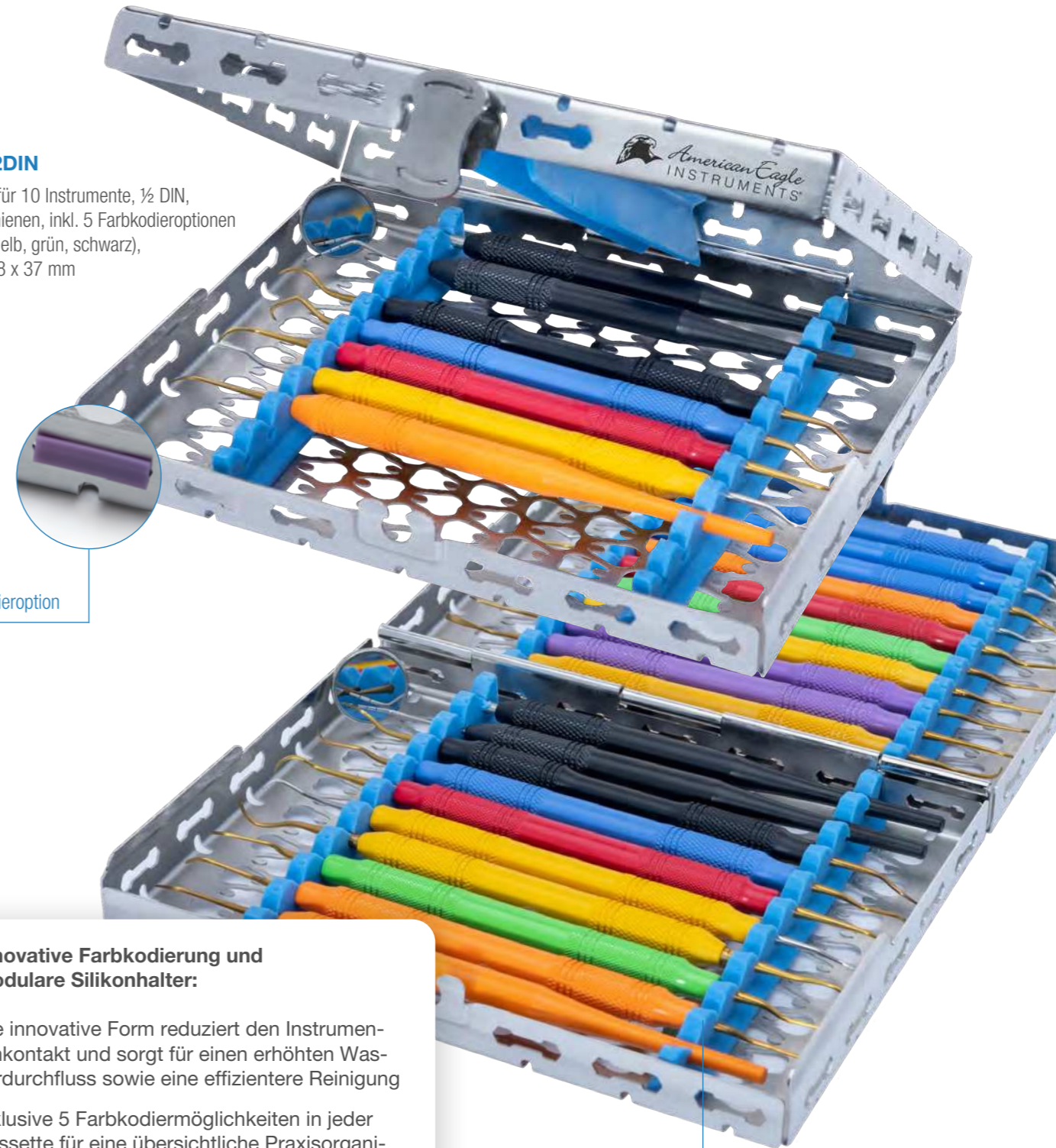

Farbkodieroption

Innovative Farbkodierung und modulare Silikonhalter:

- » Die innovative Form reduziert den Instrumentenkontakt und sorgt für einen erhöhten Wasserdurchfluss sowie eine effizientere Reinigung
- » Inklusive 5 Farbkodiermöglichkeiten in jeder Kassette für eine übersichtliche Praxisorganisation
- » Silikonschienen können variabel eingesetzt werden und sind mit allen gängigen Griffdurchmessern kompatibel

Erweiterbar zu einer Kassette für 20 Instrumente mit zusätzlichen Retention Rails Halteschienen (2x AECAGRAIL)



GALAXIE cassettes

AESCCON

Container Kassette für bis zu 16 Instrumente, passend für DIN Dental Normcontainer, mit Griff am Deckel, blaue Schienen, inkl. 5 Farbkodieroptionen (lila, rot, gelb, grün, schwarz), 268 x 176 x 34 mm

Passend für handelsübliche DIN-Sterilisationsbehälter.




GALAXIE cassettes

AECRAIL

Instrumentenschiene Standard, blau, für 10 Instrumente, 1 Stück. Passend für die GALAXIE Instrumentenkassetten AEC1/2DIN, AECDIN, AESCDIN und AESCCON.


Für die Verwendung in der AEC1/4DIN Kassette kann die Schiene halbiert werden.

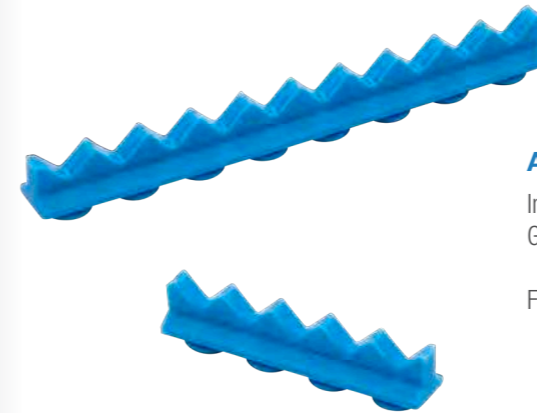

AECAGRAIL

Instrumentenschiene Retention Rail, blau, für 10 Instrumente, 1 Stück. Passend für die GALAXIE Instrumentenkassetten AEC1/2DIN, AECDIN, AESCDIN und AESCCON.

Für die Verwendung in der AEC1/4DIN Kassette kann die Schiene halbiert werden.

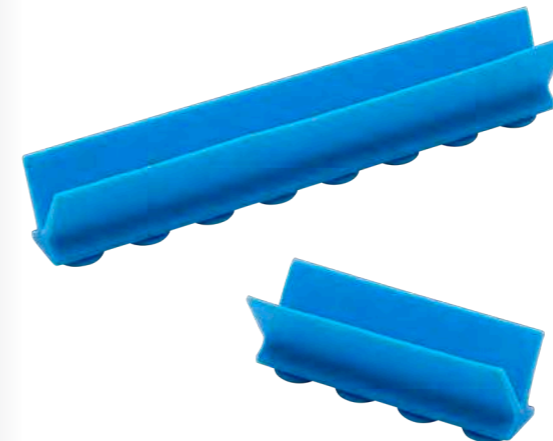

AECRAIL

Kompressions-Schiene / Druck-Schiene V-Profil, blau, für 10 Instrumente, 1 Stück. Passend für die GALAXIE Instrumentenkassetten AEC1/2DIN, AECDIN, AESCDIN und AESCCON.

Für die Verwendung in der AEC1/4DIN Kassette kann die Schiene halbiert werden.

AESCLIPNH

Klammer für Nadelhalter oder Zangen, 1 Stück. Sichert Nadelhalter/Klemmen/Zangen im Deckel der Instrumentenkassette. HINWEIS: Für optimale Fixierung wird paarweise Verwendung empfohlen.

Passend für alle GALAXIE Instrumentenkassetten.



AESCLIPS

Klammer für Scheren, 1 Stück. Sichert Scheren im Deckel der Instrumentenkassette. HINWEIS: Für optimale Fixierung wird paarweise Verwendung empfohlen.

Passend für alle GALAXIE Instrumentenkassetten.



AESCTOOL

Montagewerkzeug für Scheren- und Nadelhalterclips, 1 Stück.

Passend für alle GALAXIE Instrumentenkassetten.




GALAXIE cassettes

Artikelnummer	Beschreibung
AEC1/4DIN	Kassette für 5 Instrumente, ¼ DIN, blaue Schienen, inkl. 5 Farbkodieroptionen (lila, rot, gelb, grün, schwarz) 185 x 80 x 37 mm, mit zusätzlicher Retention Rail Halteschiene (1x AECAGRAIL) erweiterbar auf 10 Instrumente
AEC1/2DIN	Kassette für 10 Instrumente, ½ DIN, blaue Schienen, inkl. 5 Farbkodieroptionen (lila, rot, gelb, grün, schwarz) 185 x 148 x 37 mm, mit zusätzlichen Retention Rail Halteschienen (2x AECAGRAIL) erweiterbar auf 20 Instrumente
AESCDIN	Chirurgie-Kassette für bis zu 17 Instrumente, DIN, blaue Schienen, inkl. 5 Farbkodieroptionen (lila, rot, gelb, grün, schwarz), 285 x 183 x 37 mm
AESCCON	Container Kassette für bis zu 16 Instrumente, mit Griff am Deckel, blaue Schienen, inkl. 5 Farbkodieroptionen (lila, rot, gelb, grün, schwarz), 268 x 176 x 34 mm, passend für handelsübliche DIN-Sterilisationsbehälter
AECAGRAIL	10er Retention Rail Halteschiene, blau, 1 Stück
AECRAIL	10er Trägerschiene, blau, 1 Stück
AECRAIL	Druckschiene, blau, V-Profil, 1 Stück
AESCLIPS	Klammer für Scheren, 1 Stück (HINWEIS: Für optimale Fixierung wird paarweise Verwendung empfohlen)
AESCLIPNH	Klammer für Nadelhalter oder Zangen, 1 Stück (HINWEIS: Für optimale Fixierung wird paarweise Verwendung empfohlen)
AESCTOOL	Montagewerkzeug für Scheren- und Nadelhalterclips, 1 Stück

Kassetten werden ohne Instrumente und ohne zusätzliche Silikonschienen geliefert.

AESCDIN

Chirurgie-Kassette für bis zu 17 Instrumente, DIN, blaue Schienen, inkl. 5 Farbkodieroptionen (lila, rot, gelb, grün, schwarz), 285 x 183 x 37 mm

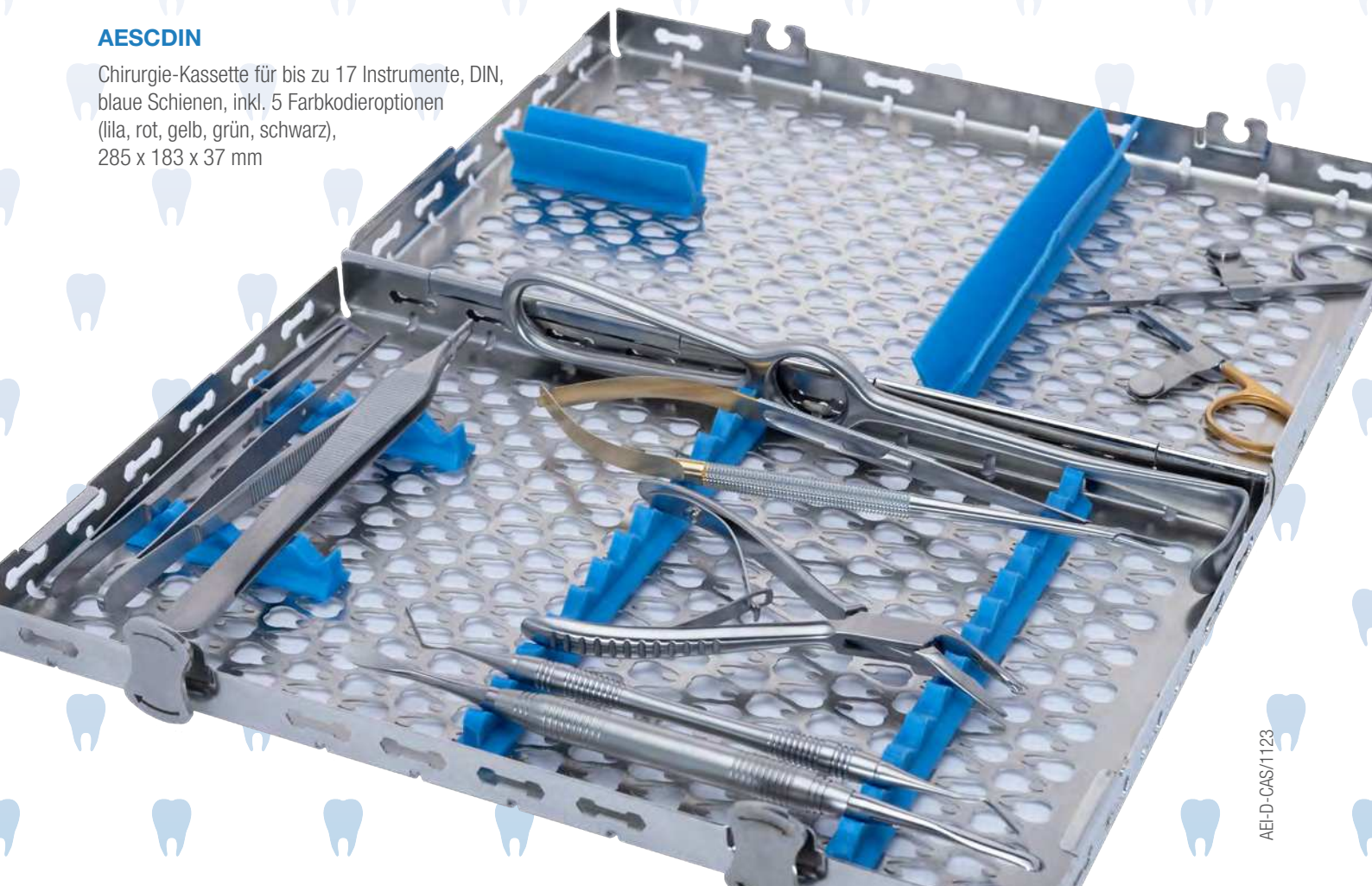

AEI-D-CAS/1123

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban