

Den nye KaVo MASTERmatic-serie.

**GØR DIT BEDSTE
DINE MÅLSÆTNINGER**



KaVo. Dental Excellence.

KaVo MASTERmatic-serien. Lev op til dine målsætninger.

Optimale resultater. Hele livet.

Nyd godt af optimal tilgang og maksimal præcision i alle tænkelige behandlingssituationer, med den nye instrumentserie KaVo MASTERmatic.

Efter mere end 10 år som markedsførende produkt finder GENTLEpower-programmet nu sin banebrydende efterfølger. Dette nye benchmark i tysk ingeniørkunst forener innovationsånd med de bedste egenskaber, der utallige gange har bevist deres værd, i én serie. KaVo MASTERmatic-serien er fremstillet i kompromisløs kvalitet, så du kan udnytte hele dit potentiale. Er kun det bedste godt nok? Så indfri dine høje forventninger nu.

Det nye designsprog i KaVo MASTERmatic-serien videreføres med betydeligt optimerede egenskaber. Således er hovedstørrelsen på den legendære hurtigløber blevet reduceret med 20 % uden at gå på kompromis med kraften. Dermed opnår du den nødvendige tilgang kombineret med den ønskede kraft. Afprøvede milepæle inden for teknikken er anvendt og forfinet hensigtsmæssigt, f.eks. det udskiftelige sprayfilter.

Apropos udskiftning: Det kendte KaVo-princip med de udskiftelige hoveder er bevaret. Udskift ved behov hovedet på ingen tid, så du kan arbejde videre med det samme. Eller kombinér underdele og hoveder efter dine individuelle krav.

Ældre INTRA LUX-hoveder og GENTLEpower-underdele er naturligvis kompatible med de nye komponenter.

KaVo master
series



OPTIMAL TILGANG OG OVERBLIK

- Mindre hoveder
- Optimal vinkelkombination
- Lyspositionering

MAKSIMAL PRÆCISION

- Triple-gear-teknologi
- Hårdmetalføring
- Ultra ergonomisk

ENESTÅENDE PÅLIDELIGHED

- KaVo levedygtighed
- Made in Germany
- Omfattende kontinuerlige test
- Udskiftelige hoveder

M25 L /M05 L Mini – Lille hoved, stor forskel.

KaVo MASTERmatic M25 L.

Kombinationen af hovedstørrelse, vinkelkombination, hårdmetal-føring, triple gear og udskifteligt sprayfilter fører til det bedste opgearingsvinkelstykke på markedet.

- Optimalt overblik takket være reducerede hovedmål og forbedret synvinkel (H = 13,5 mm; Ø = 10,3 mm)
- Meget rolig gang på grund af triple-gear-teknologi til komfortabelt arbejde uden forstyrrende vibrationer
- Komfortabel for behandler og patient på grund af meget lav lydstyrke under behandling (55 dB(A))
- Større bevægelsesfrihed takket være den patenterede KaVo 100°/19° hoved-/knævinkelkombination
- Større sikkerhed: Udskifteligt spray-mikrofilter garanterer optimal køling og forhindrer termisk beskadigelse af tanden
- **Nyhed i MASTERmatic-sortimentet:**
M05 L med minihoved særligt til bor med kort skaft (16,5 mm). Stor fordel ved særligt vanskeligt tilgængelige områder, f.eks. ved behandling af børn og ældre.

M25 L mat.-nr. 1.009.3630
M05 L Mini mat.-nr. 1.009.3640

Hovedvolumen i sammenligning



* Hovedstørrelser sammenlignet med verdens mest populære opgearingsvinkelstykke KaVo GENTLEpower 25 LP

Det kommer an på de indre værdier.

Meget små hovedmål til optimalt overblik, også ved komplekse præparationer i kindtandsområdet

3-dyse-spray med meget fin spraybefugtning til optimal køling

Glasstavs-lysleder med op til 25.000 lux til sikker identifikation af præparationsgrænserne

Lav lydstyrke, vibrationssvag gang under behandling (55 dB(A))

Triple-gear-teknologi til meget rolig gang uden forstyrrende vibrationer

KaVo Plasmatec-belægning til perfekt greb og fremragende hygiejne

Udskifteligt spray-mikrofilter til en konstant effektiv og forstyrrelsesfri spraykøling

Hightech-FG-spændetang til meget lang levetid og pålidelighed

KaVo trykknop-spændesystem med op til 30 N holdekraft til et sikkert og kraftfuldt greb ved boret med betjeningskomfort

KaVo original-keramik-kugleleje til usædvanlig lang levetid samt fremragende vibrationssvag gang

Patenteret KaVo 100°/19° hoved-/knævinkelkombination til optimalt overblik og bevægelsesfrihed

Kan termodesinficeres og steriliseres ved op til 135 °C

Kan sættes på alle KaVo INTRAmatic LUX-motorer og motorer med tilslutning iht. ISO 3964 / DIN 13940

KaVo MASTERmatic underdele – alsidig uden begrænsninger.

Sammensæt dit instrument helt efter eget ønske. Vores vinkelstykke-underdele med alle almindelige overførselshastigheder er den bedste forudsætning for dette. Kombinér disse med det ønskede INTRA-hoved. Nu har du din personlige – optimale løsning.



KaVo MASTERmatic LUX M20 L

- Overførsel 1:1
- Glasstavs-lysleder op til 25.000 lux
- **Praksis-standard** for karies-ekskavering
- Udskifteligt sprayfilter
- **Maksimal behandlingsfleksibilitet** og -muligheder med 14 skiftehoveder

Mat.-nr. 1.009.3620



KaVo MASTERmatic LUX M29 L

- Reduktion 7,4:1
- Glasstavs-lysleder op til 25.000 lux
- Særligt til Endo-anvendelser
- Udskifteligt sprayfilter
- **Maksimal behandlingsfleksibilitet** og -muligheder med 14 skiftehoveder
- **Kompatibel** med alle INTRA LUX-hoveder

Mat.-nr. 1.009.3580



KaVo MASTERmatic LUX M07 L

- Reduktion 2,7:1
- Glasstavs-lysleder op til 25.000 lux
- Til kariesekskavering og profylakse-anvendelser
- Udskifteligt sprayfilter
- **Maksimal behandlingsfleksibilitet** og -muligheder med 14 skiftehoveder
- **Kompatibel** med alle INTRA LUX-hoveder

Mat.-nr. 1.009.3610



KaVo MASTERmatic LUX M10 L

- Både til håndstykke- og til vinkelstykkebor
- Glasstavs-lysleder op til 25.000 lux
- Også til lette **ekstraorale teknikker** såsom protesekorrektioner

Mat.-nr. 1.009.3570

KaVo INTRA-hoveder – suveræn ståludførelse.

65 % hårdere end hidtil og dobbelt så deformationsbestandig som titan. Det er de nye KaVo INTRA-hoveder – de bedste og mest robuste nogensinde:

- Lang levetid – takket være anvendelse af topmoderne specialædelstål
- Hygiejnisk – på grund af reduktion af spalter og kanter
- Pålidelig – bedste KaVo-kvalitet og 2 års garanti
- Ubegrænsede muligheder – 14 skiftehoveder til alle indikationer



Ved specialanvendelser investerer du kun i ét instrumenthoved (et yderligere vinkelstykke behøves ikke!) og sparer derved hver gang op til

4.600,– Kr

14 skifteheder for bedste fleksibilitet.

I vores brede INTRA-hovedsortiment finder du altid det optimale hoved til dit behov. Vælg det ønskede hoved og kombinér dette med en vinkelstykke-underdel. Til alle anvendelser, for optimale resultater.

M07 L

- Reduktionsunderdel 2,7:1 med lys
- Indvendige adskilte kølemedier
- Plasmatec-belægning



Enkel udskiftning: KaVo INTRA-hoveder passer til alle KaVo-underdele

STANDARDPRÆPARATION

Ideel til kavitets- og kronepræparation,
til finish og ekskavering

M20 L (1:1)

M07 L (2,7:1)



PROFYLAKSE

Samvirker optimalt med alle gængse
børster og poleringskopper



M07 L (2,7:1)



KIRURGI

Ekstremt små dimensioner til mikrokirurgiske indgreb

M20 L (1:1)

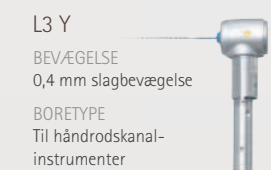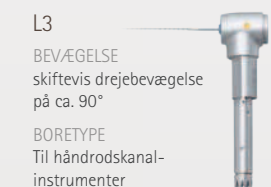

ENDODONTI

Til endodonti-anvendelse i forbindelse med
KaVo ESTETICA® E80, E70 eller E50

M29 L (7,4:1)

M20 L (1:1)




KaVo-hygiejne. Pleje til dine instrumenter til en fornuftig pris.

KaVo QUATTROcare PLUS 2124 A

- Optimal plejekvalitet med QUATTROcare PLUS og spray
- Nem, komfortabel håndtering og hurtigt programgennemløb
- Lave omkostninger til anskaffelse og forbrugsmateriale

Mat.-nr. 1.008.3805

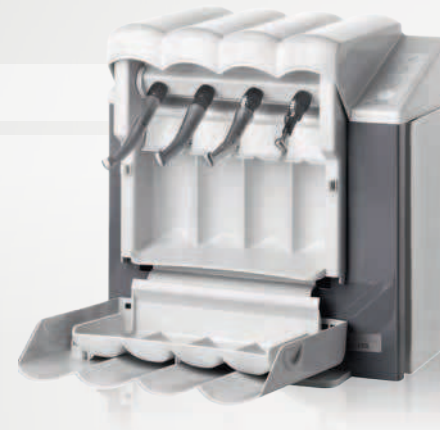

KaVo Spray

- Manuel pleje af instrumenter og turbiner
- Effektiv og værdibevarende

Mat.-nr. 0.411.9640



KaVo CLEANspray / DRYspray

- Manuel intensivrengøring til fjernelse af restprotein

Mat.-nr. 1.007.0573



KaVo-serviceydelser til dine produkter.

Høje krav behøver topservice – en særlig ekspert-hotline til KaVo-instrumenter garanterer sagkyndig og hurtig assistance ved alle dine henvendelser. Nyd derudover godt af vores omfattende KaVo-service. Uanset om det drejer sig om reservedele, der kan leveres hurtigt, aktuelle studier, brugervenlige seminarer eller prisfordelagtige udskiftningsdele. Vi glæder os til at høre fra dig.



Teknisk hotline



Videreuddannelse/seminarer



Reservedele



Udskiftningsdele



Reparationsservice



Studier



Anvendelsesrapporter

DIN PÅLIDELIGE PARTNER



Send en fax for at modtage yderligere information til:

+49 7351 56-1674

☐ Jeg er interesseret i at høre mere om KaVo MASTERmatic-instrumentserien. Vær venlig at kontakte mig.

Navn

Adresse

Postnummer/by

Telefon

Fax

E-mail

KaVo-kundenummer

Dato, underskrift



Læs mere på:
www.kavo.com/mastermatic

MASTERmatic Series	Beskrivelse	Mat.-nr.
MASTERmatic LUX M25 L	1: 5 vinkelstykke	1.009.3630
MASTERmatic LUX M05 L Mini	1: 5 vinkelstykke	1.009.3640
MASTERmatic LUX M07 L	2,7:1 underdel	1.009.3610
MASTERmatic LUX M20 L	1:1 underdel	1.009.3620
MASTERmatic LUX M29 L	7,4:1 underdel	1.009.3580
MASTERmatic LUX M10 L	1:1 håndstykke	1.009.3570

INTRA LUX-hoveder	Beskrivelse	Mat.-nr.
INTRA-hoved L68	1:1 overførsel	1.008.1833
INTRA-hoved L68 B	1:1 overførsel	1.008.1834
INTRA-hoved L67	2:1 reduktion	1.008.1832
INTRA hoved L66 B	3:1 reduktion	1.008.1831
INTRA-hoved L80	1:1 overførsel FG-spænding	1.004.4456
INTRA Mini hoved L52	1:1 overførsel	1.008.1825
INTRA Prophy-hoved L31	2:1 reduktion til "snap on screw on"	1.008.1824
INTRA EVA hoved L61 R	Dæmpet slag på 0,8 mm, 36 indgrebspositioner	1.008.1829
INTRA EVA hoved L61 G	Dæmpet slag på 0,8 mm, frit drejelig	1.008.1828
INTRA Endo hoved L3	Skiftevis drejebælgelse på 60°	1.008.1822
INTRA Endo hoved L3 Y	Slagbælgelse på 0,4 mm	1.008.1823
INTRA Endo hoved L53	Skiftevis drejebælgelse på 60°	1.008.1826
INTRA-hoved L62	10:1 reduktion	1.008.1830
INTRA Mikro hoved L22	Med ekstremt små dimensioner til mikrokirurgiske indgreb som f.eks. rodspidsresektion (gennem knoglevindue)	1.008.1835



KaVo. Dental Excellence.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban