

KaVo MASTERmatic serien

Den nya KaVo MASTERmatic serien.

DET BÄSTA DU KAN HA



KaVo. Dental Excellence.

KaVo MASTERmatic serien. Det bästa du kan ha.

Bästa resultat. Hög kvalitet.

Uppnå en perfekt åtkomst och maximal precision i alla tänkbara behandlingssituationer. Med den nya instrumentserien KaVo MASTERmatic.

Efter 10 år i toppen har GENTLEpower-programmet nu fått sin vägvisande efterföljare. Det här praktexemplet på tysk ingenjörskonst förenar ny innovation med alla beprövade egenskaperna i en enda serie. KaVo MASTERmatic serien har utvecklats i en enastående kvalitet för att du ska kunna utnyttja hela din potential. Vill du bara ha det bästa? Lev då upp till dina krav nu.

Den välldesignade KaVo MASTERmatic serien fortsätter med betydligt optimerade egenskaper. Det uppväxlade vinkelstyckets huvuden har reducerats i storlek med runt 20 % utan att tappa något av sin kraft. Upplev den åtkomsten som du behöver och den kraft som du vill ha. Beprövade tekniska milstolpar har behållits och förfinats, som t.ex. det utbytbara sprayfiltret.

Appropå utbytbar: Den välkända KaVo principen med utbytbara huvuden har vi behållit. Byt snabbt ut huvudet och arbeta vidare på en gång. Eller kombinera delar och huvud efter dina individuella behov.

Förresten, de äldre INTRA LUX huvudena och GENTLEpower delarna är kompatibla med de nya komponenterna.

KaVo master
series



OPTIMAL ÅTKOMST OCH BÄSTA SIKT

- Förminskat huvud
- Optimal vinkelkombination
- Ljuspositionering

MAXIMAL PRECISION

- Triple-Gear-teknik
- Hårdmetall
- Med mycket bra ergonomi

ENASTÅENDE TILLFÖRLITLIGHET

- KaVo kvalitet, 3 års garanti
- Made in Germany
- Utförliga nötningstester
- Utbytbara huvuden

Uppväxlat vinkelstycke M25 L /M05 L Mini - litet huvud, stor skillnad.

KaVo MASTERmatic M25 L.

Kombinationen av huvudens storlek, vinkelkombination, hårdmetall, Triple Gear och utbytbara sprayfilter gör den till ett av de bästa uppväxlade vinkelstyckena som finns på marknaden.

- Bäst möjliga sikt tack vare den reducerade storleken på huvudet och den förbättrade blickvinkeln (H = 13,5 mm; Ø = 10,3 mm)
- Arbeta mjukt tack vare Triple-Gear. Arbeta i lugn och ro utan störande vibrationer
- Bekvämt både för tandläkare och patient tack vare låg ljudnivå vid behandling (55 dB(A))
- Mer rörelseutrymme tack vare patenterad KaVo 100°/19° huvud-/knä vinkelkombination
- Mer säkerhet: utbytbara spraymikrofilter garanterar optimal kylning och förhindrar värmeskador på tanden
- **Nyhet i MASTERmatic serien:** uppväxlat vinkelstycke M05 L med minihuvud speciellt för borrar med kort skaft (16,5 mm). Mycket fördelaktigt vid extra svåråtkomliga områden som t.ex. vid behandling av barn och äldre.

M25 L art.-nr. 1.009.3630
M05 L Mini art.-nr. 1.009.3640

Huvudets volym i jämförelse



* Huvudens storlek jämfört med världens mest omtyckta uppväxlade vinkelstycke KaVo GENTLEpower 25 LP

Det är de inre värdena som räknas.

Mycket ringa omfång på huvudena för bästa sikt även vid komplexa behandlingar på molarer

3-hålsspray med mycket fin spridning för optimal kylning

Ljusledande glasstav med 25 000 LUX för att lätt kunna se behandlingsområdet

Låg ljudnivå, lite vibrationer vid behandlingen (55 dB(A))

Arbeta mjukt tack vare Triple-Gear. Arbeta i lugn och ro utan störande vibrationer

KaVo Plasmatec ytbeläggning för perfekt grepp och utmärkt hygien

Utbytningsbart spray mikrofilter för regelbunden effektiv och störningsfri spraykylning

Högteknologisk FG-spännhylsa för högsta hållbarhet och pålitlighet

KaVo tryckknappsspännsystemet med upp till 30 N hållkraft ger ett säkert och stadigt borrar, med hög användningskomfort

KaVo original keramiska kullager för övergenomsnittlig livslängd och extremt lite vibrationer

Patenterad KaVo 100°/19° huvud-/knä vinkelkombination för största rörelsefrihet och bästa sikt

Värmedesinficerbar och steriliserbar upp till 135 °C

Kan monteras på alla KaVo INTRAmatic LUX motorer och motorer med anslutning enligt ISO 3964 / DIN 13940

KaVo MASTERmatic komponenter – oerhört mångsidiga.

Sätt ihop instrumenten helt enligt dina egna föreställningar. Våra vinkelstyckskomponenter i alla vanliga överföringskapaciteter skapar den bästa grunden för detta. Kombinera dessa med det INTRA huvudet du vill ha. På så sätt har du din individuella, optimala lösning.



KaVo MASTERmatic LUX M20 L

- Utväxling 1:1
- Glasstav ljusledare upp till 25 000 lux
- **Standard i mottagningarna** när det gäller karies exkavation
- Utbytbar sprayfilter
- **Maximal behandlingsflexibilitet** med 14 olika huvuden

Art.nr. 1.009.3620



KaVo MASTERmatic LUX M29 L

- Nedväxlad 7,4:1
- Glasstav ljusledare upp till 25 000 lux
- Speciellt för Endo behandlingar
- Utbytbar sprayfilter
- **Maximal behandlingsflexibilitet** med 14 olika huvuden
- **Kompatibel** med alla INTRA LUX-huvuden

Art.nr. 1.009.3580



KaVo MASTERmatic LUX M07 L

- Nedväxlad 2,7:1
- Glasstav ljusledare upp till 25 000 lux
- För kariesexkavation och profylaktiska behandlingar
- Utbytbar sprayfilter
- **Maximal behandlingsflexibilitet** med 14 olika huvuden
- **Kompatibel** med alla INTRA LUX-huvuden

Art.nr. 1.009.3610



KaVo MASTERmatic LUX M10 L

- Både till handstycks- och vinkelstycksborr
- Glasstav ljusledare upp till 25 000 lux
- Även för lätta **extraorala tekniker** som proteskorrigeringar

Art.nr. 1.009.3570

KaVo INTRA LUX huvuden – fenomenala linstrument. Helt i stål.

65 % hårdare än tidigare och dubbelt så formbeständiga som titan.
Det är de nya KaVo INTRA huvudena – de bästa och mest hållbara som någonsin har funnits:

- Hållbara – tack vare ett speciellt modernt rostfritt stål
- Hygieniska – tack vare reducering av spalter och kanter
- Tillförlitliga – bästa KaVo kvalitet och 3 års garanti
- Alla möjligheter – 14 utbytbara huvuden för alla indikationer



Vid specialoperationer behöver du bara investera i ett enda instrument-huvud (inget ytterligare vinkelstycke behövs!) och sparar då upp till

5000 kr!

14 utbytbara huvuden för högsta flexibilitet.

Med vårt breda urval av INTRA huvuden, har du alltid ett optimalt huvud till hands. Välj det önskade huvudet och kombinera det med ett vinkelstycke. För alla sorters behandlingar, för bästa resultat.

M07 L

- Reduktionskomponent 2,7:1 med ljus
- Invändiga separata kylmedier
- Plasmatec ytskikt





Lätt att byta: KaVo INTRA huvuden passar alla KaVo delar


STANDARDBEHANDLING		PROFYLAX	KIRURGI	ENDODONTI	
Perfekt för behandling för kaviteter och kronor, för att efterbehandla och exkavera		Perfekt samspel mellan de vanligaste borstarna och kopparna som finns	Extremt små skalor för mikro-kirurgiska ingrepp	För endodontibehandlingar tillsammans med KaVo ESTETICA® E80, E70 eller E50	
M20 L (1:1)	M07 L (2,7:1)	M07 L (2,7:1)	M20 L (1:1)	M29 L (7,4:1)	M20 L (1:1)
L68 UTVÄXLING 1 : 1 MAX. VARVTAL 40 000 BORRTYP vinkelstycksborr 2,35 mm L80 UTVÄXLING 1 : 1 MAX. VARVTAL 40 000 BORRTYP FG-borr 1,6 mm L68 B UTVÄXLING 1 : 1 MAX. VARVTAL 40 000 BORRTYP vinkelstycksborr 2,35 mm	L66 B UTVÄXLING 3 : 1 MAX. VARVTAL 13 300 BORRTYP vinkelstycksborr 2,35 mm L52 mini UTVÄXLING 1 : 1 MAX. VARVTAL 40 000 BORRTYP vinkelstycksborr 2,35 mm L67 UTVÄXLING 2 : 1 MAX. VARVTAL 20 000 BORRTYP vinkelstycksborr 2,35 mm	L31 UTVÄXLING 2 : 1 MAX. VARVTAL ca 3 000 BORRTYP Poleringskoppar och borstar L61 R RÖRELSE dämpad amplitud 0,8 mm 36 inställningslägen BORRTYP Interdentalfilar, t.ex. intensiv L53 RÖRELSE rotation i växlande riktning från ca 60° BORRTYP vinkelstycksborr 2,35 mm L61 G RÖRELSE dämpad amplitud 0,8 mm fritt roterande BORRTYP Interdentalfilar, t.ex. intensiv	L22 UTVÄXLING 1 : 1 MAX. VARVTAL 20 000 BORRTYP rundborr resp. konisk borr storl. 0 och 2	L53 RÖRELSE rotation i växlande riktning från ca 60° BORRTYP För rotkanals instrument 2,35 mm L3 RÖRELSE rotation i växlande riktning från ca 90° BORRTYP För karpaltunnel instrument L3 Y RÖRELSE 0,4 mm amplitud BORRTYP För karpaltunnel instrument L62 UTVÄXLING 10 : 1 MAX. VARVTAL 540 BORRTYP För rotkanals instrument 2,35 mm	L68 B UTVÄXLING 1 : 1 MAX. VARVTAL 40 000 BORRTYP vinkelstycksborr 2,35 mm L66 B UTVÄXLING 3 : 1 MAX. VARVTAL 13 300 BORRTYP vinkelstycksborr 2,35 mm

KaVo hygien. Prisvärd skötsel av dina instrument.

KaVo QUATTROcare PLUS 2124 A

- Optimal kvalitet på skötseln med QUATTROcare PLUS och spray
- Enkel och bekväm hantering med ett snabbt programutförande
- Låga förvärvs- och förbrukningsmaterialskostnader

Art.nr. 1.008.3805

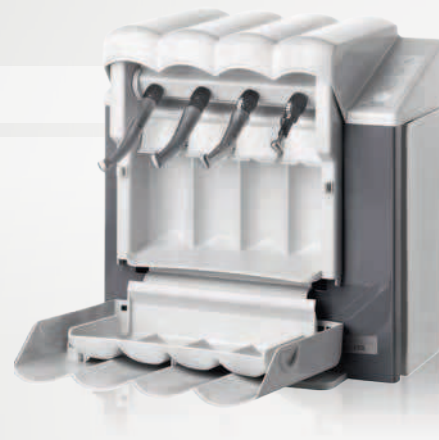

KaVo spray

- Manuell skötsel av instrument och turbiner
- Effektiv och värdestabil

Art.nr. 0.411.9640



KaVo CLEANspray / DRYspray

- Manuell intensivrengöring vid restproteinsborttagning

Art.nr. 1.007.0573



KaVo service för dina produkter.

Höga anspråk behöver bästa servicen – en speciell expert hotline för KaVo instrument garanterar dig sakkunnigt, snabbt stöd om du har frågor. Dra dessutom fördel av vår omfattande KaVo service. Lättillgängliga reservdelar, aktuella studier, användarvänliga seminarier eller prisvärda utbytesdelar. Vi hjälper dig gärna.



Teknisk support



Utbildning/seminarier



Reservdelar



Utbytbara delar



Reparation



Studier



Användarrapporter

PARTNERSKAP FÖR DITT FÖRTROENDE



För mer information kontakta oss på:
08-590 047 00, info@kavo.se, eller
faxes till 08-590 047 10

☐ Jag är intresserad av KaVo MASTERmatic instrumentserie.
Var vänlig och kontakta mig.

Namn

Gata

Postnr./ort

Telefon

Fax

E-post

KaVo kundnummer

Datum, underskrift



Mer information under
www.kavo.com/mastermatic

MASTERmatic serien	Beskrivning	Art.nr
MASTERmatic LUX M25 L	1: 5 vinkelstycke	1.009.3630
MASTERmatic LUX M05 L mini	1: 5 vinkelstycke	1.009.3640
MASTERmatic LUX M07 L	2,7:1 komponent	1.009.3610
MASTERmatic LUX M20 L	1:1 komponent	1.009.3620
MASTERmatic LUX M29 L	7,4:1 komponent	1.009.3580
MASTERmatic LUX M10 L	1:1 handstycke	1.009.3570

INTRA LUX huvuden	Beskrivning	Art.nr
INTRA Huvud L68	1:1 utväxling	1.008.1833
INTRA Huvud L68 B	1:1 utväxling	1.008.1834
INTRA Huvud L67	2:1 reducering	1.008.1832
INTRA Huvud L66 B	3:1 reducering	1.008.1831
INTRA Huvud L80	1:1 utväxling FG-spänning	1.004.4456
INTRA mini huvud L52	1:1 utväxling	1.008.1825
INTRA Profylax Huvud L31	2:1 reducering för snap on screw on	1.008.1824
INTRA EVA huvud L61 R	Dämpad amplitud från 0,8 mm, 36 inställningslägen	1.008.1829
INTRA EVA huvud L61 G	Dämpad amplitud från 0,8 mm, fritt roterande	1.008.1828
INTRA Endo huvud L3	Rotation i växlande riktning från 60°	1.008.1822
INTRA Endo huvud L3 Y	Amplitud från 0,4 mm	1.008.1823
INTRA Endo huvud L53	Rotation i växlande riktning från 60°	1.008.1826
INTRA Huvud L62	10:1 reducering	1.008.1830
INTRA mikro huvud L22	Med extremt små skalor för mikrokirurgiska ingrepp som t.ex. rotspetsresektion (genom benfönster)	1.008.1835



KaVo. Dental Excellence.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban