

KaVo MASTERtorque™ Turbine mit Direct Stop Technology


# Ganz stark. Ganz leise. Ganz entspannt arbeiten.

**NEU**

KaVo MASTERtorque™  
mit Direct Stop Technology

## KaVo master series

Wahre Meister kennen keine Kompromisse.

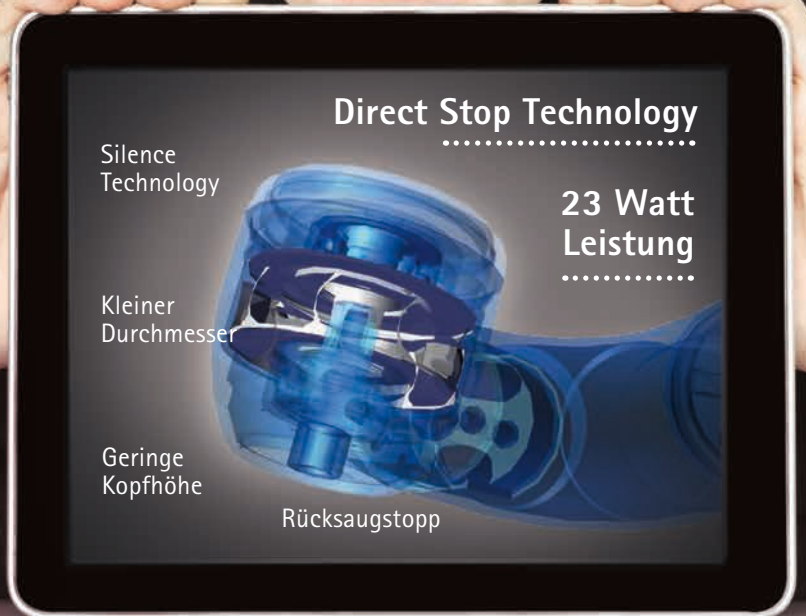

KaVo. Dental Excellence.

## Ganz stark.

KaVo MASTERtorque – erleben Sie eine völlig neue Leistungsdimension mit starken 23 Watt Spitzenleistung. Beste Bedingungen für komfortables und effizientes Präparieren.

- Mehr Leistung**  
23 Watt Spitzenleistung für ca. 20% mehr Durchzugskraft\*
- Mehr Präzision**  
Stabile Arbeitsdrehzahl und hohe Durchzugskraft bis in die höchste Leistungsstufe
- Mehr Komfort**  
Effizientes und effektives Präparieren auch bei geringem Anpressdruck

\* Vergleich mit KaVo GENTlesilence 8000 B

Das Maximum an Leistung:  
**23 Watt**  
für stabile Arbeitsdrehzahl

## Ganz leise.

Die neue KaVo MASTERtorque kombiniert bewährte Silence-Technology mit weiterer Frequenzoptimierung. Beste Bedingungen für geräuscharmes, angenehmes Präparieren, selbst bei voller Drehzahl und beim Auslaufen der Turbine.

- Weniger Laufgeräusch**  
Effektive Frequenzoptimierung sorgt für angenehmes Turbinengeräusch und geringe Lautstärke von nur 57 dB(A)

### Geräuschvergleich



Geräuschvergleich KaVo MASTERtorque mit anderen Turbinen

**24** Monate  
Garantie

## Ganz entspannt arbeiten – mit Direct Stop Technology.


Schneller Stopp – mit Sicherheit. Die neue Direct Stop Technology (DST) reduziert die Nachlaufzeit der KaVo MASTERtorque um

\*\* im Mittelwert

ca. 60 % und stoppt in nur einer Sekunde\*\*. Beste Bedingungen für rundum sicheres und entspanntes Arbeiten.


- Sicheres Präparieren**  
Innovative Direct Stop Technology stoppt den Bohrer in einer Sekunde\*\* und sorgt so für mehr Sicherheit bei der Behandlung

### Nachlaufzeit des Bohrers

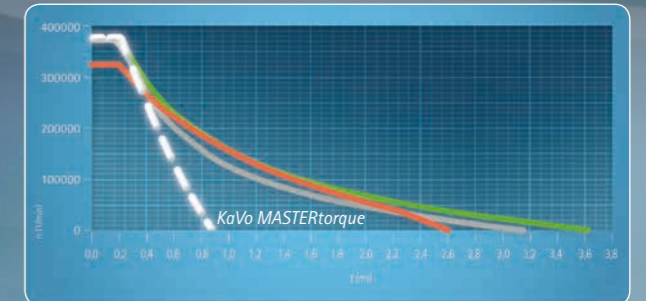

Nachlaufzeit im Vergleich zu anderen Turbinen

### Rücksaugung am Kopf

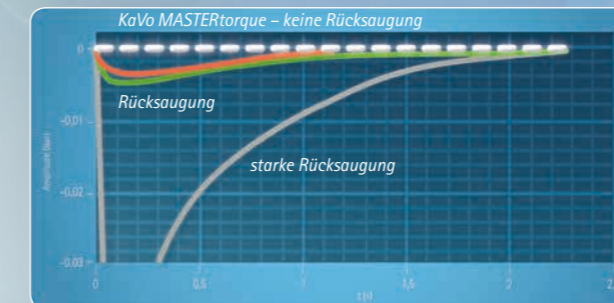

Rücksaugung bzw. Unterdruck am Kopf

- Sichere Hygiene**  
Kürzeste Nachlaufzeit verhindert Rücksaugen von Aerosolen und Einsaugen von Partikeln in die Kugellager für dauerhafte Hygiene und lange Lebenszeit

- Mit Sicherheit schneller und effizienter arbeiten**  
DST ermöglicht sofortiges Weiterarbeiten nach Absetzen des Bohrers, z. B. nach der Präparationskontrolle oder beim Wechseln des Bohrers

MASTERtorque  
COLOR

RE3TEAM

# Ganz hervorragende Sicht.

Die kompakte, ergonomische Bauweise der KaVo MASTERtorque und das einzigartige KaVo Lichtkonzept schaffen beste Arbeits- und Sichtverhältnisse am Präparationsbereich.



Kopfgröße im Vergleich zum Wettbewerb

## Mehr sehen

- Bohrerseitig reduzierter Durchmesser des Kopfes. Kopfhöhe von nur 13,1 mm – bei 19 mm Bohrer nur 20 mm Kopfhöhe
- Mit patentierter KaVo 100°/19° Kopf-/Kniewinkelkombination

## Mehr Licht

- Präparationsbereiche sind jederzeit optimal ausgeleuchtet
- Präparationsbereiche sind im Spraybetrieb bestens sichtbar, Licht- und Sprayaustritt sind versetzt angeordnet



Optimale Sicht durch versetzten Spray-Lichtaustritt

## Mehr als nur eine Turbine

Durch die Kombination aus 20% mehr Leistung, geringerem Gewicht und der innovativen Direct-Stop-Sicherheitstechnologie ist KaVo MASTERtorque eine echte Alternative zum Schnellläufer



Spezial-Farbeditionen  
anthrazit und braun



KaVo. Dental Excellence.

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban