

Scopri un nuovo mondo all'insegna della semplicità!

Noi abbiamo la soluzione. Tu hai tutti i vantaggi!



KaVo **master** series

Sperimenta la massima potenza, il comfort e l'innovazione di KaVo.



KaVo **expert** series

Affidati alle prestazioni all'avanguardia offerte da KaVo.



KaVo **smart** series

Accedi con convenienza alla sicurezza della qualità KaVo.



KaVo. Dental Excellence.

I dettagli del prodotto e le caratteristiche che lo rendono così speciale.

La tecnologia delle turbine KaVo definisce gli standard. Più di 100 anni di esperienza con oltre cinque milioni di strumenti venduti in tutto il mondo testimoniano la vera KaVo Dental Excellence. Noi attribuiamo importanza alla precisione e alla sicurezza. Una qualità affidabile nel tempo per i vostri strumenti per noi è importante. Con le nostre serie KaVo Master, Expert e Smart offriamo una gamma equilibrata per ogni fascia di prezzo, senza per questo chiedervi di rinunciare al comfort e alla qualità. Le soluzioni innovative rendono gli strumenti KaVo particolarmente interessanti. I pezzi di ricambio disponibili a lungo termine e la durata di vita garantiscono la sicurezza degli investimenti.

E' una reale opportunità!



● ● **Maggiore durata**
Robusto alloggiamento in acciaio inox

● ● ○ **Raffreddamento di precisione**
Spray a 4 getti

● ● **Rotazione perfetta**

● **Estremamente silenziosa**
grazie al flusso ottimizzato della Silence Technology

● ● ○ **Maggiore durata**
Cuscinetto a sfere in ceramica

● ● ○ **Sicura e di lunga durata**
Forza di tenuta della fresa fino a 32 N

● ● ○ **Coppia elevata e numero di giri stabile**
Potenza 23 Watt (KaVo Master)
Potenza 18 Watt (KaVo Expert)
Potenza 16 Watt (KaVo Smart)

● ● ○ **Cambio della fresa più agevole**
Non serve usare la forza

● **Buona visibilità e accessibilità**
Ridotte dimensioni della testina

● **Massima sicurezza per voi e i vostri pazienti**
DST Technology
- La fresa si arresta completamente in un solo secondo
- Nessuna riaspirazione



KaVo **master** series

KaVo **expert** series

KaVo **smart** series



La migliore tecnologia, così facile.

● ● ○ Visuale perfetta
Luce focalizzata
- Cono di luce libero per la fresa

● ● ● Facile accessibilità
Combinazione ideale degli angoli 100° / 19°

● La migliore impugnatura anti-scivolo
Superficie Plasmatec

● Nessun intasamento dello spray
Filtro acqua sostituibile

● Regolazione passiva della pressione

● ● ● Universale
Per diversi modelli di attacchi

La soluzione facile per ogni esigenza.

KaVo smart series

Ergonomia

- Forma ergonomica
- Testina piccola (altezza: 14,5 mm)

Potenza

- Sistema spray a 4 ugelli
- Potenza elevata (16 W)
- Bassa Rumorosità (65 dB(A))

QUALITÀ

- Forte tenuta della pinza di serraggio (fino a 32 N)
- Attacco MULTIflex - cambio facile
- MADE IN GERMANY
- 12 mesi di garanzia

KaVo expert series

Ergonomia

- Forma ergonomica
- Testina piccola (altezza: 13,8 mm)
- Angolo testina/impugnatura a 100 / 19

Potenza

- Sistema spray a 4 ugelli
- Potenza elevata (18 W)
- Bassa Rumorosità (62 dB(A))
- Bassa riaspirazione
- Guide dei cuscinetti in metallo duro

QUALITÀ

- Forte tenuta della pinza di serraggio (fino a 32 N)
- Attacco MULTIflex - cambio facile
- Filtro acqua sostituibile
- MADE IN GERMANY
- 18 mesi di garanzia

KaVo master series

Ergonomia

- Forma ergonomica
- Testina piccola (altezza: 13,1 mm)
- Angolo testina/impugnatura a 100 / 19
- Superficie in Plasmatec
- Design della testina migliorato (luce e visibilità)

Potenza

- Sistema spray a 4 ugelli
- Potenza elevata (23 W)
- Silence Technology: Bassa Rumorosità (57 dB(A))
- Guide dei cuscinetti in metallo duro
- Regolazione passiva della pressione
- Disponibile nelle versioni per vari attacchi
- Direct Stop Technology: Nessuna riaspirazione / la fresa si ferma in 1 sec.

QUALITÀ

- Forte tenuta della pinza di serraggio (fino a 32 N)
- Attacco MULTIflex - cambio facile
- Filtro acqua
- MADE IN GERMANY
- 24 mesi di garanzia



Semplicità significa più sicurezza e potenza.

KaVo **master** series

Il design compatto ed ergonomico della serie KaVo Master con l'esclusivo concetto di illuminazione KaVo garantisce il miglior funzionamento e la visibilità ideale nella zona di preparazione. Fino a 23 Watt di potenza di picco garantiscono una preparazione comoda ed efficiente. La Silence-Technology, combinata con l'ulteriore ottimizzazione della frequenza, pone le basi ideali per un funzionamento a bassa rumorosità. Arresto rapido per maggior sicurezza. La nuova Direct Stop Technology (DST) riduce il tempo di arresto della serie KaVo Master di circa il 60%, in modo da poter lavorare in modo sicuro e conveniente.

La serie KaVo Master offre:




Maggiore sicurezza

- La fresa si arresta completamente in un solo secondo grazie alla DST Technology
- Nessuna riaspirazione



Potenza

- Fino a 23 Watt di potenza
- Senza vibrazioni

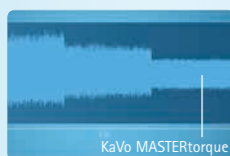

Rumorosità minima

- Estrema silenziosità grazie al flusso ottimizzato della Silence Technology



Maneggevolezza perfetta

- Superficie antiscivolo e un'eccellente aderenza grazie al Plasmatec
- Facile accessibilità grazie alla combinazione angoli a 100 / 19 e alle dimensioni ridotte della testa



Semplicità significa ottimizzare prezzo e prestazioni.

KaVo **expert** series

I veri esperti conoscono il proprio valore. La serie KaVo Expert ha una maggiore efficienza, al miglior prezzo. Tutti i prodotti supportano perfettamente il vostro lavoro quotidiano, per un flusso di lavoro regolare. Gli interventi di manutenzione e pulizia degli strumenti sono ridotti al minimo. La serie KaVo Expert fa a meno del superfluo: potrete fare affidamento su uno strumento efficiente, che ha dimostrato il proprio valore in tutto il mondo, in milioni di trattamenti.

La Serie KaVo Expert offre:



Operazioni rapide

- Cambio facile del filtro
- Pulizia semplice e veloce e spray sempre perfetti



Massima visibilità

- Illuminazione non abbagliante della zona di preparazione



Maneggevolezza ottimale

- Facile accessibilità grazie alla combinazione angoli a 100 / 19
- Ridotte dimensioni della testina



Tutta l'efficienza che serve

- Massima durata e affidabilità, con conseguente riduzione dei costi a lungo termine



Una panoramica veloce.

Denominazione del prodotto	Serie	Codice n.	Illuminazione	Dimensione della testina Ugelli spray	Potenza Watt	Rumorosità dB(A)	Attacco
MASTERtorque							KaVo master series
MASTERtorque LUX	M9000 L	1.008.7900	Si	Standard - 4	23	57	KaVo MULTIflex
MASTERtorque LUX	M9000 LS	1.008.5400	Si	Standard - 4	19	57	Sirona*
MASTERtorque LUX (marrone cioccolato)	M9000 L COLOR	1.007.9900	Si	Standard - 4	23	57	KaVo MULTIflex
MASTERtorque LUX (antracite)	M9000 L COLOR	1.007.7100	Si	Standard - 4	23	57	KaVo MULTIflex
MASTERtorque Mini LUX	M8700 L	3.001.0000	Si	Mini - 3	19	59	KaVo MULTIflex
MASTERtorque Mini LUX	M8700 LS	3.001.0600	Si	Mini - 3	19,5	59	Sirona*

EXPERTtorque							KaVo expert series
EXPERTtorque LUX	E680 L	1.006.8700	Si	Standard - 4	18	62	KaVo MULTIflex
EXPERTtorque	E680 C	1.006.9000	No	Standard - 4	18	62	KaVo MULTIflex
EXPERTtorque Mini LUX	E677 L	1.007.3600	Si	Mini - 3	15	65	KaVo MULTIflex
EXPERTtorque LUX	E680 LS	1.006.4600	Si	Standard - 4	16	62	Sirona*
EXPERTtorque LUX	E680 LN	1.006.4700	Si	Standard - 4	16	62	NSK PTL-CL*
EXPERTtorque Mini LUX	E677 LN	1.006.0100	Si	Mini - 3	12	65	NSK PTL-CL*
EXPERTtorque LUX	E680 LM	1.006.4300	Si	Standard - 4	18	62	Morita Alpha Con.*
EXPERTtorque Mini LUX	E677 LM	1.006.3800	Si	Mini - 3	14	65	Morita Alpha Con.*

SMARTtorque							KaVo smart series
SMARTtorque LUX	S619 L	1.008.1641	Si	Standard - 4	16	65	KaVo MULTIflex
SMARTtorque	S619 C	1.008.1642	No	Standard - 4	16	65	KaVo MULTIflex
SMARTtorque Mini LUX	S615 L	1.008.1643	Si	Mini - 1	13	65	KaVo MULTIflex
SMARTtorque	S609 C	1.008.1644	No	Standard - 4	16	65	A 4 vie (Midwest)
SMARTtorque Mini	S605 C	1.008.1645	No	Mini - 1	13	65	A 4 vie (Midwest)
SMARTtorque	S608 C	3.001.6560	Si	Standard - 4	16	65	A 2 vie (Borden)

Denominazione del prodotto	Codice n.	Illuminazione	Regolazione spray	Collegamento
Attacchi MULTIflex				
MULTIflex LUX 465 LED	1.007.3197	LED	con posizione di bloccaggio	Attacco a 4 vie Lux
MULTIflex LUX 465 LRN	0.553.1550	Lampada ad alta pressione	con posizione di bloccaggio	Attacco a 4 vie Lux
MULTIflex LUX Midwest	0.553.1390	Bacchetta di vetro	No	Collegamento da luce fredda Midwest
MULTIflex LUX 460LED	1.007.3201	LED	No	Attacco a 4 vie Lux
MULTIflex LUX 460LE	1.001.7599	Lampada ad alta pressione	No	Attacco a 4 vie Lux
MULTIflex 465 RN	0.553.1600	No	con posizione di bloccaggio	Collegamento standard a 4 vie
MULTIflex LUX 460E	1.001.7600	No	No	Collegamento standard a 4 vie
MULTIflex 457	0.553.1210	No	No	Collegamento standard a 4 vie

* Marchi registrati delle rispettive società



KaVo. Dental Excellence.



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban