

# Gegen Reflux: Protect-Kanülen von Dürr Dental

Gleich mitbestellen!



Nebenlufteinlässe können verhindern, dass es beim „Ansaugen“ der Kanüle zu einem Rückfluss von kontaminierten Sekreten aus dem Saugsystem kommt.

## Universalkanüle Protect

Die ergonomisch geformten und autoklavierbaren Kanülen zur Spraynebelabsaugung sind selbst mit Nebenlufteinlässen äußerst leise.

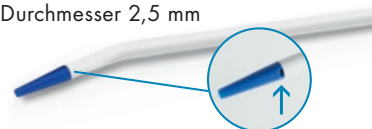
- 20er Pack, Grau ■
- 5er Pack, Grau ■
- 5er Pack, Gelb ■
- 5er Pack, Blau ■



## Chirurgische Einwegkanüle




Die ca. 17 cm lange Kanüle mit dem  $\varnothing$  2,5 mm verfügt über eine Spitze mit integrierten Protect-Nebenlufteinlässen. Diese bietet den bestmöglichen Schutz vor Reflux aus dem Saugsystem.

- 20er Pack, Kanülen-Durchmesser 2,5 mm
- 100er Pack, Kanülen-Durchmesser 2,5 mm



# Jetzt bei Ihrem Fachhändler bestellen:

Ja, Orotol® hat mich überzeugt.  
Ich bestelle (bitte Menge angeben):

-  **Orotol® plus Sauganlagen-Desinfektion**  
Gebindegröße: 2,5 l-Flasche
-  **MD 555 cleaner Spezialreiniger**  
Gebindegröße: 2,5 l-Flasche
-  **MD 550 Mundspülbecken-Reiniger**  
Gebindegröße: 750 ml-Flasche

Es gelten die Preise und allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweils die Bestellung annehmenden Dental-Depots.

# Das starke Team gegen Keime, Schlamm und Co.

Orotol® plus und MD 555 cleaner



PO07-137-01 / App-dd.de / 0/01/01 Technische Änderungen vorbehalten

Absender \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Strasse: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Datum/Unterschrift: \_\_\_\_\_



# Schluss mit Ablagerung und Verstopfung

## Ungefähr die Hälfte aller Sauganlagen ist in ihrer Leistung eingeschränkt

Der Grund: viele Anlagen werden zwar desinfiziert, aber nicht richtig gereinigt. Das aber ist dringend nötig: Schließlich hat man es hier mit vielen aggressiven Stoffen zu tun, wie z.B. Blut, Sekrete, Zahnmaterial, Füllungswerkstoff oder Prophylaxe-Pulver. Diese bilden einen äußerst zähen Schlamm. Das führt zu Verstopfungen, die einen Leistungsabfall und im schlimmsten Fall einen kompletten Praxisstillstand zur Folge haben können.

### Die Lösung von Dürr Dental: Orotol® plus und MD 555 cleaner

Orotol® plus und MD 555 cleaner schützen in Kombination alle Sauganlagen-Bestandteile (auch Leitungen!) vor Ablagerungen, Verkeimung und Verkrustung. Bei regelmäßiger Anwendung können Sie eine Leistungsbeeinträchtigung verhindern und das Leben Ihrer Sauganlage verlängern.



Mit Orotol® plus und MD 555 cleaner



Abscheidebehälter, schlammfrei



Zentrifugentrommel läuft rund - ohne Schlamm



Zentrifugengehäuse, Verkrustungen sind hier ausgeschlossen



Ohne Orotol® plus und MD 555 cleaner



Abscheidebehälter, voller Schlamm



Zentrifugentrommel, durch Schlamm in der Leistung beeinträchtigt



Zentrifugengehäuse, verkrustet - Totalausfall der Saugmaschine

# Ein starkes Team für die Sauganlage

## Orotol® plus Sauganlagen-Desinfektion

Schaumfreies, hochergiebiges Flüssig-Konzentrat für die gleichzeitige Reinigung, Desinfektion, Desodorierung und Pflege aller Sauganlagen und Amalgamabscheider.

- Für Saugsysteme, von führenden Einheitenherstellern empfohlen
- Keine Resistenzbildung gegen Keime
- Geprüfte Materialverträglichkeit
- Werterhaltend für die Sauganlage
- Löst Biofilm und beugt Verschleimung vor (Blut, Proteine)
- Langzeitwirkung
- Breites Wirkungsspektrum

### Wirkstoffe

QAV

### Gebindegröße

1 l-Flasche  
2,5 l-Flasche

### Anwendung im

OroCup

## Orotol® plus: Konsequenter gegen

- Bakterien
- Hefepilze
- Viren (inkl. HBV, HCV, HIV) und Coronaviren



## MD 555 cleaner Spezialreiniger

Schaumfreies Konzentrat für zahnärztliche Sauganlagen und Amalgamabscheider.

- Starke Reinigungskraft gegen Ablagerungen von Pulverstrahlmitteln
- Löst Verkrustungen und Verschleimungen aus Kalk und Prophylaxepulver (Entkalker)
- Ideal in Kombination mit Orotol® plus oder Orotol® ultra
- Wirkungsvolle Zusammensetzung aus organischen Säuren und schaumfreien Tensiden

### Gebindegröße

2,5 l-Flasche

### Anwendung im

OroCup

## MD 555 cleaner: Konsequenter gegen

- Prophylaxe-Pulver
- Prophylaxe Pearl-Produkte
- Salze/Carbonate
- Kalk



**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban