

**Wählen Sie Ihr Lieblingsband nach Ihren Präferenzen:  
Ob Composit-Tight® 3D Fusion™ Bänder ...**

	Kinderzähne	Prämolar	klein-zervikal	Prämolar und kleine Molare	Molar	Molar groß-zervikal
<b>FX Bänder</b>	Composit-Tight® 3D Fusion™ Matrizenbänder					
	0,038 mm dünn					
	Höhe	FX100 4,4 mm	FX150 4,1 mm Subg. 6,0 mm	FX175 5,6 mm	FX200 6,6 mm	FX300 6,0 mm Subg. 8,7 mm
<b>Firm Bänder</b>	Composit-Tight® 3D Fusion™ Firm Matrizenbänder					
	0,038 mm dünn					
	Höhe	FXH100 4,3 mm	FXH150 4,3 mm Subg. 5,9 mm	FXH175 5,3 mm	FXH200 6,1 mm	FXH300 6,1 mm Subg. 7,7 mm

**... oder unsere altbewährten Matrizenbänder**


<b>SXR Bänder</b>	Slick Bands™ XR Matrizenbänder					
	0,038 mm dünn					
	Höhe	SXR100 4,6 mm	SXR150 3,8 mm Subg. 5,4 mm	SXR175 5,4 mm	SXR200 6,4 mm	SXR300 6,4 mm Subg. 8,6 mm
<b>SM Bänder</b>	Slick Bands™ Matrizenbänder					
	0,038 mm dünn					
	Höhe	SM100 4,6 mm	SM150 3,8 mm Subg. 5,4 mm	SM175 5,4 mm	SM200 6,4 mm	SM300 6,4 mm Subg. 8,6 mm
<b>M Bänder</b>	Composit-Tight® 3D Matrizenbänder					
	0,035 mm dünn					
	Höhe	M050 3,2 mm Subg. 4,2 mm	M100 4,6 mm	M150 3,8 mm Subg. 5,4 mm	M175 5,5 mm	M200 6,4 mm Subg. 8,6 mm
<b>AU Bänder</b>	Composit-Tight Gold® Matrizenbänder					
	0,035 mm dünn					
	Höhe	AU050 3,2 mm Subg. 4,2 mm	AU100 4,6 mm	AU150 3,8 mm Subg. 5,4 mm	AU200 6,4 mm	AU300 6,4 mm Subg. 8,6 mm
<b>B Bänder</b>	Composit-Tight® Original Matrizenbänder					
	0,035 mm dünn					
	Höhe	B050 3,2 mm Subg. 4,2 mm	B100 4,6 mm	B150 3,8 mm Subg. 5,4 mm	B200 6,4 mm	B300 6,4 mm Subg. 8,6 mm

# Composit-Tight® Matrix Forceps

Precise Placement, Unbeatable Grip.



**Der Griff hat es in sich!** Die Matrizenbänder lassen sich ohne Mühe ganz einfach entfernen.

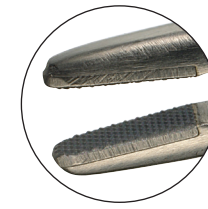


**Unschlagbarer Halt:** Die Wolframcarbid-Spitzen bieten hervorragenden Halt und taktile Kontrolle bei Füllen mit schwierigem Zugang.

Matrizenbandhalter  
Art.Nr. BFA-1


**Präzise Platzierung:** Die Spitzen haben einen Winkel von 75° Grad mit okklusal-gingivaler Orientierung, wodurch ein besserer Platzierungswinkel als bei einer Tupferzange möglich ist. Die kleinen Wolframcarbid-Spitzen ermöglichen Ihnen, die Matrizenbänder an ihrem oberen Rand zu greifen, sodass eine Verformung im approximalen Bereich des Bands verhindert wird.

## PerForm™


Kontaktpunktformer

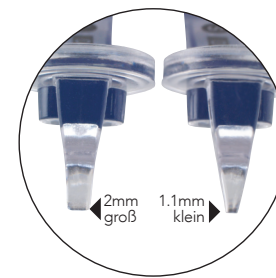


**So funktioniert es:**

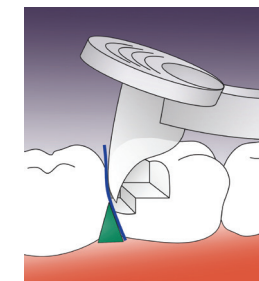

**Schritt 1:** Bringen Sie die erste Kompositschicht ein. Drücken Sie PerForm in die ungehärtete Kompositschicht. (distal, Abb. 1)

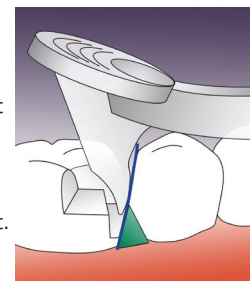

Oder drücken und ziehen Sie PerForm in die ungehärtete Kompositschicht. (mesial, Abb. 2)

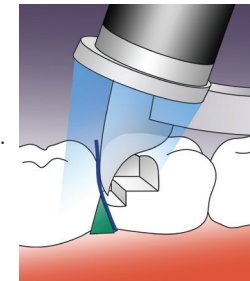

**Schritt 2:** Platzieren Sie die Polymerisationslampe direkt auf der Linse und polymerisieren Sie.

## PerForm™

Artikel	Beschreibung	Inhalt
CFK01	PerForm™ Starter-Set	1 je Größe
CF100	1,1 mm kleine Instrumente	2/Pck.
CF200	2,0 mm große Instrumente	2/Pck.

## Garrison Dental Solutions

Carlstrasse 50  
D-52531 Übach-Palenberg  
Tel. +49 (0)2451 971-409  
Fax +49 (0)2451 971-410  
E-Mail: info@garrisonsdental.net  
Web: www.garrisonsdental.com

**Garrison**  
Dental Solutions

\*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbigkeit etc. Abweichungen vom Originalprodukt aufweisen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.



# Composit-Tight® 3D Fusion™

Teilmatrixsystem für Klasse II Kavitäten



**Garrison**  
Dental Solutions

# Composi-Tight® 3DFusion™

Das Teilmatrizensystem für alle Klasse II Kavitäten



Composi-Tight® 3D Fusion™  
Ringseparierzange  
Art.Nr. FXP01



## 3DFusion™ FX500

- Für große Molare oder sehr bauchige Zähne
  - Besonders starke Separierkraft sorgt für feste Kontaktpunkte
  - Hohe Ringfüße schließen perfekt mit der Randleiste der Zähne ab
- Art.Nr. FX500 (2 Stück/Pack)



## 3DFusion™ FX400

- Für kurze, schiefstehende Zähne
  - Hält auf Kofferdam
  - Hohe Separationskraft, identisch wie die des orangenen Rings
- Art.Nr. FX400 (2 Stück/Pack)



## 3DFusion™ FX600

- Erster Ring für weite Kavitäten & fehlende Höcker
  - Große Siliconbacken verhindern Eindrücken des Matrizenbandes
- Art.Nr. FX600 (2 Stück/Pack)



## 3DFusion™ FXR01

(1x grün, 1x orange, 1x blau)  
Art.Nr. FXR01 (3 Stück/Pack)



# Composi-Tight® 3DFusion™

Das Teilmatrizensystem für alle Klasse II Kavitäten



Testen ohne Risiko  
mit der 60-Tage-Geld-zurück-Garantie!<sup>1</sup>



FX-KFF-00

Preis pro Klasse II  
Anwendung: 1,80 €


**Inhalt:** Beste Ergebnisse bei der Verwendung aller Komponenten!



Warum sollten Sie ein Teilmatrizensystem verwenden?

System im Tofflemire-Stil

- ⊗ Approximale Anatomie kann nicht hergestellt werden
- ⊗ Geringer Kontakt an der Randleiste
- ⊗ Große "Essensfalle"
- ⊗ Höheres Risiko von Brüchen, einer okklusalen Interferenz, einer wiederkehrenden Karies und Zahnfleischerkrankung

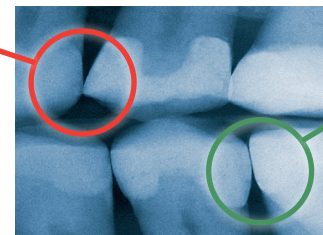

Composi-Tight® 3D Fusion™ Teilmatrizensystem

- ✓ Eine optimale Separierung der Zähne für einen festen Kontakt
- ✓ Bänder mit ausgeprägter Kurvatur orientieren sich an der Anatomie des Zahns
- ✓ Anatomisch korrekte Kontakte
- ✓ Kontakte auf der richtigen Höhe
- ✓ Benutzerfreundliches System
- ✓ Keine Nachbearbeitung notwendig

# Composi-Tight® 3DFusion™

Full Curve Non Stick Matrices

Ihr Teilmatrizenband - passt sich jeder Zahnform an!




- | Art.-Nr. | Inhalt  |
|----------|---|
| FXB01    | Composi-Tight® 3D Fusion™ Bänder Kit mit 420 Bändern, (je 100 FX100, FX175 und FX200 und je 60 FX150 und FX300) |
| FXB02    | Composi-Tight® 3D Fusion™ Bänder Kit mit 210 Bändern, (je 50 FX100, FX175 und FX200 und je 30 FX150 und FX300)  |

Ultra Adaptive Wedges

Die Kombination des bewährten Soft-Face™ Materials und einem festen inneren Kern schafft einen Keil, der wirklich funktioniert. Jedes Mal.



- | Art.-Nr. | Inhalt   |
|----------|--|
| FXK4     | Composi-Tight® 3D Fusion™ Keile Kit mit 400 Keilen, je 100 ultrafein, klein, mittel und groß |
| FXK4-M   | Composi-Tight® 3D Fusion™ Keile Kit mit 200 Keilen, je 50 ultrafein, klein, mittel und groß  |

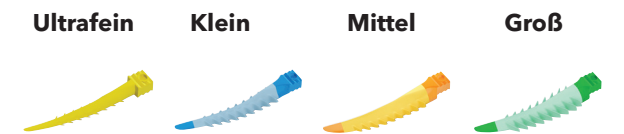

- | Art. Nr. | FXYL       | FXBL       | FXOR       | FXGR       |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| Inhalt   | 100 / Pck. | 100 / Pck. | 100 / Pck. | 100 / Pck. |

Bestellen Sie ganz bequem und einfach, ohne Registrierung über unseren Online Katalog auf <http://katalog.garrisonsdental.net> oder scannen Sie den folgenden QR Code.



\*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbgebung etc. Abweichungen vom Originalprodukt aufweisen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

Garrison Dental Solutions • Carlstraße 50  
D-52531 Übach-Palenberg • [info@garrisonsdental.net](mailto:info@garrisonsdental.net)  
[www.garrisonsdental.com](http://www.garrisonsdental.com)

**Garrison**  
Dental Solutions

Fax-Antwort an 02451 971 410  
Sie erreichen uns telefonisch unter 02451 971 409

\*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

<sup>1</sup>Bei Nichtgefallen senden Sie das Set einfach über Ihr Depot an uns zurück und Sie erhalten eine Komplettgutschrift.

\*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main

Registernummer: HRB 56518

Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban