


25 Farben stehen für jeden
PLAY SAFE®
Typ zur Verfügung.



Wunschfarbe ankreuzen: ☒



farbliche Abweichungen möglich

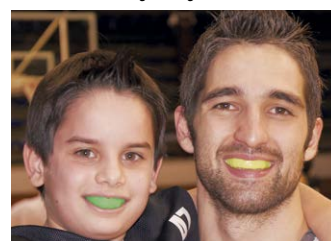

Playsafe Sportmundschutz aus bis zu **4** Farben!
Sie können sich Ihren Mundschutz mehrfarbig aus den
Farben **1** bis **15** zusammenstellen.

Bitte geben Sie dazu die


Farbnummern an:

Beispiel: ☐ 4 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 4




Bitte den gewünschten Playsafe Typ ankreuzen: ☒

PLAY SAFE® triple + **PLAY SAFE® triple-light**

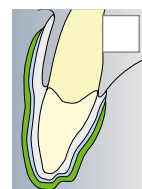

Playsafe triple und triple light sind für
jede Sportart geeignet.
Dreischichtiger Sportmundschutz, mit
harter Zwischenschicht. Triple light ist für
kleine Mundverhältnisse geeignet.


Empfohlen vom 'Verband der Deutschen Boxringärzte e.V.'

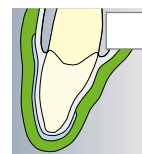


PLAY SAFE® heavy-pro, 3-schichtig, mit harter
Zwischenschicht, für: **Feldhockey • Rollerblading
Squash • Polo • Eishockey • Karate • Kickboxen
Rugby u. Ä.** Bei harten und kleinflächigen Schlägen.



PLAY SAFE® light-pro, 3-schichtig, mit harter
Zwischenschicht, ist für kleine Mundverhältnisse
geeignet.
Gleicher Einsatzbereich wie Playsafe heavy-pro.

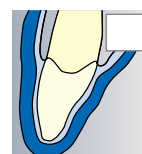

PLAY SAFE® medium, 2-schichtig, für:
**Boxen • Biking • Basketball • Fußball • Judo
Ringern u. Ä.**
Bei eher großflächigen Schlägen.

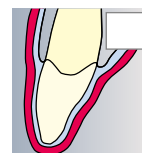

PLAY SAFE® light, 2-schichtig, bei beengten
Mundverhältnissen, für: **siehe medium**
Playsafe light schützt aufeinander schlagende
Zahnreihen vor intraoralen Verletzungen.

Liebe Sportlerin, lieber Sportler,
jeder Playsafe Sportmundschutz wird nach den Playsafe Richtlinien
individuell für Sie hergestellt.

- Sie bekommen Ihren Playsafe Mundschutz in Ihrer zahn-
ärztlichen Praxis. Dort wird ein Abdruck Ihres Ober- und
Unterkiefers genommen.
- In der Zahntechnik wird dann das Gipsmodell und der
Sportmundschutz hergestellt.
- Die Kontrolle auf Passung und die Übergabe findet
wieder in der zahnärztlichen Praxis statt.

Ein original Playsafe
Sportmundschutz ist
immer laminiert, weist die
Playsafe Kennzeichnung,
den Sportlernamen und die
Typenbezeichnung auf.

Ihr Playsafe Team:

Playsafe 4 u : freie Individualisierung eines Playsafe



Vorgehensweise:

- Wunschdesign auf der Erkodent Webseite aussuchen, oder eigenes
Design an Erkodent senden.
- Erkodent benötigt die Daten des Designs als .jpg oder .png.
Der Druck wird umgehend ausgeführt und an den Auftraggeber
per Brief geschickt.

Alles zu Playsafe 4 u auf:

www.erkodent.de/produkte/playsafe-sportmundschutz/playsafe-4u/

ERKODENT®

Erkodent Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler
Deutschland • Tel. + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax + 49 (0) 74 45/85 01-15
info@erkodent.com • www.erkodent.com
EN ISO 13485:2016 • ISO 9001:2015

PLAY SAFE®
+
PLAY SAFE® triple




Sportmundschutz

ERKODENT®

Warum individuell gefertigter Playsafe Sportmundschutz?
Playsafe-Mundschutz passt exakt auf die Zahnreihe, sitzt fest, erlaubt freies Atmen und normales Sprechen.

Nicht jeder Sportmundschutz ist gleich!
Boil & Bite Mundschutz (kochen und einbeißen) passt schlecht und lockert sich. Der Sportler muss diesen Mundschutz auf der Zahnreihe halten, dies hindert ihn an Spitzenleistungen.

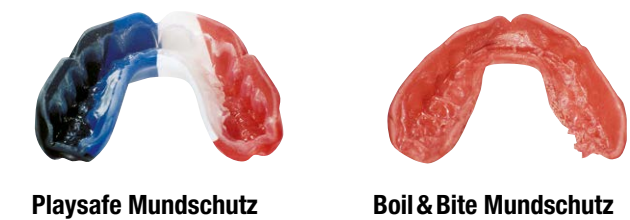


Viele wissenschaftliche Studien zeigen, dass ein Boil & Bite Mundschutz durch den beim Anpassen entstehenden, dramatischen Stärkeverlust (Durchbeißen) ein falsches Gefühl von Schutz vorgaukelt.

Playsafe Sportmundschutz ist immer mehrschichtig:
Zwei- oder dreischichtiger **PLAYSAFE® Sportmundschutz**




z. B. Playsafe heavy-pro: **1.** Basis, flexibel (2,0 mm)
2. Verstärkung, hart (0,8 mm) **3.** Deckschicht, flexibel (4,0 mm)

Dreischichtiger **PLAYSAFE® triple-light Sportmundschutz**
flexibel mit harter Zwischenschicht: hart weich, flexibel
(Gesamtstärke triple 5,5 mm, triple light 4,1 mm)

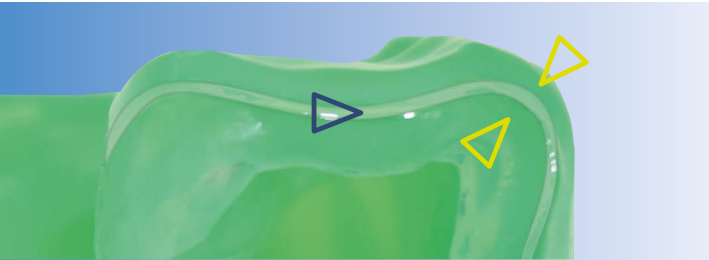

Wann **PLAYSAFE® triple ?**
Playsafe triple ist für alle Sportarten geeignet.
Die harte Zwischenschicht umfasst den ganzen Schutz.
Höchste Schutzleistung bei geringster Ausdehnung.
Etwas härter als der Playsafe heavy-pro.


Wann **PLAYSAFE® ?**
Die Playsafe Typen werden für bestimmte Sportarten ausgewählt.
Nur der Playsafe heavy-/light-pro weist eine auf den äußeren Zahnbereich beschränkte harte Schicht auf. Deshalb ist er etwas komfortabler als der Playsafe triple.

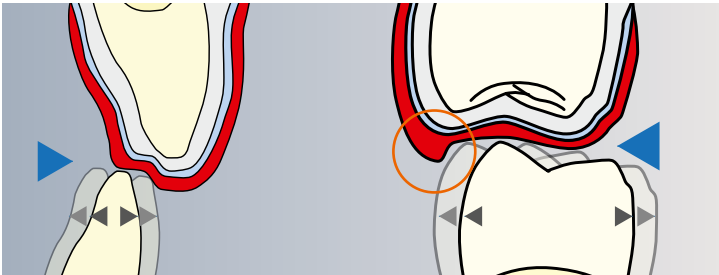



Wie jeder Playsafe Sportmundschutz weist auch der Playsafe triple trotz Bewegungsfreiheit für den Gegenkiefer () einen "**buccal shield**" auf.
Diese umlaufende Schutzleiste (orangener Kreis) verhindert zu starke Abweichungen des Unterkiefers bei seitlich auftreffenden Schlägen.



... übrigens, jeder Playsafe Sportmundschutz kann bei wechselnden Zahnverhältnissen wieder angepasst werden.
https://www.erkodent.de/wp-content/documents/products/PSRefix_DE_web.pdf

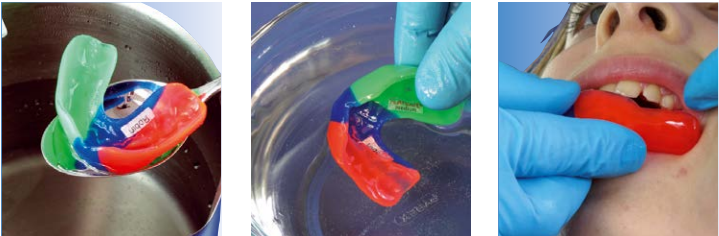

Tests: Intensive Belastungstests beweisen die hohe Schutzwirkung der Playsafe Sportmundschutz Typen.
Widerstand gegen Verformung und Schlagpendeltest zur Messung von Kraftabsorption und -verteilung.

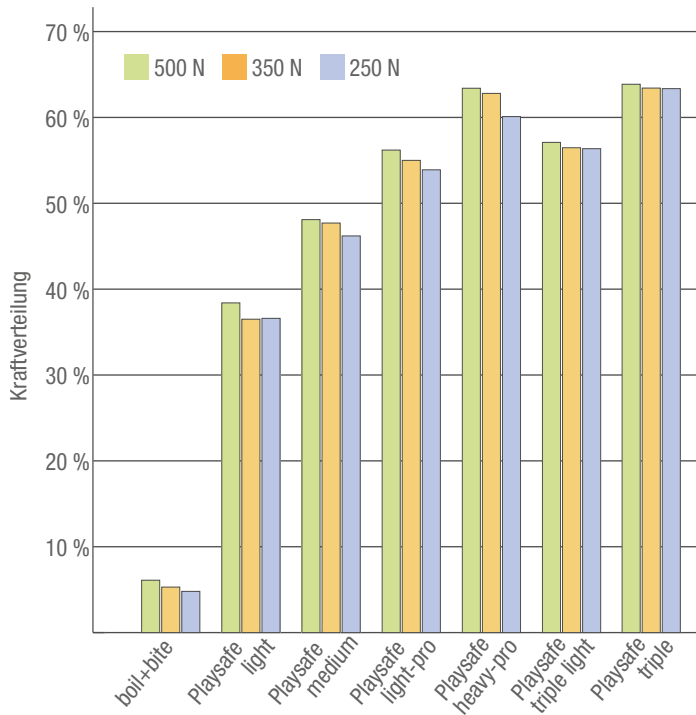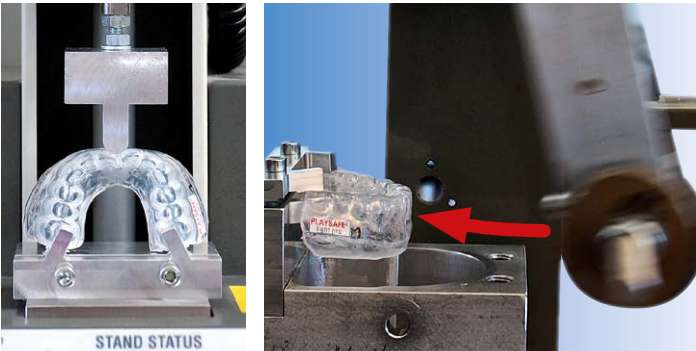

Dieses Diagramm zeigt den prozentualen Anteil der Kraftverteilung bis zum ersten Molar. Ein hoher Prozentsatz ist die Voraussetzung, kleinflächige harte Schläge wirksam über den ganzen Sportmundschutz zu verteilen.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban