


Einfach scannen und designen

PrograScan®

PS5

PS3

Leistungsstarke
und zuverlässige
Laborscanner

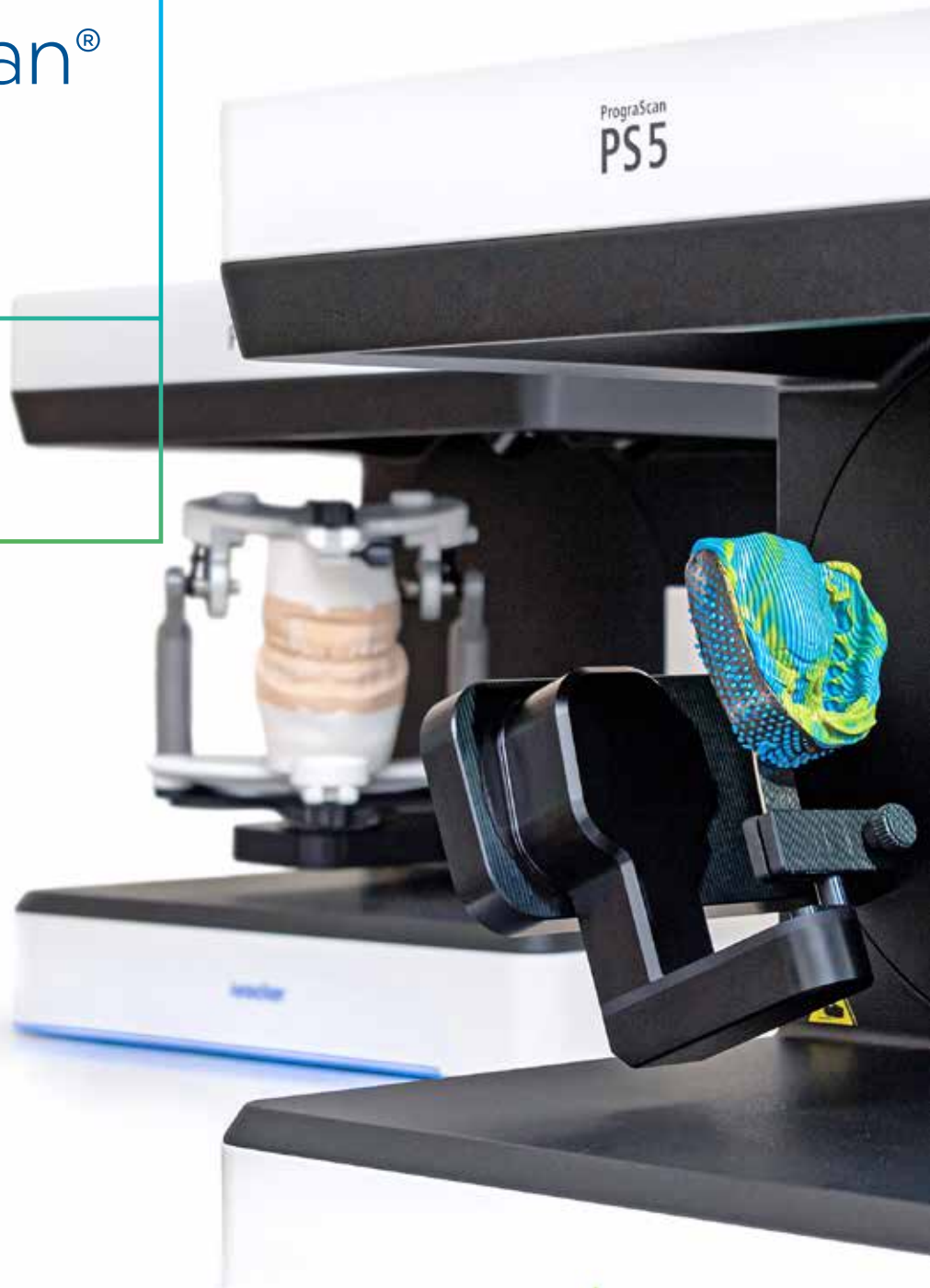

Leistungsstarke Partner für Ihr Labor

Intuitiv. Präzise. Zuverlässig.
Das zeichnet die neuen Laborscanner PrograScan® PS5 und PrograScan® PS3 aus.

Angenehm in der Bedienung vereinen sie hohe Präzision und detailgetreue Scanergebnisse. Dank der hohen Prozesssicherheit durch den digitalen Workflow profitieren Sie von Zeitersparnis und zuverlässigen Ergebnissen.

Die neuen Laborscanner:
PS5 und PS3



Verlässlich

- ✓ Einfaches Handling
- ✓ Präzise Ergebnisse
- ✓ Wählen Sie einen Scanner, der zu Ihren individuellen Anforderungen im Labor passt.




Digitaler
Workflow

- ✓ Abgestimmter digitaler Workflow für optimale Ergebnisse
- ✓ Technologie, Software und Materialien sind aufeinander abgestimmt



Eigen-
schaften

- ✓ Weisses LED-Licht
- ✓ Zwei hochauflösende Kameras (2 MP)
- ✓ Genauigkeit 5µm

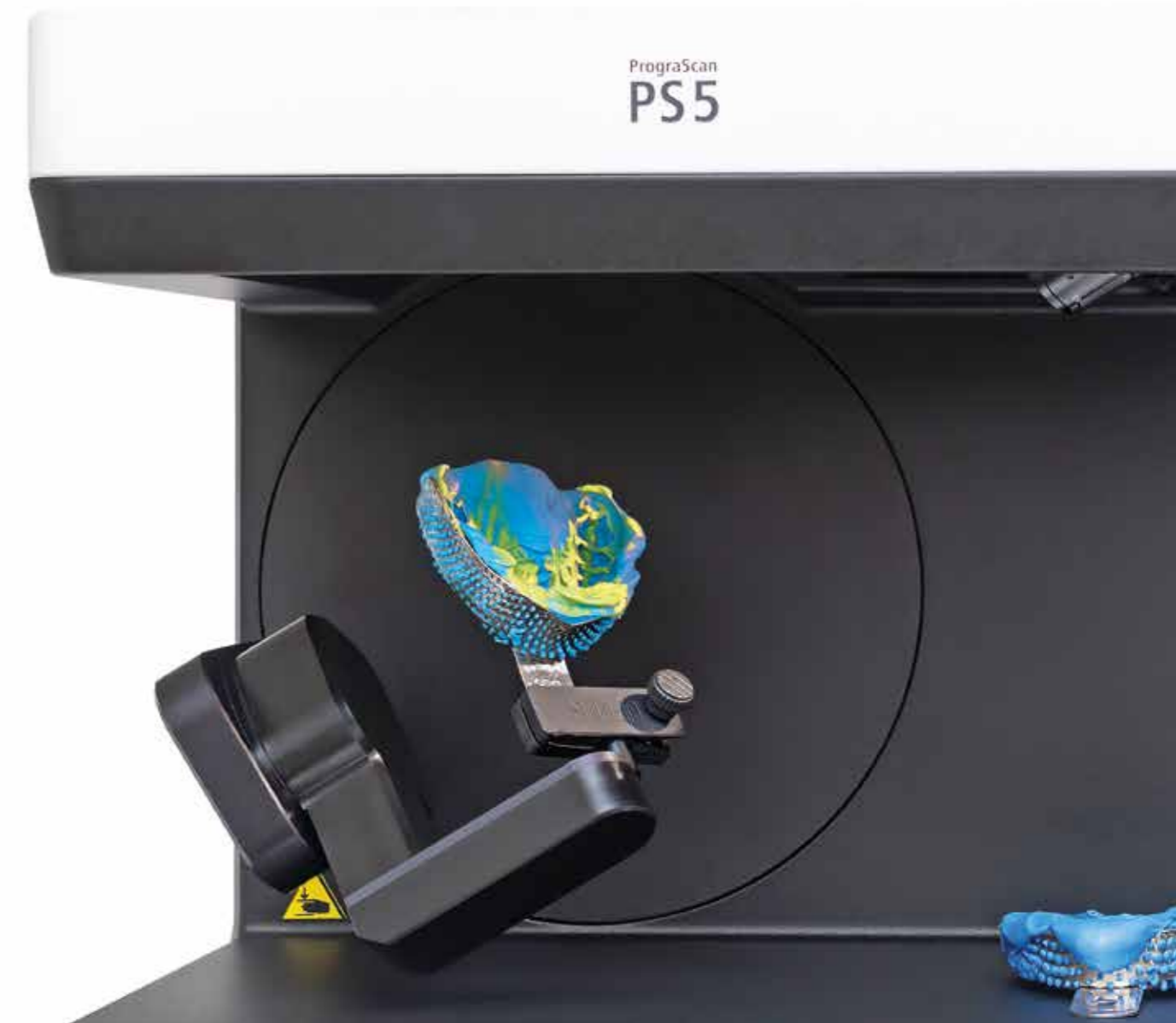

Die neue Scanner-Generation

PrograScan® PS5

Präzise Scans und Vielseitigkeit in der Anwendung

Der PrograScan PS5 zeichnet sich durch seine hohe Scan-Geschwindigkeit aus. Dadurch verkürzt er Ihren Arbeitsprozess signifikant.

Mittels seiner dritten Achse scannt er Abdrücke vollautomatisch und erstellt farbige, digitale Modelle.

PrograScan® PS3

Präzise Scans für essentielle Anwendungen

Wenn Sie besonderen Wert auf Präzision und Schnelligkeit bei der Berechnung der Scan-Daten legen, dann ist der PrograScan PS3 die optimale Wahl für Ihr Labor.

Ihre Vorteile:

- ✓ Vielzahl von Anwendungsgebieten und umfangreiche Einsatzmöglichkeiten
- ✓ Hochauflösende Scans dank Integrated Pattern Generation Technology
- ✓ Arbeitsschritte werden vereinfacht und Zeit wird gespart, da ein vollautomatisches Matching der Scan-Daten erfolgt.
- ✓ Mit der AutoSave-Funktion bleiben Sie flexibel, denn damit kann ein Scanvorgang jederzeit gestartet, pausiert oder unterbrochen werden, wenn der Arbeitsprozess dies erfordert.
- ✓ Die Re-Scan-Funktion erzeugt mehr Daten, um ein optimales Scanergebnis zu erzielen.




Bewährt und benutzerfreundlich

Erleben Sie die exocad Design-Software

Designen Sie Ihre Arbeiten mit der leistungsstarken exocad DentalCAD-Software. Sie ist intuitiv und einfach in der Bedienung und bietet eine Vielzahl von Anwendungsgebieten und umfangreichen Einsatzmöglichkeiten, die Sie bei der täglichen Arbeit in Ihrem Labor unterstützen. Denn das Zusammenspiel der Software mit den neuen Laborscannern gewährleistet schnelle und präzise Scanergebnisse.

- ✓ Intuitive Bedienung
- ✓ Zuverlässige CAD-Software
- ✓ Offenes System
- ✓ Zahlreiche Design-Module
- ✓ Hohe Flexibilität im Bereich der Software-Module

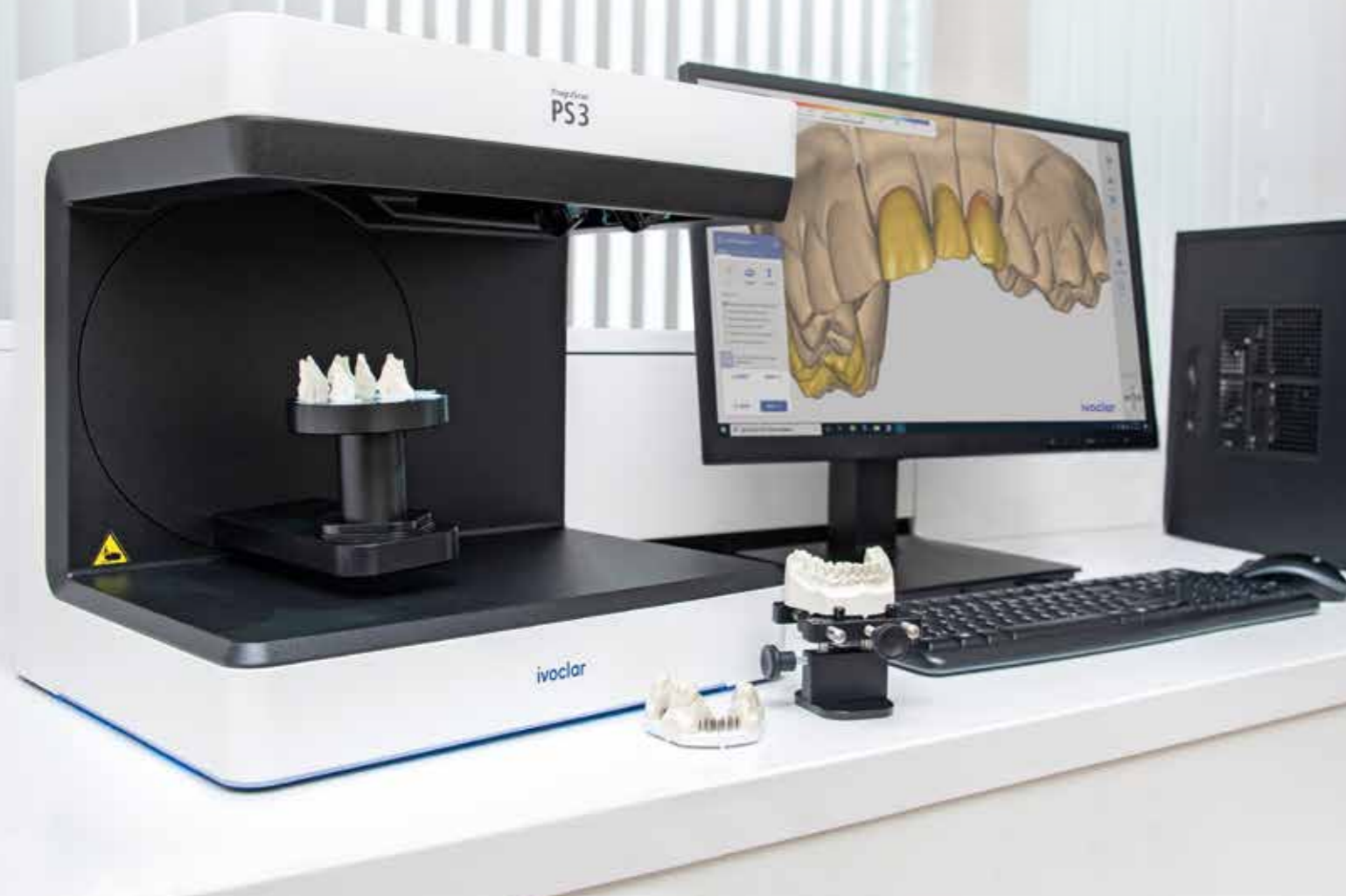

Produktvergleich



PS5



PS3

Ausstattung / Leistung		
Kameras	2 x 2 MP Weisse LED-Lichtquelle	2 x 2 MP Weisse LED-Lichtquelle
Scanzeit – Gesamtkiefer	16 Sek.	20 Sek.
Scanzeit – 9 Stümpfe	16 Sek.	30 Sek.
Passgenauigkeit (ISO 12836)	5 µm	5 µm
Scannen von Texturen	Farbtextur	schwarz/weiss
Scannen von Kiefermodellen	✓	✓
Scannen von Kieferabformungen	✓	
Scannen von Artikulatoren	✓	✓
Anwendungsgebiete		
Kronen	✓	✓
Brücken	✓	✓
Aufbissschienen	✓	✓
Technische Daten		
Netzanschluss	110 – 240 V, 50 – 60 Hz Zulässige Spannungsschwankungen +/- 10 %	
Max. Stromaufnahme	12 A bei 110 – 120 V 8,5 A bei 200 – 240 V	
Abmessungen	Tiefe: 335 mm Breite: 395 mm Höhe: 380 mm	
Gewicht	12 kg	
Ausgabeformat	STL, PLY	STL
Lieferumfang		
	Calibrations body Model holder Multi-die adapter ModelFixator ArtiBase PC PrograScan Softwarelizenz	Calibrations body Model holder Multi-die adapter ModelFixator ArtiBase PC PrograScan Softwarelizenz
Empfohlenes Zubehör		
(nicht im Lieferumfang enthalten)	Adesso Split Protar Quicksplit SAM Quarter Tray Adapter	Adesso Split Protar Quicksplit SAM

Ivoclar Vivadent AG | Benderer Strasse 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60

[ivoclar.com](https://www.ivoclar.com)

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban