

#niwop  
f @ in ▶  
video.wh.com

Jetzt bei Ihrem  
Fachhändler oder  
auf [wh.com](http://wh.com)



# Die neue Generation des rotierenden Polierens



**proxeo** TWIST **LatchShort**  
Polishing System

## Klein, aber oho

Das Proxeo Twist LatchShort Polishing System ist eine besonders smarte Lösung für die professionelle Zahnpolitur: Der kleine Kopf mit den optimal abgestimmten Prophy-Kelchen sorgt für eine deutlich reduzierte Arbeitshöhe. So gewinnen Sie im Vergleich zu Standard Latch Systemen ganze vier Millimeter.



### Kommt überall hin

Der Molarenbereich ist von distal nach mesial besser zugänglich.

### Angenehm und unkompliziert

Je einfacher der Zugang, desto angenehmer die Behandlung.

### Speziell für Engstellen geeignet

Die Molaren in der Tuberregion sind leichter erreichbar.

»Sooo viel Platz«

### Mehr sehen

Je kleiner der Kopf, je kürzer der Kelch und je schlanker der Hals, desto besser die Sicht auf die Behandlungsstelle.


## Perfekte Harmonie

Die Kombination aus dem schlanken Proxeo Twist LatchShort Winkelstück von W&H mit kleinem Kopf und den Prophy-Kelchen mit verkürztem Schaft erleichtert den Zugang speziell bei Engstellen und den hinteren Molaren.



### Messbar mehr Raum

Der Vorteil des Proxeo Twist LatchShort Systems im Vergleich zum grünen Winkelstück: Mehr Platz zum Polieren durch den verkürzten Schaft.

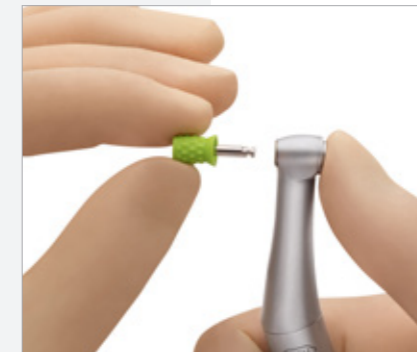

### Wechsel auf Knopfdruck

Mit dem praktischen Druckknopfspannsystem wechseln Sie die Prophy-Kelche in Sekundenschnelle.



### Perfekte Abdichtung

Speichel und Polierpaste können nicht mehr so leicht in den Kopf eindringen. Die Langlebigkeit des Winkelstücks wird unterstützt.




## Inspiziert von **Prophy Professionals**

Neben dem Proxeo Twist Winkelstück bietet W&H erstmals auch Prophy-Kelche und Bürsten an. Sie wurden gemeinsam mit Prophy-Anwendern entwickelt. Dabei wurde viel Wert auf Eigenschaften wie die optimale Adaption, eine einfache Pastenaufnahme bzw. -verteilung und die schonende Reinigung bis in den Sulcus gelegt.

## Alles aus **einer Hand**

Zur optimalen Entfernung von Biofilm und Verfärbungen stehen Ihnen die neuen Proxeo Twist LatchShort Prophy-Kelche in verschiedenen Härten sowie Bürsten zur Verfügung. Alle Prophy-Kelche haben einen verkürzten Schaft für eine noch geringere Arbeitshöhe.

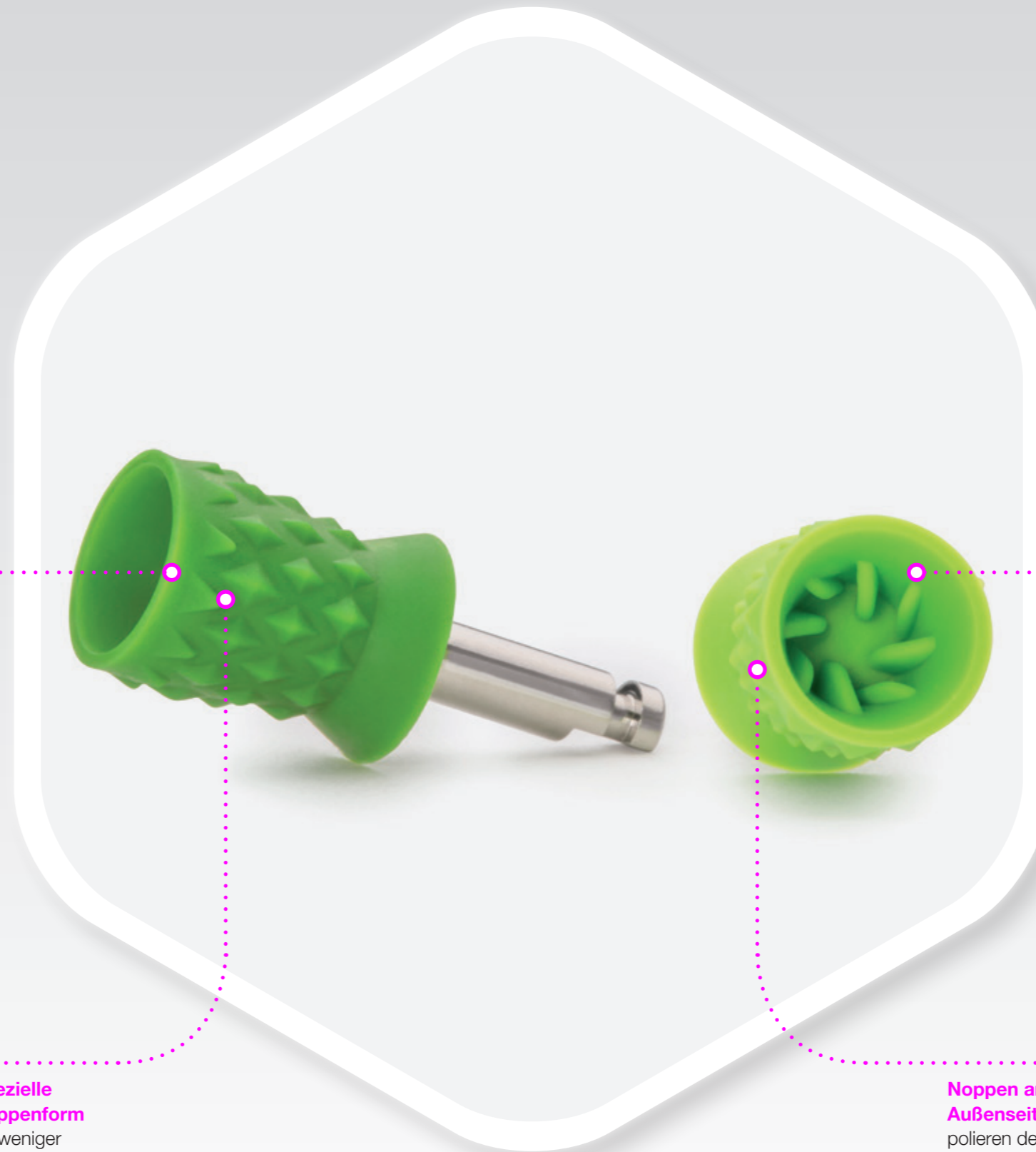


**Glatte Oberfläche am Kelchende**  
für schonendes Polieren bis in den Sulcus.



**Spezielle Noppenform**  
für weniger Wegspritzen der Paste.



**Spezielle Innenlamellen**  
für einfaches Aufnehmen und gezieltes Auftragen der Paste.

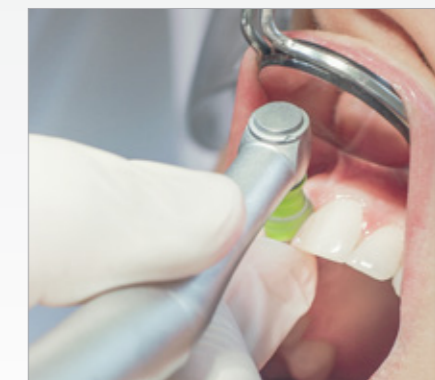

**Noppen an der Außenseite**  
polieren den Interdentalraum gleich mit.

## Unwiderstehliche Vorteile fürs rotierende Polieren

### Schlanker. Kleiner. Innovativer.

Das neue Proxeo Twist LatchShort Polishing System mit bis zu 4 mm geringerer Arbeitshöhe, dank Proxeo Twist Prophy-Kelchen und Bürsten: für besseren Zugang, mehr Raum und optimale Sicht auf die Behandlungsstelle.



## Höchster Schutz und Komfort



### Schlank und geschmeidig




Durch das ergonomische Design und seinen schlanken Hals liegt das Winkelstück optimal in der Hand. Die Kombination mit dem W&H EM-12 L Elektromotor unterstützt diese Ergonomie.



### Hygiene

Dank glattem Außendesign lässt sich das sterilisierbare und thermodesinfizierbare Proxeo Twist LatchShort Winkelstück besonders leicht reinigen. Die Prophy-Kelche und Bürsten sind Einwegprodukte und nicht zur Wiederverwendung vorgesehen.

### Technische Daten

<b>Typ</b>	<b>WP-66 W</b>   
<b>Maximale Motordrehzahl:</b>	10.000 min <sup>-1</sup>
<b>Untersetzungsverhältnis:</b>	4:1
<b>Empfohlene Drehzahl für Prophy-Kelche und Prophy-Bürsten:</b>	1.250 – 2.500 min <sup>-1</sup>
<b>Verwendbare Aufsätze:</b>	W&H Proxeo Twist LatchShort Prophy-Kelche und Prophy-Bürsten

### Prophy-Kelche und Bürsten



Nicht zur Wiederverwendung



Latexfrei



## Melanie Ruckenthaler

Produktmanagerin W&H Bürmoos


»Das Beste aus zwei Welten: Die einzigartige Kombination aus geringer Arbeitshöhe und komfortablem Druckknopfspannsystem verbindet die Vorteile von Schraub- und Latchsystemen: leichter Zugang, bessere Sicht und höchster Komfort einerseits, einfaches Wechseln der Polier-Kelche und Bürsten andererseits.«



## Monika Riedl

Dentalhygienikerin München

»Das Proxeo Twist LatchShort ist das erste System mit geringer Arbeitshöhe und einem Druckknopf. Durch die bis zu 4 mm geringere Arbeitshöhe im Vergleich zu Standard Latch Systemen ergibt sich mehr Platz und eine optimalere Sicht auf die Behandlungsstelle.«

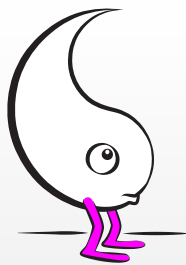

Implantology  
without **Periodontology** is  
like **Yin** without **Yang**.



**#NIWOP:** Der systematische und evidenzbasierte Workflow

### Hersteller:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
51111 Bürmoos, **Austria**  
**t** +43 6274 6236-0  
**f** +43 6274 6236-55  
office@wh.com  
**wh.com**

### Vertrieb:

**W&H Deutschland GmbH**  
Raiffeisenstraße 3b  
83410 Laufen, **Deutschland**  
**t** +49 8682 8967-0  
**f** +49 8682 8967-11  
office.de@wh.com  
**wh.com**

**W&H Austria GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53  
51111 Bürmoos, **Austria**  
**t** +43 6274 6236-239  
**f** +43 6274 6236-890  
office.at@wh.com  
**wh.com**

**W&H CH-AG**  
Industriepark 9  
8610 Uster, **Schweiz**  
**t** +41 43 4978484  
**f** +41 43 4978488  
info.ch@wh.com  
**wh.com**

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban