



# KKD<sup>®</sup> RWT<sup>®</sup> COLOR

**Röntgenhaltersystem für die  
Rechtwinkel-/ Paralleltechnik**  
X-ray Holder system for the  
Right angle-/ Paralleling Technique



Für digitale Speicherfolien  
und Röntgenfilme.  
For x-ray films and image plates.



**Gemeinsam für gesunde Zähne!  
Together for healthy teeth!**

## ANTERIOR

### Aufnahmen im Frontzahnbereich | radiographs in the anterior region




Visiering Anterior blau  
aiming ring anterior blue  
1 St./ pc. REF 5420

Führungsstange Anterior blau  
indicator arm anterior blue  
1 St./ pc. REF 5226

Bissplatte Anterior blau | bite block anterior blue  
Größe 0 / 1 / 2 | size 0 / 1 / 2  
8 St./ pcs. REF 5406

## POSTERIOR

### Aufnahmen im Seitenzahnbereich | radiographs in the posterior region

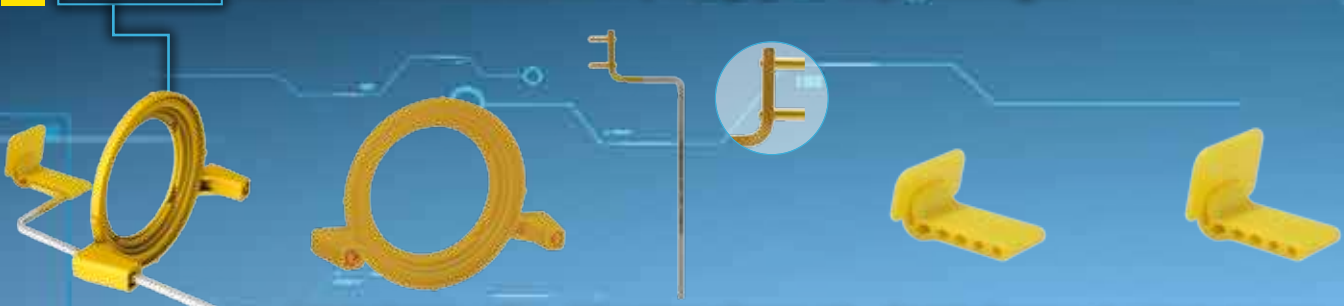


Visiering Posterior gelb  
aiming ring posterior yellow  
1 St./ pc. REF 5421

Führungsstange Posterior gelb  
indicator arm posterior yellow  
1 St./ pc. REF 5227

Bissplatte Posterior gelb | bite block posterior yellow  
Small: Größe 0 / 1  
size 0 / 1  
8 St./ pcs. REF 5408  
Größe 2  
size 2  
8 St./ pcs. REF 5407

## ENDO

### Endo-Messaufnahmen bei Wurzelkanalbehandlungen | Endometric radiographs during endodontic treatments

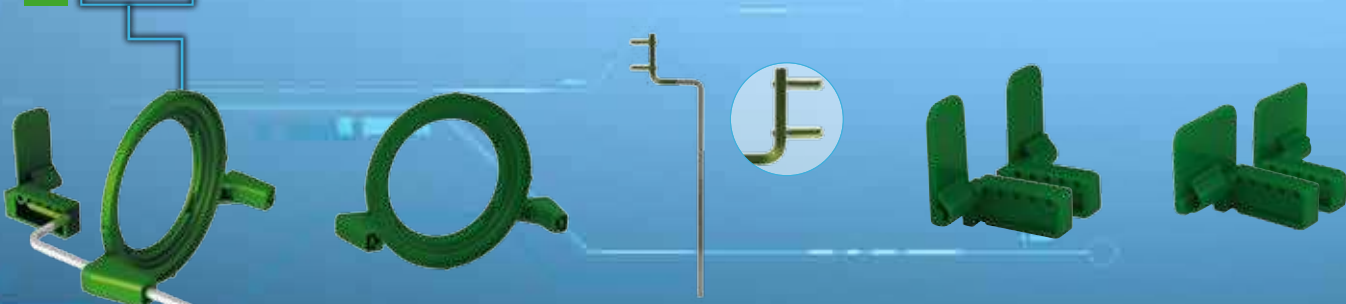


Visiering Endo grün  
aiming ring Endo green  
1 St./ pc. REF 5432

Führungsstange Endo grün  
indicator arm Endo green  
1 St./ pc. REF 5229

Bissplatten Endo grün | Endo bite blocks green  
Endo Anterior  
R/OK oder L/UK und  
L/OK oder R/UK  
R/upper or L/lower and  
L/upper or R/lower  
je/ ea. 2 St./ pcs.  
REF 5433  
Endo Posterior  
R/OK oder L/UK und  
L/OK oder R/UK  
R/upper or L/lower and  
L/upper or R/lower  
je/ ea. 2 St./ pcs.  
REF 5434  
Endo Sortiment  
bite block assort.  
Anterior + Posterior  
je/ ea. 1 St./ pc.  
REF 5435S

## BITEWING

### Bissflügel aufnahmen | bitewing radiographs

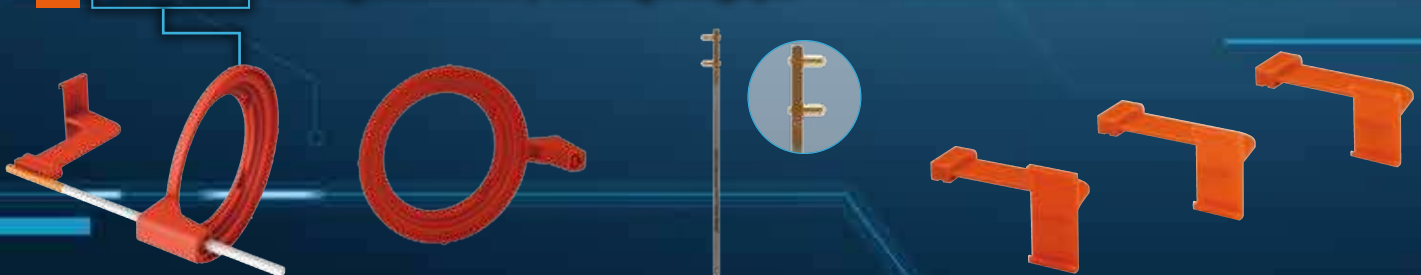

Visiering Bißflügel orange  
aiming ring bitewing orange  
1 St./ pc. REF 5422

Führungsstange Bißflügel orange  
indicator arm bitewing orange  
1 St./ pc. REF 5228

Bissplatten Bißflügel orange | bite blocks bitewing orange  
Größe 2 (3x4)  
size 2 (3x4)  
8 St./ pcs. REF 5412  
Größe 3 (2,7x5,4)  
size 3 (2,7x5,4)  
8 St./ pcs. REF 5414  
Größe 0 (2x3)  
size 0 (2x3)  
8 St./ pcs. REF 5413

# KKD® RWT® COLOR

Die KKD® RWT® COLOR Instrumentensätze bilden in Verbindung mit einem Langtubus (Rund- oder Rechteckausführung) die Umsetzung der Rechtwinkel-/ Parallelschichttechnik in der konventionellen und digitalen Röntgendiagnostik. Die Visierringe sind universell für alle gängigen Röntgengeräte geeignet (z.B. Sirona, Kavo, Dürr, Satelec, Planmeca usw.).

The KKD® RWT® COLOR instrument sets together with a long cone (rectangular- or round type) constitute the implementation of the Right Angle-/ Paralleling Technique in conventional & digital x-ray diagnosis. The rings are universally suitable for all current x-ray units (e.g. Sirona, Kavo, Dürr, Satelec, Planmeca etc.).


## RWT® COLOR Grundausrüstung/ Basic equipment

**Komplettsortiment zur Erstellung von Front-, Seitenzahn- und Bissflügelaufnahmen**  
Complete assortment for anterior-, posterior- and bitewing radiographs

**Inhalt/ Content:**

- **4 Visierringe/ aiming rings**  
(1x Anterior REF 5420, 1x Bitewing REF 5422, 2x Posterior REF 5421)
- **4 Führungsstangen/ indicator arms**  
(1x Anterior REF 5226, 1x Bitewing REF 5228, 2x Posterior REF 5227)
- **18 Bissplatten/ bite blocks**  
(6 St./ pcs. von/ of Anterior REF 5406,  
6 St./ pcs. von/ of Posterior REF 5407,  
2 St./ pcs. von/ of Posterior small REF 5408,  
2 St./ pcs. von/ of Bitewing #2 REF 5412,  
je/ ea. 1 St./ pc. of Bitewing #0 von/ of REF 5414  
und/ and #3 REF 5413)

REF 5401S

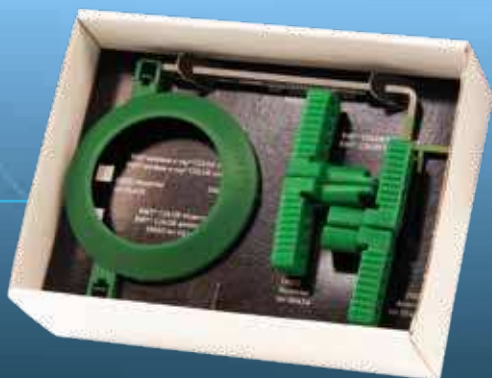

## RWT® COLOR Endo Set

**Sortiment für die Endodontie**  
Assortment for endometric radiographs

**Inhalt/ Content:**

- **1 Visierring/ aiming ring** (1x REF 5432)
- **1 Führungsstange/ indicator arm** (1x REF 5229)
- **4 Bissplatten/ bite blocks** (REF 5435S)

REF 5430S



## RWT® COLOR Bitewing Set

**Sortiment für Bißflügelaufnahmen**  
Assortment for bitewing radiographs

**Inhalt/ Content:**

- **1 Visierring/ aiming ring** (1x REF 5422)
- **1 Führungsstange/ indicator arm** (1x REF 5228)
- **4 Bissplatten/ bite blocks**  
(1 St./ pc. von/ of REF 5413,  
2 St./ pcs. von/ of REF 5412,  
1 St./ pc. von/ of REF 5414)

REF 5431S

Alle Teile/ all parts:




3 bar  
5 min


# DESIGN AT ITS BEST!



**Exaktes Anvisieren aller gängigen Rund- und Rechtecktuben durch Abstufungen im Visiererring.**  
Precise aiming of all current round- and rectangular cones due to the special stepped design.

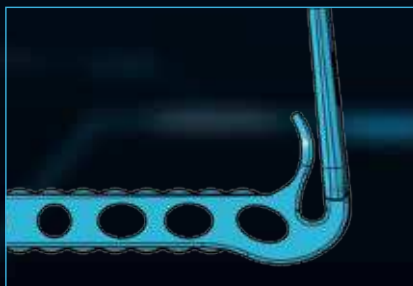


**Weiterentwickelte Bissplatten: noch durchdachter und komfortabler in der Handhabung.**  
Bite blocks at their best: sophisticated and more comfortable to handle.

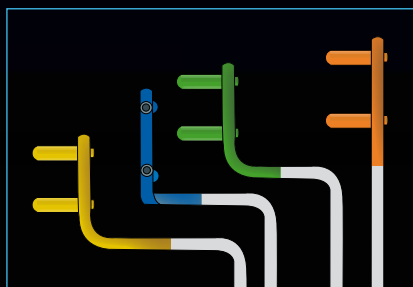


**Einfache und schnelle Zuordnung aller Teile durch Farbcodierung.**  
Easy and fast assembling due to colour coding.



**Hochwertige Führungsstangen aus rostfreiem, medizinischem Stahl.**  
High-quality indicator arms made of stainless medical steel.

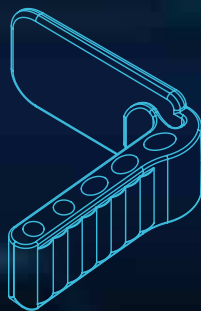


**Das neue Lochdesign erlaubt ein noch einfacheres Aufstecken und Lösen der Bißplatten von der Führungsstange.**  
The new design of holes enables an even easier attaching and separating of the bite blocks to/ from the indicator arm.

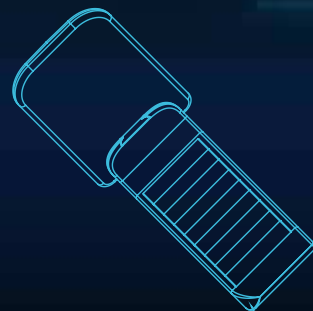

**Weiterentwickelte Fixierlippe: Folien und Filme werden noch schonender in Position gehalten.**  
Enhanced clamping part: image plates and films are gently hold in position.

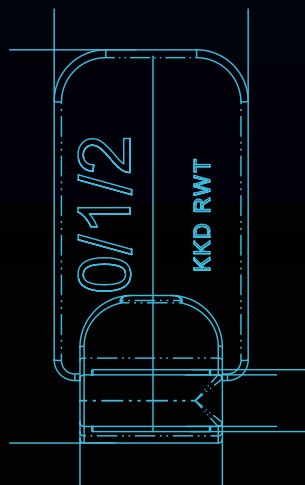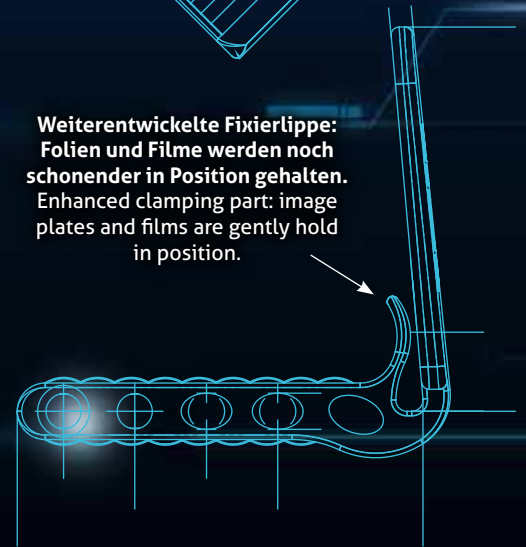

**Abgerundete Form mit weniger Kanten.**  
Blocks are more rounded, hence less edges.

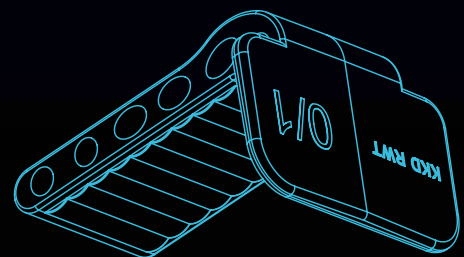

**Rückseite mit Größen-Beschriftung.**  
On the back appropriate sizes are indicated.

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban