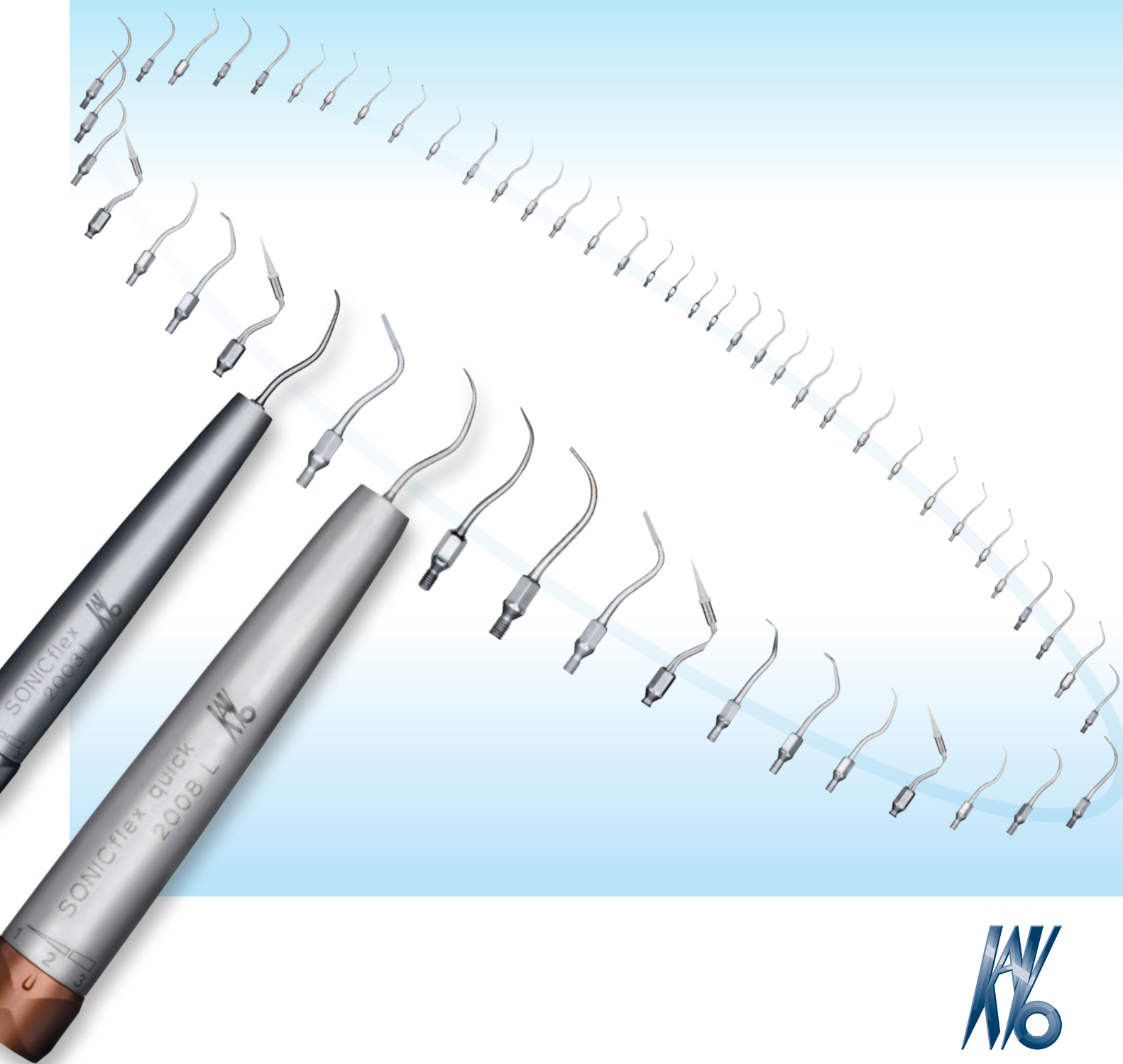


KaVo SONICflex® quick 2008/L · SONICflex® 2003/L

Un multitalent efficace pour votre cabinet.



KaVo. Dental Excellence.

Effacité et puissance maximale – des conditions de travail idéales pour vous.

De plus en plus de patients se rendent compte de la nécessité d'une prophylaxie régulière pour le maintien d'une dentition saine. Ils privilégient pour cela un traitement qui ménage les tissus. KaVo SONICflex est simple d'utilisation et confortable pour le patient, et convient ainsi parfaitement pour la prophylaxie. Cela vous permet de fidéliser vos patients et de profiter de façon optimale de la tendance de plus en plus marquée à la prévention.

Utilisation universelle et sur mesure.

Grâce aux indications variées dont vous disposez avec SONICflex, il deviendra rapidement l'un de vos instruments les plus utilisés. Ses nombreux inserts lui permettent de s'adapter exactement à vos besoins.

Polyvalence maximale – vos atouts et avantages :

- Plus de 50 inserts et ainsi davantage de possibilités d'utilisation comparé à tous les autres détarteurs
- Pour tous les domaines d'application
- Le fondement d'un traitement minimal invasif réussi

Un traitement en douceur – plus agréable pour vos patients.

Les patients confortablement traités reviennent volontiers.

Avec KaVo SONICflex, vos patients bénéficient d'un traitement particulièrement doux. Grâce aux basses fréquences et au large mouvement elliptique, le développement de chaleur reste minime. En outre, la substance dentaire est protégée car l'instrument travaille sous une pression réduite. Quel que soit le niveau de puissance, le KaVo SONICflex vous permet de pratiquer des traitements sensiblement plus agréables et plus conservateurs.

Confort du patient – vos atouts et avantages :

- Traitement agréable
- Substance dentaire préservée
- Oscillations douces particulièrement adaptées aux patients sensibles
- Faible génération de chaleur



Efficacité et puissance maximale – des conditions de travail idéales pour vous.

Changement en un tour pour plus d'efficacité.

Avec votre KaVo SONICflex, le changement d'insert est extrêmement simple : un procédé breveté par KaVo permet de changer les inserts de façon simple et rapide en un tour seulement. Ce système vous fait gagner du temps et assure un flux de travail efficace sans interruptions inutiles.

Breveté par KaVo : un changement d'insert simple et rapide en un tour seulement



KaVo SONICflex® – vos atouts et avantages :

- L'éventail d'indications et d'utilisations le plus large de tous les détarteurs Sonic comprenant également la prophylaxie avec des traitements préservant les tissus
- Un changement d'inserts simple et rapide – garantit un travail efficace, fait gagner du temps et évite les interruptions inutiles dans le déroulement de votre travail
- Puissance d'abrasion élevée, 50% supérieure par rapport à son prédécesseur, pour retirer sans effort les dépôts les plus tenaces
- Aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire ; il suffit de le brancher sur le raccord KaVo MULTiflex ou Sirona, sans ajout de câbles gênants
- Meilleure illumination : 25 000 Lux, pour une vision détendue sans fatigue des yeux – également disponible avec LED
- Sensiblement plus silencieux que ses concurrents directs (jusqu'à 15 dB), atout santé pour l'équipe du cabinet et les patients
- Qualité KaVo éprouvée – le SONICflex 2003 L / 2008 L de KaVo est déjà le représentant de la troisième génération de détarteurs chez KaVo, issue de 25 années d'expérience et de connaissances

Faites progresser chaque jour vos performances.

Avec votre KaVo SONICflex, vous disposez du détartreur le plus puissant et le plus silencieux de sa catégorie. Il est sans nul doute l'instrument ayant la plus large gamme d'indications. Il sera votre allié fiable grâce aux niveaux de puissance réglables selon les indications, pour être à la fois puissant et précis.

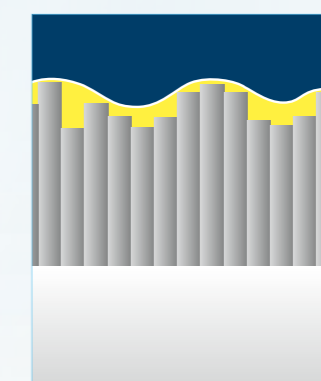
KaVo SONICflex® quick 2008 L et KaVo SONICflex® LUX 2003 L – puissance adaptable à chaque indication.

Niveaux de puissance	Amplitude	Fréquence	Volume sonore	Indications
Niveau 1	120 µm	6000 Hz	61 dB (A)	Finition et travail très soigné
Niveau 2	160 µm	6000 Hz	69 dB (A)	Préparation et élimination des dépôts
Niveau 3	240 µm	6000 Hz	71 dB (A)	Préparation et élimination des dépôts en puissance

Sensiblement rassurant, ergonomique et hygiénique.

Votre SONICflex est équipé d'un revêtement Plasmatec particulièrement robuste et facile à prendre en main. Avec cette surface en métal-céramique, votre KaVo SONICflex est encore plus sûr dans votre main. Vos doigts sont plus détendus pendant le traitement et vous pouvez apprécier ce toucher agréablement tiède.

La surface Plasmatec est conçue avec l'imperméabilisation hygiénique KaVo. Elle résiste également au nettoyage en appareil de désinfection thermique, est stérilisable jusqu'à 135° C et répond donc aux normes d'hygiène actuelles (p. ex. celles du RKI) : véritable atout d'hygiène pour votre cabinet.



- Imperméabilisation hygiénique KaVo
- Traitement de surface Plasmatec
- Bague de réglage

Le procédé Plasmatec utilisé par KaVo est le garant d'une excellente tenue et d'une hygiène irréprochable.



Adaptateur pour les inserts SONICflex pour un procédé de nettoyage validé par ex dans un thermodésinfecteur Miele.

Notre performance de pointe – de la prophylaxie, parodontologie et endodontie, en passant par ...


Des spécialistes à votre service au quotidien.

Peu importe la spécialité de votre cabinet. Avec le vaste choix d'inserts du SONICflex de KaVo, vous aurez toujours le bon instrument en main. Composez votre assortiment personnel d'inserts et élargissez-le selon vos besoins. Vous serez ainsi en mesure d'obtenir un résultat optimal dans toutes les situations de traitement – de façon simple et agréable pour vos patients !



Une prophylaxie parfaite. Très simple pour vous et agréable pour vos patients.

Prophylaxie et parodontologie


5 

6 **SONICflex® scaler**

- Variété d'inserts pour le détartrage à long terme
- Nettoyage des poches de faible profondeur

7


8

60 

61 li. **SONICflex® paro**

- Différents inserts pour un nettoyage minimal invasif, conservateur et efficace des poches parodontales jusqu'à 9 mm de profondeur

62 re.

48 


SONICflex® clean

- Large spectre de brosseuses vibrantes
- Pour le nettoyage et le polissage en douceur

Accessoires SONICflex® paro


- Pièce intermédiaire pour alimentation en liquides pharmacologiques, p. ex. solution saline stérile (n° d'art. 1.000.6296)

Prophylaxie et parodontologie

48 

SONICflex® implant

- Retrait efficace des dépôts et concrétions sous-gingivaux
- Absence d'abrasion, absence de rugosité
- Insert à usage unique permettant d'éviter la transmission de maladies

24 


25 **SONICflex® root planer**

- Pour le traitement sans effort des zones de furcation étroites ou complexes

26

27

Endodontie

66 

67 **SONICflex® endo**

Assortiment spécial d'inserts pour :


- La recherche des canaux
- L'aménagement des entrées canalaies
- L'aménagement de la cavité pulpaire pour la préparation radiculaire coronaire
- Nettoyage et rinçage du canal radiculaire (insert 96 disponible dans les tailles ISO 0,15, 0,20 et 0,25)

68

69

70

96

56 

16 **SONICflex® retro**

- Préparation rétrograde du canal radiculaire avec inserts diamantés en contre-angle
- Prévention des lésions radiculaires par fissures, soutien de la stabilité dentaire, préservation des os péri-apicaux
- Possibilité de préparation dans l'axe

20

55

57

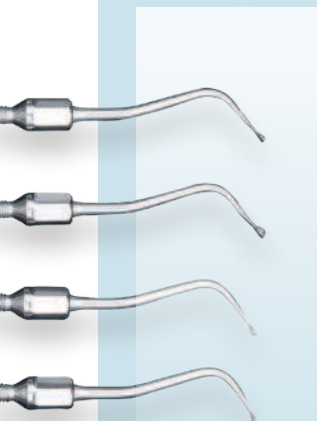
17


21



... la thérapie minimal invasive des caries et la préparation ...

Thérapie minimale invasive des caries



30 

32 **SONICflex® microinvasive**

- Système d'inserts spécial pour les petites lésions difficilement accessibles dans la zone proximale
- Les inserts diamantés sur une seule face permettent d'accéder directement à la lésion primaire par voie occlusale ou buccale
- Préservation de la substance dentaire saine

31


33

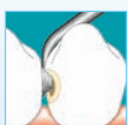


45 

SONICflex® seal

- Traitement des fissures
- Complément parfait du KaVo DIAGNOdent



58 

SONICflex® bevel

59

- Insert diamanté sur une seule face pour le biseautage précis et ciblé des lésions minimales préparées
- Optimisation du collage
- Réduction du liseré marginal



42 

43 **SONICflex® cariex D + TC**

- Retrait minimal invasif de la dentine carieuse
- Cariex TC : élimination des grosses lésions carieuses
- Cariex D : petites lésions carieuses avec possibilité d'aménagement de la cavité

71

72

Préparation



49 

50 **SONICflex® prep gold**


- Inserts de préparation diamantés sur une face pour la finition des bordures de cavité, développés spécialement pour les inlays en or et les couronnes partielles
- La géométrie de l'embout pour les inlays en or et les couronnes partielles est précisément transmise

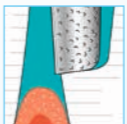


51 

52 **SONICflex® prep ceram**

- Pour inlays/onlays
- Pour la préparation de finition des bordures de cavité ; transmet la géométrie des pointes des inserts directement à la substance dentaire
- Aucune contre-dépouille pour les inlays et onlays préparés en laboratoire



34 

35 **SONICflex® prep CAD/CAM**


- Formation idéale des bordures de cavité pour les systèmes CAD/CAM, p. ex. EVEREST, CEREC



12 

SONICflex® cem

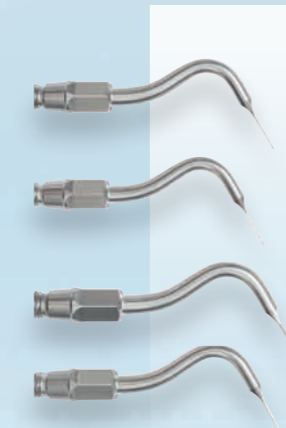
- Mise en place en douceur et précise des inlays
- Réduction du liseré marginal




97 

98 **SONICflex® prep crown**

- pour une préparation de couronne, fini avec précision



73 

74 **SONICflex® stripping / shaping**



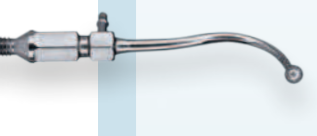
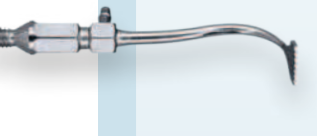
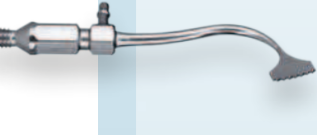
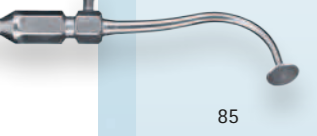

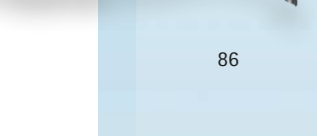
- Séparation avant le début de la préparation coronaire
- Arrondissement des zones de transition sur la limite de préparation proximale dans le cadre d'une préparation cavitaire
- Modification anatomique des surfaces proximales des obturations en composite
- Réduction proximale de l'émail dans le cadre de l'orthopédie dentofaciale

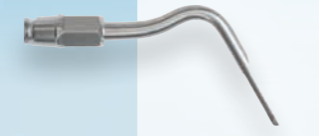
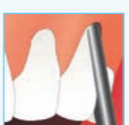
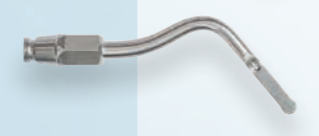




75

76

... aux applications chirurgicales.

Chirurgie

	80	
	81	SONICflex® bone • Applicable à plusieurs zones dans le cadre du traitement osseux (ostéotomie, augmentation, extractions et sinus lift).
	83	
	84	
	85	SONICflex® bone insert n°85 (insert plateau) : • Idéal pour décoller en toute sécurité la membrane de Schneider lors d'un sinus lift grâce à sa forme de disque
	86	SONICflex® bone insert n°86 (scalpel) : • Idéal pour un prélèvement rapide et facile de quantités d'os importantes, en particulier pour le sinus lift
	87	SONICflex® bone insert n°87 (scie) : • Idéal pour des incisions fines et précises pour détacher les ligaments

	90	
	91	SONICflex® crown extension Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :
	92	• Tracé d'arcade asymétrique • Sourire gingival • Atteinte de l'espace biologique
	93	
	94	
	95	

KaVo propose la solution optimale pour chaque étape de la prophylaxie.

Si simple pour vous.

Si agréable pour vos patients.

	1. Intégration dans les processus de travail (par exemple avec KaVo Primus® 1058 TM) <ul style="list-style-type: none"> • Système de prophylaxie professionnel et unité de soins fiable en seul et même équipement • Une fiabilité maximale pour des résultats de prophylaxie et de traitement de première qualité • Version sur cordons pendants, fouets ou cart à roulettes avec un large choix d'options pour tous vos besoins 	<ul style="list-style-type: none"> • Installation confortable du patient grâce au rembourrage souple • Ambiance de bien-être pour vos patients grâce à des designs attractifs • Marketing patient efficace avec solution multimédia en option 
	2. Élimination de plaque dentaire (par exemple avec KaVo SONICflex quick 2008 L) <ul style="list-style-type: none"> • Changement d'insert simple et rapide en un tour de main • Un seul instrument pour une multitude de domaines d'application • Convient également aux raccords Sirona 	<ul style="list-style-type: none"> • Oscillations douces particulièrement appropriées pour les patients sensibles • Grande confiance des patients grâce à un traitement effectué dans les conditions les plus agréables possibles • Détartreur silencieux avec lumière 
	3. Nettoyage des dents (par exemple avec KaVo PROPHYflex 3 - 2018) <ul style="list-style-type: none"> • Buse orientable à 360° pour un travail confortable dans les meilleures conditions • Entièrement stérilisable et donc facilement intégrable dans les procédures d'hygiène • Convient également aux raccords Sirona 	<ul style="list-style-type: none"> • Détartrage parfait des dents pour des résultats visiblement meilleurs • Traitement doux et agréable avec les perles PROPHYpearls • 4 nouveaux parfums de poudre (fruits des bois, cerise, menthe et orange) 
	4. Polissage des dents (par exemple avec KaVo DURAtec 2933) <ul style="list-style-type: none"> • Adaptable pour systèmes à clip ou à vis • Fiabilité durable grâce au procédé spécial d'étanchéité de la tête évitant la pénétration de pâte de polissage • Excellent nettoyage grâce à une répartition optimale de la pâte assurée par un mouvement alternatif de 90° 	<ul style="list-style-type: none"> • Polissage indolore avec des vibrations douces • Sensation agréable • Des dents sensiblement plus propres 
	5. Détection (par exemple avec KaVo DIAGNOdent) <ul style="list-style-type: none"> • Des résultats fiables dans tous les domaines d'application • Un diagnostic sûr en cas de fissures et de caries proximales et une détection fiable de concrétions dans les poches • Diagnostiquer des caries cachées au plus tôt avec le laser haute technologie 	<ul style="list-style-type: none"> • Sans fil et maniable • Conservation et ménagement de la substance dentaire saine • Détection indolore • Une plus grande confiance des patients grâce à un diagnostic plus sûr 

Sélection complète pour votre spectre d'utilisation.

pour SONICflex 2000N, 2000L, 2003 / L pour SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

Domaine d'application	Désignation Insert KaVo	n°	Référence n°	n°	Référence n°	
Élimination de la plaque dentaire	SONICflex scaler insert universel	n° 5	0.571.5171	n° 5A	1.005.8949	
	SONICflex scaler insert faucille	6	0.571.5181	6A	1.005.8950	
	SONICflex scaler insert Perio	7	0.571.5179	7A	1.005.8951	
	SONICflex scaler insert Perio extra-long	8	0.571.5371	8A	1.006.1953	
	SONICflex scaler jeu d'inserts	Set	1.000.4983	Set A	1.005.9328	
	SONICflex insert pour brosses	48	0.571.0401	48 A	1.006.1982	
Nettoyage de la surface des racines	SONICflex paro insert long droit	60	0.571.7402	60A	1.006.1934	
	SONICflex paro insert long, gauche	61	0.571.7412	61A	1.006.1935	
	SONICflex paro insert long, droite	62	0.571.7422	62A	1.006.1936	
	SONICflex paro jeu d'inserts	Set	0.571.0371	Set A	1.006.2020	
	SONICflex rootplaner insert bourgeon, petit, gauche	24	0.571.5621	24A	1.006.1957	
	SONICflex rootplaner insert bourgeon, petit, droite	25	0.571.5631	25A	1.006.1959	
	SONICflex rootplaner insert rootplaner, bourgeon, petit, universel	26	0.571.5641	26A	1.006.1961	
	SONICflex rootplaner insert, bourgeon, grand, perio	27	0.571.5651	27A	1.006.1963	
	SONICflex insert implant	48	1.003.8167	48A	1.006.2027	
Traitement rétrograde du canal radiculaire	SONICflex retro insert isthme, gauche	56	0.571.7322	56A	1.006.2040	
	SONICflex retro insert isthme, droite	57	0.571.7332	57A	1.006.2041	
	SONICflex retro insert cylindrique, petit, gauche	16	0.571.5541	16A	1.006.2036	
	SONICflex retro insert cylindrique, petit, droite	17	0.571.5581	17A	1.006.2035	
	SONICflex retro insert forme en T, petit, gauche	20	0.571.5521	20A	1.006.2037	
	SONICflex retro insert forme en T, petit, droite	21	0.571.5561	21A	1.006.2038	
	SONICflex retro insert frontales	55	0.571.7342	55A	1.006.2039	
	SONICflex retro jeu d'inserts	Set	0.571.0381	Set A	1.006.2034	
	Préparation et formation des canaux radiculaires	SONICflex endo insert bourgeon grand, diamanté	66	1.000.5825	66A	1.006.1992
SONICflex endo insert conique 125°, diamanté		67	1.000.5822	67A	1.006.1994	
SONICflex endo insert conique 112°, diamanté		68	1.000.5823	68A	1.006.1996	
SONICflex endo insert bourgeon petit, diamanté		69	1.000.5827	69A	1.006.1998	
SONICflex endo insert conique 117°, insert non diamanté		70	1.000.5821	70A	1.006.2000	
Insert SONICflex endo clean 96		96	1.008.5163	96A	1.008.5164	
Set SONICflex endo clean		Set	1.006.2045	Set A	1.007.1142	
Aiguilles SONICflexendo clean 015		-	1.006.2042	-	1.006.2042	
Aiguilles SONICflex endo clean 020		-	1.006.2043	-	1.006.2043	
Aiguilles SONICflex endo clean 025		-	1.006.2044	-	1.006.2044	
Thérapie minimale invasive des caries		SONICflex seal insert	45	1.000.8323	45A	1.007.1506
	SONICflex micro Torpedo insert mésial, diamanté	28	0.571.6741	28A	1.006.1965	
	SONICflex micro Torpedo insert mésial, diamanté	29	0.571.6731	29A	1.006.1967	
	SONICflex micro insert, petite demi-sphère, mésial, diamanté	30	0.571.6811	30A	1.006.1969	
	SONICflex micro insert, petite demi-sphère, distal, diamanté	31	0.571.6801	31A	1.006.1971	
	SONICflex micro insert, grande demi-sphère, mésial, diamanté	32	0.571.6831	32A	1.006.1973	
	SONICflex micro insert, grande demi-sphère, distal, diamanté	33	0.571.6821	33A	1.006.1975	
	SONICflex bevel, mésial, diamanté	58	0.571.7392	58A	1.006.1988	
	SONICflex bevel insert distal, diamanté	59	0.571.7382	59A	1.006.1990	
	SONICflex carieux D insert, forme sphérique, petit, diamanté	42	0.571.7105	42A	1.006.1980	
	SONICflex carieux D insert, forme sphérique, grand, diamanté	43	0.571.7167	43A	1.006.1981	
	SONICflex carieux TC insert, forme sphérique, petit, métal dur	71	1.000.7362	71A	1.006.2002	
	SONICflex carieux TC insert, forme sphérique, grand, métal dur	72	1.000.7363	72A	1.006.2004	
	Préparation	SONICflex prep gold insert mésial, diamanté	49	0.571.7212	49A	1.006.1983
		SONICflex prep gold insert distal, diamanté	50	0.571.7222	50A	1.006.1984
SONICflex prep ceram insert mésial, diamanté		51	0.571.7262	51A	1.006.1985	
SONICflex prep ceram insert distal, diamanté		52	0.571.7272	52A	1.006.1986	
SONICflex prep CAD/CAM insert mésial, diamanté		34	1.002.1984	34A	1.006.1977	
SONICflex prep CAD/CAM insert distal, diamanté		35	1.002.1986	35A	1.006.1979	
SONICflex cem insert		12	0.571.5431	12A	1.006.2021	
Insert SONICflex crown prep 97, rayon		97	1.008.6383	97A	1.008.6384	
Insert SONICflex crown prep 98, étage		98	1.008.6385	98A	1.008.6386	
SONICflex stripping mesial		73	1.011.2993	73A	1.011.2994	
SONICflex stripping distal		74	1.011.2995	74A	1.011.2996	
SONICflex shaping mesial		75	1.011.2997	75A	1.011.2998	
SONICflex shaping distal		76	1.011.2999	76A	1.011.3000	
Chirurgie		SONICflex bone insert, grande boule diamantée, évaluation du volet sinusien	81	1.004.3876	81A	1.006.2008
		Insert SONICflex bone, sphérique, grand, non diamanté, élévation du volet sinusien	82	1.004.3877	82A	1.006.2010
	SONICflex bone insert, scie, sagittale	83	1.004.3878	83A	1.006.2012	
	SONICflex bone insert, scie, axiale	84	1.004.3879	84A	1.006.2014	
	SONICflex bone insert plateau	85	1.006.0645	85A	1.007.1624	
	SONICflex bone insert scratcher (scalpel)	86	1.006.0741	86A	1.007.1625	
	SONICflex bone insert, scie	87	1.006.1275	87A	1.007.1627	
	SONICflex bone insert carré, pour bone splitting	80	1.004.3875	80A	1.007.2006	
Minimale invasive Élongation coronaire	SONICflex crown extension 020	jeu	1.004.3874	jeu A	1.006.2033	
	SONICflex crown extension 020	90	1.011.3001	90A	1.011.3002	
	SONICflex crown extension 020	91	1.011.3003	91A	1.011.3004	
	SONICflex crown extension 020	92	1.011.3005	92A	1.011.3006	
	SONICflex crown extension 030	93	1.011.3007	93A	1.011.3008	
	SONICflex crown extension 030	94	1.011.3009	94A	1.011.3010	
	SONICflex crown extension 030	95	1.011.3011	95A	1.011.3012	

Mat.-Nr. 1.004.1452 05/10/16 fr Sous réserve de modification techniques. De légères variations de couleurs dues au procédé d'impression sont possibles. © Copyright KaVo Dental GmbH



Dispositif médical classe IIa/CE0124/Dekra certification GmbH
 Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d'utilisation.
 Toutes les informations indispensables pour un bon usage de ce dispositif figurent dans les résumés caractéristiques des produits disponibles sur le site : www.kavo.fr
 Produit non remboursé par les organismes d'Assurance Maladie
 Fabricant : KaVo Dental GmbH – Distribution : KaVo Dental SAS, 77185 Lognes

KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH · D-88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1103 · www.kavo.com

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban