


KaVo SONICflex® quick 2008/L · SONICflex® 2003/L

Il talento
dalle molte sfaccettature
per il vostro studio.



KaVo. Dental Excellence.

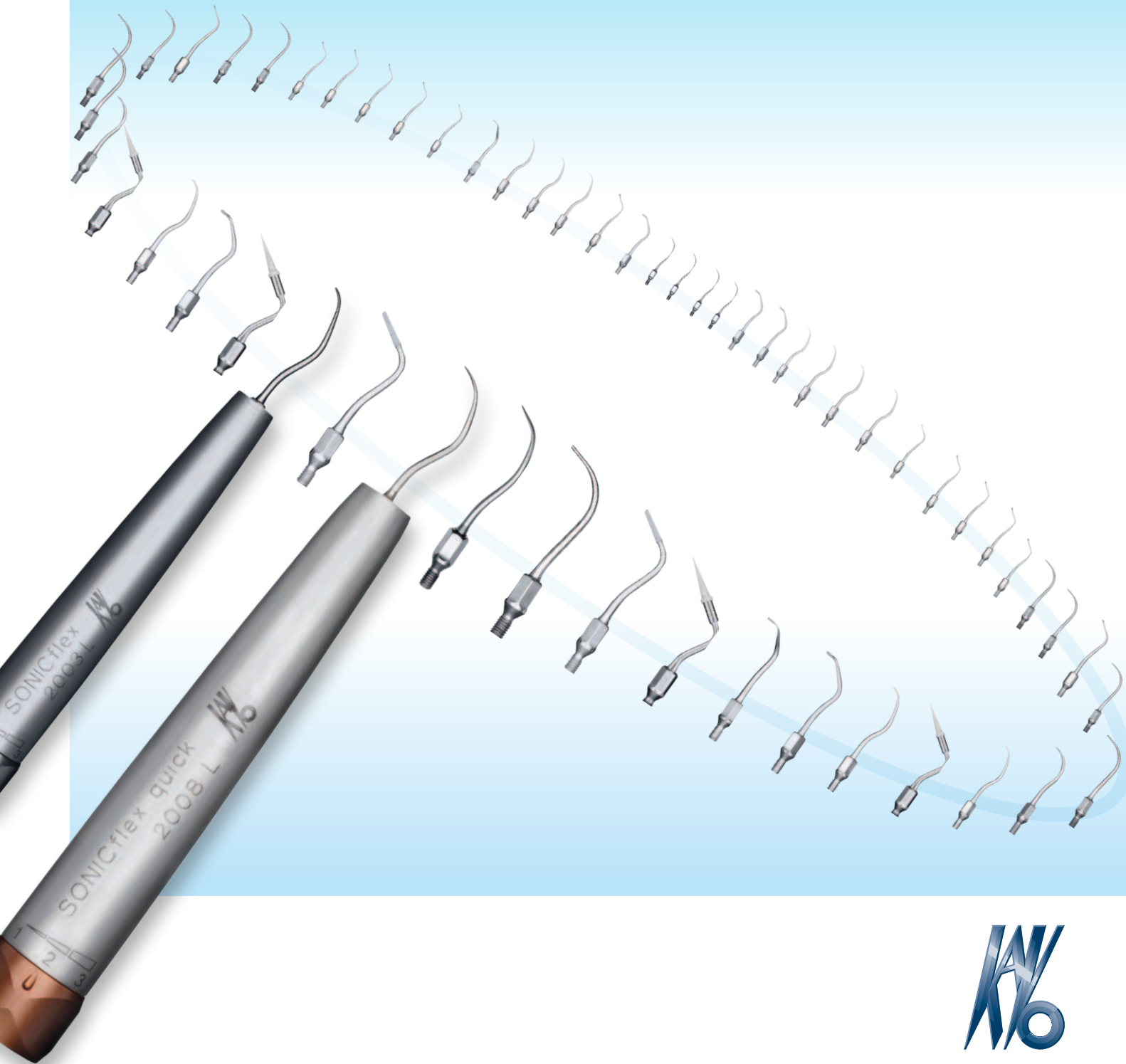

Massima flessibilità.

Un numero sempre maggiore di pazienti capisce quanto sia necessaria una profilassi regolare per mantenere sani i denti e ritiene molto importante un trattamento conservativo. KaVo SONICflex è facile da usare e piacevole come trattamento, quindi perfetto anche per la profilassi. In questo modo sarete in grado di creare un legame ancora più forte con i vostri pazienti, orientandoli alla prevenzione.

Impiego universale e preciso.

Grazie alle ampie possibilità offerte, SONICflex diventerà presto uno strumento di cui non potrete fare a meno. Con le sue numerose punte si adatta perfettamente alle vostre esigenze.

Massima varietà, punti di forza e vantaggi per voi:

- Oltre 50 inserti e quindi più possibilità d'impiego di qualsiasi altro aircaler
- Per tutti i campi di applicazione
- Base per un trattamento minimamente invasivo di successo

Trattamento conservativo, più gradevole per i vostri pazienti.

Un trattamento piacevole fa tornare di nuovo i pazienti.

Grazie a KaVo SONICflex, i pazienti avvertono una delicatezza di trattamento notevolmente superiore. La ridotta frequenza sonora e i lunghi tratti del movimento ellittico riducono la formazione di calore. Inoltre, SONICflex protegge la sostanza dentale, dato che lavora con una bassa pressione di contatto. A qualsiasi livello di potenza SONICflex consente di lavorare in modo notevolmente più piacevole ed estremamente conservativo.

Comfort per il paziente, punti di forza e vantaggi:

- Trattamento piacevole
- Delicato sulla sostanza dentale
- Un'oscillazione delicata, soprattutto per i pazienti sensibili al dolore
- Sviluppa poco calore



Efficienza e prestazioni di massimo livello. Più semplice per voi.

Il verso giusto per lavorare con efficienza.

Con SONICflex è molto semplice cambiare l'inserto: grazie ad un sistema KaVo brevettato, anche le punte si possono sostituire in modo semplice e veloce, con un solo giro. Fa risparmiare tempo prezioso e garantisce un iter di lavoro efficiente e senza intoppi.

Brevettato da KaVo: sostituzione semplice e veloce degli inserti con un solo giro.



KaVo SONICflex, punti di forza e vantaggi per voi:

- La più ampia gamma di indicazioni e impiego di tutti gli scaler sonici, incl. la profilassi per trattamenti conservativi
- Cambio semplice e veloce degli inserti: garantisce un lavoro efficiente, fa risparmiare tempo ed evita intoppi al vostro iter di lavoro
- Massima potenza di asportazione, fino al 50% di potenza in più rispetto al modello precedente, rimozione senza problemi di placca particolarmente resistente
- Nessuna necessità di apparecchi supplementari: è sufficiente una semplice operazione di innesto sull'attacco KaVo MULTIFLEX o Sirona, senza fastidiosi grovigli di cavi
- Ottima illuminazione: 25.000 Lux per una visione rilassata senza stancare gli occhi – disponibile anche con LED
- Silenziosità notevolmente superiore a quella di prodotti concorrenti (fino a 15 dB): protezione della salute per il personale del vostro studio e i pazienti
- Comprovata qualità KaVo – KaVo SONICflex 2003 L e 2008 L rappresentano già la terza generazione di scaler KaVo e riuniscono ben 25 anni di conoscenze ed esperienza

Vantaggio quotidiano in termini di potenza.

KaVo SONICflex è l'airscaler più potente e silenzioso della sua classe. È sicuramente lo strumento che vanta la più ampia gamma di applicazioni. Grazie ai livelli di potenza regolabili supporta in modo efficace e preciso il vostro lavoro in funzione del tipo di indicazione.


KaVo SONICflex quick 2008 L e KaVo SONICflex LUX 2003 L – una potenza regolabile per ogni indicazione.

Livelli di potenza	Ampiezza di oscillazione	Frequenza	Rumorosità	Indicazioni
Livello 1	120 µm	6000 Hz	61 dB (A)	Finitura e lavorazione particolarmente delicata
Livello 2	160 µm	6000 Hz	69 dB (A)	Preparazione e rimozione della placca
Livello 3	240 µm	6000 Hz	71 dB (A)	Potente preparazione e rimozione della placca

Sicurezza, ergonomia e igiene che non passano certo inosservate.

SONICflex è dotato del rivestimento Plasmatec particolarmente robusto e maneggevole. Grazie a questa superficie in metallo-ceramica, la presa di KaVo SONICflex risulta ancora più sicura. Durante il trattamento le dita sono più rilassate e avvertono una sensazione di presa gradevole.

La superficie Plasmatec è provvista della sigillatura igienica KaVo, pertanto resiste anche alla pulizia in termodisinfettore, è sterilizzabile fino a 135° C e soddisfa le direttive d'igiene in vigore (ad es. RKI), un punto in più a favore del vostro studio in termini di igiene.

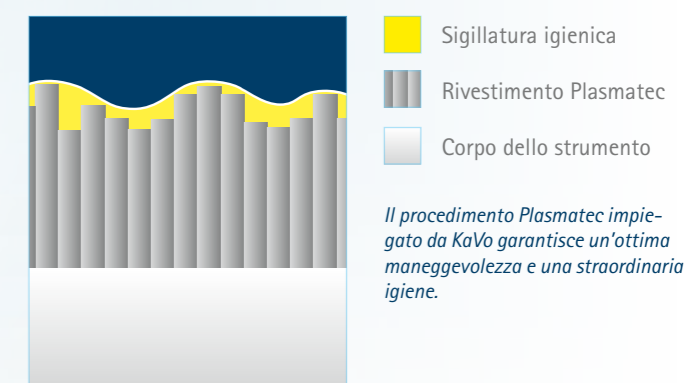

Adattatore per il ricondizionamento validato delle punte SONICflex, ad es. per termodisinfettore Miele

Massima performance, partendo da profilassi, paradontologia ed endodonzia...

Specialisti che vi supportano ogni giorno.

Non importa quali siano i settori di specializzazione del vostro studio. Grazie all'ampia selezione di inserti, con SONIFLEX avete sempre a portata di mano il giusto strumento. Scegliete il vostro personale assortimento di inserti e ampliatelo secondo le vostre necessità. In tutte le situazioni potete ottenere i migliori risultati a livello di trattamento - in modo semplice e piacevole per i vostri pazienti!



La profilassi perfetta. In modo realmente semplice per voi e piacevole per i vostri pazienti.

Profilassi e paradontologia

5
6
7
8

SONICflex scaler

- Varietà di punte per una duratura ablazione del tartaro
- Pulizia di tasche non molto profonde

60
61 li.
62 re.

SONICflex paro

- Diverse punte per una pulizia minimamente invasiva, delicata ed efficiente di tasche parodontali fino a 9 mm di profondità

48

SONICflex clean

- Ampia gamma di spazzolini vibranti
- Per una pulizia e lucidatura delicata

Accessorio SONICflex paro

- Elemento intermedio per l'apporto di liquidi medicamentosi, ad es. soluzione fisiologica sterile (Codice 1.000.6296)

Profilassi e paradontologia

48

SONICflex implant

- Efficace rimozione di placca subgingivale e concrezioni
- Nessuna abrasione, nessun irruvidimento
- Inserto di pulizia monouso, quindi nessuna trasmissione di malattie

24
25
26
27

SONICflex root planer

- Per un facile trattamento di forcazioni distanti o strette

Endodonzia

66
67
68
69
70
96

SONICflex endo

assortimento speciale di punte per

- Ricerca dei canali
- Rimozione di materiali morbidi in caso di ritrattamento
- Conformazione degli ingressi di canali
- Conformazione della cavità pulpare per la preparazione radicolare coronale
- Pulizia e lavaggio del canale radicolare (inserto 96, disponibile nelle misure ISO 0,15, 0,20 e 0,25)

16
20
55
57
17
21


SONICflex retro

- Preparazione retrograda del canale radicolare con punte diamantate, angolate
- Prevenzione di danni radicolari a causa di incrinature, supporto della stabilità del dente, conservazione dell'osso periapicale
- Possibilità di una preparazione precisa a livello assiale



... passando per la terapia della carie e la preparazione minimamente invasiva...

Preparazione di inlay/onlay

30 

32 **SONICflex microinvasive**

- Speciale sistema di punte per piccole lesioni difficilmente accessibili nella regione prossimale
- Le punte diamantate su un solo lato consentono l'accesso diretto alla lesione primaria dal lato oclusale o buccale
- Conservazione della sostanza dentale sana

31

33

45 

SONICflex seal

- Preparazione di fessure
- Integrazione perfetta con KaVo DIAGNOdent

58 

SONICflex bevel

- Punta diamantata su un solo lato per una bisellatura mirata di piccole cavità preparate
- Ottimizzazione della cementazione
- Minimizzazione delle fessure nei bordi

59

42 

SONICflex cariex D + TC

- Asportazione minimamente invasiva di dentina cariata
- Cariex TC: escavazione di estese lesioni cariose
- Cariex D: trattamento di piccole lesioni cariose con la possibilità di conformare la cavità

71

72

Preparazione

49 

SONICflex prep gold

- Punta di preparazione diamantata su un solo lato per la finitura dei margini di cavità realizzate in particolare per inlay in oro e corone parziali
- La rifinitura delle superfici di preparazione per inlay in oro e corone parziali viene eseguita con precisione


50

51 

SONICflex prep ceram

- Per inlay/onlay
- Per la preparazione di finitura di margini di cavità; trasferisce la geometria delle punte di lavoro direttamente sulla sostanza dentale
- Niente più sottosquadri in inlay e onlay realizzati in laboratorio

52

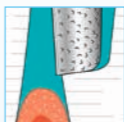34 

SONICflex prep CAD/CAM

- Conformazione ideale dei margini di cavità per sistemi CAD/CAM, ad es. EVEREST, CEREC

35

12 

SONICflex cem

- Inserimento di inlay più preciso
- Riduzione delle fessure nei bordi

97 

SONICflex prep crown

- Per preparazioni di corone rifinite con precisione

98

73 

SONICflex® stripping / shaping

- Separazione prima della preparazione del moncone
- Arrotondamento dei passaggi taglienti alla demarcazione dei confini di preparazione prossimale durante la preparazione della cavità
- Disegno anatomico delle superfici prossimali dei riempimenti in composito
- Riduzione dello smalto prossimale in ortodonzia

74






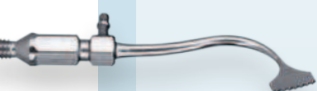


75








76



... arrivando alle applicazioni in campo chirurgico.


Chirurgia

	80	
	81	SONICflex bone
	83	<ul style="list-style-type: none"> • Possibile impiego in molti settori del trattamento osseo (osteotomie, aumenti, estrazioni e rialzo del seno).
	84	
	85	Punta SONICflex bone 85 (zampa d'elefante) <ul style="list-style-type: none"> • Ideale per il distacco in sicurezza della membrana di Schneider nel rialzo del seno grazie alla forma a zampa di elefante
	86	PuntaSONICflex bone 86 (raschietto) <ul style="list-style-type: none"> • Ideale per ricavare in modo semplice e veloce quantitativi maggiori di osso, soprattutto per l'aumento dello stesso
	87	Punta SONICflex bone 87 (sega) <ul style="list-style-type: none"> • Ideale per tagli stretti, per il distacco dei legamenti

	90	
	91	SONICflex® crown extension
	92	Estensione chirurgica della corona senza formazione di lembi per ripristinare la larghezza biologica in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • Arcate dentali asimmetriche • Gummy smile • Violazione della larghezza biologica
	93	
	94	
	95	

KaVo vi offre per ogni fase di profilassi la soluzione ottimale.

Estremamente facile per voi. Davvero gradevole per i pazienti.

	1. Integrazione del flusso di lavoro (per esempio con KaVo Primus 1058 TM) <ul style="list-style-type: none"> • Sistema per la profilassi professionale e unità operativa affidabile in un unico riunito • Altissima affidabilità per risultati di primo ordine nell'ambito della profilassi e di tutte le altre indicazioni • Versioni a cordoni pendenti, a braccetti bilanciati e cart con una dotazione diversificata e flessibile per qualsiasi esigenza 	<ul style="list-style-type: none"> • Posizione del paziente confortevole grazie all'imbottitura morbida • Design attraenti creano un ambiente rilassante per i vostri pazienti • Comunicazione verso il paziente di sicuro impatto grazie a soluzioni multimediali (optional) 
	2. Rimozione delle concrezioni (per esempio con KaVo SONICflex quick 2008 L) <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione semplice e veloce delle punte con un solo giro • Uno strumento solo per tante diverse applicazioni • Compatibile anche con l'attacco Sirona 	<ul style="list-style-type: none"> • Oscillazioni delicate, particolarmente adatto ai pazienti sensibili al dolore • Aumento della fidelizzazione dei pazienti grazie ad un trattamento minimamente invasivo • Airscaler silenzioso fibrato 
	3. Pulitura ad aria (per esempio con KaVo PROPHYflex 3 - 2018) <ul style="list-style-type: none"> • Ugello rotante a 360° per lavorare bene e senza stress in tutti i quadranti • Completamente sterilizzabile e quindi facilmente integrabile nel flusso di lavoro d'igiene • Compatibile anche con l'attacco Sirona 	<ul style="list-style-type: none"> • Pulizia accurata dei denti per risultati immediatamente visibili • Trattamento delicato e gradevole con PROPHYpearls • 4 nuovi gusti per la polvere (fragola, ciliegia, menta e arancia) 
	4. Lucidatura (per esempio con KaVo DURAtec 2933) <ul style="list-style-type: none"> • Compatibile con gommini Snap-on o a vite • Affidabilità estrema grazie all'isolamento della testina contro la penetrazione di pasta per profilassi • Miglior risultato tramite la distribuzione omogenea della pasta grazie al movimento alternato a 90° 	<ul style="list-style-type: none"> • Lucidatura delicata con minime vibrazioni • Percettibilmente gradevole • Denti decisamente lucidi 
	5. Riconoscimento precoce della carie (per esempio con KaVo DIAGNOdent) <ul style="list-style-type: none"> • Diagnosi sicure in tutti i campi di applicazione • Anche nel caso di carie prossimali o fissurali nonché rilevazione delle concrezioni all'interno delle tasche parodontali • Carie nascoste diagnosticate tempestivamente grazie al laser a fluorescenza 	<ul style="list-style-type: none"> • Senza fili e maneggevole • Conservazione e cura della sostanza dentale sana • Rilevazione priva di dolore • Aumento della fidelizzazione dei pazienti grazie ad una diagnosi certa 

Ampia selezione per moltissime applicazioni.

per SONICflex
2000 N, 2000 L, 2003 / L

per SONICflex
2008 / L, 2008 S / LS

Campo di applicazione	Denominazione della punta KaVo	N°	Codice	N°	Codice	
Ablazione del tartaro	Punta SONICflex scaler universale	5	0.571.5171	5A	1.005.8949	
	Punta SONICflex scaler a falce	6	0.571.5181	6A	1.005.8950	
	Punta SONICflex scaler Perio	7	0.571.5179	7A	1.005.8951	
	Punta SONICflex scaler Perio extra lunga	8	0.571.5371	8A	1.006.1953	
	Set di punte SONICflex scaler	set	1.000.4983	set A	1.005.9328	
	Punta SONICflex per inserti spazzolino	48	0.571.0401	48 A	1.006.1982	
Pulizia della superficie radicolare	Punta SONICflex paro lunga, dritta	60	0.571.7402	60A	1.006.1934	
	Punta SONICflex paro lunga, sinistra	61	0.571.7412	61A	1.006.1935	
	Punta SONICflex paro lunga, destra	62	0.571.7422	62A	1.006.1936	
	Set di punte SONICflex paro	Set	0.571.0371	Set A	1.006.2020	
	Punta SONICflex rootplaner a boccio, piccola, sinistra	24	0.571.5621	24A	1.006.1957	
	Punta SONICflex rootplaner a boccio, piccola, destra	25	0.571.5631	25A	1.006.1959	
	Punta SONICflex rootplaner a boccio, piccola, universale	26	0.571.5641	26A	1.006.1961	
	Punta SONICflex rootplaner a boccio, grande, parodontale	27	0.571.5651	27A	1.006.1963	
	Punta SONICflex implant	48	1.003.8167	48A	1.006.2027	
	Trattamento del canale radicolare per via retrograda	Punta SONICflex retro a istmo, sinistra	56	0.571.7322	56A	1.006.2040
Punta SONICflex retro a istmo, destra		57	0.571.7332	57A	1.006.2041	
Punta SONICflex retro cilindrica, piccola, sinistra		16	0.571.5541	16A	1.006.2036	
Punta SONICflex retro cilindrica, piccola, destra		17	0.571.5581	17A	1.006.2035	
Punta SONICflex retro forma a T, piccola, sinistra		20	0.571.5521	20A	1.006.2037	
Punta SONICflex retro forma a T, piccola, destra		21	0.571.5561	21A	1.006.2038	
Punta SONICflex retro dente anteriore		55	0.571.7342	55A	1.006.2039	
Set di punte SONICflex retro		set	0.571.0381	set A	1.006.2034	
Individuazione e preparazione di canali radicolari		Punta SONICflex endo a boccio, grande, diamantata	66	1.000.5825	66A	1.006.1992
		Punta SONICflex endo conica 125°, diamantata	67	1.000.5822	67A	1.006.1994
	Punta SONICflex endo conica 112°, diamantata	68	1.000.5823	68A	1.006.1996	
	Punta SONICflex endo a boccio, piccola, diamantata	69	1.000.5827	69A	1.006.1998	
	Punta SONICflex endo conica 117°, non diamantata	70	1.000.5821	70A	1.006.2000	
	SONICflex endo clean, inserto 96	96	1.008.5163	96A	1.008.5164	
	SONICflex endo clean set	set	1.006.2045	set A	1.007.1142	
	SONICflex endo clean, aghi 015	-	1.006.2042	-	1.006.2042	
	SONICflex endo clean, aghi 020	-	1.006.2043	-	1.006.2043	
	SONICflex endo clean, aghi 025	-	1.006.2044	-	1.006.2044	
Terapia della carie mini-invasiva	Punta SONICflex seal	45	1.000.8323	45A	1.007.1506	
	Punta SONICflex micro a siluro, mesiale, diamantata	28	0.571.6741	28A	1.006.1965	
	Punta SONICflex micro a siluro, mesiale, diamantata	29	0.571.6731	29A	1.006.1967	
	Punta SONICflex micro semisferica piccola, mesiale, diamantata	30	0.571.6811	30A	1.006.1969	
	Punta SONICflex micro semisferica piccola, distale, diamantata	31	0.571.6801	31A	1.006.1971	
	Punta SONICflex micro semisferica grande, mesiale, diamantata	32	0.571.6831	32A	1.006.1973	
	Punta SONICflex micro semisferica grande, distale, diamantata	33	0.571.6821	33A	1.006.1975	
	Punta SONICflex bevel, mesiale, diamantata	58	0.571.7392	58A	1.006.1988	
	Punta SONICflex bevel, distale, diamantata	59	0.571.7382	59A	1.006.1990	
	Punta SONICflex carieux D, sferica, piccola, diamantata	42	0.571.7105	42A	1.006.1980	
	Punta SONICflex carieux D, sferica, grande, diamantata	43	0.571.7167	43A	1.006.1981	
	Punta SONICflex carieux TC, sferica, piccola, metallo duro	71	1.000.7362	71A	1.006.2002	
	Punta SONICflex carieux TC, sferica, grande, metallo duro	72	1.000.7363	72A	1.006.2004	
	Präparation	Punta SONICflex prep gold, mesiale, diamantata	49	0.571.7212	49A	1.006.1983
Punta SONICflex prep gold, distale, diamantata		50	0.571.7222	50A	1.006.1984	
Punta SONICflex prep ceram, mesiale, diamantata		51	0.571.7262	51A	1.006.1985	
Punta SONICflex prep ceram, distale, diamantata		52	0.571.7272	52A	1.006.1986	
Punta SONICflex prep CAD/CAM, mesiale, diamantata		34	1.002.1984	34A	1.006.1977	
Punta SONICflex prep CAD/CAM, distale, diamantata		35	1.002.1986	35A	1.006.1979	
Punta SONICflex cem		12	0.571.5431	12A	1.006.2021	
SONICflex crown prep 97 arrotondata		97	1.008.6383	97A	1.008.6384	
SONICflex crown prep 98 piatta		98	1.008.6385	98A	1.008.6386	
SONICflex stripping mesial		73	1.011.2993	73A	1.011.2994	
SONICflex stripping distal		74	1.011.2995	74A	1.011.2996	
SONICflex shaping mesial		75	1.011.2997	75A	1.011.2998	
SONICflex shaping distal		76	1.011.2999	76A	1.011.3000	
Chirurgia		Punta SONICflex bone sferica, grande, diamantata, valutazione del pavimento del seno mascellare	81	1.004.3876	81A	1.006.2008
		Punta SONICflex bone sferica, grande, non diamantata, valutazione del pavimento del seno mascellare	82	1.004.3877	82A	1.006.2010
		Punta SONICflex bone, sega sagittale	83	1.004.3878	83A	1.006.2012
	Punta SONICflex bone, sega assiale	84	1.004.3879	84A	1.006.2014	
	Punta SONICflex bone a zampa d'elefante	85	1.006.0645	85A	1.007.1624	
	Punta SONICflex bone scratcher	86	1.006.0741	86A	1.007.1625	
	Punta SONICflex bone a sega	87	1.006.1275	87A	1.007.1627	
	Punta SONICflex bone quadrata, per bone splitting	80	1.004.3875	80A	1.007.2006	
	Set di punte SONICflex bone	set	1.004.3874	set A	1.006.2033	
	SONICflex crown extension 020	90	1.011.3001	90A	1.011.3002	
Minimamente invasiva Estensione della corona	SONICflex crown extension 020	91	1.011.3003	91A	1.011.3004	
	SONICflex crown extension 020	92	1.011.3005	92A	1.011.3006	
	SONICflex crown extension 030	93	1.011.3007	93A	1.011.3008	
	SONICflex crown extension 030	94	1.011.3009	94A	1.011.3010	
	SONICflex crown extension 030	95	1.011.3011	95A	1.011.3012	



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban