

Die Schlauchablage Comfort – für jeden Anspruch die individuelle Lösung



DRUCKLUFT
ABSAUGUNG
BILDGEBUNG
ZAHNERHALTUNG
HYGIENE

Mehr Variation für viele Möglichkeiten

Die Schlauchablage Comfort von Dürr Dental passt sich jeder Arbeitsweise an

Die Bestückung der Schlauchablagen in Zahnarztpraxen variiert je nach Behandlungsschwerpunkt, persönlicher Absaugtechnik und Handhabung. Die Dürr Dental Schlauchablage Comfort ist aufgrund ihres modularen Aufbaus individuell erweiterbar und für bis zu fünf verschiedene Komponenten ausgelegt.

Ob großer oder kleiner Saugschlauch, Luft-Wasser-Spritze, Intraoralkamera, Trichter oder Filtereinheit, hier findet alles seinen Platz. Die vakuumgesteuerte Selektivablage unterstützt immer den gerade zum Einsatz kommenden Schlauch mit der geforderten Saugkraft – ohne störende Nebengeräusche. Die Dürr Dental Schlauchablage Comfort kann direkt an der Wand oder optional unter der Arbeitsplatte mit dem ausziehbaren Schwenkschieber befestigt werden.

Schwenkschieber



Einfach komfortabel: der Filterwechsel.

Das Filterelement verfügt über ein hohes Auffangvolumen, dadurch haben die Einwegfilter eine lange Standzeit. Wenn der Filter gewechselt werden muss, geht das komfortabel und hygienisch: Einfach den Entnahmestab samt Filter am Griff herausziehen und komplett entsorgen.

Kamerahalter

Großer Saugschlauch/
Spraynebelabsaugung

Luft-Wasser-Spritze

Kleiner Saugschlauch/
Speichelzieher

Darauf kommt es an:

- Modulare Bauweise, individuell und einfach erweiterbar
- Selektivsteuerung für großen und kleinen Saugschlauch
- Schwenkbare Schlauchanschlüsse am Filtergehäuse für eine größere Reichweite und geringere Beanspruchung der Saugschläuche
- Hohe Ergonomie durch in der Neigung verstellbare Schlauchhalter
- Optionales Kürzungsset zur individuellen Anpassung der Schlauchlänge
- Befestigung direkt an der Wand oder optional unter der Arbeitsplatte mit dem ausziehbaren Schwenkschieber möglich
- Lange Standzeit des Filters

Handstücke nach Maß


Das Handstück-Programm von Dürr Dental

Dürr Dental bietet für nahezu jeden Hersteller am Markt den passenden Schlauchadapter. Dies ermöglicht eine maßgeschneiderte Konfiguration der jeweiligen Saughandstücke. Wer ermüdungsfrei und ergonomisch arbeiten möchte, kann das Kugelgelenk einsetzen. Es sorgt für den richtigen Winkel, verkürzt den Hebel und verbessert das Handling entscheidend. Jedes Handstück ist mit und ohne Drehschieber erhältlich. Mit dem Schieber lässt sich die Saugleistung kurzfristig unterbrechen. Die Drehhülse mit Protect-Nebenlufteinlässen erleichtert die Arbeit zusätzlich.


Darauf kommt es an:

- Maßgeschneiderte Konfiguration der Saughandstücke
- Drehschieber zum Unterbrechen der Saugleistung
- Keinerlei störende Strömungsgeräusche bei eingehängten Saugschläuchen durch die Verwendung von Spezialventilen
- Kugelgelenk für höheren Bedienkomfort (optional)
- Handstücke im Autoklaven bei 134 °C sterilisierbar
- Kugelgelenk erhöht die Lebensdauer des Saugschlauches


Beispiel: Kombination 1

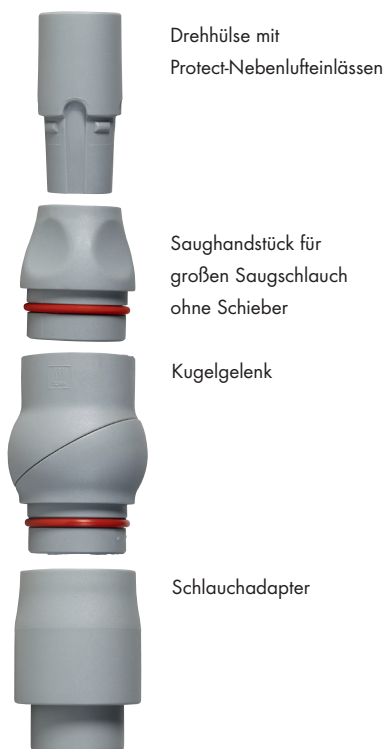

Beispiel: Kombination 2

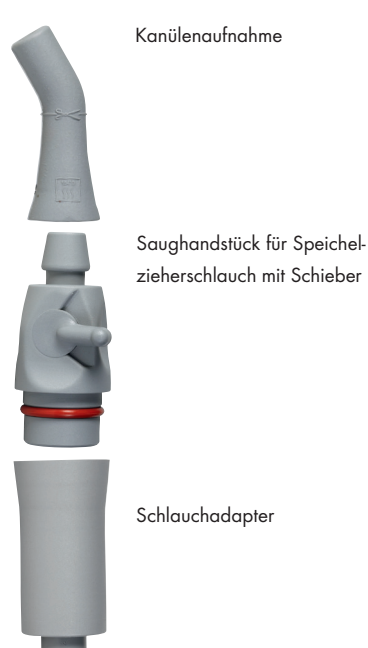

Beispiel: Kombination 3

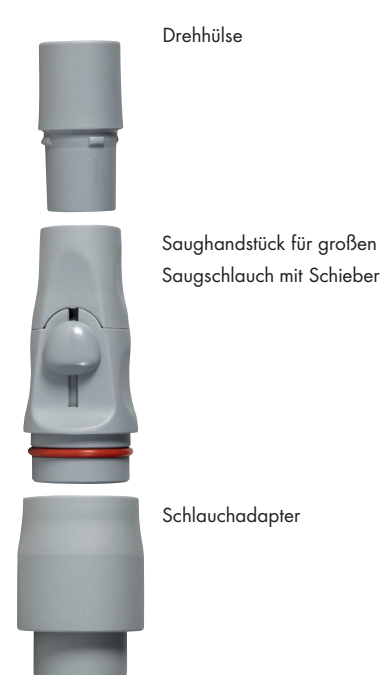

Unser Absaugkanülen-Programm



■	Grau	20er Pack	0700-059-00
■	Grau	5er Pack	0700-059-50
■	Gelb	5er Pack	0700-059-51
■	Blau	5er Pack	0700-059-54

Gegen Reflux: Universalkanüle Protect

Nebenlufteinlässe können verhindern, dass es beim „Ansaugen“ der Kanüle zu einem Rückfluss von kontaminierten Sekreten aus dem Saugsystem kommt. Der besondere Clou: Selbst mit Einlässen sind Protect-Kanülen besonders leise.



■	Grau	4er Pack	0700-058-50
---	------	----------	-------------

Prophylaxekanüle: Bis zu 2x mehr Aerosolaufnahme


Nur bei Dürr Dental: Ein speziell entwickeltes dreh- und fixierbares Schutzschild ermöglicht eine erhöhte Aerosolaufnahme und eine besonders effektive, ergonomische Absaugung im Rahmen der Prophylaxebehandlung mit Pulverstrahlgeräten.



■	Grau	20er Pack	0700-054-00
■	Grau	5er Pack	0700-055-50
■	Gelb	5er Pack	0700-055-51
■	Pink	5er Pack	0700-055-53
■	Blau	5er Pack	0700-055-54
■	Türkis	5er Pack	0700-055-55

Für Erwachsene: Universalkanüle III

Dürr Dental Universalkanülen III sind besonders leise. Bei einer Studie des Fraunhofer Instituts lag die ermittelte Lautstärke deutlich unter dem Niveau vergleichbarer Mitbewerber. Sie bieten daher eine geprüft geräuscharme Absaugung von Spraynebel. Und das ohne Druckstellen zu hinterlassen.

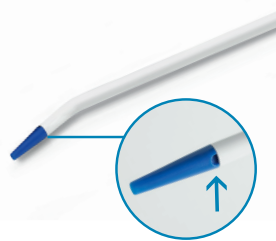

Ø 2,5 mm	20er Pack	0700-007-50
Ø 2,5 mm	100er Pack	0700-007-51

Chirurgische Absaugkanüle zum Einmalgebrauch

Einweg-Chirurgiekanüle mit einem Durchmesser von 2,5 mm mit einer Kanülenlänge von ca. 17 cm. Die Kanüle verfügt über eine Spitze mit integrierten Protect-Nebenlufteinlässen. Diese bietet den bestmöglichen Schutz vor Reflux aus dem Saugsystem. Die Kanülen sind einzeln steril verpackt.



■	Grau	5er Pack	0700-056-50
■	Gelb	5er Pack	0700-056-51
■	Pink	5er Pack	0700-056-53
■	Blau	5er Pack	0700-056-54
■	Türkis	5er Pack	0700-056-55

Ø 16 mm (auch in Ø 11 mm erhältlich)

Für Kinder: Universalkanüle Petito

Bei Kindern braucht man eine hochfunktionale Kanüle, die eine ergonomische Behandlung ermöglicht. Die Universalkanüle Petito ist ebenso leise und geprüft wie die Universalkanüle III, jedoch deutlich kleiner. Auch sie weist keinerlei Ecken oder Kanten auf und hinterlässt keine Druckstellen.

DÜRR DENTAL SE
Höfigheimer Strasse 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

**DÜRR
DENTAL**
DAS BESTE HAT SYSTEM

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban