




Premium-Qualität für Patient und Praxisteam

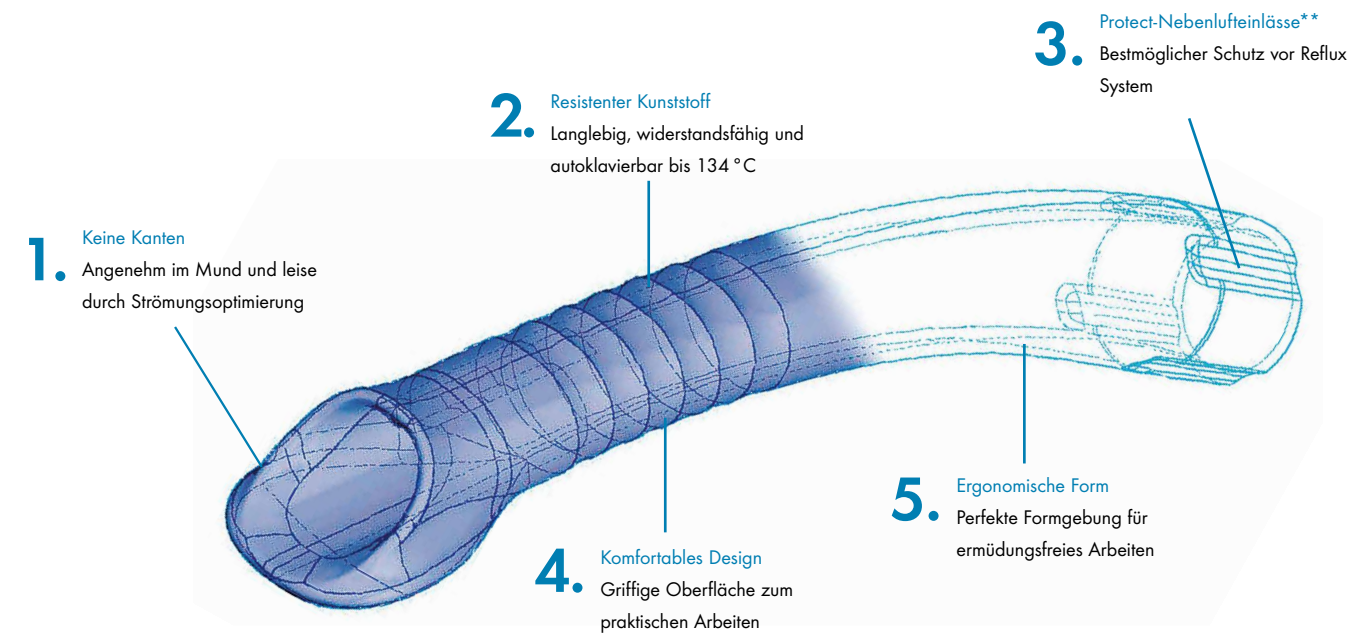

Top-Qualität vom Markenhersteller

Mit einem besonders leisen Kanülenprogramm am Markt leistet Dürr Dental einen wertvollen Beitrag, Arbeitsbedingungen für das Praxisteam zu verbessern. Aber das ist nur ein Vorteil von vielen.

Die Kanülen sind so konzipiert, dass sie im Patientenmund äußerst angenehm sind und keine Druckstellen hinterlassen. Ein weiteres Highlight sind die Protect-Nebenlufteinlässe der Kanülen, die gegen den Rückfluss von Sekreten aus dem Saugsystem schützen.**

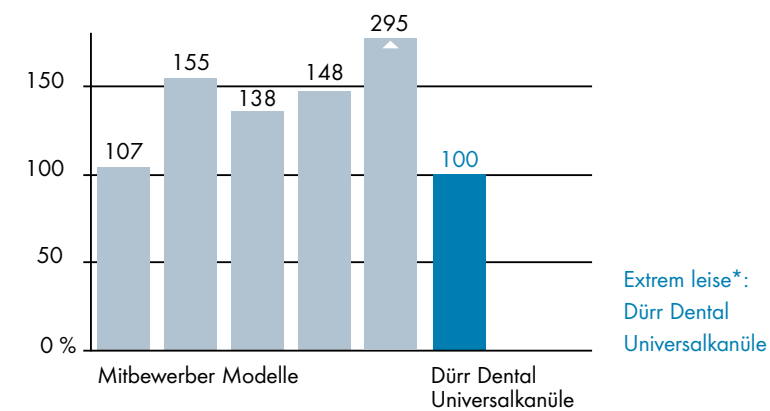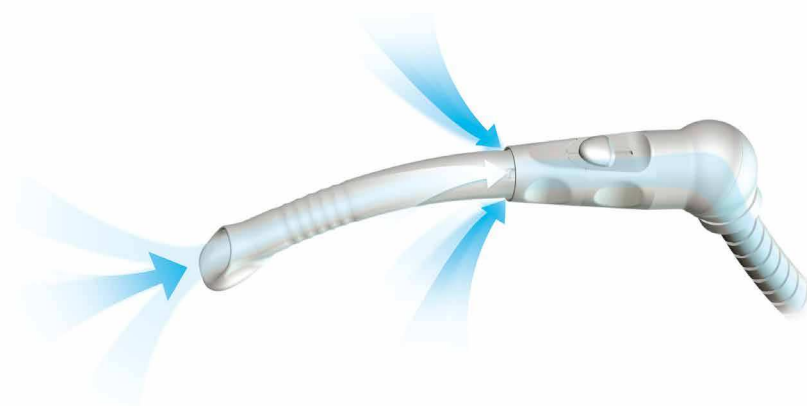

Darauf kommt es an:

- Protect-Nebenlufteinlässe gegen Reflux**
- Reduktion der keimbelasteten Aerosolwolke
- Keine Kanten, keine Druckstellen - ideal für ergonomisches Arbeiten (Abhaltetechnik)
- Chirurgie-Kanülen für große Blutmengen

P007536-01/APP-dd.de/01/02 Technische Änderungen vorbehalten

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

*Fraunhofer Institut für Bauphysik
**s. Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut zur „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene“, Kapitel 5.2, veröffentlicht im Bundesgesundheitsblatt 4/2006 (Springer-Verlag, Heidelberg)

Bester Schutz vor Aerosolen

Das Absaugkanülen- und Handstückprogramm von Dürr Dental



EINZIGARTIG!
Bis zu 2x mehr
Aerosolaufnahme
mit der
Aerosolkanüle



DÜRR DENTAL
DAS BESTE HAT SYSTEM

DRUCKLUFT | ABSAUGUNG | BILDGEBUNG | ZÄHNERHALTUNG | HYGIENE

DÜRR DENTAL
DAS BESTE HAT SYSTEM

Die Aerosolkanüle: Bis zu 2x mehr Aerosolaufnahme



Das Schutzschild an der Kanülenspitze kann beliebig gedreht werden. Dies ermöglicht eine besonders effektive Absaugung des Strahlpulvers.



Mehr Schutz für Patient und Behandler

Weltweit einzigartig: die Aerosolkanüle von Dürr Dental. Mit ihrem dreh- und fixierbaren Schutzschild ermöglicht sie eine besonders effektive Absaugung des Strahlpulvers. Durch das gezielte Fokussieren der Kanüle im Mund kann der Pulverstrahl präzise auf die Zähne gerichtet und abgesaugt werden – die Mundschleimhaut bleibt so optimal geschützt und die Vernebelung des Pulvers im Patientenumfeld wird erheblich reduziert. Protect-Nebenlufteinlässe sorgen für bestmöglichen Schutz vor Reflex aus dem Saugsystem.

Weitere Vorteile: Das variabel einsetzbare Schutzschild an der Kanülenspitze erlaubt eine besonders ergonomische Absaugung. Auch bei Kofferdam-Anwendungen ergibt sich ein höherer Absaugkomfort. Bei konservierenden oder prothetischen Behandlungen, wie z. B. dem Entfernen von Füllungen oder der Durchtrennung von Kronen oder Brücken, müssen oft größere Partikel abgesaugt werden. Hierfür bietet das Schutzschild einen deutlich verbesserten Schutz. Durch die hohe Aerosolaufnahme ist die Aerosolkanüle darüber hinaus ideal für die Behandlung ohne Assistenz.

Darauf kommt es an:


- Doppelte Aerosolaufnahme gegenüber herkömmlichen Absaugkanülen
- Vermeidung von Schleimhautirritationen durch Strahlpulver
- Ergonomische Behandlung
- Protect-Nebenlufteinlässe gegen Reflex



Sicherer Infektionsschutz

Reduziert keimbelastetes Aerosol direkt im Patientenmund – bis zu 100 %!

Unser Absaugkanülen-Programm

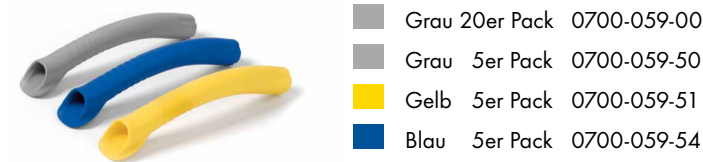

- Grau 20er Pack 0700-059-00
- Grau 5er Pack 0700-059-50
- Gelb 5er Pack 0700-059-51
- Blau 5er Pack 0700-059-54

Gegen Reflex: Universalkanüle Protect

Nebenlufteinlässe können verhindern, dass es beim „Ansaugen“ der Kanüle zu einem Rückfluss von kontaminierten Sekreten aus dem Saugsystem kommt. Die Universalkanüle Protect weist keinerlei Ecken oder Kanten auf und hinterlässt keine Druckstellen.



- Grau 20er Pack 0700-054-00
- Grau 5er Pack 0700-055-50
- Gelb 5er Pack 0700-055-51
- Pink 5er Pack 0700-055-53
- Blau 5er Pack 0700-055-54
- Türkis 5er Pack 0700-055-55

Für Erwachsene: Universalkanüle

Dürr Dental Universalkanülen sind besonders leise. Bei einer Studie des Fraunhofer Instituts lag die ermittelte Lautstärke deutlich unter dem Niveau vergleichbarer Mitbewerber. Sie bieten daher eine geprüft geräuscharme Absaugung von Spraynebel. Und das ohne Druckstellen zu hinterlassen.



- Grau* 5er Pack A700056050
 - Gelb* 5er Pack A700056051
 - Pink 5er Pack A700056053
 - Blau* 5er Pack A700056054
 - Türkis 5er Pack A700056055
- ø 16 mm

Für Kinder: Universalkanüle Petito

Bei Kindern braucht man eine hochfunktionale Kanüle, die eine ergonomische Behandlung ermöglicht. Die Universalkanüle Petito ist kleiner als die Universalkanüle und sorgt mit den Protect-Nebenlufteinlässen für bestmöglichen Schutz vor Reflex aus dem Saugsystem. Auch sie weist keinerlei Ecken oder Kanten auf und hinterlässt keine Druckstellen.


*ohne Protect-Nebenlufteinlässe auch in ø 11 mm erhältlich



- Grau 4er Pack 0700-058-50

Prophylaxekanüle: Bis zu 2x mehr Aerosolaufnahme

Nur bei Dürr Dental: Ein speziell entwickeltes dreh- und fixierbares Schutzschild ermöglicht eine erhöhte Aerosolaufnahme und eine besonders effektive, ergonomische Absaugung im Rahmen der Prophylaxebehandlung mit Pulverstrahlgeräten.

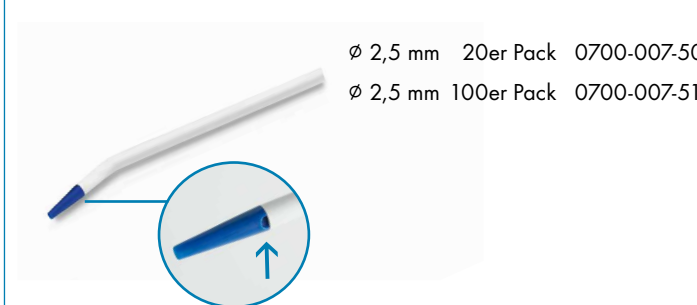

- ø 2,5 mm 20er Pack 0700-007-50
- ø 2,5 mm 100er Pack 0700-007-51

Chirurgische Absaugkanüle zum Einmalgebrauch

Einweg-Chirurgiekanülen im Durchmesser 2,5 mm und einer Kanülenlänge von ca. 17 cm. Die Kanüle verfügt über eine Spitze mit integrierten Protect-Nebenlufteinlässen. Diese bietet den bestmöglichen Schutz vor Reflex aus dem Saugsystem. Die Kanülen sind einzeln steril verpackt.

Handstücke nach Maß


Das Handstück-Programm von Dürr Dental

Dürr Dental bietet für nahezu jeden Hersteller am Markt den passenden Schlauchadapter. Dies ermöglicht eine maßgeschneiderte Konfiguration der jeweiligen Saughandstücke. Wer ermüdungsfrei und ergonomisch arbeiten möchte, kann das Kugelgelenk einsetzen. Es sorgt für den richtigen Winkel, verkürzt den Hebel und verbessert das Handling entscheidend. Jedes Handstück ist mit und ohne Drehschieber erhältlich. Mit dem Schieber lässt sich die Saugleistung kurzfristig unterbrechen. Die Drehhülse mit Protect-Nebenlufteinlässen erleichtert die Arbeit zusätzlich.


Darauf kommt es an:

- Maßgeschneiderte Konfiguration der Saughandstücke
- Drehschieber zum Unterbrechen der Saugleistung
- Keinerlei störende Strömungsgeräusche bei eingehängten Saugschläuchen durch die Verwendung von Spezialventilen
- Kugelgelenk für höheren Bedienkomfort (optional)
- Handstücke im Autoklaven bei 134 °C sterilisierbar
- Kugelgelenk erhöht die Lebensdauer des Saugschlauches

Beispiel: Kombination 1

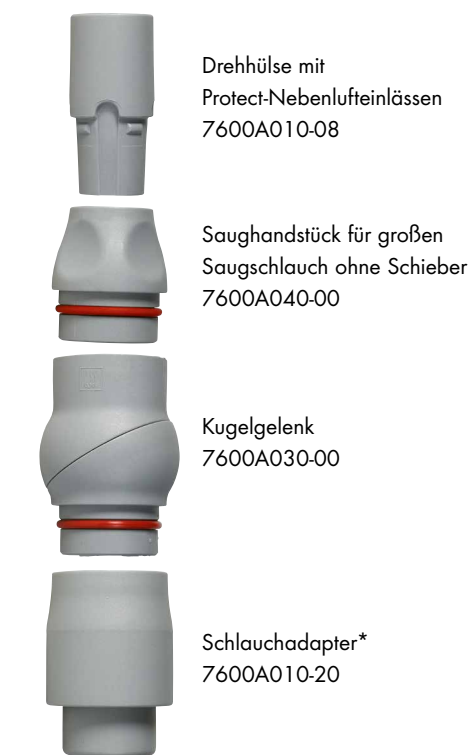

Beispiel: Kombination 2

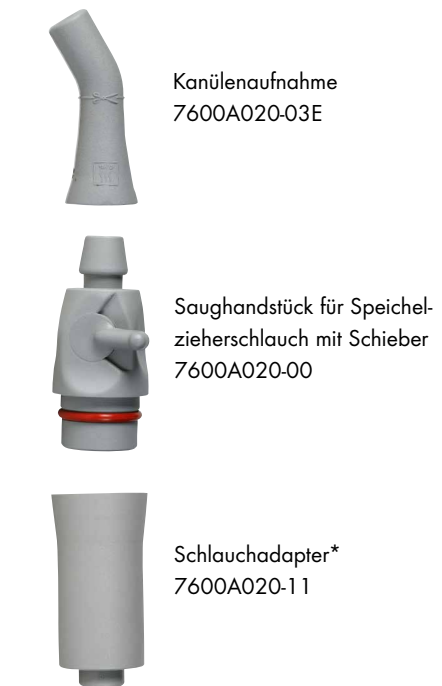

Beispiel: Kombination 3



Trichter für großes Saughandstück

Autoklavierbar (134 °C)
7068-003-05



*Schlauchadapter für Dürr Dental Comfort Ablagen

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban