


# ZiLMaster Adjustment Kits

Zeitsparendes Korrigieren, Glätten und Polieren  
von Zirkoniumdioxid und Lithiumdisilikat

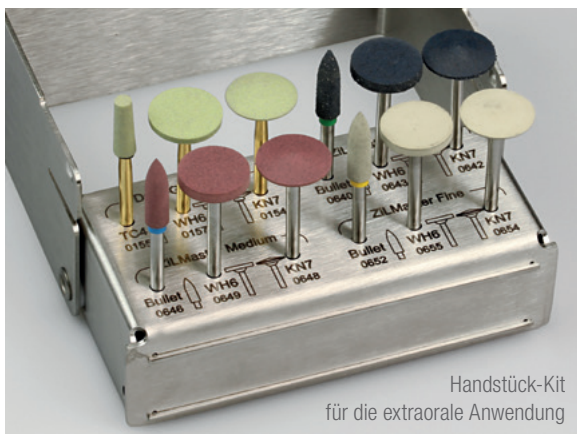


Glatte und homogene Oberflächen bilden die Grundlage für die harmonische Eingliederung keramischer Restaurationen.

Die Instrumente der ZiLMaster Adjustment Kits sind speziell abgestimmt für die schnelle und sichere Bearbeitung von monolithischen CAD/CAM-Versorgungen.

Unsere Kits enthalten die eigens für diese Materialien entwickelten diamantierten Schleifkörper **Dura-Green Dia** sowie die Silikonpolierer **ZiLMaster** in spezifisch auf die Anwendung abgestimmter Körnung.

Diese stufenweise Abstimmung erlaubt einen souveränen und zeitsparenden Einsatz von der Adjustierung von Frühkontakten bis zum optimalen Oberflächenfinish.

Die Instrumente sind wahlweise für das Winkelstück oder Technikhandstück in einem hochwertigen sterilisierbaren Bohrerständer aus Edelstahl erhältlich.

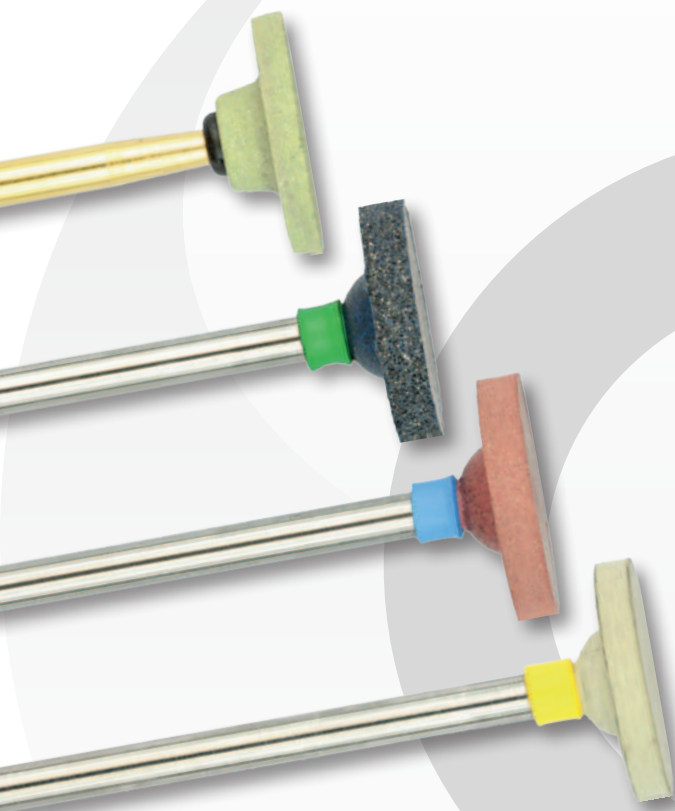


# Dura-Green DIA



Die diamantierte Feinstruktur der Dura-Green DIA Schleifkörper ermöglicht die gezielte und materialschonende Bearbeitung der Außenform oder der Kaufläche nach der Korrektur von Frühkontakten, ohne die Gefahr von Absplittierungen oder Mikrorissen.



Der geringe Arbeitsdruck und vibrationsarme Rundlauf vermitteln dem Anwender ein angenehm entspanntes Schleifgefühl.

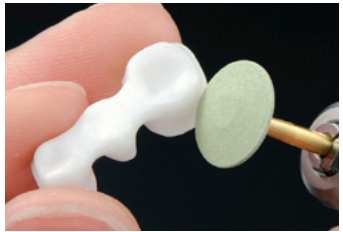

Die Instrumente beeindrucken durch eine hohe Kantenstabilität und lange Standzeiten. Das feine Schliffbild schafft eine ideale Basis für die nachfolgende Politur.



# ZiLMaster

Die drei unterschiedlichen Körnungen der diamantierten Silikonpolierer gewähren die optimale Ausarbeitung vollkeramischer Restaurationen.

## Coarse (Anthrazit, grüne Schaftmarkierung)



Besonders geeignet für das abrasive Vorpolieren und Finieren zuvor beschliffener Bereiche oder Zonen, die noch leicht abgetragen werden müssen

## Medium (Rotbraun, blaue Schaftmarkierung)




Empfohlen zum Konturieren und Glätten anatomischer Details sowie zur Vorbereitung für die Hochglanzpolitur


## Fine (Hellgrau, gelbe Schaftmarkierung)




Sichern die effiziente Politur bis zum brillanten Hochglanz ohne den Einsatz weiterer Polierpasten

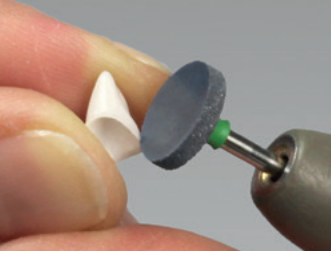

Kleinere Korrekturen,  
Ausdünnen der Ränder  
und Einschleifen von  
Kontaktpunkten mit  
ZiLMaster Coarse

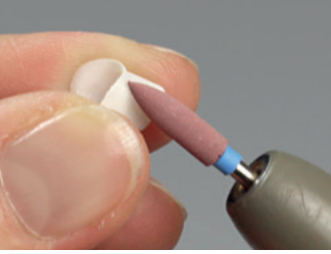

Glätten der Oberfläche,  
Nacharbeiten der  
Ränder und Politur mit  
ZiLMaster Medium

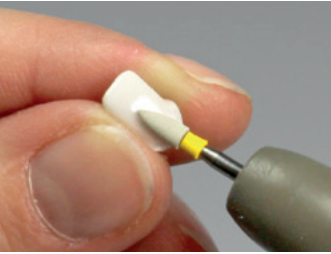

Abschließende  
Hochglanzpolitur mit  
ZiLMaster Fine

## highlights

Abgestimmt auf monolithisches  
Zirkoniumdioxid und Lithiumdisilikat

Korrektur von Frühkontakten

Hitzearmes Glätten von eingeschliffenen  
Kontaktstellen

Zeitsparende Politur bis zum brillanten  
Hochglanz

Korrektur von unzureichend  
glanzgebrannten Oberflächen

# Bestellinformationen

## Dura-Green DIA



Form	CY5	FL3	IC5	KN7	RD2	RD3	TC2	TC4	WH6
H 3 St.		0158	0162			0159	0161	0155	
H 2 St.	0156			0154					0157
W 3 St.		0163				0164	0165		
FG 3 St.		0168			0167				

## ZiLMaster



	Form	Walze	Linse	Kelch	Minispitze	KN7	WH6
Coarse	H 3 St.	0640			0641	0642	0643
	W 3 St.	0658	0662	0663	0661		
Medium	H 3 St.	0646			0647	0648	0649
	W 3 St.	0665	0659	0668	0666		
Fine	H 3 St.	0652			0653	0654	0655
	W 3 St.	0670	0672	0673	0671		

Unmontierte Räder sind ebenfalls in allen drei Körnungen erhältlich.



**ZiLMaster Adjustment Kit**  
Handstück-Schaft  
Best.-Nr. 0680



**ZiLMaster Adjustment Kit**  
Winkelstück-Schaft  
Best.-Nr. 0681



Manufacturer  
**SHOFU INC.**

**EC REP** SHOFU DENTAL GmbH

An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany

11 Kamitakamatsu-cho,  
Fukuine, Higashiyama-ku,  
Kyoto 605-0983, Japan

www.shofu.de

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban