

let's
keep
connected



REV 01 02.2019

 polydentia
swiss manufacture 

Polydentia SA
via Cantonale 47
6805 Mezzovico-Vira
Switzerland

phone: +41 91 946 29 48
fax: +41 91 946 32 03

info@polydentia.ch
www.polydentia.ch



my junior kit

Das erste
Teilmatrixsystem
für die
Kinderzahnheilkunde

sectional
matrix
systems



 polydentia
swiss manufacture 



neu!

Das erste
Teilmatrixsystem für
die Kinderzahnheilkunde

myjunior
kit

MyJunior Kit ist das erste Teilmatrixsystem für die Kinderzahnheilkunde, das speziell für kleinere Milch- und junge bleibende Zähne entwickelt wurde. Es ermöglicht Zahnärzten, vorhersagbare Restaurationen und ideale Kontaktflächen zu erzielen. Das Kit bietet kinderfreundliche Lösungen, die Behandlungszeit sparen, Kinder weniger belasten und ihnen eine schnelle Rückkehr zu ihren Lieblingsaktivitäten ermöglichen.



myTines Junior
Autoklavierbare und austauschbare Kunststoffenden, die über den Keil passen und eine ausgezeichnete Matrizenanpassung gewährleisten



Holzkeile



Zylindrische Silikonfüßchen
Weiche Enden, die zusätzlichen Halt und Anpassung bieten



myWedge
Hochwertiger Kunststoffkeil mit hohler V-Form



Junior LumiContrast
Einzigartige dunkle Stahlmatrizen die für einen starken Kontrast und geringe Reflexion sorgen, vor allem beim Arbeiten mit Lupenbrillen und Dentalmikroskopen



Junior Quickmat Teilmatrizen



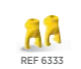







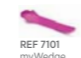
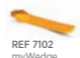
use only with rubber dam

Kit

myJunior Kit - REF 6330

- 1 Stk. myClip Junior
- 1 Stk. myRing Junior
- 5 Paar Zylindrische Silikonfüßchen
- 5 Paar myTines Junior
- 40 Stk. LumiContrast Teilmatrizen, Prämolare 0,04mm / 5mm
- 40 Stk. Junior LumiContrast Teilmatrizen, 0,04mm / 3,5mm
- 50 Stk. Quickmat Teilmatrizen, Prämolare 0,04mm / 5mm
- 50 Stk. Junior Quickmat Teilmatrizen, 0,04mm / 3,5mm
- 50 Stk. Holzkeile Pinky, 11mm (XS)
- 40 Stk. Holzkeile, 12mm (S)
- 50 Stk. myWedge XS
- 40 Stk. myWedge S


Kit Nachfüllpackungen

 REF 6335 myClip Junior, 2 Stk.	 REF 6336 myRing Junior, 2 Stk.	 REF 6333 myTines Junior, 15 Paar	 REF 5711 Zylindrische Silikonfüßchen, 15 Paar
 REF 6708 Junior LumiContrast Teilmatrizen, 0,04mm / 3,75mm, 70 Stk.	 REF 6705 Junior LumiContrast Teilmatrizen, Prämolare, 0,04mm / 5mm, 70 Stk.	 REF 5708 Junior Quickmat Teilmatrizen, 0,04mm / 3,75mm, 100 Stk.	 REF 5705 Quickmat Teilmatrizen, Prämolare, 0,04mm / 5mm, 100 Stk.
 REF 5011 Holzkeile Pinky, 11 mm (XS), 200 Stk.	 REF 5012 Holzkeile, 12 mm (S), 100 Stk.	 REF 7101 myWedge, Extrasmall (XS), 100 Stk.	 REF 7102 myWedge, Small (S), 100 Stk.

myClip Junior und myRing Junior sind Teilmatrixringe für Kinder, die minimalinvasive, sicher zu handhabende, bunte Lösungen bieten, die die restaurative Behandlung von jungen Zähnen geringer Kronenhöhe vereinfachen. Die Junior-Teilmatrixringe verbinden Stabilität mit der richtigen Trennkraft, mit der Zahnärzte ideale Kontaktflächen wiederherstellen können. Darüber hinaus sorgt der zusätzliche Halt durch die flexiblen Enden von myTines Junior und die abgerundeten Silikonröhrchen für eine bessere Adaptation der Teilmatrizen und verhindern so lästige Komposit-Überläufe und -Überhänge. Zudem lässt sich dadurch wertvolle Behandlungszeit sparen.


myClip junior

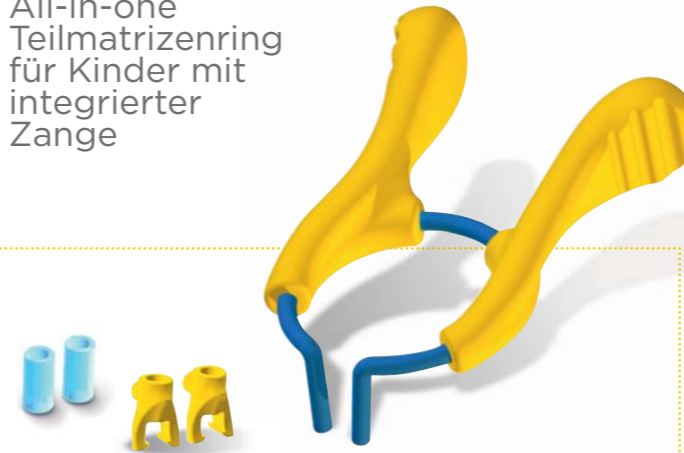All-in-one
Teilmatrixring
für Kinder mit
integrierter
Zange



VORTEILE

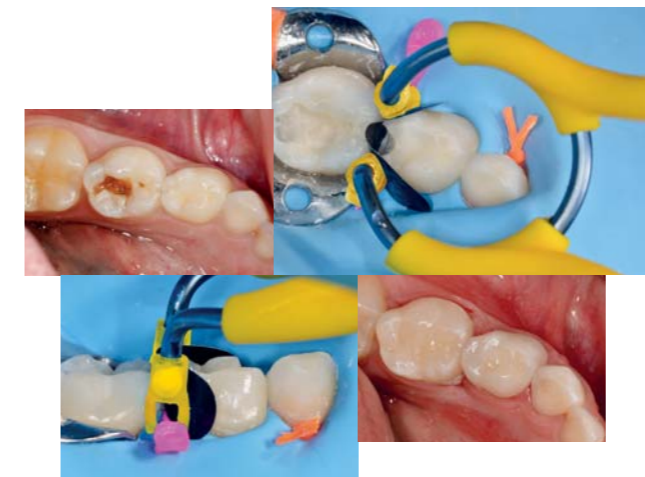- All-in-one Teilmatrixring. Keine Zange erforderlich
- Ring aus Nickel-Titan für lange Lebensdauer
- Optimale Trennkraft für perfekte Kontaktflächen
- Schnelle und einfache Platzierung mit nur einer Hand
- Autoklavierbare und austauschbare Enden



"Ich betrachte myClip Junior als optimale Lösung für pädiatrische Behandlungen, da es mir ermöglichte, mit weniger Aufwand und mit erheblichen Einsparungen an Behandlungszeit eine ideale Versorgung zu erreichen."

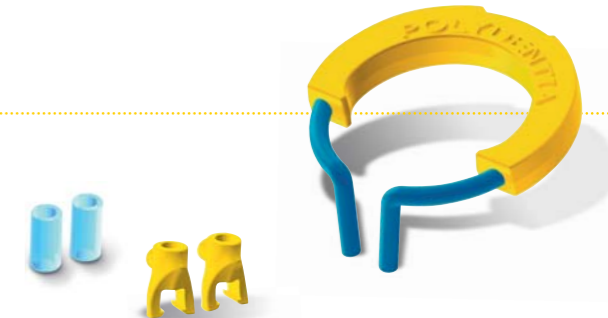
Dr. Marina Papachroni
Griechenland



für mehr Information


myRing junior

Teilmatrixring für Kinder,
der für viele verschiedene
klinische Situationen
geeignet ist



VORTEILE

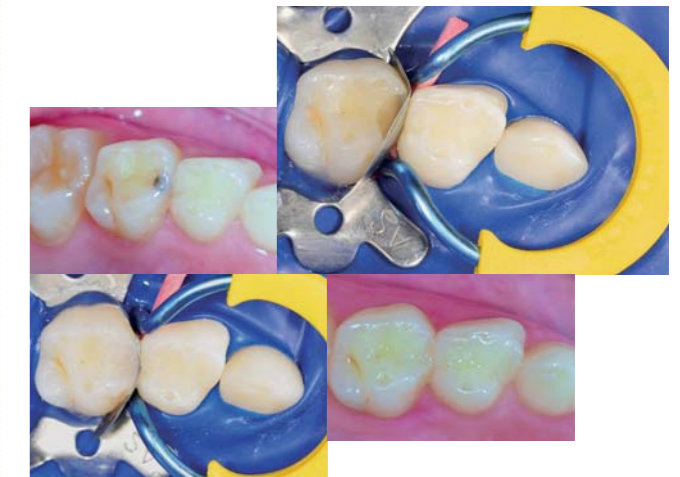- Ideale Größe für die Verwendung mit Milchzähnen
- Ring aus Nickel-Titan für lange Lebensdauer
- Optimale Trennkraft für perfekte Kontaktflächen
- Exzellente Matrizenanpassung und -retention
- Autoklavierbare und austauschbare Enden



"Dank myRing Junior und den weiteren Lösungen für die Kinderzahnheilkunde von Polydentia werden restaurative Behandlungen für Kinder kein heikles Unterfangen mehr sein. Pädiatrische Restaurationen sind dank der geringen Abmessungen des Teilmatrixrings und der Junior-Matrizen einfach und effizient. Das System sorgt für eine perfekte Adaption der Matrize auf den Milchzähnen und verhindert zeitaufwändige Kompositüberschüsse. Die Restauration ist auch angenehmer, da meine kleinen Patienten keine langen Restaurationszeiten überstehen müssen."

Dr. Martina Sabová
Slowakei



für mehr Information

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban